

	MASTER BATCH RECORD	Versión (Version):	10
		Vigencia (Effective date):	

CÓDIGO (CODE No.):	400004768	PRODUCTO (PRODUCT):	VITAMINA D3 50000 UI CBG (VITAMIN D3 50000 IU SGC)
PESO DE LLENADO (FILL WEIGHT):	275.0 mg/cápsula 275.0 mg/capsule)	MOLDE /PUNZON /FORMATO (MOLD /PUNCH / FORMAT)	5.5 OVAL (5.5 OVAL)
COLOR (COLOR):	ROJO 287 (RED 287)	LOTE STANDARD (STANDARD LOT)	100,000 cápsulas 100,000 (capsules)
FORMA FARMACÉUTICA (DOSAGE FORM):	Cápsula blanda de gelatina (Soft Gelatin Capsules)	UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO (UNIT OF MEASUREMENT FOR PRODUCT):	Unidades (Units)

AUTORIZACIONES (AUTHORIZATIONS)				
	Nombre (Name):	Cargo (Title):	Firma (Signature):	Fecha (Date):
Emitido por (Issued by):	MERLI PATRICIA UTRIA VARGAS	ANALISTA I (ANALYST I)		
Revisado por (Reviewed by):	JOSE VERGARA	JEFE DE PLANTA (PLANT MANAGER)		
Revisado por (Reviewed by):	GUSTAVO VITOLA	DIRECTOR DE SERVICIOS TECNICOS (TECHNICAL SERVICES DIRECTOR)		
Aprobado por (Approved by):	JOYCE OTERO	JEFE DE GARANTÍA DE CALIDAD (HEAD OF QUALITY ASSURANCE)		
Aprobado por (Approved by):	ALEXIA CUADRADO UCAR / CARINA SERRAO	CALIDAD (SENIOR QUALITY MANAGER & QP EU / QUALITY)		
Aprobado por (Approved by):	NATALIE BEASLEY	REGULATORIO (REGULATORY)		



**IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO/
PRODUCT IDENTIFICATION**

PRODUCTO/

PRODUCT:

400004768 / N.A

VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

ORDEN/

ORDER : N.A

LOTE

No./

LOT No. : N.A

CANTIDAD/

QUANTITY:

100000 UN

FECHA/

DATE: N.A



LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS EN LA ORDEN DE FABRICACIÓN CBG \

CHECK LIST OF THE DOCUMENTS IN THE MANUFACTURE ORDER OF SGC

Código
No.:
Code No.: 400004768 / N.A

Lote No.:
Lot No.:
Nombre:
Name: VITAMINA D3 50000 IU CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Verificación de información general/
General Information Verification/

Verificado/Verified (✓)

Nombre, código SAP y tamaño de lote del Producto
Product name, SAP code, and batch size.

☐

Versión y fecha de vigencia del documento (MBR)
Version and effective date of the document (MBR).

☐

Sello de copia controlada en todas las páginas del documento
Controlled copy stamp on all pages of the document.

☐

Documentos revisados y organizados en Planta / Documents reviewed
and organized in Plant

1- Orden de Fabricación/
Manufacture Order

☐ Materias Primas a Dispensar
Raw materials to be dispensed

☐

☐ Método de Preparación
Preparation Method

☐

2- Orden de Producción/
Production Order

☐ Gelatina / Colorantes - Materias Primas a Dispensar
Gelatin / Colorants - Raw Materials to be dispensed

☐

☐ Gelatina - Método de Preparación
Gelatin - Preparation Method

☐

☐ Encapsulado - Instrucciones Generales
Encapsulation - General Instructions

☐

☐ Encapsulado- Reporte de Medicina
Encapsulation- Report on Medicine

☐

☐ Encapsulado- Reporte Consumo de Gelatina
Encapsulation- Gelatin Consumption Report

☐

☐ Secado - Instrucciones Generales
Drying- General Instructions

☐

☐ Secado- Reporte de Secado
Drying- Report on Drying

☐

☐ Selectora - Instrucciones Generales. Aplica para productos ovales
Sorting Machine- General Instructions. Applies to oval products

☐

☐ Lavado - Instrucciones Generales. Aplica para productos impresos
Washing- General Instructions. Applies to printed products

☐

☐ Impresión-IMPDELTA ó IMPMarken - Instrucciones Generales. Aplica para productos impresos
Printing- DELTA or IMPMark Printers - General Instructions. Applies to printed products

☐

☐ Impresión-IMPDELTA ó IMPMarken - Control Impresión de Cápsulas. Aplica para productos impresos
Printing- DELTA or IMPMark Printers- Capsule Printing Control. Applies to printed products

☐

☐ Inspección - Instrucciones Generales
Inspection- General Instructions

☐

☐ Inspección - Inspección-Reinspección-Impresión-Descargue de Granel
Inspection - Inspection- Re-inspection- Printing- Unloading of the bulk

☐

3- Orden de Acabado
3- Finishing Order

☐ Pesaje - Instrucciones Generales
Weighing- General Instructions

☐

☐ Pesaje - Control de Empaque a Granel
Weighing Control of packaging in bulk

☐

☐ Pesaje - Entrega de Producto en Cuarentena a Bodega
Weighing- Delivery of products from Quarantine to Warehousing

☐

☐ Pesaje - Conciliación del Producto
Weighing - Product Reconciliation

☐

COPIA VERDADERA



LISTA DE CHEQUEO DE DOCUMENTOS EN LA ORDEN DE FABRICACIÓN CBG \

CHECK LIST OF THE DOCUMENTS IN THE MANUFACTURE ORDER OF SGC

Código
No.:
Code No.: 400004768 / N.A

Lote No.:
Lot No.:
Nombre:
Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

NÚMERO DE PÁGINAS EMITIDAS:/
NUMBER OF PAGES ISSUED

Página/
Page a / to

Revisado por (Calidad): /
Reviewed by (Quality)

Fecha: /
Date

Revisado por (Planta) /
Reviewed by (Plant):

Fecha: /
Date

OBSERVACIONES: /
OBSERVATIONS

FORMATOS ANEXOS/
ATTACHED FORMS

Áreas/ Áreas	Nombre del Documento/ Name of the document	No. Formatos/ No. of Forms	Áreas/ Áreas	Nombre del Documento/ Name of the document	No. Formatos/ No. of Forms
Fabricación/ Manufacture	Identificación de Áreas y Equipos, Despeje de Línea/ Identification of Areas and Equipments, Line Clearance		Lavado si es impreso/ Washing if it is printed	Identificación de Áreas y Equipos, Despeje de Línea/ Identification of Areas and Equipments, Line Clearance	
Gelatina/ Gelatin	Rótulo de Tanque/ Tank Label		Impresión/ Printing	Identificación de Áreas y Equipos, Despeje de Línea / Identification of Areas and Equipments, Line Clearance	
	Identificación de Áreas y Equipos, Despeje de Línea/ Identification of Areas and Equipments, Line Clearance				
Encapsulado/ Encapsulation	Identificación de Áreas y Equipos, Despeje de Línea/ Identification of Areas and Equipments, Line Clearance		Inspección/ Inspection	Identificación de Áreas y Equipos, Despeje de Línea / Identification of Areas and Equipments, Line Clearance	
	Control de Operación, Encapsulado y Dosificación Softigel/ Softigel Control of Operation, Dosage and Encapsulation				
	Gráfica de Dosificación/ Dosage Graph		Pesaje/ Weighing	Identificación de Áreas y Equipos, Despeje de Línea/ Identification of Areas and Equipments, Line Clearance	
	Control Microscópico de Sellado de Cápsula Blanda/ Soft Gelatin Capsule Microscopic Sealing Control				
Secado/ Drying	Identificación de Áreas y Equipos, Despeje de Línea/ Identification of Areas and Equipments, Line Clearance		<u>Las Páginas de los documentos o formatos que no utilicen deben ser devueltos a</u> <u>The pages of documents or formats that are not used should be returned to</u>		
Selección sólo Ovals/ Sorting, only Ovals	Identificación de Áreas y Equipos, Despeje de Línea/ Identification of Areas and Equipments, Line Clearance		<u>Aseguramiento de Calidad cuando traigan el Registro de Lote (Batch Record)</u> <u>Quality Assurance when bringing Registry Batch (Batch Record)</u>		

COPIA VERDADERA



REVISIÓN DEL BATCH RECORD CÁPSULA BLANDA
REVIEW OF BATCH RECORD FOR SOFT CAPSULE

Código/
Code: 400004768 / N.A. Lote/
Batch: Orden de Trabajo/
Work order

Nombre del Producto/
Product name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Batch de Validación / Validation batch SI/ Yes NO/Not

Toma de muestra de Estabilidad / Stability sampling SI/ Yes NO/Not

1. Documentos de Calidad/Quality documents	Cumple/Meets		
	Si/Yes	No/Not	N/A
Reporte Analítico Físico Químico/Physical-Chemical Analytical Report			
Reporte Analítico de Microbiología/Microbiology Analytical Report			
Reporte de Inspección del AQL/AQL Inspection Report			
2. Etapa de Dispensación de Materiales/ Raw Material Dispensing stage	Cumple/Meets		
	Si/Yes	No/Not	N/A
Verificación de limpieza y despeje de áreas y equipos/ Cleaning verification and clearance of areas and equipment			
Verifique fecha de calibración y próxima calibración de los instrumentos de medición/ Check calibration date and next calibration of measuring instruments			
Etiquetas de dispensación de cada materia prima/Dispensing labels for each raw material			
Cálculos de ajuste de materia prima/Adjustment calculations of raw material			
Verifique si hay desviaciones/Check for deviations			
Verifique que no haya espacios en blanco/Verify no blank spaces			
Verifique cualquier anotación en la página de observaciones/Check for any entry in the observations page			
Verifique cada una de las firmas de verificado por/Verify each of the signatures of Verified By			
Verifique firma y fecha en cada paso de cada página/Check signature and date at each step of each page			
Verifique cada una de las horas reportadas en el batch record en cada paso de cada página./Verify each of the hours reported in the batch record at each step of each page.			
3. Etapa de Preparación de soluciones y suspensiones/ Preparation stage of solutions and suspensions	Cumple/Meets		
	Si/Yes	No/Not	N/A
Orden de producción/Production order			
Verificación de limpieza y despeje de áreas y equipos/ Cleaning verification and clearance of areas and equipment			
Verifique fecha de calibración y próxima calibración de los instrumentos de medición/ Check calibration date and next calibration of measuring instruments			
Velocidades y tiempos de mezcla/Speeds and mixing times			
Verifique cada una de las firmas de verificado por/Verify each of the signatures of Verified By			
Verifique todos los cálculos de esta etapa/Verify all calculations for this step			
Verifique si hay reporte de desviaciones/Check for reporting of deviations			
Verifique que no haya espacios en blanco/Verify no blank spaces			
Verifique cualquier anotación en la página de observaciones/Check for any entry in the observations page			
Verifique firma y fecha en cada paso de cada página/Check signature and date at each step of each page			
Verifique cada una de las horas reportadas en el batch record en cada paso de cada página./Verify each of the hours reported in the batch record at each step of each page.			
Verifique que se cumpla el tiempo máximo de permanencia de un equipo sucio (8.5 Horas)/ Verify that the maximum residence time of dirty equipment is met (8.5 Hours)			
4. Etapa de Preparación de gelatina/Stage of preparation gelatin	Cumple/Meets		
	Si/Yes	No/Not	N/A
Orden de producción/Production order			
Verificación de limpieza y despeje de áreas y equipos/ Cleaning verification and clearance of areas and equipment			
Verifique fecha de calibración y próxima calibración de los instrumentos de medición/ Check calibration date and next calibration of measuring instruments			
Datos de temperatura, humedad relativa y diferencial de presión/ Temperature, relative humidity and pressure differential values.			
Viscosidad de la gelatina/Viscosity of the gelatin			
Verifique que se cumpla el tiempo máximo de permanencia de un equipo sucio (8.5 Horas)/ Verify that the maximum residence time of dirty equipment is met (8.5 Hours)			
Velocidades y tiempos de mezcla/Speeds and mixing times			
Verifique todos los cálculos de esta etapa/Verify all calculations for this step			
Verifique que no haya espacios en blanco/Verify no blank spaces			
Revise cualquier anotación en la página de observaciones / Review any entry in the observations page			
Verifique si hay reporte de desviaciones/Check for reporting of deviations			
Tiempo de almacenamiento de la gelatina terminada menor a 24 horas/ Storage time of the finished gelatin is less than 24 hours.			
Tiempo de almacenamiento de la gelatina terminada menor a 96 horas/ Storage time of the finished gelatin is less than 96 hours.			
Verifique cada una de las firmas de verificado por/Verify each of the signatures of Verified By			
Verifique firma y fecha en cada paso de cada página/Check signature and date at each step of each page			
Verifique que se cumpla el tiempo máximo de permanencia de un equipo sucio (8.5 Horas)/ Verify that the maximum residence time of dirty equipment is met (8.5 Hours)			

COPIA VERDADERA



REVISIÓN DEL BATCH RECORD CÁPSULA BLANDA
REVIEW OF BATCH RECORD FOR SOFT CAPSULE

Código/
Code: 400004768 / N.A. Lote/
Batch: Orden de Trabajo/
Work order

Verifique cada una de las horas reportadas en el batch récord en cada paso de cada página. Verify each of the hours reported in the batch record at each step of each page.			
5. Etapa de Encapsulado/Encapsulated stage	Si/Yes	Cumple/Meets No/Not	N/A
Orden de producción/Production order			
Verifique fecha de calibración y próxima calibración de los instrumentos de medición/ Check calibration date and next calibration of measuring instruments			
Verificación de limpieza y despeje de áreas y equipos/ Cleaning verification and clearance of areas and equipment			
Lista de chequeo de la maquina encapsuladora. / Encapsulation machine check list.			
Datos de temperatura, humedad relativa y diferencial de presión/ Temperature, relative humidity and pressure differential values.			
Cantidades montadas de gelatina y solución / suspensión/ Amounts of gelatin and solution / suspension mounted to the machine			
Ajuste de todos los parámetros de proceso/Adjustment of all process parameters			
Verifique si hay reporte de desviaciones/Check for reporting deviations			
Verifique todos los cálculos de dosificación/Check all dosage calculations			
Verifique que todos los parámetros hayan estado dentro de especificaciones/ Verify that all parameters have been within specifications.			
Verifique tiempos de presecado/Check predrying times			
Revise la frecuencia de cada control en proceso/ Check the frequency of each control process			
Verifique todos los cálculos de esta etapa/ Check all calculations for this stage			
Verifique si hay reporte desviaciones/Check for reporting deviations			
Verifique cualquier anotación en la página de observaciones / Verify any entry in the observations page			
Verifique firma y fecha en cada paso de cada página/Check signature and date at each step of each page			
Verifique que se cumpla el tiempo máximo de permanencia de un equipo sucio (8.5 Horas)/ Verify that the maximum residence time of dirty equipment is met (8.5 Hours)			
Verifique que no haya espacios en blanco/Verify no blank spaces			
Verifique cada una de las firmas de verificado por/Verify each of the signatures of Verified By			
Verifique cada una de las horas reportadas en el batch récord en cada paso de cada página. Verify each of the hours reported in the batch record at each step of each page.			
6. Etapa de Secado, Inspección, descargue y lavado (cuando aplique)/ Drying stage, inspection, discharge and washing (when applying)	Si/Yes	Cumple/Meets No/Not	N/A
Verifique datos de humedad residual o dureza para el descargue de las cápsulas Check data of residual moisture or hardness for discharging the capsules			
Verifique fecha de calibración y próxima calibración de los instrumentos de medición/ Check calibration date and next calibration of measuring instruments			
Frecuencia de medición de humedad residual o dureza de las cápsulas Measurement frequency residual moisture or hardness of the capsules			
Verifique cada una de las horas reportadas en el batch récord en cada paso de cada página. Verify each of the hours reported in the batch record at each step of each page.			
Verifique cada una de las firmas de verificado por/Verify each of the signatures of Verified By			
Temperatura y humedad relativa durante el periodo de secado Temperature and relative humidity during the drying			
Verificación de limpieza y despeje de área de inspección y descargue Cleaning verification and clearance of inspection and discharge area			
Temperatura y humedad relativa durante el inspección y descargue de cápsulas Temperature and relative humidity during the inspection and discharge of capsules			
Verifique todos los cálculos de esta etapa/Verify all calculations for this step			
Reporte de inspección y descargue de cápsulas Inspection report and discharge of capsules			
Verifique que no haya espacios en blanco/Verify no blank spaces			
Verifique si hay reporte desviaciones Check for reporting of deviations			
Verifique cualquier anotación en la página de observaciones/Check for any entry in the observations page			
Verifique firma y fecha en cada paso de cada página/Check signature and date at each step of each page			
Verifique cada una de las firmas de verificado por/Verify each of the signatures of Verified By			
Verifique cada una de las horas reportadas en el batch récord en cada paso de cada página. Verify each of the hours reported in the batch record at each step of each page.			
Verifique firma y fecha en cada paso de cada página/Check signature and date at each step of each page			
7. Etapa de Pulido, Impresión, Lubricación e Inspección e Inspección de cápsulas (Cuando aplique)/Capsules polishing, printing, lubrication and inspection stage (when applying)	Si/Yes	Cumple/Meets No/Not	N/A
Orden de producción/Production order			



REVISIÓN DEL BATCH RECORD CÁPSULA BLANDA
REVIEW OF BATCH RECORD FOR SOFT CAPSULE

Código/ **Code:** 400004768 / N.A. **Lote/** **Batch:** **Orden de Trabajo/** **Work order**

Verificación de limpieza y despeje de áreas y equipos/ Cleaning verification and clearance of areas and equipment			
Verifique fecha de calibración y próxima calibración de los instrumentos de medición/ Check calibration date and next calibration of measuring instruments			
Lista de chequeo de la maquina impresora/ Checklist of the printing machine			
Datos de temperatura y humedad relativa/ Temperature and relative humidity data			
Verifique todos los cálculos de esta etapa/ Verify all calculations for this step			
Verifique la frecuencia de cada control en proceso/ Check the frequency of each control process			
Verifique si hay reporte desviaciones Check for reporting of deviations			
Verifique que no haya espacios en blanco/ Verify no blank spaces			
Revise cualquier anotación en la página de observaciones / Review any entry in the observations page			
Verifique cada una de las firmas de verificado por/ Verify each of the signatures of Verified By			
Verifique cada una de las horas reportadas en el batch récord en cada paso de cada página. Verify each of the hours reported in the batch record at each step of each page.			
Verifique firma y fecha en cada paso de cada página/ Check signature and date at each step of each page			
Revisar el registro de verificación de lectores de los equipos electrónicos utilizados en planta/ Review the reader verification record of the electronic equipment used in the plant			
8. Inspección de Aseguramiento de Calidad (AC) Quality Assurance Inspection (QA)	Cumple/Meets		
	Si/Yes	No/Not	N/A
Verifique fecha de calibración y próxima calibración de los instrumentos de medición/ Check calibration date and next calibration of measuring instruments			
Verifique el número de defectos menores, mayores y críticos reportados Check the number of minor, major and critical defects reported			
Verifique la disposición hecha después de la inspección visual de las cápsulas por AC Verify the disposition made after visual inspection of the capsules by (QA)			
Verifique si hay reporte desviaciones/ Check for reporting of deviations			
Verifique que se haya muestreado el producto a granel Verify that the bulk has been sampled			
Revise cualquier anotación en la página de observaciones / Review any entry in the observations page			
Verifique que no haya espacios en blanco/ Verify no blank spaces			
Verifique cada una de las horas reportadas en el batch récord en cada paso de cada página. Verify each of the hours reported in the batch record at each step of each page.			
Verifique cada una de las firmas de verificado por/ Verify each of the signatures of Verified By			
Verifique firma y fecha en cada paso de cada página/ Check signature and date at each step of each page			
9. Etapa de pesaje y empaque a granel / Weighing stage and bulk packaging	Cumple/Meets		
	Si/Yes	No/Not	N/A
Orden de producción/ Production order			
Verificación de limpieza y despeje de áreas y equipos/ Cleaning verification and clearance of areas and equipment			
Verifique fecha de calibración y próxima calibración de los instrumentos de medición/ Check calibration date and next calibration of measuring instruments			
Códigos de equipos y áreas usados/ Codes equipment and areas used			
Aprobación de Aseguramiento de Calidad antes de iniciar la etapa Quality Assurance approval before starting the stage			
Datos de temperatura y humedad relativa/ Temperature and relative humidity data			
Verifique el reporte de pesaje de cápsulas a granel/ Check the bulk weighing report			
Verifique todos los cálculos de esta etapa/ Verify all calculations for this step			
Verifique si hay reporte de desviaciones/ Check for reporting of deviations			
Verifique que no haya espacios en blanco/ Verify no blank spaces			
Revise cualquier anotación en la página de observaciones / Review any entry in the observations page			
Verifique cada una de las horas reportadas en el batch récord en cada paso de cada página. Verify each of the hours reported in the batch record at each step of each page.			
Verifique cada una de las firmas de verificado por/ Verify each of the signatures of Verified By			
Verifique firma y fecha en cada paso de cada página/ Check signature and date at each step of each page			
Revisar el registro de verificación de lectores de los equipos electrónicos utilizados en planta/ Review the reader verification record of the electronic equipment used in the plant			
10. Reconciliación y Rendimiento de producto granel / Performance and reconciliation of bulk product	Cumple/Meets		
	Si/Yes	No/Not	N/A
Verifique todos los cálculos de esta etapa/ Verify all calculations of this stage			

COPIA VERDADERA



REVISIÓN DEL BATCH RECORD CÁPSULA BLANDA
REVIEW OF BATCH RECORD FOR SOFT CAPSULE

Código/ Lote/ Orden de Trabajo/
Code: 400004768 / N.A Batch: Work order

Revise las actas de destrucción / Check the records of destruction			
Verifique que no haya espacios en blanco/Verify no blank spaces			
Verifique firma y fecha en cada paso de cada página/Check signature and date at each step of each page			
Verifique si hay reporte de desviaciones/Check for reporting of deviations			
Verifique cada una de las firmas de verificado por./Verify each of the signatures of Verified By			
Verifique cada una de las horas reportadas en el batch récord en cada paso de cada página./Verify each of the hours reported in the batch record at each step of each page.			
Verifique que los principios de Data integrity y Buenas practicas de documentacion (BPD) se hayan aplicado correctamente en todas las etapas del documento / Verify that Data integrity principles and Good documentation practices (BPD) have been applied correctly have been correctly applied at all stages of the document.			

NOTA: Esta Revisión debe ser realizada por Analistas de Calidad, Monitor de calidad, Coordinador de Calidad I y/o Coordinador de Calidad II.
NOTE: This Review must be carried out by Quality Analysts, Quality Monitor, Quality Coordinator I and/ or Quality Coordinator II.

Revisado por: Fecha:
Review by: Date:

	SI	NO	NA
Están las desviaciones cerradas? ¿Are deviations closed?	☐	☐	☐
Están las investigaciones de laboratorio cerradas? ¿Are laboratory investigations closed?	☐	☐	☐
Están las investigaciones de producción cerradas? ¿Are production investigations closed?	☐	☐	☐
Hay controles de cambios Aprobados y/o implementados? ¿There are change controls approved and/or implemented?	☐	☐	☐

APROBADO: ☐ RECHAZADO: ☐
APPROVED: REJECTED:

NOTA: Esta disposición solo debe ser realizada por el Coordinador de Calidad I , Coordinador de Calidad II , Jefe de Garantía de Calidad y/o Jefe de Disposición.
NOTE: This provision should only be made by the Quality Coordinator I, Quality Coordinator II , Head of Quality Assurance And/or Head of product Disposal

Disposicion por: Fecha:
Disposition by: Date:

Observaciones/Observations:

COPIA VERDADERA



**PLANTA SOFTIGEL GMP/
SOFTIGEL PLANT - GMP**
LISTA DE REVISIÓN PARA EL ALISTAMIENTO POR CAMBIO DE PRODUCTO /
CHECK LIST FOR SET UP BY CHANGE OF THE PRODUCT

MAQUINA/ MACHINE		TURNO / SHIFT		FECHA/ DATE		SUP/ SUP	
PRODUCTO/ PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC	CÓDIGO/ CODE No.:	400004768 / N.A	LOTE/ LOT No.:		ORDEN DE PROCESO/ ORDER PROCESS	
MECANICOS/ MAINTENANCE OPERATORS		OPERARIOS OPERATORS		HORA INICIO/ START TIME		HORA TERMINACION/ END TIME	

SECCION/ SECTION	ELEMENTO/ ELEMENT	CONDICION/ CONDITION	CUMPLE/ MEET	NO CUMPLE/ DOES NOT MEET	NOTAS/ NOTES			
DOSIFICACIÓN DE MEDICINA/ MEDICINE DOSAGE	BOMBA DE DOSIFICACIÓN DE MEDICINA/ MEDICINE DOSAGE PUMP	HERMETICIDAD (SIN FUGAS)/ LEAK (NO LEAKS)			CODIGO BOMBA/ PUMP CODE			
		RACORES NUEVOS/ FITTINGS NEW			REFERENCIAS IGUALES PARA TODOS/ EQUAL REFERENCES FOR ALL			
		INYECTORES / INJECTOR			DESPLAZAMIENTO NORMAL/ NORMAL DISPLACEMENT			
		PLUNGERS / PLUNGERS			DESPLAZAMIENTO NORMAL/ NORMAL DISPLACEMENT			
		MANGUERAS NUEVAS/ NEW HOSES			LIMPIAS/ CLEAN	SIN DEFORMACIONES/ WITHOUT DEFORMATIONS:		
		DOSIFICACION/ DOSAGE			VEHICULO/ VEHICLE (CARRIER)	RANGO ORDEN/ RANGE ORDER	RANGO REAL/ REAL RANGE	
	SENSOR DE MEDICINA/ SENSOR OF MEDICINE	BUEN ESTADO/ GOOD CONDITION			OBSERVACIONES/ OBSERVATIONS:			
		LIMPIEZA/ CLEANING						
	VÁLVULA SHUT OFF/ SHUT OFF VALVE	HERMETICIDAD/ TIGHTNESS			OBSERVACIONES/ OBSERVATIONS:			
		LIMPIEZA/ CLEANING						
	SEGMENTO/ SEGMENT	HERMETICIDAD (SIN FUGAS)/ TIGHTNESS (NO LEAKS)			CODIGO SEGMENTO/ CODE SEGMENT No.:			
		EMPAQUES NUEVOS/ NEW PACKAGING			PIÑON DE ENGRANE / ENGAGEMENT GEAR:			
		TEFLONIZADO UNIFORME/ TEFLON UNIFORM			TIPO DE INYECCION/ INJECTION TYPE:			
		JULABO / SCOURER			CODIGO JULABO/ SCOURER CODE			
		LIMPIEZA DEL JULABO/ SCOURER CLEANING			REALIZADA POR/ PRODUCER BY:			
BASE BOMBA /BASE PUMP	BOMBA DE LUBRICACION/ LUBRICATION PUMP	EN OPERACIÓN NORMAL/ IN NORMAL OPERATION			CODIGO BASE BOMBA/ CODE BASE PUMP No.			
	LIMPIEZA CLEANING	LIMPIEZA SUPERFICIES EXTERNAS/ CLEANING EXTERNAL SURFACES			REALIZADA POR/ PRODUCER BY:			
	CAMBIO DE ACEITE/ OIL CHANGE	REALIZO CAMBIO DE ACEITE?/ OIL CHANGE PERFORMED?			REGISTRO/LOTE DE ACEITE/ REGISTRATION / LOT OIL:			
	NIVEL DE ACEITE/ OIL LEVEL	NIVEL DE 120 mm/ 120 mm LEVEL			CANTIDAD DE ACEITE INICIAL/ INITIAL AMOUNT OF OIL			
	HERMETICIDAD- FUGA/ TIGHTNESS- LEAK	SIN FUGAS/ NO LEAKS			CANTIDAD DE ACEITE FINAL/ FINAL AMOUNT OF OIL			
	ARMADO COMPLETO FULL ASSEMBLY	PRESENCIA DE TAPON Y VISOR/ PRESENCE OF PLUG AND DISPLAY			DIFERENCIA/ DIFFERENCE			
	OPERACIÓN NORMAL/ NORMAL OPERATION	DESPLAZAMIENTO NORMAL/ NORMAL DISPLACEMENT						
	BOMBA DE TRASIEGO MEDICINA (WILDEN)/ MEDICINE RACKING PUMP	LIMPIEZA/ CLEANING			CODIGO/ CODE No.			

COPIA VERDADERA



PLANTA SOFTIGEL GMP/

SOFTIGEL PLANT - GMP

LISTA DE REVISIÓN PARA EL ALISTAMIENTO POR CAMBIO DE PRODUCTO /

CHECK LIST FOR SET UP BY CHANGE OF THE PRODUCT

MAQUINA/ MACHINE		TURNO / SHIFT		FECHA/ DATE		SUP/ SUP			
PRODUCTO/ PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		CÓDIGO/ CODE No.:	400004768 / N.A		LOTE/ LOT No.:		ORDEN DE PROCESO/ ORDER PROCESS	
MECANICOS/ MAINTENANCE OPERATORS		OPERARIOS OPERATORS				HORA INICIO/ START TIME			
						HORA TERMINACION/ END TIME			
MAQUINA/ MACHINE		PRUEBA DE FUNCIONALIDAD/ TEST FUNCTIONALITY							
	BOMBA DE TRASIEGO GELATINA (PERISTALTICA) PERISTALTIC/ GELATIN RACKING PUMP	AMPERAJE DEL MOTOR/ MOTOR AMPERAGE AJUSTE DE ABRAZADERAS ADJUSTMENT OF CLAMP EMPAQUE DE BOMBA PUMP PACKAGING				CODIGO/ CODE No.			
	TUBERIAS GELATINA / GELATIN PIPELINES	LIMPIEZA/ CLEANING TEMPERATURA/ TEMPERATURE				OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:			
	CAJAS GELATINA / IZQUIERDA DERECHA/ GELATIN BOXES	LIMPIEZA/ CLEANING TEMPERATURA TEMPERATURE				CODIGO/ CODE No.		ANCHO/ WIDTH:	
		BOYAS EN BUEN ESTADO / BUOYS IN GOOD CONDITION				OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:			
		CUCHILLAS (RECTIFICACION)/ BLADES (RECTIFICATION)				ANCHO DE CUCHILLAS (PULG)/ BLADE WIDTH (INCH):			
	BRAZOS LUBRICADORES/ LUBRICATION ARMS	DOSIFICACIÓN DE ACEITE X BRAZO (CANTIDAD)/OIL DOSAGE ARM (QUANTITY)				OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:			
	SISTEMA DE CORTE/ CUTTING SYSTEM	PRESION/ PRESSURE				MAXIMA MAXIMUM		MINIMA MINIMUM	
	MOLDES/ MOLDS	APARIENCIA SIN MALTRATO/ NO DAMAGE VISIBLE				CODIGO/ CODE No.		RECUTTING RECUTTING	
	SHUTE ASSEMBLY/ SHUTE ASSEMBLY	APARIENCIA/ APPEARANCE				OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:			
	MANGLE ROLL/ MANGLE ROLL	APARIENCIA/ APPEARANCE				RODAMIENTOS, PIÑONES, LUBRICACION/ BEARINGS, PINIONS, LUBRICATION.			
	FAN COIL/ FAN COIL	TEMPERATURA/ TEMPERATURE				MAXIMA/ MAXIMUM		MINIMA/ MINIMUM	
TREN PRESECAO/ TUMBLE DRIER	YOKE/ YOKE ASSEMBLY	RODAMIENTOS, ROSCA POMOS/ BEARINGS, THREAD, KNOBS				OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:			
	TRANSPORTADOR DE CÁPSULAS/ CAPSULE CONVEYOR BELT	OPERACIÓN NORMAL/ NORMAL OPERATION LIMPIEZA/ CLEANING				OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:			
	CANASTAS/ BASKETS	AMPERAJE MOTOR/ MOTOR AMPERAGE				OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:			
		ESTADO DE MALLAS, TAPAS Y CINTAS/ STATUS OF NETS, LIDS AND TAPES				OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:			
		ESPESOR DE LA CINTA Rango: De 4.8 a 8 mm/ TAPE THICKNESS Range: 4.8 to 8 mm				MEDIDA MINIMA: _____ mm OBSERVACIONES:/ MINIMUM MEASURE: _____ mm OBSERVATIONS:			
	SOPLADOR/ BLOWER	LIBRE DE VIBRACIÓN Y BAJO NIVEL DE RUIDO/ VIBRATION FREE AND LOW NOISE LEVEL				OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:			
AMPERAJE MOTOR/ MOTOR AMPERAGE									



**PLANTA SOFTIGEL GMP/
SOFTIGEL PLANT - GMP**
LISTA DE REVISIÓN PARA EL ALISTAMIENTO POR CAMBIO DE PRODUCTO /
CHECK LIST FOR SET UP BY CHANGE OF THE PRODUCT

MAQUINA/ MACHINE		TURNNO / SHIFT		FECHA/ DATE		SUP/ SUP			
PRODUCTO/ PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC	CÓDIGO/ CODE No.:	400004768 / N.A		LOTE/ LOT No.:		ORDEN DE PROCESO/ ORDER PROCESS		
MECANICOS/ MAINTENANCE OPERATORS		OPERARIOS OPERATORS			HORA INICIO/ START TIME				
					HORA TERMINACION/ END TIME				
OTROS/ OTHERS	TANQUE ALMACENAMIENTO DE GELATINA/ GELATIN STORAGE TANK	TEMPERATURA/ TEMPERATURE CONECTOR CONNECTOR RESISTENCIAS RESISTANCE			CODIGO DE TANQUES:/ CODE OF TANKS:				
		LIMPIEZA DE CUERPO Y RUEDAS/ CLEANING OF BODY AND PARTS DESPLAZAMIENTO TANK MOVED							
	TANQUE ALMACENAMIENTO DE MEDICINA/ MEDICINE STORAGE TANK	TEMPERATURA/ TEMPERATURE			CODIGO DE TANQUES:/ CODE OF TANKS:				
		LIMP.: CUERPO Y RUEDAS/ CLEANING OF BODY AND WHEELS							
BALDE DE TRASIEGO / TRANSFER BUCKET									
INSUMOS DE PRODUCCIÓN/ MATERIALS FOR PRODUCTION	MEDICINA/ MEDICINE	MANGUERAS NUEVAS / NEW HOSES			OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:				
		TUBERIA DE ACERO / STEEL PIPE							
		NO PRESENTA AIRE (reposo)/ NO AIR PRESENT (rest)							
		APARIENCIA/ APPEARANCE							
	GELATINA/ GELATIN	FLUIDEZ FLUIDITY			OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:				
		DENSIDAD/ DENSITY							
	NO PRESENTA AIRE (reposo)/ NO AIR PRESENT (rest)			OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS:					
	TEMPERATURA/ TEMPERATURE								
	VISCOSIDAD/ VISCOSITY								

COPIA VERDADERA



**PLANTA SOFTIGEL GMP/
SOFTIGEL PLANT - GMP**
LISTA DE REVISIÓN PARA EL ALISTAMIENTO POR CAMBIO DE PRODUCTO /
CHECK LIST FOR SET UP BY CHANGE OF THE PRODUCT

MAQUINA/ MACHINE		TURNO/ SHIFT		FECHA/ DATE		SUP/ SUP	
PRODUCTO/ PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		CÓDIGO/ CODE No.:	400004768 / N.A		LOTE/ LOT No.:	ORDEN DE TRABAJO/ WORKING ORDER
MECANICOS/ MAINTENANCE OPERATORS		OPERARIOS OPERATORS		HORA INICIO/ START TIME			
				HORA TERMINACIÓN/ END TIME			

BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA (B.P.M)/GOOD MANUFACTURING PRACTICES (G.M.P)						
ASPECTOS A EVALUAR/ASPECTS TO EVALUATE	CUMPLE/MEET		OBSERVACIONES/ OBSERVATIONS	REQUERIMIENTOS/REQUIREMENT	Responsible/ Responsable	
	SI/YES	NO/NO				
INSTALACIONES / FACILITIES						
Puertas/Doors				Limpias - Buen estado/ Good state	Clean -	Superintendente/ Superintendent
Vidrios/Windows				Limpias - Buen estado/ Good state	Clean -	Superintendente/ Superintendent
Pisos/Floors				Limpias - Buen estado/ Good state	Clean -	Superintendente/ Superintendent
Rejillas/Vents				Limpias - Buen estado/ Good state	Clean -	Superintendente/ Superintendent
Túneles/Tunnels				Limpias - Buen estado / Good state	Clean -	Superintendente/ Superintendent
Iluminación/Lighting				Adecuada y Buen estado de Lámparas/ and good states lamps	suitable	Superintendente/ Superintendent
Equipos/Equipment				Limpios y Buen estado/ Good state	Clean -	Superintendente/ Superintendent
Túneles de Secado/ Drying tunnel				Limpios y Buen Estado/ Good state	Clean -	Superintendente/ Superintendent
Herramientas/Tools				Limpias y Buen Esatdo/ Good state	Clean -	Superintendente/ Superintendent

ORDEN Y LIMPIEZA / ORDER AND CLEANING

Area/Area				Completamente Limpia y Ordenada/ Completely Clean and organized.	Superintendente/ Superintendent	
Maquina encapsuladora/ Encapsulation machine				Revisar parte interna de la maquina/ Check inside of the machine	Superintendente/ Superintendent	
Maquina encapsuladora y trenes /Encapsulation machine and trains				Revisar parte inferior y areas en general (despeje) / Check bottom and areas in general (clearance)	Superintendente/ Superintendent	
Maquina encapsuladora /Encapsulation machine				Revisar parte inferior de la base recolectora de la malla/ Check bottom of the collector base of gelatin mesh.	Superintendente/ Superintendent	

BUENAS PRÁCTICAS DE DOCUMENTACIÓN (B.P.D) / GOOD DOCUMENTATION PRACTICES (G.D.P)

ASPECTOS A EVALUAR/ASPECTS TO EVALUATE	CUMPLE/MEET		OBSERVACIONES/ OBSERVATIONS	REQUERIMIENTOS/REQUIREMENT	Responsible/ Responsable	
	SI/YES	NO/NO				

IDENTIFICACION Y REGISTROS

Identificación de Areas y Equipos/Identification of areas and equipment				Identificación correcta de Area y equipos/ Correct identification of equipment and Area	Superintendente/ Superintendent	
Identificaciones/ Identifications				Identificación de Accesorios e implementos acorde al estado (vacío sucio) / Accessories and implements Identification according to the state (empty-dirty).	Superintendente/ Superintendent	
Documentación/ Documentation				Acorde al producto, completa y bien diligenciada/ According to the product, complete and well filled out.	Superintendente/ Superintendent	
Registros en Bitacoras/ Record in Logbooks				Bien diligenciada y registros correspondientes en tiempo real/ Well filled out and records in real time	Superintendente/ Superintendent	
Registros en Bitacoras/ Record in Logbooks.				Bien diligenciada y registros correspondientes en tiempo real/ Well filled out and records in real time.	Superintendente/ Superintendent	
Identificaciones/Identifications				Identificación de Accesorios e implementos acorde al estado (vacío sucio) / Accessories and implements Identification according to the state (empty-dirty)	Superintendente/ Superintendent	
Registro De Densidad/ Density Record				Soporte de densidad anexada al Batch record/ Density record attach to the Batch record	Superintendente/ Superintendent	

ORDEN Y LIMPIEZA / ORDER AND CLEANING

Area /Area				Completamente Limpia y Ordenada/ Completely Clean and organized.	Superintendente/ Superintendent	
Maquina encapsuladora/ Encapsulation machine				Revisar parte interna de la maquina/ Check inside of the machine	Superintendente/ Superintendent	
Maquina encapsuladora y trenes /Encapsulation machine and trains				Revisar parte inferior y areas en general (despeje) / Check the bottom part and areas in general (clearance).	Superintendente/ Superintendent	
Maquina encapsuladora /Encapsulation machine				Revisar parte inferior de la base recolectora de la malla/ Check bottom of the collector base of gelatin mesh.	Superintendente/ Superintendent	

COPIA VERDADERA



PLANTA SOFTIGEL GMP/
SOFTIGEL PLANT - GMP
LISTA DE REVISIÓN PARA EL ALISTAMIENTO POR CAMBIO DE PRODUCTO /
CHECK LIST FOR SET UP BY CHANGE OF THE PRODUCT

MAQUINA/ MACHINE		TURNO/ SHIFT		FECHA/ DATE		SUP/ SUP		
PRODUCTO/ PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		CÓDIGO/ CODE No.:	400004768 / N.A		LOTE/ LOT No.:		ORDEN DE TRABAJO/ WORKING ORDER
MECANICOS/ MAINTENANCE OPERATORS		OPERARIOS OPERATORS			HORA INICIO/ START TIME			
					HORA TERMINACIÓN/ END TIME			

VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN / VERIFICATION OF MEASURING INSTRUMENTS						
DESCRIPCION / DESCRIPTION	CUMPLE/MEET		OBSERVACIONES /OBSERVATIONS	CODIGO / CODE	VIGENCIA / EFFECTIVE DATE	VENCIMIENTO/ EXPIRATION
	SI/YES	NO/NO				
BALANZA/SCALE						
MICROSCOPIO /MICROSCOPE						
CALBRADOR/GAUGE						
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA/ OTHER ASPECTS TO CONSIDER						
ARRANQUE DE MAQUINA/START UP MACHINE						
INICIO DEL ARRANQUE/ START OF START UP	FIN DEL ARRANQUE/ END OF START UP		TIEMPO GASTADO / SPENT TIME	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS		
CAMBIOS DE MOLDES Y SEGMENTOS/CHANGE TO MOLDS AND SEGMENTS						
Reportar referencias de moldes y segmentos cambiados durante el encapsulado/Record the references molds and segments changed during encapsulation						
Moldes/ Molds						
Segmento / Segment						
SEGUIMIENTO A LA LUBRICACIÓN (450 mg/minuto por cada brazo lubricador)/ MONITORING LUBRICATION (450 mg/minute each lubricator arm)						
Fecha / Hora / Date / Hour						
Brazo Izquierdo / Left arm						
Brazo Derecho / Right Arm						
Lubricante Utilizado / Lubricant Used			Lote / Lot		Fecha Vencimiento / Expiration Date	
Verificado por / Verified by:						
Observaciones / Observations						

INFORMACION DEL PRODUCTO																						
Producto / Product	Código / Code No.	Lote / Lot No.	Colores / Colours	Molde / Mold	Cápsulas Teóricas / Theoretical Capsules	Vel. r.p.m / Velocity in r.p.m	Cápsulas por Hora / Capsules per hour	Película Pulg. / Ribbon in Inches	Ancho Caja / Box width	Máquina / Machine												
VITAMINA D3 50000 UI CBG	400004768		ROJO 287 RED 287	5.5 OVAL A STD	100,000	2.7	37,908	0.030 ±0.002"	6.25													
T. Partícula / Particle Size	N.A	Vehículo / Vehicle	HM / MH	kg/Hora Med - kg/Hour Medicine	kg/Hora Gel -kg/Horur Gelatine	kg/Lote - kg/Lot	Llenado (mg) - Fill (mg)	Tolerancia / Tolerance	Muestra / Sample	Kg. Med. / Kg Medicine												
%llenado de la cápsula / % Capsule Fill	81.15	MEDICINA	2.6	10.4	16.9	100.0	275.00	2%	9	27.5												
Densidad / Density	0.940	Pais									cod											
Minimas / Minimum	4.75	N.A									2											
Originado por / Issued by:	JRODELO		No. Orden		Ingeniería	0																
Producto Impreso:	Si	<table border="1"> <tr> <td>Cantidad Base</td> <td>1.000 Un</td> </tr> <tr> <td>/Base Amount</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cápsulas</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Teóricas</td> <td>100000</td> </tr> <tr> <td>/Theoretical</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Capsules</td> <td></td> </tr> </table>									Cantidad Base	1.000 Un	/Base Amount		Cápsulas		Teóricas	100000	/Theoretical		Capsules	
Cantidad Base	1.000 Un																					
/Base Amount																						
Cápsulas																						
Teóricas	100000																					
/Theoretical																						
Capsules																						
PESO TEORICO DE LLENADO / THEORETICAL FILL WEIGHT	275																					
GRAMOS DE GELATINA / MILLAR DE CAPSULAS 5 RED - GRAMS OF GELATINE/ THOUSAND OF CAPSULES 5 RED	N.A																					
DOSIFICACION / DOSAGE =	P. MIN / MIN WEIGHT	269.5	P. MEDIO / TARGET WEIGHT	275.0	P.MAX / MAX WEIGHT	280.5																
DESCRIPCION:																						
Cápsula blanda de gelatina de color rojo, forma oval. Contiene líquido oleoso ligeramente amarillo, Cada cápsula lleva impreso en tinta blanca el logo "50".																						
Red, oval-shape, soft gelatine capsule. It contains a slightly yellow oily liquid. Each capsule has "50" printed in withe ink.																						
CODIGO DE LA GEL / GELATINE CODE																						
400005097/400008647																						
NOMBRE DE LA GELATINA / NAME OF THE GELATINE																						
GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 / GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287																						
PLANES DE INSPECCIÓN DE PRODUCTO / PRODUCT INSPECTION PLANS						PLANES DE INSPECCIÓN GELATINA / GELATINE INSPECTION PLANS																
N.A			N.A			N.A			N.A													
N.A			N.A			N.A			N.A													

COPIA VERDADERA



FORMULACION DEL PRODUCTO /
PRODUCT FORMULATION

Usuario:/
User: MUTRIA

Código Material:/
Material Code 400004768
Código Anterior:/
Previous Code N.A
Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Producto:/ VITAMINA D3 50000 UI CBG |
Product: VITAMIN D3 50000 IU SGC
Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Format 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Version:
Vigencia:/
Effective Date:
Nivel de Control \
Control level NC2

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Cód Material/ Material Code/ Cód Anterior/ Previous Code	Descripción/ Description	Cant. Requerida/ Required Amount	UM/ MU	Lote Logístico/ Logistics Lot	% Potencia/ %Potency	Cant. Dispen./ Qty Dispensed	P.Bruto/ Gross Weight	Dispensado por/ Dispensed by	Verific. Por/ Verified by	Fecha/ Date	Adici. Solicitado/ Additional Requested	Adici. Suminis/ Additional Supplied	Lote Logístico/ Logistics Lot	Total Sum/ Total Supplied
100003374 /	NITROGENO U.A.P GRADO 5 NITROGEN U.H.P GRADE 5		2 un											
100002363 / USRM081	TINTA OPACODE BLANCA S-1-7085 OPACODE WHITE INK S-1-7085		100 g											
100003029 /	ETHANOL 96% ETHANOL 96%		8000 g											
100003030 /	TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN		2000 g											
100003030 /	TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN		22194 g											
100006081 /	ALLRAC-A-TOCOPHEROL ALLRAC-A-TOCOPHEROL		56 g											
100006221 /	CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM) CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM)		5250 g											
400008647 / 400005097	GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287		90909.1 g											

OBSERVACIONES/OBSERVATIONS:

AUTORIZACIONES/AUTHORIZATIONS		
Emitido Por/Issued by	Revisado Por/Reviewed by	Aprobado Por/Approved by
I & D/R&D	Planta/Plant	Calidad/Quality
Firma:/Signature:	Firma:/Signature:	Firma:/Signature:
Fecha:/Date:	Fecha:/Date:	Fecha:/Date:



FORMULACION DEL PRODUCTO /
PRODUCT FORMULATION

Usuario: /
User: MUTRIA

Código Material: /
Material Code 400004768
Código Anterior: /
Previous Code N.A
Dosificación: /
Dosage: 275 mg

Producto: / VITAMINA D3 50000 UI CBG |
Product: VITAMIN D3 50000 IU SGC
Cantidad a Producir: /
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon: /
Mold/Format 5.5 OVAL

Grupo de artículo: /
Article Group Z103001

Forma Farmacéutica: /
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión: /
Version: 10

Vida útil: /
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Vigencia: /
Effective Date:
Nivel de Control \
Control level NC2

Registro Sanitario: /
Sanitary Register: N.A
Und. Medida del producto: /
Product Unit Measure: un


Cód Material/ Material Code	Descripción/ Description	UM/ MU	% Rto/ % Yield	Cant. Requerida/ Required Amount	Lote Logístico/ Logistics Lot	Cant. Dispen./ Qty Dispensed	Dispensado por/ Dispensed by	Verific. Por/ Verified by	Fecha/ Date	Adici. Solicitado/ Additional Requested	Adici. Suminis/ Additional Supplied	Lote Logístico/ Logistics Lot	Total Sum/ Sum total	Cant Emp./ Qty to pack	Desperd./ Waste
200000477 / ME1104021	ETI TRANSFER BLANCO 10 cm x 12cm 10 cm x 12 cm WHITE LABEL FOR TRANSFERS	un	100	4											
618000025 / ME1203010	CAJA 2-C NACIONAL National Bag 2 C	un	100	4											
200000477 / ME1104021	ETI TRANSFER BLANCO 10 cm x 12cm 10 cm x 12 cm WHITE LABEL FOR TRANSFERS	un	100	40											
200014474 /	BOLSA 15X6.5X6.5X47cm NEGRA CALIBRE 4 BAG 15X6.5X6.5X47cm BLACK CALIBER 4	un	100	40											

OBSERVACIONES/OBSERVATIONS:

AUTORIZACIONES/AUTHORIZATIONS		
Emitido Por/Issued by I & D/R&D	Revisado Por/Reviewed by Planta/Plant	Aprobado Por/Approved by Calidad/Quality
Firma:/Signature:	Firma:/Signature:	Firma:/Signature:
Fecha:/Date:	Fecha:/Date:	Fecha:/Date:

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

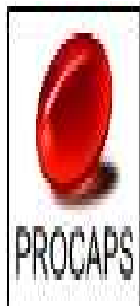

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

LISTA FIJA DE MATERIALES / FIXED TABLE FOR BILL OF MATERIALS

Cód Material/ Material Code	Descripción/ Description	UM/ MU	Cant. Requerida/ Required Amount
400005097 / 400008647	GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 / GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287	g	100000 (a)
200014474	BOLSA 15X6.5X6.5X47cm NEGRA CALIBRE 4 / BAG 15X6.5X6.5X47cm BLACK CALIBER 4	UN	40
200000477	ETI TRANSFER BLANCO 10 cm x 12cm / 10 cm x 12 cm WHITE LABEL FOR TRANSFERS	UN	40
618000025	CAJA 2-C NACIONAL / NATIONAL BAG 2 C	UN	4
100006221	CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM)	g	5250
100006081	ALLRAC-A-TOCOPHEROL	g	56
100003030	TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	g	22194
100003030	TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	g	2000
100003029	ETHANOL 96%	g	8000
100002363	TINTA OPACODE BLANCA S-1-7085 / OPACODE WHITE INK S-1-7085	g	100
100003374	NITROGENO U.A.P GRADO 5 / NITROGEN U.H.P GRADE 5	UN	2

NOTA (a) La cantidad de gelatina que se encuentra parametrizada en la tabla Fija corresponde a la cantidad total utilizada en la orden (en esta se incluye la cantidad Fija, la cantidad variable y el % de rechazo)

NOTE (a) The quantity of gelatin that is parameterized in the Fixed table corresponds to the total quantity used in the order (this includes the Fixed quantity, the variable quantity and the % rejection)

AUTORIZACIÓN DEL CLIENTE / CLIENT AUTHORIZATION	
Nombre / Name:	Natalie Beasley
Cargo/ Position:	Regulatory Affairs Manager
Firma/ Signature:	
Fecha AA/MM/DD / Date YY/MM/DD:	

DISPENSACIÓN / DISPENSING

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

1. DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Cápsula blanda de gelatina de color rojo, forma oval. Contiene líquido oleoso ligeramente amarillo, Cada cápsula lleva impreso en tinta blanca el logo "50".

Red, oval-shape, soft gelatine capsule. It contains a slightly yellow oily liquid. Each capsule has "50" printed in white ink.


2. VIDA ÚTIL / SHELF LIFE: 180 DIAS

3. REGISTRO DE MODIFICACIÓN / REGISTER OF MODIFICATION:

SC-14-427 SC-16-307 SC-17-356 SC-19-141 SC-19-686; SC-20-469; SC-20-024 ; SC-19-1047; SC-21-1050; SC-24-1024; SC-24-846

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

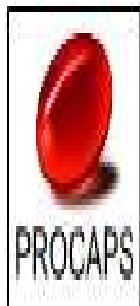

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

SC-21-1272; SC-24-803; SC-22-877; SC-23-719; SC-25-153; SC-25-609; SC-25-275

Se requiere actualizar las listas de materiales en SAP para los productos del cliente Consilient con el fin de automatizar la cantidad de lotes de gelatina preparada para cada orden de fabricación de los siguientes productos según SC-21-1050 - CC-000005378 2025-01-17

Bills of material are required to be updated in SAP for the products of the client Consilient in order to automate the quantity of gelatin batches prepared for each manufacturing order of the following products according to SC-21-1050 - CC-000005378 2025-01-17 Adicionar la materia prima 100006352 GLYCEROL como material alterno en los productos donde es utilizado el código 100003013 GLYCEROL. Con el nuevo código de material se incluye a DISAN S.A como proveedor y a MANUELITA OILS S.A .como fabricante, de acuerdo a lo presentado en la desviación número 200083897, según (SC-24-1024 - CC-000007625) 2025-01-17

Add raw material 100006352 GLYCEROL as an alternate material in products where code 100003013 GLYCEROL is used. With the new material code, DISAN S.A. is included as supplier and MANUELITA OILS S.A. as manufacturer, according to what is presented in deviation number 200083897, according to (SC-24-1024 - CC-000007625) 2025-01-17

Se incluye en la etapa de Dispensación de materias primas del Master Batch Record un nuevo ITEM: los recipientes usados y el número de aperturas realizados en el contenedor de las materias primas ALLRACATOCOPHEROL y CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM), según (SC-24-846 - CC-000007692) 2025-01-17

A new ITEM is included in the Raw Material Dispensing stage of the Master Batch Record, the containers used and the number of openings made in the container of the raw materials ALLRACATOCOPHEROL and CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM), according to (SC-24-846 - CC-000007692) 2025-01-17

Se aplican CAPA de mejora de proceso en los formatos F-SOP-0051-1 V08, F-INST-0109-1 V03, F-INST-0109-2 V01, F-INST-0195-4 V01, F-INST-0195-6 V05 2025-01-17

Process improvement CAPAs are applied in formats F-SOP-0051-1 V08, F-INST-0109-1 V03, F-INST-0109-2 V01, F-INST-0195-4 V01, F-INST-0195-6 V05 2025-01-17

Se actualiza la expresión de la vida útil de meses a días: de 6 meses a 180 días, según (SC-21-1272 - CC-000005282) 2025-01-17

The expression of the useful life is updated from months to days: from 6 months to 180 days, according to (SC-21-1272 - CC-000005282) 2025-01-17

Se aplican CAPA de mejora de proceso en los formatos F-SOP-0043-1 V02, F-INST-0109-1 V05, F-INST-0052-4 V07 2025-07-21

Process improvement CAPAs are applied in the F-SOP-0043-1 V02, F-INST-0109-1 V05, F-INST-0052-4 V07 formats 2025-07-21

En la etapa de selectora ítem 2.2 y 2.6, se actualizan las dimensión de la cápsula para que la longitud aumente, pasando de Ancho: 8.5 mm máximo; Largo: 12.5 mm máximo a Ancho: 8.5 mm máximo; Largo: 12.8 mm máximo, según (SC-24-803 - CC-000007748) 2025-07-21

In the selector stage item 2.2 and 2.6, the dimensions of the capsule are updated so that the length increases, going from Width: 8.5 mm maximum; Length: 12.5 mm maximum to Width: 8.5 mm maximum; Length: 12.8 mm maximum, according to (SC-24-803 - CC-000007748) 2025-07-21

Se modifica las instrucciones de fabricación en las diferentes etapas de manufactura del producto, que requieren mejoras documentales y de redacción en las etapas, según (SC-22-877 / CC-000006045 y SC-23-719 / CC-000006927) 2025-07-21

The manufacturing instructions are modified in the different stages of product manufacturing, which require documentary and drafting improvements in the stages, according to (SC-22-877 / CC-000006045 and SC-23-719 / CC-000006927) 2025-07-21

Se actualiza el maestro de fabricación incluyéndose en la etapa de fabricación, el registro de la ejecución de la adición de API y el enjuague de los contenedores y se unifica en el maestro de fabricación en la etapa de Lavado de las cápsulas el uso de canasta metálica en vez de canastas plásticas (contiene el alcohol al 96% para lavado de cápsulas) y canastilla metálica perforada (donde se depositan las cápsulas que se van a lavar), según (SC-25-153/CC-000008053) 2025-07-21

The manufacturing master is updated to include records of the API addition and container rinsing in the manufacturing stage. The use of a metal basket instead of plastic baskets (containing 96% alcohol for capsule washing) and a perforated metal basket (where the capsules to be washed are placed) is standardized in the manufacturing master for the Capsule Washing stage, according to (SC-25-153/CC-000008053) 2025-07-21

Se aplican CAPA de mejora de proceso en los formatos F-INST-0066-2 V02, F-INST-0109-1 V07, F-INST-0109-2 V03 2025-12-12

Process improvement CAPAs are applied in the F-INST-0066-2 V02, F-INST-0109-1 V07, F-INST-0109-2 V03 2025-12-12

Se reemplaza tanque reactor 15 (TREA 15) por el tanque reactor 30 (TREA 30) en el proceso fabricación de la gelatina ya que el tanque reactor TREA 15 va a salir de la operación, según (SC-25-609 - CC-000008471) 2025-12-12


Reactor tank 15 (TREA 15) is replaced by reactor tank 30 (TREA 30) in the gelatin manufacturing process because reactor tank TREA 15 will be taken out of operation, according to (SC-25-609 - CC-000008471) 2025-12-12

Se cambia la referencia del API Cholecalciferol Concentrated (oily form) Vitamin D3 1.0 MIU/g, referencia actual Código SAP: 100002977 (Referencia DSM, # 5011574), Referencia Propuesta Código SAP: 100006221 (Referencia DSM # 5017524),según (SC-25-275 / CC-000008073) 2026-02-11

The reference of the API Cholecalciferol Concentrate (oily form) Vitamin D3 1.0 MIU/g is changed, current reference SAP Code: 100002977 (DSM Reference # 5011574), Proposed Reference SAP Code: 100006221 (DSM Reference # 5017524), according to (SC-25-275 / CC-000008073) 2026-02-11

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

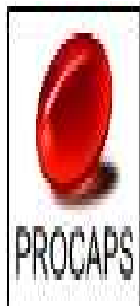

Código
Material:/
Material Code 400004768

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:/
Version: 10

Vigencia:/
Effective Date:

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

INSTRUCCIONES GENERALES / GENERAL INSTRUCTIONS:

4. FICHA DE SEGURIDAD / SAFETY DATA SHEET

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD / SAFETY INSTRUCTIONS:

4.1. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL.

4.1. EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

EVITAR EL CONTACTO DE LA MATERIA PRIMA CON LA PIEL O LOS OJOS

AVOID SKIN OR EYE CONTACT WITH THE RAW MATERIAL

4.1.1 Protección respiratoria: Si es necesario use respirador adecuado (Filtro combinado de vapor/partícula)

4.1.1 Respiratory protection: If necessary, use respirator (Combined steam/particle filter)

4.1.2 Protección de las manos: Use guantes desechables de látex.

4.1.2 Hands protection: Wear latex/plastic gloves (disposable gloves)

4.1.3 Protección de los ojos: Use gafas protectoras.

4.1.3 Eye protection: Wear safety goggles.

4.1.4 Protección de la piel: Use uniformes mangas largas.

4.1.4 Skin care: Wear uniforms with long sleeves

4.2. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS / FIRST AID:

4.2.1 Inhalación: Remueva a la persona de la exposición y busque atención médica.

4.2.1 Inhalation: Remove from exposure and get medical attention.

4.2.2 Contacto con la piel: Lave la piel afectada con agua. Busque atención médica.

4.2.2 Skin Contact: Rinse area with water. Get medical attention.

4.2.3 Contacto con los ojos: Lave los ojos con agua, inmediatamente después del contacto, manteniendo los ojos abiertos. Busque atención médica.

4.2.3 Eye Contact: Wash eyes thoroughly with water immediately after contact keeping the eyes open. Get medical attention.

4.2.4 Ingestión: No induzca el vomito. Llame enseguida al médico.

4.2.4 Ingestion: Do not induce vomiting. Call a physician immediately.

4.3. EN CASO DE DERRAME: En caso de derrame de la materia prima, evite el contacto con la sustancia. Evite la formación de polvo y no inhale el polvo. Recoja en seco y aplique Procedimiento de Limpieza del Área SOP-0096. Reporte derrames en el ítem OBSERVACIONES.

4.3. IN CASE OF SPILLAGE: If spillage occurs, avoid contact with the substance. Avoid dust formation and do not inhale the dust.

Collect the spilled substance when dry and clean the area according to Area Cleaning Procedure SOP-0096. Report the spill incident in item OBSERVATIONS.

5. AREA DE DISPENSACIÓN / DISPENSING AREA

Lea las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y ságalas en estricto orden:

Before starting the process, read the instructions described herein, and follow them in the strictest order:

5.1 PERSONAL / PERSONNEL:

º Durante todo el proceso aplique las Buenas Prácticas de Manufactura

º Apply the Good Manufacturing Practices during the entire process

º Leer cuidadosamente las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y ságalas en estricto orden. Asegurarse de comprender cada instrucción. De lo contrario dirigirse inmediatamente al Supervisor de Turno o al Jefe del Área.


º Before starting the process, read the instructions described herein, and follow them in the strictest order, making sure to understand every instruction, if not, immediately address yourself to the Supervisor on duty, or to the Head of the Area.

º La persona debe utilizar el uniforme correspondiente: Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes, cinturón de seguridad y protector auditivo.

º The person must wear the adequate corresponding uniform: white overalls, bonnet (hair cover), nose- mouth protector, disposable gloves, boots not slippery, safety belt, and hearing protection.

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

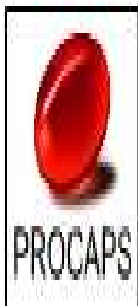

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

5.2 AREAS Y EQUIPOS: (Área de Dispensación No: _____)
5.2 AREAS AND EQUIPMENTS: (Dispensing Area No)

- 9 Verificar que el Área y los Equipos a utilizar estén limpios.
- 9 **Verify that the area and the equipments to be used are clean.**
- 9 Verificar el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:
- 9 **Verify the clearance of the line (areas and equipments) and the environmental conditions in the area.**

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.020 (negativo) pulg de agua - Máximo: 0.150 (negativo) Pulg de agua.
PRESSURE DIFFERENTIAL: Minimum: 0.020 (Negative) Inches of water - Maximum: 0.150 (Negative) Inches of water.

- TEMPERATURA : 22.0°C.
- **TEMPERATURE : 22.0°C.**

Mínimo: 19.0°C Máximo: 25.0°C.
Minimum: 19.0°C Maximum: 25.0°C.

- HUMEDAD RELATIVA : 45 %
- **RELATIVE HUMIDITY: 45 %**

Mínimo: 40% Máximo: 50%.
Minimum: 40% Maximum: 50%.

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:
(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)

Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.
(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

Inicio de proceso/**Start Process:**

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/**Final Process**

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date


- Seguir y ejecutar las actividades de Dispensación descritas en los procedimientos:
- **Follow and perform the Dispensing activities described in the following procedures:**

- * Despeje de línea en área de dispensación Código: SOP-0097
- * **Clearance of the Line in the Dispensing Area. Code No. SOP-0097**
- * Limpieza, desinfección y sanitización del área de dispensación Código: SOP-0096
- * **Cleaning, Disinfection, and Sanitation of the Dispensing Area. Code No. SOP-0096**
- * Limpieza de cucharas utilizadas en el proceso de dispensación Código: SOP-0098
- * **Cleaning of the Scoops used in the Dispensing Process. Code No.: SOP-0098**
- * Dispensación de materias primas en ordenes de fabricación Código: SOP-0104
- * **Dispensing of Raw Materials a per Manufacture Order. Code No.: SOP-0104**

COPIA VERDADERA

**ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS**

Usuario:
User: MUTRIA

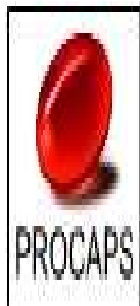

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

* Elementos de protección utilizados en el proceso de dispensación de materias primas Código: SOP-0080

* **Protection Elements used in the Dispensing Process of Raw Materials. Code No.: SOP-0080**

* Registro de temperatura, humedad y diferencial de presión en el área de dispensación Código: SOP-0086

* **Registers of Temperature, Humidity, and Pressure Differential in the Dispensing Area. Code No.: SOP-0086**

* Identificación y Trazabilidad De Materiales De Empaque, Materias Primas, Graneles y Producto Terminado. Código: SOP-0109

* **Identification and Traceability of packaging materials, Raw Materials, bulks and finished product. Code No.: SOP-0109**

* Contenido de Hojas de Datos de Seguridad y Tarjetas de Emergencia. Código: SOP-0111

* **Content of Safety Data Sheets and Emergency Cards. Code No.: SOP-0111**

* Limpieza, manejo y almacenamiento de la bomba nebulizadora Código: SOP-0110

* **Cleaning, Operation and Storage of the Nebulising Pump. Code No. : SOP-0110**

6. REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión De Desviaciones Del Sistema De Calidad.

(Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management)

7. APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC) PARA INICIAR DISPENSACIÓN DE MATERIAS PRIMAS.

7. QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL TO START RAW-MATERIAL DISPENSING

Notifique al inspector de AC para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso.

Before starting the process request the QA inspector to verify the following steps.

7.1 Verifique que las balanzas estén disponibles y limpias.

7.1 Verify that the scales are available and clean.

7.2 Verifique que las áreas estén limpias, las luces de sodio estén encendidas y que se cumplan las condiciones ambientales del paso 5.2.

7.2 Verify that the area is clean, that the sodium lights are on and the environmental conditions are met step 5.2.

7.3 Verifique que los materiales aprobados y no expirados estén disponibles para el proceso. Confirme número de registro de las materias primas comparando con la orden de producción de las etapas de: Preparación de la medicina, etapa de preparación de gelatina, etapa de encapsulado, etapa de lavado, e impresión.

7.3 Verify that the approved and unexpired raw materials are available for the process. Compare and confirm that each raw-material code is the same as listed on the production order of the medicine preparations, Gelatin, encapsulation, washing and printing.

7.4 Verifique que las balanzas tengan una fecha de calibración vigente.

7.4 Verify that the scales are within their calibration expiration dates.

APROBACIÓN FINAL DE AC / **QA FINAL APPROVAL:**

FIRMA / **SIGNATURE:** _____ FECHA-HORA / **DATE-TIME:** _____

Nota: Para dispensar las materias primas con cadena de frío (CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM)), proceda como se indica en el procedimiento SOP-0104. Dispensación de materias primas en ordenes de fabricación.

Note: For dispensing of the raw materials with cold chain (CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM)), proceed as described in the procedure SOP-0104. Dispensing of raw materials in manufacturing orders.

8. EN EL MATERIAL A DISPENSAR/ (IN THE MATERIAL TO BE DISPENSED):

Antes de dispensar las materias primas, ALLRAC-A-TOCOPHEROL y CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM), verifique la unidad de almacén, el número de envase del contenedor, la cantidad de aperturas realizadas en el recipiente original y el saldo disponible que contiene las materias primas incluyendo el muestreo, anótelas en la tabla.

(Before dispensing the raw materials, ALLRAC-A-TOCOPHEROL and CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM), check the warehouse unit, the packaging number of the container, the number of openings made in the original container and the available balance containing the raw materials including sampling, note them in the table).

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión:/
Version: 10
Vigencia:/
Effective Date:

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Codigo (Code)	Materia prima (Raw material)	Lote logístico (Logistics lot):	Unidad de Almacén/ Número de envase del contenedor or (Warehouse Unit/ Container Packaging Number)	Cantidad de aperturas antes de dispensar (Number of openings before dispensing)	Cantidad disponible antes de dispensar (Available amount before dispensing)	Realizado por /Fecha: Performed by/ Date:
100006221	CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM)					
100006081	ALLRAC-A-TOCOPHEROL					

REVISADO POR/REVIEWED BY _____ FECHA/DATE : _____

8.1. Las siguientes materias primas requieren el uso de nitrógeno durante la dispensación, siga las instrucciones descritas a continuación:
8.1. The following raw materials required the use of nitrogen during dispensing, follow the instructions described below:

100006221 CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM)
100003030 TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN
100006081 ALLRAC-A-TOCOPHEROL

8.1.1 ANTES DE DISPENSAR (BEFORE DISPENSING)

Antes de iniciar dispensación, aplique nitrógeno 5 ± 1 PSI por 3 ± 1 minutos a cada contenedor de materia prima que sea abierto para dispensación.
(Before starting dispensing, apply nitrogen 5 ± 1 PSI for 3 ± 1 minutes to each raw material container open to be dispensed)

8.1.2 EN EL MATERIAL DISPENSADO (IN THE MATERIAL DISPENSED)

Aplique nitrógeno 5 ± 1 PSI por 3 ± 1 minutos antes de cerrar los contenedores donde dispensó cada material.
(Apply nitrogen 5 ± 1 PSI for 3 ± 1 minutes before closing the containers where raw material where dispensed)

8.1.3 EN EL MATERIAL REMANENTE (IN THE REMAINING MATERIAL)

Aplique nitrógeno 5 ± 1 PSI por 3 ± 1 minutos a los contenedores con la cantidad remanente a ser devuelta a bodega.
Apply nitrogen 5 ± 1 PSI por 3 ± 1 minutos to the containers with the remaining amount to be returned to the warehouse.

Registre las operaciones en la siguiente tabla:
Record the operations in the following table:

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

Codigo (Code)	Materia prima (Raw material)	PASO (STEP) 8.1.1		PASO (STEP) 8.1.2		PASO (STEP) 8.1.3	
		Presión/ Pressure	Tiempo/ Time	Presión/ Pressure	Tiempo/ Time	Presión/ Pressure	Tiempo/ Time
100006221	CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM)						
100003030	TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN						
100006081	ALLRAC-A-TOCOPHEROL						

REALIZADO POR / FECHA
(PERFORMED BY / DATE)

VERIFICADO POR / FECHA:
(VERIFIED BY / DATE)

PASO 1. CÁLCULO PARA AJUSTAR EL ACTIVOS AL 100% / (STEP 1. CALCULATION TO ADJUST THE API TO 100%)

Antes de iniciar la dispensación de las materias primas para la fabricación del lote de VITAMINA D3 50000UI CBG es necesario realizar ajustes en las cantidades a dispensar, teniendo en cuenta la concentración real obtenida de este activo. Estos ajustes se deben realizar en los con base siguientes datos:


Before starting the dispensing of the raw material to manufacture of VITAMIN D3 50000IU SGC is necessary to make adjustments to the amounts to be dispensed, have in mind the real concentration obtained from this active. These settings must be made based on the following:

CÁLCULO DE LA CANTIDAD REQUERIDA DE CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM) PARA UN LOTE DE 100,000 CÁPSULAS. CÁLCULATION OF THE REQUIRED AMOUNT OF CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM) FOR A 100,000 CAPSULE LOT.				
CÓDIGO CODE	MATERIA PRIMA RAW MATERIAL		A1 TAMAÑO LOTE LOT SIZE (CAPS)	
100006221	CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM)		100,000	
B2	C3	D4	E5	F6
CONCENTRACIÓN TEÓRICA THEORETICAL CONCENTRATION (%)	mg/CÁPSULA mg/CAPSULE	CANTIDAD TEÓRICA REQUERIDA PARA EL LOTE THEORETICAL QUANTITY REQUIRED FOR LOT (g)	CONCENTRACIÓN OBTENIDA DE LA MATERIA PRIMA CONCENTRATION OBTAINED OF THE RAW MATERIAL (%)	CANTIDAD REAL REQUERIDA PARA EL LOTE ACTUAL AMOUNT REQUIRED FOR THE LOT (g)
100%	52.50 (Overage 5%)	5,250.0 g		
Cantidad Real Requerida de Cholecalciferol Concentrate (Oily Form) para el Lote (F6) = $\frac{\text{Concentración teórica (100\%) (B2) X Cantidad teórica requerida para el lote (g)(D4)}}{\text{Concentración obtenida (E5)}}$ Amount Required of Cholecalciferol Concentrate (Oily Form) for the Lot (F6) = $\frac{\text{Theoretical Concentration (100\%) (B2) X Theoretical Amount required to prepare one lot (g)(D4)}}{\text{Concentration obtained (E5)}}$				

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

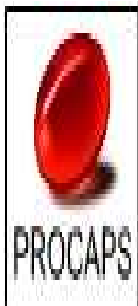

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/
Version: 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Aplique esta fórmula: $F6 = (B2 \times D4) / E5$

(Apply this formula)

Realizar los cálculos en este espacio y registrar en la casilla (F6) correspondiente a la tabla anterior:
Calculate in this space and record data in the corresponding boxes (F6), in the table above:

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

PASO 2. CÁLCULO DE LA CANTIDAD REQUERIDA DE TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN PARA UN LOTE DE 100,000 CÁPSULAS
STEP 2. CALCULATION OF THE REQUIRED AMOUNT OF TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN FOR A 100,000 CAPSULE LOT.

PASO 2. CÁLCULO DE LA CANTIDAD REQUERIDA DE TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN PARA UN LOTE DE 100,000 CÁPSULAS STEP 2. CALCULATION OF THE REQUIRED AMOUNT OF TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN FOR A 100,000 CAPSULE LOT		
CÓDIGO CODE	MATERIA PRIMA RAW MATERIAL	G1 TAMAÑO LOTE LOT SIZE (CAPS)
100003030	TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	100,000
H2 mg/CÁPSULA mg/CAPSULE	I3 CANTIDAD TEÓRICA REQUERIDA PARA EL LOTE THEORETICAL QUANTITY REQUIRED FOR LOT (g)	J4 CANTIDAD REAL REQUERIDA PARA EL LOTE ACTUAL AMOUNT REQUIRED FOR THE LOT (g)
221.94	22,194.0 g	
mg/CÁPSULA mg/CAPSULE	Cantidad de ALLRAC-A-TOCOPHEROL a dispensar Actual amount of ALLRAC-A-TOCOPHEROL dispense(g)	56.0 g
0.56		
Cantidad total del lote Weight total lot		27,500.0 g

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/
Version: 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Aplice esta fórmula:
Apply this formula: $J4 = 27,500.0 \text{ g} - (56.0 + F6)$

Realizar los cálculos en este espacio y registrar en la casilla (J4) correspondiente a la tabla anterior:
Calculate in this space and record data in the corresponding boxes (J4), in the table above:

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

DISPENSACIÓN DE TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN
DISPENSING TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN

K1	Cálculo de la cantidad de Triglycerides, Medium Chain a dispensar para la bolsa A/ Calculation the amount of Triglycerides, Medium Chain dispensed the bag A:	= $J4 - (\text{Bolsa B}(1,000.0 \text{ g}) + \text{Bolsa C}(1,000.0 \text{ g}) + \text{Bolsa D}(1,000.0 \text{ g}) + \text{Bolsa E}(4,000.0 \text{ g}))$
	Cálculo de la cantidad de Triglycerides, Medium Chain a dispensar para la bolsa A/ Calculation the amount of Triglycerides, Medium Chain dispensed the bag A:	= $J4 - 7,000.0 \text{ g}$
	Cantidad de Triglycerides, Medium Chain a dispensar para la bolsa A/ Quantity dispensed of Triglycerides, Medium Chain for bag A:	=

Dispense las cantidades de Triglycerides, Medium Chain en cinco (5) bolsas como sigue:
Dispensing the amounts of Triglycerides, Medium Chain in five (5) bags as follows:

Descripción Description	Código de material Raw Material Code No.	Recipiente y cantidad Container and amount	No. de registro de materia prima Raw material Receiving No.	Código de la balanza/ Fecha de próxima calibración Scale ID/Date of Next Calibration	Peso Bruto Gross weight	Peso neto Net weight	Unidad de medida Unit of measurement	
							g	Kg
							✓	✓
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	100003030	Identifique la bolsa con la letra (A) y pese la cantidad de Triglycerides, Medium Chain (Ver casilla K1) Identify the bag with the letter (A) and weight the amount of raw material Triglycerides, Medium Chain(See Box K1)						

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	100003030	Identifique la bolsa con la letra (B) y pese 1,000.0 g de Triglycerides, Medium Chain Identify the bag with the letter (B) and weight 1,000.0 g of raw material Triglycerides, Medium Chain					
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	100003030	Identifique la bolsa con la letra (C) y pese 1,000.0 g de Triglycerides, Medium Chain Identify the bag with the letter (C) and weight 1,000.0 g of raw material Triglycerides, Medium Chain					
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	100003030	Identifique la bolsa con la letra (D) y pese 1,000.0 g de Triglycerides, Medium Chain Identify the bag with the letter (D) and weight 1,000.0 g of raw material Triglycerides, Medium Chain					

Descripción Description	Código de material Raw Material Code No.	Recipiente y cantidad Container and amount	No. de registro de materia prima Raw material Receiving No.	Código de la balanza/ Fecha de próxima calibración Scale ID/Date of Next Calibration	Peso Bruto Gross weight	Peso neto Net weight	Unidad de medida Unit of measurement	
							g	Kg
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	100003030	Identifique la bolsa con la letra (E) y pese 4,000.0 g de Triglycerides, Medium Chain Identify the bag with the letter (E) and weight 4,000.0 g of raw material Triglycerides, Medium Chain					√	√

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

NOTA: Una vez finalizado estos cálculos, registrar las cantidades obtenidas en la orden de producción en la casilla de g/Lote.

NOTE: Once these calculations was finished, record the amounts obtained in the production order in the corresponding box

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A
Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

of g/Lot.

Adjuntar a la Orden de Producción: La etiqueta de identificación de área, equipo y materia prima.
Attach the label for the identification of areas, equipments, and raw materials to the Production Order.

OBSERVACIONES/OBSERVATIONS:



DESPEJE DE LINEA EN AREA DE DISPENSACION / LINE CLEARANCE IN DISPENSING AREA


PRODUCTO: / PRODUCT:	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC	CODIGO: / CODE:	400004768 / N.A	ORDEN DE TRABAJO: / WORK ORDER:	LOTE: / LOT:
PRODUCTO ANTERIOR: / PREVIOUS PRODUCT:		CODIGO: / CODE:		ORDEN DE TRABAJO: / WORK ORDER:	LOTE: / LOT:
TODO EL AREA Y EQUIPOS DEBEN ENCONTRARSE EN CONDICIONES OPTIMAS Y EL PERSONAL CON EL UNIFORME ADECUADO. ELEMENTOS DE SEGURIDAD, CUMPLIENDO CON TODAS LAS NORMAS DE BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA. / ALL AREA AND EQUIPMENT MUST BE IN OPTIMAL CONDITIONS AND PERSONAL WITH APPROPRIATE UNIFORM, SAFETY ELEMENTS, IN COMPLIANCE WITH ALL RULES OF GOOD MANUFACTURING PRACTICES					
AREA: / AREA		PROCESO: / PROCESS:		FECHA: / DATE:	HORA : TIME:
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / DESCRIPTION OF ACTIVITIES				SI/YES	NO/NO
ESTA EL AREA IDENTIFICADA CORRECTAMENTE / IS THE AREA IDENTIFIED CORRECTLY?					
ESTA EL AREA LIMPIA Y DESINFECTADA / IS THE AREA CLEAN AND SANITATION?					
ESTAN LAS MESAS LIMPIAS / IS THE TABLE CLEAN?					
ESTAN LAS CUCHARAS COMPLETAS Y LIMPIAS / ARE THE SCOOPS COMPLETE AND CLEAN?					
ESTAN LAS UTENSILIOS REQUERIDOS COMPLETOS Y LIMPIOS ARE THE UTENSILS REQUIRED COMPLETE AND CLEAN?					
LOS MATERIALES REQUERIDOS SE ENCUENTRAN EN EL AREA (AMARRES PLASTICOS, BOLSAS, SERVILLETAS ETC) / ARE THE MATERIAL REQUIRED IN THE AREA FOUND (PLASTIC TIES, BAGS, BOTTLES, ADHESIVE TAPE, NAPKINS, PENS, MARKERS ARE AVAILABLE ?					
ESTAN LAS BASCULAS COMPLETAS Y EN LA UBICACIÓN CORRECTA ARE THE SCALES COMPLETE AND THE CORRECT LOCATION?					
ESTAN LAS BASCULAS LIMPIAS / ARE THE SCALES CLEAN?					
LAS FECHAS DE CALIBRACION Y VERIFICACION RUTINARIA DE LAS BALANZAS SE ENCUENTRAN VIGENTE / THE DATES OF CALIBRATION AND ROUTINE VERIFICATION OF THE BALANCES ARE CURRENTLY VALID ?					
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES / DESCRIPTION OF ACTIVITIES				SI/YES	NO/NO
LAS FECHAS DE CALIBRACION DEL TERMOHIGROMETRO Y MAGNAHELIC SE ENCUENTRAN VIGENTE / THE CALIBRATION DATES OF THE THERMOMIGROMETER AND MAGNAHELIC ARE CURRENTLY VALID?					
EI MAGNAHELIC LLEGA A CERO AL ABRIR LA PUERTA DEL PESAJE THE MAGNEHELIC COMES TO ZERO BY OPENING THE DOOR OF THE AREA?					
LAS CONDICIONES AMBIENTALES SON LAS REQUERIDAS PARA EL PROCESO THE ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF THE AREA ARE AS REQUIERED FOR THE PROCESS?					
EXISTENTE DOCUMENTOS DEL PRODUCTO ANTERIOR EN EL AREA THERE ARE DOCUMENTS OF PREVIOUS IN THE AREA?					
ESTAN LOS EPP LISTOS PARA USO ARE THE PPE (PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT) READY TO USE?					
EXISTEN MATERIAS PRIMAS DEL LOTE ANTERIOR ARE THERE RAW MATERIALS OF PREVIOUS LOT PRESENT?					
ESTAN LAS MATERIAS PRIMAS BIEN IDENTIFICADAS Y RECIPIENTES LIMPIOS ARE THE RAW MATERIALS CORRECTLY IDENTIFIED AND THE CONTAINERS CLEAN?					
ESTAN LAS MATERIAS PRIMAS COMPLETAS PARA EL PRODUCTO A DISPENSAR ARE THE RAW MATERIALS COMPLETE FOR THE PRODUCT TO BE DISPENSED?					
OBSERVACIONES / OBSERVATIONS: _____					
REALIZADO POR / FECHA REALIZED BY / DATE					
VERIFICADO POR / FECHA VERIFIED BY / DATE					

COPIA VERDADERA

	IDENTIFICACIÓN DE AREAS/ IDENTIFICATION OF AREAS		
Area/ AREA: _____		FECHA/ DATE: _____	
DISPOSICION DISPOSITION: _____	USO USAGE: _____ SUCIO DIRTY: _____	PROCESO PROCESS: _____	
HORA INICIAL DISPENSACION: DISPENSING START TIME: _____ HORA FINAL DISPENSACION: DISPENSING END TIME: _____ PRODUCTO:/ PRODUCT: _____ VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC CODIGO: CODE No: 400004768 / N.A			
ORDEN DE TRABAJO: WORKING ORDER: _____		LOTE: LOT No: _____	
PRODUCTO ANTERIOR: PREVIOUS PRODUCT: _____		CODIGO: CODE No: _____	
ORDEN DE TRABAJO: WORKING ORDER: _____		LOTE: LOT No: _____	
REALIZADA POR: PERFORMED BY: _____		VERIFICADO POR:/ VERIFIED BY: _____	
OBSERVACIONES:/ OBSERVATIONS: _____			
F-SOP-0097-1 V00			

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

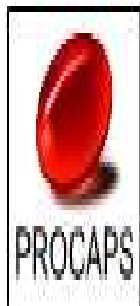

Código
Material:/
Material Code 400004768

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:/
Version: 10

Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

MEDICINA/MEDICINE

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

MÉTODO DE PREPARACIÓN/PREPARATION METHOD

1. OBJETIVO / OBJECTIVE:

Describir las etapas del método de preparación del producto: VITAMINA D3 50000 UI CBG. CÓDIGO: 400004768
To describe the stages of the Preparation Method of the product: VITAMIN D3 50000 IU SGC. CODE: 400004768

2. ALCANCE / SCOPE:

Este procedimiento se aplica cada vez que se prepare el producto: VITAMINA D3 50000 UI CBG. CÓDIGO: 400004768
This procedure applies whenever the product VITAMIN D3 50000 IU SGC. CODE: 400004768 is prepared.

3. REQUISITOS GENERALES / GENERAL REQUIREMENTS:

Lea las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el Proceso de Manufactura y síguelas en estricto orden:
Before starting the Manufacture Process, read the instructions described herein, and follow them in the strictest order:

3.1 PERSONAL / PERSONNEL:

- Durante todo el proceso aplique las Buenas Prácticas de Manufactura
- Apply the Good Manufacturing Practices during the entire process
- Leer cuidadosamente cada numeral de este procedimiento antes de realizar cualquier operación y asegurarse de comprender cada instrucción. De lo contrario dirigirse inmediatamente al Supervisor de Turno o Jefe de Área.
- Before starting any operation, carefully read each Numeral from this procedure, and make sure to understand every instruction, if not, address yourself to the Supervisor on duty, or to the Head of the Area.
- La persona debe utilizar el uniforme correspondiente: Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes y protector auditivo.
- The person must wear the corresponding adequate uniform: white overall, bonnet (hair cover), nose-mouth protector, disposable gloves, boots not slippery and hearing protection.
- Verificar el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área.
- Verify the clearance of line (area and equipment) and the environmental conditions in the area.

3.2 ÁREAS Y EQUIPOS / AREAS AND EQUIPMENTS: (Área de Medicina No.2 (A-2101) / Medicine Area No.2 (A-2101))

- Verificar que el Área este limpia y ordenada
- Verify the area to be clean and in order.
- Verificar las condiciones ambientales del área:
- Verify the environmental conditions in the area:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.020 (Negativo) pulg de agua - Máximo: 0.150 (Negativo) Pulg de agua.
PRESSURE DIFFERENTIAL: : Minimum: 0.020 (Negative) Inches of water - Maximum: 0.150 (Negative) Inches of water.

- TEMPERATURA / TEMPERATURE: 23.0°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 21.0°C Máximo: 25.0°C.
Alarm Limits: Minimum: 21.0°C Maximum: 25.0°C.
Límites de Acción: Mínimo: 19.0°C Máximo: 27.0°C.
Action Limits: Minimum: 19.0°C Maximum: 27.0°C.


- HUMEDAD RELATIVA / RELATIVE HUMIDITY: 60 %

Límite de Alarma: Mínimo: 58% Máximo: 62%.
Alarm Limit: Maximum: 62%.
Límite de Acción: Máximo: 65%.

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

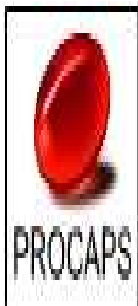

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/
Version: 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Action Limit: Maximum: 65%.

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:
(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)

Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.
(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

Inicio de proceso/Start Process:

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/Final Process

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Utilizar luz de Sodio en todas las etapas del proceso. Si / Yes _____ No _____

Use Sodium light during all the stages of the process.

Verificar las condiciones de limpieza, sanitización e identificación de equipos. Estos equipos deben ser en acero inoxidable, estar limpios y secos.

Verify the Cleaning, Sanitation, and Equipment Identification conditions. These equipments must be in stainless steel and be clean and dry.

Equipos / Equipments:

Descripción Equipo/ Equipment Description	Equipos Utilizados / Equipment Used	Fecha de Calibración / Calificación Date of calibration / Qualification	Próxima Fecha de Calibración / Calificación Next date of calibration / Qualification
Tanque Reactor Código TREA 35 / Reactor Tank. Code TREA 35			
Recipiente de 3 L de capacidad / Container of 3 L capacity			
Agitador Mecánico / Mechanical Agitator			
Tanque de Almacenamiento de Medicina/ Storage tank of Medicine			

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

PROCEDIMIENTOS PARA PLANTA SOFTGEL / PROCEDURES FOR THE SOFTGEL PLANT

* Despeje de Línea. Código INST-0109

* Line clearance. Code No. INST-0109

* Identificación de Área y / o Equipo Código: INST-0073


* Identification of Areas and/ or Equipments. Code No. INST-0073

* Limpieza y Sanitización de Tanques Reactores y Tanques de Almacenamiento Código: INST-0065

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

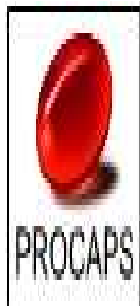

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

* Cleaning and Sanitation of the Reactor and Storage Tanks Code: INST-0065

* Operación de Tanques Reactores de Fabricación de Medicina. Código: INST-0063

* Operation Tanks Reactor Manufacturing Medicine. Code INST-0063

* Limpieza y Sanitización de Áreas de Manufactura. Código INST-0064

* Cleaning and Sanitation of the Manufacturing areas. Code INST-0064

3.3. IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION:

PRODUCTO ANTERIOR (PREVIOUS PRODUCT)			
Nombre del producto anterior (Previous product name)			
Código del producto anterior (Previous product code)	Lote / OP (Lot / PO)	Verificado por (Verified by)	Fecha (Date)

Adjunte a la Orden de Producción la etiqueta de identificación de área, equipos y materias primas.

Attach the label for the identification of Area, equipments and Raw Materials, to the Production Order.

4. REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión De Desviaciones Del Sistema De Calidad.

(Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management)

5. APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC) PARA INICIAR PREPARACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE VITAMINA D.

5. QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL TO START VITAMIN D SOLUTION PREPARATION.

Notifique al inspector de AC para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso.

Request verification by the QA inspector of the following steps before starting the process.

5.1	Verifique que las áreas estén limpias, se cumplan las condiciones ambientales y luz de sodio. Verify that the areas are clean, environmental conditions are met and Sodium light.	√
5.2	Verifique que los operarios tengan los elementos de protección requeridos. Verify that the operators are wearing the required personal protection equipment.	
5.3	Verifique que las materias primas requeridos para el proceso estén disponibles. Verifique los números de registro de las materias primas contra las registradas en la orden de producción. Verify that the proper raw materials are available. Confirm each Raw Material Receiving No. with the list of this production order.	
5.4	Verifique que los equipos estén limpios y secos. Verify that the equipments are clean and dry.	

APROBACIÓN FINAL DE AC QA FINAL APPROVAL	FIRMA SIGNATURE	FECHA/HORA DATE/TIME

6. PROCEDIMIENTO / PROCEDURE:

- Verificar y registrar la cantidad de las materias primas y su registro antes de usar según la Orden de Fabricación.

- Verify and record the amount of the raw materials and register before usage, as the Manufacture Order.

MATERIA PRIMA/ RAW MATERIAL	CODIGO CODE No.	mg/capsula- mg/capsule	g/Lote g/Lot	REGISTRO REGISTER
CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM)	100006221	52.50	5250.0	

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/
Version: 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

ALLRAC-A-TOCOPHEROL	100006081	0.56	56.0	
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	100003030	221.94	22,194.0	
	Dosificación Dosage	275.000		

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

NITROGENO U.A.P GRADO 5/ NITROGEN U.H.P GRADE 5	Código No. 100003374 (Code No. 100003374)
Grado de Nitrógeno utilizado / Nitrogen Grade used	
Número de Lote del Nitrógeno / Nitrogen Lot Number	

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

FABRICACIÓN DEL PRODUCTO (Área de Medicina No.2 (A-2101))
MANUFACTURE OF THE PRODUCT (Medicine Area No.2 (A-2101))

Verificar que el calentamiento del tanque reactor TREA35 no haya sido encendido (Registre la temperatura al inicio y final del proceso).
Verify that the heater of the reactor tank TREA35 is not turned on (Record the temperature at start and at end the process).

INICIO DEL PROCESO/ START TIME	TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE (°C)	REALIZADO POR PERFORMED BY	VERIFICADO POR VERIFIED BY

FINAL DEL PROCESO/ END TIME	TEMPERATURA (°C) TEMPERATURE (°C)	REALIZADO POR PERFORMED BY	VERIFICADO POR VERIFIED BY

Purga inicial del tanque reactor (TREA 35): verificar que la válvula de despresurización del tanque reactor se encuentre semi-abierta e inyectar Nitrógeno, manteniendo la presión de suministro del cilindro en 5 ± 1 psi por 5 ± 1 minutos, al finalizar la adición de Nitrógeno cierre nuevamente la válvula.

Initial purge of the reactor tank (TREA 35): verify valve for depressurizing the reactor tank is semi-open and injected Nitrogen maintaining pressure cylinder supply at 5 ± 1 psi for 5 ± 1 minutes, at the end of the addition of nitrogen close the valve again.

Válvula de Despresurización semi-abierta Si/No (Depressurization valve semi-open Yes/No) _____

Presión del cilindro de Nitrógeno (psi) (Pressure in the Nitrogen cylinder (psi)) _____

Tiempo de Adición con Nitrógeno/ Addition Time with Nitrogen: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

6.1 Adicionar la cantidad de Triglycerides, Medium Chain contenida en la bolsa (A) al tanque principal (TREA 35). Purgar con Nitrógeno manteniendo la presión de suministro del cilindro en 5±1 psi por 5 ± 1 minutos, al finalizar la adición de Nitrógeno cierre nuevamente la válvula. Iniciar agitación a 390 r.p.m.

6.1 Add the amount of Triglycerides, Medium Chain of the bag (A) to the main tank (TREA 35), purging with Nitrogen maintaining pressure cylinder supply at 5±1 psi for 5 ± 1 minutes, at the end of the addition of nitrogen close the valve again. Start agitation at 390 r.p.m.

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:/
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/
Version: 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

MATERIA PRIMA/ RAW MATERIAL	CODIGO CODE No.	g/Lote g/Batch
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN	100003030	

Presión del cilindro de Nitrógeno (psi) (Pressure in the Nitrogen cylinder (psi)) _____

Tiempo de Adición con Nitrógeno/ Addition Time with Nitrogen: _____

Velocidad Inicial del Agitador / Initial speed stirrer: _____

Velocidad Final del Agitador / Final speed stirrer: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

6.2 Adicionar la cantidad de Triglycerides, Medium Chain contenida en la bolsa (B) a un recipiente de 3 L de capacidad, luego adicionar la cantidad requerida de ALLRAC-A-TOCOPHEROL, lavar los contenedores de esta vitamina con mínimo 3 porciones de Triglycerides, Medium Chain, contenido en la bolsa (C) hasta agotarlo. Transferir los lavados al recipiente de 3 L de capacidad. Mantener la velocidad de mezclado a 390 r.p.m utilizando un agitador mecánico por 10 minutos.

6.2 Add the amount of Triglycerides, Medium Chain of the bag (B) a container of 3 L capacity, and add the required amount of ALLRAC-A-TOCOPHEROL, wash the containers of this vitamin with at least 3 portions of Triglycerides, Medium Chain, contained in the container (C) until exhausted. Transferring the rinsings to the container of 3 L capacity. Maintain the mixing speed to 390 r.p.m using a mechanical agitator during 10 minutes.

MATERIA PRIMA/ RAW MATERIAL	CODIGO CODE No.	g/Lote g/Batch	Realizado por/Fecha Performed by/Date	Verificado por/Fecha Verified by/Date
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN (Bolsa B)/(Bag B)	100003030	1,000.0		
ALLRAC-A-TOCOPHEROL	100006081	56.0		
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN (Bolsa C)/(Bag C)	100003030	1,000.0		

Velocidad Inicial del Agitador / Initial speed stirrer: _____

Velocidad Final del Agitador / Final speed stirrer: _____

Tiempo de mezcla / Mixing time: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

Número Total de Recipientes con ALLRAC-A-TOCOPHEROL / (Total number of Containers with ALLRAC-A-TOCOPHEROL)	Realice Mínimo 3 enjuagues con Triglycerides a cada Recipiente con ALLRAC-A-TOCOPHEROL. Número total de lavados por cada recipiente con ALLRAC-A-TOCOPHEROL (Perform a minimum of 3 rinses with Triglycerides in each container with ALLRAC-A-TOCOPHEROL. Total number of rinses per each containers with ALLRAC-A-TOCOPHEROL)	Realizado por/Fecha Performed by/Date	Verificado por/Fecha Verified by/Date

6.3 Transferir al tanque reactor (TREA 35), la mezcla obtenida en el paso 6.2, lavar el recipiente de 3 L de capacidad con varias porciones de Triglycerides, Medium Chain, contenido en la bolsa (D) hasta agotarlo. Adicionar los lavados al tanque reactor (TREA 35). Mantener la velocidad de mezclado a 390 r.p.m por 10 minutos.

6.3 Transferring to reactor tank (TREA 35), the solution obtained in step 6.2, wash the containers of 3 L capacity with several portions of Triglycerides, Medium Chain, contained in the bag (D) until exhausted. Add the rinsings to reactor tank (TREA 35). Maintain the mixing speed to 390 r.p.m during 10 minutes.

MATERIA PRIMA/ RAW MATERIAL	CODIGO CODE No.	g/Lote g/Batch	Realizado por/Fecha Performed by/Date	Verificado por/Fecha Verified by/Date
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN (Bolsa D)/(Bag D)	100003030			

Velocidad Inicial del Agitador / Initial speed stirrer: _____

Velocidad Final del Agitador / Final speed stirrer: _____

Tiempo de mezcla / Mixing time: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

6.4 Adicionar al tanque reactor (TREA 35), la cantidad requerida de CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM), lavar los contenedores de esta vitamina con mínimo 3 porciones de Triglycerides, Medium Chain, contenido en la bolsa (E) hasta agotarlo. Transferir los lavados al tanque reactor (TREA 35). Mantener la velocidad de mezclado a 390 r.p.m.

6.4 Add to reactor tank (TREA 35), the required amount of CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM), wash the containers of this vitamin with at least 3 portions of Triglycerides of Triglycerides, Medium Chain, contained in the bag (E) until exhausted. Transferring the rinsings to reactor tank (TREA 35). Maintain the mixing speed to 390 r.p.m.

Adición del CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM) FECHA :AAAA-MM-DD _____
Addition of CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM) DATE

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/
Version: 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

MATERIA PRIMA/ RAW MATERIAL	CODIGO CODE No.	g/Lote g/Batch
CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM)	100006221	
TRIGLYCERIDES, MEDIUM CHAIN (Bolsa E)/(Bag E)	100003030	

Velocidad Inicial del Agitador / Initial speed stirrer: _____

Velocidad Final del Agitador / Final speed stirrer: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

Número Total de Recipientes con CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM) / (Total number of Containers with CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM))	Realice Mínimo 3 enjuagues con Triglycerides a cada Recipiente con CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM). Número total de lavados por cada recipiente con CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM) /(Perform a minimum of 3 rinses with Triglycerides in each container with CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM). Total number of rinses per each containers with CHOLECALCIFEROL CONCENTRATE (OILY FORM))	Realizado por/Fecha Performed by/Date	Verificado por/Fecha Verified by/Date

6.5 Purgar con Nitrógeno el tanque principal manteniendo la presión de suministro del cilindro en 5 ± 1 psi por 5 ± 1 minutos. al finalizar la adición de Nitrógeno cierre nuevamente la válvula.

6.5 Purge with Nitrogen the main tank maintaining pressure cylinder supply at 5 ± 1 psi for 5 ± 1 minutes, at the end of the addition of Nitrogen close the valve again.

Presión del cilindro de Nitrógeno (psi) (Pressure in the Nitrogen cylinder (psi)) _____

Tiempo de Adición con Nitrógeno/ Addition Time with Nitrogen: _____

Velocidad Inicial del Agitador / Initial speed stirrer: _____

Velocidad Final del Agitador / Final speed stirrer: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR SUPERINTENDENTE / VERIFIED BY SUPERINTENDENT: _____ FECHA / DATE: _____

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

6.6 Mezclar la solución del tanque (TREA 35) a 390 r.p.m por 20 minutos.

6.6 Mix the solution tank (TREA 35) at 390 r.p.m for 20 minutes.

Velocidad Inicial del Agitador / Initial speed stirrer: _____

Velocidad Final del Agitador / Final speed stirrer: _____

Tiempo de mezcla / Mixing time: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

6.7 Mezclar la solución final en tanque principal (TREA 35) a 390 r.p.m por una hora.

6.7 Mix the final solution in the main tank (TREA 35) at 390 r.p.m for one hour.

Velocidad Inicial del Agitador / Initial speed stirrer: _____

Velocidad Final del Agitador / Final speed stirrer: _____

Tiempo de mezcla / Mixing time: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

6.8 Terminado el tiempo de mezclado, apague el agitador y filtre con ayuda de Nitrógeno a través de malla 80 US Std o malla 100 US Std, la obtenida a tanques de almacenamiento.

6.8 Finished mixing time, turn off the agitator and filter using Nitrogen Through a mesh No. 80 US Standard or No. 100 US Standard, obtained medicine to storage tanks.

Verifique que la malla filtrante esté en buen estado. Marque con una X el filtro usado.

(Verify that the mesh is in good condition. Mark with an X the mesh used)

Filtro usado (Mesh used)		¿Está en buen estado? (Is it in good shape?)	
Malla 80 US Std (Mesh No. 80 US Standard)		Sí (Yes)	
Malla 100 US Std (Mesh No. 100 US Standard)		No (No)	

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

6.9 Inyectar Nitrógeno por espacio de 15 segundos, cerrar herméticamente el tanque y someter la medicina obtenida a un proceso de desaireación natural dejándola en reposo por no menos de 3 horas.

6.9 Inject Nitrogen for 15 seconds, hermetically shut close the tank and subjecting the obtained medicine deaeration process naturally, allowing to stand for not less than 3 hours.

Tiempo de Adición con Nitrógeno/ Addition Time with Nitrogen: _____

Tiempo de desaireación natural / Natural deaeration time: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____


6.10 Notifique al supervisor en turno para tomar la muestra de la solución en proceso de la siguiente manera:

Purgar la válvula del tanque como mínimo tres veces. Para ello, a través de la válvula se toman 3 porciones de la solución de aproximadamente un kilo (1 Kg) cada una y se regresan por la parte superior del tanque seguidamente, tomar las muestras de la solución del tanque de almacenamiento, a través de la válvula de salida del tanque. Finalizado este procedimiento inyecte Nitrógeno por espacio de 15 segundos y

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

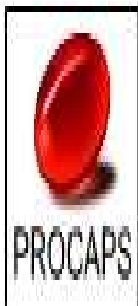

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión:/
Version: 10

Vigencia:/
Effective Date:

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

cierra herméticamente el tanque.

Registre en el paso 6.10.3, el peso neto de las muestras tomadas en proceso. Especifique el número y la cantidad de solución utilizada en cada muestra.

6.10 Notify the supervisor on duty to take the solution sample in process as follows:

Purge tank valve at least three times. For this, through the valve take 3 portions of about 1 kilo (1Kg) of solution each one and return it for the upper tank, then take the samples of the solutions of storage tanks through the outlet valve of the tank. Finalized this procedure inject Nitrogen for 15 seconds and tightly close the tank.

Record in step 6.10.3, the weight of samples taken in-process. Specify number of samples and amount used per sample.

# PURGA / # PURGE	CANTIDAD / QUANTITY	REALIZADO POR / REALIZED BY	VERIFICADO POR SUPERINTENDENTE / VERIFIED BY SUPERINTENDENT
1	1 KG		
2	1 KG		
3	1 KG		

Para el muestreo de la solución el supervisor en turno debe verificar los siguientes pasos:

For sampling the solution the Supervisor on duty must verify the following steps:

6.10.1. Tome una muestra de ~ 60 g de solución a la salida de la válvula del tanque en un recipiente para muestras, llévela al Laboratorio de Control de Calidad para realizar los análisis de valoración y descripción. Registre la cantidad muestreada como S1 en la siguiente tabla.

6.10.1. Collect a ~ 60 g sample of solution directly from the tank outlet valve, take it to the Quality Control Laboratory to test assay and Description of the solution and record the sampled amount as S1 in the following table.

6.10.2. Tome una contramuestra de ~ 60 g de solución a la salida de la válvula del tanque en un recipiente para muestras y registre la cantidad muestreada como S2 en la siguiente tabla.

La muestra tomada se utilizará para análisis de Vitamina D3 y Vitamina E en proceso. Los resultados de valoración para Vitamina D3 se requieren antes de iniciar el encapsulado. La valoración de Vitamina E se realizará pero el resultado NO es necesario para iniciar el encapsulado.

6.10.2. In a second clean plastic container collect a ~ 60 g sample of the solution directly from the storage tank outlet valve to be used for counter sample and record the sampled amounts as S2 in the following table.

The sample taken will be used for analysis of Vitamin D3 and Vitamin E in process. Vitamin D3 assay results is required before starting encapsulation. Vitamin E assay will be tested, but the result is NOT required before starting encapsulation.

6.10.3. Reporte las cantidades muestreadas en la siguiente tabla.

6.10.3. Report the sampled amounts in the following table.


	Peso Bruto Gross weight	Unidad de medida Units	Peso tara Tare Weight	Unidad de medida Units	Peso neto Net weight	Unidad de medida Units	Peso neto Net weight	Unidad de medida Units	Realizado por/Fecha Performed by/Date	Verificado por/Fecha Verified by/Date
S1										
S2										

6.11 Determine el peso bruto de la solución:

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

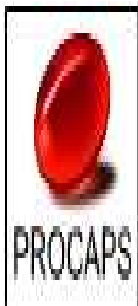

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión:/
Version: 10

Vigencia:/
Effective Date:

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

6.11 Determine the gross weight of the solution:

Peso Bruto Gross weight	Unidad de medida Units
W1=	

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____

FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____

FECHA/DATE: _____

6.12 Mantenga la solución almacenada en el área de medicina hasta la aprobación de aseguramiento de calidad.

6.12 Store the Solution in Medicine Area until QA approval.

REPORTAR CÓDIGO DE ÁREA UTILIZADA/REPORT AREA CODE USED: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____

FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____

FECHA/DATE: _____

PESO NETO MEDICINA

NET WEIGHT MEDICINE

6.13 Verificar el peso de la medicina obtenida.

6.13 Verify the weight of the medicine obtained.

PESO TEÓRICO: Ver peso teórico total de la columna Cantidad requerida./UM. de la orden de producción

THEORETICAL WEIGHT: See, Total Theoretical Weight of the column. Required Quantity/UM of the production order.

TANQUE 1/ TANK 1: Peso Tara/Tare weight: _____ Kg - Peso Bruto/Gross weight: _____ Kg - Peso Neto/Net weight _____ Kg

Peso Neto de la medicina = Peso Tanque con medicina o Peso Bruto - Peso Tanque Vacio o Peso tara

Net weight medicine = Weight Tank with Medicine or gross weight - Weight Tank Empty or tare weight

Nota: Anexar al Bath Record las etiquetas de vacio limpio de los tanques de almacenamiento utilizados.

Note: attach to Batch Record, the labels of clean empty of storage tanks used.

Peso Neto Total = Suma de los Pesos Netos individuales

Total Net weight = adding of single net weights

PESO NETO TOTAL /TOTAL NET WEIGHT _____ Kg

RENDIMIENTO (Peso Neto / Peso Teorico x 100)/ YIELD (Net weight / Theoretical Weight x 100): _____ % (90%-100%)

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____

FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____

FECHA/DATE: _____

Especificación: 90%-100%. Notifique al jefe en turno si el rendimiento esta por fuera de estas especificaciones.

Specification: 90%-100%. If the Yield is Out of Specifications, notify the supervisor on duty.

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____

FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____

FECHA/DATE: _____

6.14 Verifique que toda la información de este método este completa y registre la hora en que se finalizó el proceso.

6.14 Verify that all information is complete and record processing finish time.

Nota: La medicina puede ser almacenada por no más de 192 horas antes de ser encapsulada.

Note: Medicine can be stored by no more than 192 hours before to be encapsulated.

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:/
Material Code 400004768

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:/
Version: 10

Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

HORA EN LA QUE FINALIZÓ EL PROCESO/TIME FINISH PROCESS: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ FECHA/DATE: _____

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

NO USE LA SOLUCIÓN HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE AC.
DO NOT USE THE SOLUTION UNTIL QA APPROVAL IS OBTAINED.

APROBACIÓN DE AC / QA APPROVAL:

FIRMA / SIGNATURE: _____ FECHA-HORA / DATE-TIME: _____

Destruya la cantidad de medicina remanente en las tuberías y el filtro y registre en el Acta de Destrucción. Esta operación debe ser supervisada por Aseguramiento de Calidad.
Destroy the amount of medicine remaining in pipes and filter and record in the Destruction act. This operation must be supervised by Quality Assurance.

OBSERVACIONES: (Fabricar siguiendo los pasos descritos en el método, si se cambia algún paso, justificar porque no se realiza como está descrito: Cambios en la velocidad de agitación, cambios en tiempo de mezcla, cambios en el tiempo de desaire, etc.)

OBSERVATIONS: (Manufacture following the steps described in the Method, if any is changed, justify why it is not performed as described: changes in the agitation velocity, changes in the mixing time, changes in the deaeration time, etc.)

COPIA VERDADERA

		CHECK LIST LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE TANQUE REACTOR CHECK LIST CLEANING AND SANITIZATION OF REACTOR TANK			
Producto Proceso Product Proces		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
Codigo Code		400004768 / N.A	Lote Batch	Orden Order	
Producto Anterior Previous Product					
Codigo Code			Lote Batch	Orden Order	
Producto en campaña (Marque con "✓") Product in campaign (Check with "✓")		SI / YES ☐ NO / NOT ☐	Marque la posición del lote de la campaña. Mark the position of the campaign batch.		Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch
Fecha / Hora de Inicio de proceso Date / Time of process start			Realizado por Made by		Revisado por SUP / AC Reviewed by SUP / AC
Limpieza del Equipo (Desensamblar las piezas del equipo según las actividades descritas en el Instructivo INST-0065 - Limpieza y Sanitización de Tanques Reactores y Tanques de Almacenamiento) Equipment Cleaning (Disassemble the equipment parts according to the activities described in Instruction INST-0065 - Cleaning and Sanitization of Reactor Tanks and Storage Tanks).					
1.LIMPIEZA DEL EQUIPO (Desmontar las piezas del equipo según las actividades descritas en el instructivo INST-0065 -Limpieza y sanitización de tanques rectores) 1.CLEANING OF THE EQUIPMENT (Disassemble the pieces of the equipment, according to the activities described in the instructions INST-NST-0065 -Cleaning and sanitizing of recator tank					
2.SOLUCIONES Y AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 2. CLEANING AND DISINFECTION SOLUTIONS AND AGENTS					
2.1.Selecccionar la solución detergente para la limpieza (Marque con "✓") 2.1.Select the detergent solution for cleaning (Mark with "✓")					
Probio ☐ Liquinox ☐ Solucion Detergente al 1% ☐					
SOLUCIÓN USADA USED SOLUTION	MARQUE CON "✓" LA CONCENTRACION USADA MARK WITH "✓" THE CONCENTRATION USED	FECHA DE FABRICACIÓN MANUFACTURING DATE	FECHA DE VENCIMIENTO EXPIRATION DATE	REVISADO POR FECHA (SUP/AC) REVIEWED BY DATE (SUP/AC)	
2.2 Solución Detergente 2.2 Detergent Solution	1% ☐				
2.3.Solución de alcohol 2.3.Alcohol solution	70% ☐				
3.LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN (Tiempos de acción para agentes de limpieza y desinfección) 3. CLEANING AND SANITIZATION (Action times for cleaning and disinfection agents)			TIEMPO DE CONTACTO CONTACT TIME	HORA INICIAL START TIME	HORA FINAL END TIME
3.1.Humedecer un paño con solución detergente al 1 % refriegue cada una de las partes del equipo . 3.1.Moisten a cloth with a 1% detergent solution and scrub each part of the equipment.			10-15 minutos (minutes)		
3.2.Humedecer un paño con alcohol al 70% y aplicar sobre las partes y superficie del equipo 3.2.Moisten a cloth with 70% alcohol and apply to the parts and surface of the equipment			10-15 minutos (minutes)		
4.LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN (Enjuagues en los procesos de limpieza y desinfección) CLEANING AND SANITIZATION (Rinses in the cleaning and disinfection processes)					
4.1. Tipo de agua usada en en los enjuagues de las partes de la maquina refregadas con solución detergente (Marque con "✓") 4.1.Type of water used in the rinses of the parts of the machine scrubbed with detergent solution (Mark with "✓")			Agua potable Drinking water	☐	
4.2. Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes de la maquina sanitizadas (Marque con "✓") 4.2.Type of water used to rinse the sanitized parts of the machine (Mark with "✓")			Agua purificada Purified water	☐	
REALIZADO POR/FECHA /HORA (OPERADOR) REALIZED BY /DATE/ HOUR (OPERATOR)				REVISADO POR /FECHA/HORA (SUP/AC) REVIEWED BY / DATE/ HOUR (SUP/AC)	
NOTA: La finalización del proceso de limpieza se da con la revisión y aprobación por el superintendente, inspector o monitor de calidad. NOTE: Completion of the cleaning process is upon review and approval by the superintendent, inspector or quality monitor.					
Convenciones Actividades AC : Personal de calidad / SUP : Superintendente Conventions Activities AC : Quality Personnel / SUP : Superintendent					

 CHECK LIST LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE TANQUE REACTOR CHECK LIST CLEANING AND SANITIZATION OF REACTOR TANK								
Producto Proceso Product Proces		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC						
Codigo Code		400004768 / N.A		Lote Batch		Orden Order		
Producto Anterior Previous Product								
Codigo Code				Lote Batch		Orden Order		
Producto en campaña (Marque con "✓") Product in campaign (Check with "✓")		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		Marque la posición del lote de la campaña. Mark the position of the campaign batch.		Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch		
Fecha / Hora de Inicio de proceso Date / Time of process start				Realizado por Made by		Revisado por SUP / AC Reviewed by SUP / AC		
Limpieza del Equipo (Desensamblar las piezas del equipo según las actividades descritas en el Instructivo INST-0065 - Limpieza y Sanitización de Tanques Reactores y Tanques de Almacenamiento) Equipment Cleaning (Disassemble the equipment parts according to the activities described in Instruction INST-0065 - Cleaning and Sanitization of Reactor Tanks and Storage Tanks).								
5. Lista de Chequeo Inspección de la limpieza: La inspección final de la limpieza es realizada por el superintendente en turno, o el personal de calidad. Revisar la ausencia de residuos visibles del producto anterior, capsulas, la ausencia de restos de las soluciones de limpieza y olores extraños en las siguientes partes de la máquina. Marque con "✓" cumple o no cumple, si no aplica cierre el espacio con guion (-) 5.Cleaning leaning inspection checklist: The final cleaning inspection is performed by the superintendent, or quality person. Check the absence of visible residues of the previous product, capsules, the absence of remains of cleaning solutions and strange odors in the following parts of the machine. Mark with "✓" meet or does not meet, if it does not apply, close the space with a hyphen (-)								
1	Realiza limpieza con el equipo desensamblado (Marque con "✓") Performs cleaning with the equipment disassembled (Mark with "✓")			SI / YES ☐ NO / NOT ☐				
2	Utiliza aire comprimido y lampara para la verificación y limpieza del equipo (Marque con "✓") Use compressed air and lamp forequipment checking and cleaning (Mark with "✓")			SI / YES ☐ NO / NOT ☐				
Equipo Equipment		Cumple Meet	No cumple Does not meet	Equipo Equipment		Cumple Meet	No cumple Does not meet	
Tapa (manhole) Cover (manhole)				Estructura interna agitadores internal structure stirrers				Valvula de descarga Discharge valve
Tapa reactor Reactor cover				Propelas Propellers				Carcasa motor motor casing
Empaque manhole manhole packing				Orificio termocupla thermocouple orifice				Tapa superior agitador central Central agitator top cover
Raspadores scrapers				Paredes internas del tanque Internal walls of the tank				Orificio de descarga discharge hole
Emulsor emulsifier				Paredes externas del tanque External walls of the tank				Trampa de vacío vacuum trap
Realizado por / Fecha / Hora (Operador) Realized by / Date / Time (Operator)								
Revisado por/ Fecha / Hora (SUP / AC) Reviewed by / Date / Time (SUP / AC)								
NOTA: La finalización del proceso de limpieza se da con la revisión y aprobación por el superintendente, inspector o monitor de calidad. NOTE: Completion of the cleaning process is upon review and approval by the superintendent, inspector or quality monitor.								
Convenciones Actividades AC : Personal de calidad / SUP : Superintendente Conventions Activities AC : Quality Personnel / SUP : Superintendent								

COPIA VERDADERA

**DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE**

ÁREA /AREA		PROCESO /PROCESS	
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER

PRODUCTO ANTERIOR /PREVIOUS PRODUCT		LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	
CODIGO /CODE					

1.0	VERIFICACION DEL AREA /VERIFICATION OF THE AREA	SI /YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified			
1.2	Esta el area limpia y desinfectada / Is the area clean and disinfected			
1.3	Las rejillas, puertas, marcos de puertas, vidrios y ventanas, estan limpias/ The grates, doors, door frames, glass and windows are clean			
1.4	Las condiciones ambientales del area son las requeridas para el proceso/ The environmental conditions of the area are those required for the process			
1.5	Están los reservorios de tinta completamente limpios (Aplica proceso impresión de capsula blanda y encapsulado) / Are the ink reservoirs completely clean (Applies soft capsule printing and encapsulation process)			
1.6	Existe en el área o máquina blísteres vacios o materiales residuos del set up (Aplica proceso empaque Blister) / There are empty blisters or waste materials from the setup in the area or machine (Applies Blister packaging process)			
1.7	Asegúrese que las zonas de difícil acceso estén completamente limpias/ Make sure hard-to-reach areas are completely clean			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO /VERIFICATION OF THE EQUIPMENT	SI /YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified			
2.2	Esta el equipo limpio / Is the equipment clean			
2.3	Funciona el equipo correctamente / The equipment works properly			
2.4	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correctly installed, complete and in good condition.			
2.5	Los PLC, Panel View, sistema de visión, pantallas de configuración de los equipos, instrumentos y sistemas de controles en proceso, tiene información del proceso anterior / PLCs, Panel View, vision systems, equipment configuration screens, instruments and process control systems have information about the previous process.			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI /YES	NO	N.A
3.1	Existen documentos del producto anterior en el area / There are documents of the previous product in the area			
3.2	El proceso de limpieza y desinfección de area y equipo esta registrada en la bitacora / The cleaning and disinfection process of the area and equipment is recorded in the logbook.			
3.3	Las etiquetas de vacio limpio de los equipos estan completas y anexas al batch record / The clean vacuum labels of the equipment are complete and attached to the batch record.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / STAFF VERIFICATION	SI /YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal safeguard elements			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Proper and complete uniform			
4.3	Uniforme limpio sin pelusa, hilo, cabello y restos de etiqueta / Clean uniform free of lint, thread, hair and tag residue			
4.4	El uniforme contiene capsulas en los bolsillo, mangas,cuello o sitios que permitan el transporte de capsulas. / The uniform contains capsules in the pockets, sleeves, collar or places that allow the transport of capsules.			
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES /VERIFICATION OF MATERIALS AND TOOLS	SI /YES	NO	N.A
5.1	Existen materiales diferentes a los que se van a utilizar en el proceso / Exist differents materials to which are normally used in the process			

COPIA VERDADERA



DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE

ÁREA /AREA				PROCESO /PROCESS			
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC						
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER				
5.2	Los utensilios y materiales requeridos se encuentran en el área / The tools and materials required are in the area						
5.3	Las materias primas dispensadas corresponden con la orden de producción / Dispensed raw materials correspond to the production order						
5.4	La cantidad de materias primas dispensadas corresponden con la establecida en la orden de producción / The quantity of raw materials dispensed correspond to the production order						
5.5	Los materiales corresponden con la orden de empaque / The materials correspond to the packaging order						
5.6	La cantidad de materiales corresponden con la establecida en la orden de empaque / The quantity of materials correspond to the packaging order						
5.7	El registro de la tinta a usar para la impresión de las capsulas corresponde con la orden de producción / The register of the ink to be used for the capsule printing process corresponds to the production order						

REALIZADO POR /FECHA/HORA/
DONE BY /DATE/TIME

REVISADO POR /FECHA/HORA/
REVIEWED BY/ DATE/TIME

Observaciones/
Comments:

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA / FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA			PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA / VERIFICATION OF AREA	SI/YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified.			
1.2	Se han recogido las materias primas, materiales y granel caidos al piso. / Raw materials, materials and bulk materials that fell to the floor have been collected..			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO / VERIFICATION OF EQUIPMENT	SI/YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified.			
2.2	Los materiales utilizados (MP, GR, ME) remanentes del proceso han sido retirados del equipo / The materials used (MP, GR, ME) remaining from the process have been removed from the			
2.3	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correct installed, complete and in good condition			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI/YES	NO	N.A
3.1	Al finalizar el despeje de linea, no quedan en el area documentos del producto inmediatamente trabajado / At the end of the line clearance, no documents are in the area of immediately worked product.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / VERIFICATION OF PERSONAL	SI/YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal protection.			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Appropriate and complete uniform.			
4.3	Uniforme limpio / Clean uniform.			

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA /
FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA		PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		
		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER		
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES / VERIFICATION OF TOOLS AND MATERIALS	SI/YES	NO	N.A
5.1	Los utensilios han sido retirados / The tools have been removed.			
5.2	Los empaques, bolsas, tanques, canastas, bandejas usados por los materiales del producto trabajado han sido retirados / The packaging (MP, GR, ME), bags, tanks, baskets, trays used for the materials of the worked product have been removed.			
5.3	La cantidad de materiales remanentes ha sido registrada para la conciliación de producto / The amount of remaining material has been registered for the reconciliation of product.			
5.4	Los materiales (MP, GR, ME) remanentes han sido identificados y devueltos / The remaining materials (MP, GR, ME) have been identified and returned.			
5.5	Se han registrado las cantidades producidas en los documentos establecidos para tal fin / The quantities produced have been in the documents established for that purpose.			
5.6	Los productos resultado del proceso han sido retirados o se encuentran debidamente sellados y protegidos / The result of the process products have been recalled or are properly sealed and protected.			

REALIZADO POR
/FECHA/HORA/DONE BY
/DATE/TIME

REVISADO POR
/FECHA/HORA/REVIEWED BY
/DATE/TIME

Observaciones:
Observations:

MP: Materia prima/MP: Raw material ME: Material de empaque/ ME: Packaging material GR: Granel/GR: Bulk

COPIA VERDADERA



IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS / IDENTIFICATION OF AREAS

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) /PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
---	--

ÁREA /AREA	
------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								
NOTA: SI DESPUES DE 24 HORAS EL AREA NO HA SIDO UTILIZADA, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA NOTE: IF 24 HOURS LATER THE AREA HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.								
OBSERVACIONES /COMMENTS								



IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO /EQUIPMENT IDENTIFICATION

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) / PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
--	--

EQUIPO /EQUIPMENT	
----------------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR /DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR /VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								

NOTA 1: SI DESPUES DE 24 HORAS EL EQUIPO NO HA SIDO UTILIZADO, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA
NOTE 1: IF 24 HOURS LATER THE EQUIPMENT HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.

NOTA 2: UNA VEZ UTILIZADO EL EQUIPO, SE DEBE PROCEDER CON SU LIMPIEZA. ESTE NO DEBE PERMANECER MAS DE 8.5 HORAS SUCIO.
NOTE 2: ONCE THE EQUIPMENT IS USED, IT SHOULD BE PROCEEDED WITH ITS CLEANING. THIS SHOULD NOT STAY OVER 8.5 HOURS DIRTY

OBSERVACIONES /COMMENTS	
----------------------------	--

COPIA VERDADERA



ACTA DE SANITIZACION/**SANITIZATION ACT**

FECHA/**DATE**: _____

NOMBRE PRODUCTO/**PRODUCT NAME**:
VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

LOTE/**BATCH**: _____

AREAY/O EQUIPO/**AREA AND/OR /EQUIPMENT**

LAVADO REALIZADO POR /**WASHING PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

SANITIZACION REALIZADA POR/**SANITATION PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

JEFE DE AREA/ **HEAD OF AREA**

F-INST-0064-3 V02

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código Material: Material Code	400004768	Producto:/ Product:	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		
Código Anterior:/ Previous Code	N.A	Cantidad a Producir:/ Quantity to Produce	100,000	Molde/Punzon:/ Mold/Punch	5.5 OVAL
Dosificación:/ Dosage:	275 mg				
Grupo de artículo:/ Article Group	Z103001				
		Cantidad Base:/ Amount Base	100,000		
Lote Standard:/ Standard Lot:	100000	Forma Farmacéutica:/ Pharmaceutical Form:	CBG/SGC	Vida útil:/ Useful Life Time:	180 Dias/Days
		Versión:/ Version:	10		
		Vigencia:/ Effective Date:		Und. Medida del producto:/ Product Unit Measure:	un

ETIQUETAS/LABELS



FORMULACION DEL PRODUCTO /
PRODUCT FORMULATION

Usuario:/
User: MUTRIA

Código Material:/
Material Code 400008647 / 400005097
Código Anterior:/
Previous Code N.A

Producto:/
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287

Lote a
Producir:/
Lot to Produce: 90909.1

Código Producto:/
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:/
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:/
Version: 10

Vigencia:/
Effective Date:

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: g


Cód Material/ Material Code	Descripción Material/ Material Description	Cant. Requerida/ Required Amount	UM/ MU	Lote Logístico/ Logistics Lot	Potencia/ Potency	Peso Neto/ Net Weight	P.Bruto/ Gross Weight	Entregado/ Delivered	Fecha/ Date	Adicl. Solicitado/ Additional Requested	Lote Logístico/ Logistics Lot
100002318 / USRM012	FD & C RED No. 40 FD & C RED No. 40	35.0000	g								
653000130 / USRM006	PURIFIED WATER PURIFIED WATER	44.0000	kg								
100006352 / 100003013	GLYCEROL GLYCEROL	15.0000	kg								
100003012 /	GELATIN BP TYPE B 150 BLOOM GELATIN BP TYPE B 150 BLOOM	41.0000	kg								

OBSERVACIONES:/OBSERVATIONS:

AUTORIZACIONES/AUTHORIZATIONS		
Emitido Por/Issued by I & D/R&D	Revisado Por/Reviewed by Planta/Plant	Aprobado Por/Approved by Calidad/Quality
Firma:/Signature:	Firma:/Signature:	Firma:/Signature:
Fecha:/Date:	Fecha:/Date:	Fecha:/Date:

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

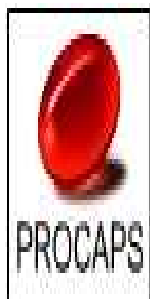

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

DISPENSACIÓN
DISPENSING

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

1. DESCRIPCIÓN:
1. DESCRIPTION:

Fluido viscoso a 60 °C, de color ROJO 287. Libre de material extraño.
Viscous fluid at 60 °C, RED 287. Free of foreign material.

2. VIDA ÚTIL:
2. SHELF LIFE:

24 HORAS
24 HOURS

3. CAMBIOS:
3. CHANGES:

Añadir la materia prima 100006352 GLYCEROL como material alternativo en los productos donde es utilizado el código 100003013 GLYCEROL. Con el nuevo código de material se incluye a DISAN S.A como proveedor y a MANUELITA OILS S.A. como fabricante, de acuerdo a lo presentado en la desviación número 200083897, según (SC-24-1024 - CC-000007625) 2025-01-17

Add raw material 100006352 GLYCEROL as an alternate material in products where code 100003013 GLYCEROL is used. With the new material code, DISAN S.A. is included as supplier and MANUELITA OILS S.A. as manufacturer, according to what is presented in deviation number 200083897, according to (SC-24-1024 - CC-000007625) 2025-01-17

Se reemplaza tanque reactor 15 (TREA 15) por el tanque reactor 30 (TREA 30) en el proceso fabricación de la gelatina ya que el tanque reactor TREA 15 va a salir de la operación, según (SC-25-609 - CC-000008471) 2025-12-12

Reactor tank 15 (TREA 15) is replaced by reactor tank 30 (TREA 30) in the gelatin manufacturing process because reactor tank TREA 15 will be taken out of operation, according to (SC-25-609 - CC-000008471) 2025-12-12

INSTRUCCIONES GENERALES:
GENERAL INSTRUCTIONS:

AREA DE DISPENSACIÓN
DISPENSING AREA

Leer las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y ságalas en estricto orden:
Before starting the process, read the instructions described herein, and follow them in the strictest order:

1. PERSONAL:
1. PERSONNEL:

- Ⓢ Durante todo el proceso aplicar las Buenas Prácticas de Manufactura
- Ⓢ Apply the Good Manufacturing Practices during the entire process.
- Ⓢ Leer cuidadosamente las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y ságalas en estricto orden. Asegurarse de comprender cada instrucción. De lo contrario dirigirse inmediatamente al Supervisor de Turno o Jefe de Área.
- Ⓢ Before starting the process, carefully read the instructions described herein, and follow them in the strictest order. Make sure to understand every instruction, if not, address yourself to the Supervisor on duty, or to the Head of the Area.
- Ⓢ La persona debe utilizar el uniforme correspondiente: Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes, y protector auditivo.
- Ⓢ The person must wear the corresponding adequate uniform: white overall, bonnet (hair cover), nose- mouth protector, disposable gloves, boots not slippery and hearing protection.


2 AREAS Y EQUIPOS: (Área de Dispensación No: _____)
2 AREAS AND EQUIPMENTS: (Dispensing Area No)

- Ⓢ Verificar que el Área y los Equipos a utilizar estén limpios.
- Ⓢ Verify that the area and the equipments to be used are clean.

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

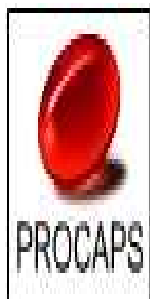

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

Verificar el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

Verify the clearance of the line (area and equipment) and the environmental conditions in the area:

- DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.020 (Negativo) pulg de agua - Máximo: 0.150 (Negativo) pulg de agua.

- PRESSURE DIFFERENTIAL: Minimum: 0.020 (Negative) Inches of water - Maximum: 0.150 (Negative) Inches of water.

- TEMPERATURA: 22.0°C.

- TEMPERATURE: 22.0°C.

Mínimo: 19.0°C Máximo: 25.0°C.

Minimum: 19.0°C Maximum: 25.0°C.

- HUMEDAD RELATIVA: 45 %

- RELATIVE HUMIDITY: 45 %

Mínimo: 40% Máximo: 50%.

Minimum: 40% Maximum: 50%.

Inicio de proceso/Start Process:

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:

(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)

Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.

(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/Final Process

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

- Seguir y ejecutar las actividades de dispensación de materias primas descritas en los siguientes procedimientos:

- Follow and perform the Raw Material Dispensing activities described in the following procedures:

* Despeje de línea en área de dispensación Código: SOP-0097

* Clearance of the Line in the Dispensing Area. Code No.: SOP-0097

* Limpieza, desinfección y sanitización del área de dispensación Código: SOP-0096

* Cleaning, Disinfection and Sanitation of the Dispensing Area. Code No.: SOP-0096

* Limpieza de cucharas utilizadas en el proceso de dispensación Código: SOP-0098

* Cleaning of Scoops used in the Dispensing Process. Code No.: SOP-0098

* Dispensación de materias primas en ordenes de fabricación Código: SOP-0104

* Dispensing of Raw Materials as per the Manufacture Orders. Code No.: SOP-0104

* Elementos de protección utilizados en el proceso de dispensación de materias primas Código: SOP-0080


* Protection Elements used in the Dispensing Process of Raw Materials. Code No.: SOP-0080

* Registro de temperatura, humedad y diferencial de presión en el área de dispensación Código: SOP-0086

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

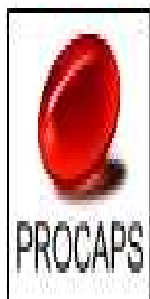

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

- * Register of Temperature, Humidity, and Pressure Differential in the Dispensing Area. Code No.: SOP-0086
- * Identificación y trazabilidad de materiales de empaque, materias primas, graneles y producto terminado. Código: SOP-0109
- * Identification and Traceability of packaging materials, Raw Materials, bulk, and finished product . Code No.: SOP-0109
- * Contenido de Hojas de Datos de Seguridad y Tarjetas de Emergencia. Código: SOP-0111
- * Content of Safety Data Sheets and Emergency Cards. Code No.: SOP-0111
- * Limpieza, manejo y almacenamiento de la bomba nebulizadora Código: SOP-0110
- * Cleaning, Operation, and Storage of the Nebulising Pump. Code No.: SOP-0110

REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión de Desviaciones Del Sistema De Calidad.

Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management).

3. APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC) PARA INICIAR DISPENSACIÓN DE MATERIAS PRIMAS. 3. QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL TO START RAW-MATERIAL DISPENSING

Notifique al inspector de AC para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso.

Before starting the process request the QA inspector to verify the following steps.

3.1 Verifique que las balanzas estén disponibles y limpias.

3.1 Verify that the scales are available and clean.

3.2 Verifique que las áreas estén limpias, las luces de sodio estén encendidas y que se cumplan las condiciones ambientales del paso 2.

3.2 Verify that the area is clean, that the sodium lights are on and the environmental conditions are met step 2.

3.3 Verifique que los materiales aprobados y no expirados estén disponibles para el proceso. Confirme número de registro de las materias primas comparando con la orden de producción de la etapa de preparación de gelatina.

3.3 Verify that the approved and unexpired raw materials are available for the process. Compare and confirm that each raw-material code is the same as listed on the production order of the gelatin stage.

3.4 Verifique que las balanzas tengan una fecha de calibración vigente.

3.4 Verify that the scales are within their calibration expiration dates.

APROBACIÓN FINAL DE AC / QA FINAL APPROVAL:

FIRMA / SIGNATURE: _____ HORA / TIME: _____ FECHA / DATE: _____

Adjuntar a la Orden de Producción la etiqueta de identificación de área, equipo y materia prima.


Attach the identification label of area, equipment, and raw material to the Production Order.

OBSERVACIONES/OBSERVATIONS: _____

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

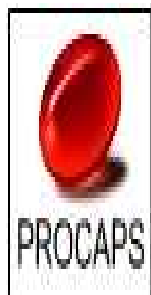

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

GELATINA
GELATINE

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

INSTRUCCIONES GENERALES
GENERAL INSTRUCTIONS

1. OBJETIVO:
1. OBJECTIVE:

Describir las etapas del método de preparación del producto GELATINA TIPO B 150 BLOOM, de Color ROJO 287
To describe the stages of the Preparation Method of the product GELATINE TYPE B 150 BLOOM, RED 287

2. ALCANCE:
2. SCOPE:

Este procedimiento se aplica cada vez que se prepare el producto GELATINA TIPO B 150 BLOOM, de Color ROJO 287
This procedure applies whenever the product GELATINE TYPE B 150 BLOOM, RED 287 is prepared.

3. REQUISITOS GENERALES:
3. GENERAL REQUIREMENTS:

Leer las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso de manufactura y síguelas en estricto orden:
Before starting the Manufacture Process, read the instructions described herein and follow them in the strictest order:

3.1 PERSONAL:
3.1 PERSONNEL:

- º Durante todo el proceso aplique las Buenas Prácticas de Manufactura
º Apply the Good Manufacturing Practices during the entire process
- º Leer cuidadosamente cada numeral de este procedimiento antes de realizar cualquier operación y asegurarse de comprender cada instrucción. De lo contrario dirigirse inmediatamente al Supervisor de Turno o Jefe de Área, antes de iniciar la operación.
º Carefully read each numeral in this procedure before starting any operation, and make sure to understand every instruction, if not, address yourself to the Supervisor on duty, or to the Head of the Area.
- º La persona debe utilizar el uniforme correspondiente: Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes, y protector auditivo.
º The person must wear the corresponding adequate uniform: white overall, bonnet (hair cover), nose- mouth protector, disposable gloves, boots not slippery and hearing protection.

REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión de Desviaciones Del Sistema De Calidad.
Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management).


3.2 AREAS Y EQUIPOS: Área de Gelatina
3.2 AREAS AND EQUIPMENTS: Gelatine Area

- º Verificar que el Área este limpia y ordenada
º Verify the area to be clean and in order
- º Verificar las condiciones ambientales del área:
º Verify the environmental conditions in the area:

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

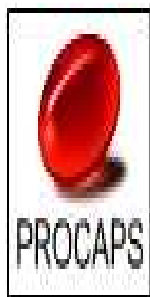

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

- DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.020 (Negativo) pulg de agua - Máximo: 0.150 (Negativo) pulg de agua.
- PRESSURE DIFFERENTIAL: Minimum: 0.020 (Negative) Inches of water - Maximum: 0.150 (Negative) Inches of water.

- TEMPERATURA: 23°C.
- TEMPERATURE: 23°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 21°C Máximo: 25°C.
Alarm Limits: Minimum: 21°C Maximum: 25°C.
Límites de Acción: Mínimo: 19°C Máximo: 27°C.
Action Limits: Minimum: 19°C Maximum: 27°C.

Inicio de proceso/Start Process:

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:
(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)

Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.
(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/Final Process

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

² Verificar las condiciones de limpieza, sanitización e identificación de equipos. Estos equipos deben ser en acero inoxidable, estar limpios y secos.

² Verify the cleaning, sanitation ,ad equipment identification conditions. These equipments must be in stainless steel, be clean and dry.


Seguir y ejecutar las actividades descritas en los procedimientos:
Follow and perform activities described in the following procedures:

INST-0073 Identificación de Área y/o Equipo
INST-0073 Identification of Areas and/ or Equipments
INST-0109 Despeje de Línea
INST-0109 Line Clearance
INST-0068 Preparación, Manejo y Almacenamiento de Soluciones de Limpieza y Desinfección.
INST-0068 Preparation, Handling and Storage of Cleaning and Disinfection Solutions.
INST-0064 Limpieza, Sanitización de Áreas de Manufactura
INST-0064 Cleaning and Sanitation of the Manufacture Areas
INST-0065 Limpieza y Sanitización de Tanques Reactores y Tanques de Almacenamiento
INST-0065 Cleaning and Sanitation of the Reactor and Storage Tanks
INST-0098 Lavado, Uso y Almacenamiento de Materiales e Implementos de Aseo
INST-0098 Washing, Use and Storage of Cleaning Materials and Implements

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

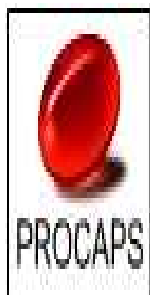

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Producto:/
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:/
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:/
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:/
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:/
Version: 10

Vigencia:/
Effective Date:

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: g

Equipos:
Equipments:

Descripción Equipo/ Equipment Description	Equipos Utilizados / Equipment Used
Tanque reactor melter TREA30 / Gelatin tank-melter TREA30	
Filtro de tela de nylon de 100 micras/ Nylon filter 100 microns	
Tanque de Almacenamiento de Gelatina/ Gelatin Storage Tank	G1: Peso Tara (Tare weight)

AREA UTILIZADA/USED AREA: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

3.3. IDENTIFICACIÓN / IDENTIFICATION:

PRODUCTO ANTERIOR (PREVIOUS PRODUCT)			
Nombre del producto anterior (Previous product name)			
Código del producto anterior (Previous product code)	Lote / OP (Lot / PO)	Verificado por (Verified by)	Fecha (Date)

Adjuntar a la Orden de Producción la etiqueta de identificación de área, equipo, materia prima.

Attach the label for identification of area, equipment, and raw material to the Production Order.

4. APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC) PARA INICIAR PREPARACIÓN DE DE GELATINA.

4. QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL TO START GELATIN PREPARATION.

Notifique al inspector de AC para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso.

Request verification by the QA inspector of the following steps before starting the process.

4.1	Que las áreas estén limpias y cumplan con la especificación de temperatura. The areas are clean and the temperature specification is met.	√
4.2	Verifique que los operarios tengan los elementos de protección requeridos. The operators are wearing the required personal protection equipment.	
4.3	Que los materiales apropiados para el proceso estén disponibles. Confirme número de registro de las materias primas comparando con la orden de producción. The proper raw materials are available and the receiving numbers have been confirmed by comparing to the numbers listed on the production order.	
4.4	Verifique que los equipos estén limpios y secos. Verify that the equipments are clean and dry.	
APROBACIÓN FINAL DE AC QA FINAL APPROVAL		FECHA/HORA DATE/TIME
FIRMA SIGNATURE		

5. PROCEDIMIENTO:


5. PROCEDURE:

- Verificar y registrar la cantidad de las materias primas y su registro antes de usar según la Orden de Fabricación.

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

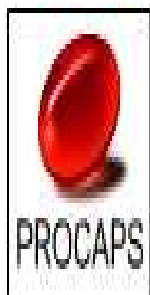

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

- Verify and record the amount of the raw materials and register before usage, as the Manufacture Order.

NOTA: En la fabricación de la gelatina producto GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 existen dos Códigos de Cubiertas de Gelatinas 400005097 o 400008647, los cuales tienen dos (2) opciones de código de materia prima GLYCEROL a usar : Código 100003013 GLYCEROL o 100006352 GLYCEROL. Reportar el código usado en la siguiente tabla:

NOTE: In the manufacture of gelatin product GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287 there are two Gelatin Cover Codes 400005097 o 400008647, which have two (2) options of raw material code GLYCEROL to use: Code 100003013 GLYCEROL or 100006352 GLYCEROL. Report the code used in the following table:

CÓDIGO DE MATERIA PRIMA "GLYCEROL" USADO DE ACUERDO CON LA ORDEN DE PRODUCCIÓN RAW MATERIAL CODE "GLYCEROL" USED ACCORDING TO THE PRODUCTION ORDER				
MATERIA PRIMA RAW MATERIAL	CÓDIGO CODE		Verificado por Verified by	Fecha Date
GLYCEROL				
MATERIA PRIMA/RAW MATERIAL	CÓDIGO CODE No.	g/Kg.	g/Lote g/Lot	REGISTRO REGISTER
GELATIN BP TYPE B 150 BLOOM	100003012	410.000		
GLYCEROL	100003013 100006352	150.000		
PURIFIED WATER (a)	653000130	440.000		

(a) NOTA: Pese 4 Kg de Agua Purificada, Código: 653000130, para preparar el color en el paso 6.1.1, previamente separada de la preparación de gelatina.

(a) NOTE: Weigh 4 Kg of Purified Water, Code: 653000130 for use in step 6.1.1, Preparation of the Gelatin Color Solution, previously separated from the preparation of gelatin.

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

FABRICACION DE GELATINA Área de Gelatina
GELATINE MANUFACTURE Gelatine Area

5.1 Programe temperatura T (°C) del Tanque reactor melter, TREA30, a 90 °C. Adicione al tanque reactor melter (TREA30) las siguientes materias primas, en el orden presentado:

5.1 Set the gelatin tank melter temperature (T (°C)), TREA30; at 90 °C. To the gelatin tank melter (TREA30) add the following raw materials in the stated

MATERIA PRIMA/RAW MATERIAL	CÓDIGO CODE No.	g/Lote g/Lot
PURIFIED WATER	653000130	
GLYCEROL	100003013 100006352	

Temperatura Inicial/Start Temperature: _____ °C

Reportar el punto de agua purificada usado/ Report the purified water point used: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

5.2 Mezcle a 50 r.p.m y espere hasta que el tanque melter de gelatina alcance una temperatura mayor o igual a 80 °C.


5.2 Mix at 50 rpm and wait until temperature reaches greater than or equal at 80 °C.

Temperatura Inicial/Start Temperature: _____ °C Temperatura Final/End Temperature: _____ °C

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

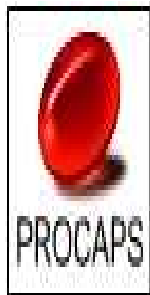

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

Velocidad Inicial de Agitación/Initial Agitation Speed: _____

Velocidad Final de Agitación/End Agitation Speed: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

5.3 Adicione la gelatina al Tanque reactor-melter TREA30 en forma continua y lenta, manteniendo las condiciones siguientes: Velocidad de mezclado: 50 r.p.m. Temperatura: mayor o igual a 80 °C. La temperatura de la mezcla descenderá por la adición de la gelatina, se debe esperar a que la temperatura alcance nuevamente 80 °C

5.3 Continually and slowly add the gelatin to the reactor melter tank (TREA30), maintaining the following conditions: Mixing Speed: 50 r.p.m.; Temperature: greater than or equal at 80 °C. The temperature of the mixing will decrease by the gelatin addition; wait until the temperature reaches 80 °C

MATERIA PRIMA/RAW MATERIAL	CODIGO CODE No.	g/Lote g/Lot
GELATIN, BP TYPE B 150 BLOOM	100003012	

Temperatura Inicial/Start Temperature: _____ °C Temperatura Final/End Temperature: _____ °C

Velocidad Inicial de Agitación/Initial Agitation Speed: _____

Velocidad Final de Agitación/End Agitation Speed: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

5.4 Cuando la gelatina alcance una temperatura mayor o igual 80° C continúe mezclando y calentado por 90 minutos.

5.4 When temperature reaches greater than or equal at 80 °C continue mixing and heating for 90 minutes.

Velocidad de mezclado: 50 r.p.m

Mixing Speed: 50 r.p.m

Temperatura T (°C): mayor o igual a 80 °C

Temperature (T (°C): greater than or equal at 80 °C

Velocidad Inicial de Agitación/Initial Agitation Speed: _____

Velocidad Final de Agitación/End Agitation Speed: _____

Temperatura Inicial/Start Temperature: _____ °C Temperatura Final/End Temperature: _____ °C

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

5.5 Una vez terminado el tiempo de mezcla adicionar a la gelatina el color preparado en el paso 6.1.4.

5.5 Once the mixing completed time add color to gelatin prepared in step 6.1.4.

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

5.6 Programe la temperatura del Melter a 65°C, mezclar a una velocidad de 50 r.p.m por 30 minutos, someter a una presión de vacío entre -30 y -20 pulgadas Hg, manteniendo la temperatura entre 65 ± 5 °C.

NOTA 1: La temperatura de la mezcla descenderá debido al vacío. Reportar la temperatura obtenida en la casilla de Temperatura final, la cual debe estar entre 65 ± 5°C.


NOTA 2: Si es necesario, registre el tiempo adicional para alcanzar esta temperatura: 65 ± 5 °C.

5.6 Set the tank reactor melter temperature to 65 °C, mix at a speed of 50 r.p.m for 30 minutes, subjected to a vacuum pressure of -30 to -20 inHg, maintaining the temperature at 65 ± 5 °C.

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

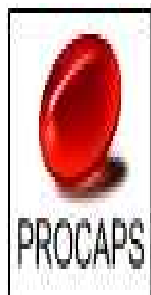

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 IU CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

NOTE 1: The temperature of the mixing decrease by the vacuum. Record the temperature obtains in the End temperature box which should be 65 ± 5 °C.

NOTE 2: If necessary, record the additional time to reach this temperature: 65 ± 5 °C.

Presión inicial de vacío/Initial Pressure Vacuum: _____

Presión final de vacío/End Pressure Vacuum: _____

Temperatura Inicial/Start Temperature: _____ Temperatura Final/End Temperature: _____

Velocidad Inicial de Agitación/Initial Agitation Speed: _____

Velocidad Final de Agitación/End Agitation Speed: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

6. PREPARACIÓN DEL COLOR:
6. PREPARATION OF THE COLOUR:

COLOR ROJO 287
COLOUR RED 287

EQUIPOS:
EQUIPMENTS:

Descripción Equipo/ Equipment Description	Equipos Utilizados / Equipment Used	Fecha de Calibración / Calificación Date of calibration / Qualification	Próxima Fecha de Calibración / Calificación Next date of calibration / Qualification
(1) Tanque de fabricación 10 litros de capacidad / Manufacturing tank 10 liters of capacity			
Agitador Mecánico / Mechanical agitator			

Seguir y ejecutar las actividades descritas en los procedimientos:

Follow and implement the activities described in the procedures following:

INST-0027 Elaboración, Almacenamiento Y Aprobación De Estándares De Colores De Gelatina

INST-0027 Elaboration, Storage and Approval Standards Colorful of Gelatin

INST-0100 Preparación de Colorantes para Gelatina en las Áreas Productivas

INST-0100 Preparation of colorants Gelatin Production Areas

6.1 PROCEDIMIENTO:

6.1 PROCEDURE:

- Verificar y registrar la cantidad de las materias primas y su registro antes de usar según la Orden de Fabricación.
- Verify and record the amount and of the raw materials and register before usage, as the Manufacture Order.

MATERIA PRIMA RAW MATERIAL	CODIGO CODE No.	g/Kg. g/Kg.	g/Lote g/Lot	REGISTRO REGISTER
FD & C RED No. 40 (a)	100002318	0.350		

(a) NOTA: Pese 4 Kg de Agua Purificada, Código: 653000130, para preparar el color en el paso 6.1.1, previamente separada de la preparación de gelatina.


(a) NOTE: Weigh 4 Kg of Purified Water, Code: 653000130 for use in step 6.1.1, Preparation of the Gelatin Color Solution, previously separated from the preparation of gelatin.

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

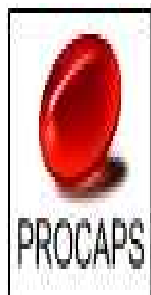

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

PREPARACIÓN DEL COLOR
PREPARATION OF THE COLOUR:

I. PREPARACIÓN DE COLORANTES HIDROSOLUBLES
I. PREPARATION OF COLORANTS WATER SOLUBLE

NOTA: La preparación del color debe hacerse simultáneamente al tiempo durante el cual se está mezclando la masa de gelatina, el cual está fijado en el paso 5.4, de tal forma que este pueda ser adicionado inmediatamente se cumpla este tiempo.

The color preparation should be made simultaneously with the time during which the dough is mixing gelatin, which is set in step 5.4, so that it can be added immediately to meet this time

6.1.1 Adicionar en el interior de cada bolsa donde son dispensados los colores, la cantidad necesaria de Agua Purificada sin sobrellenar las bolsas, agitar manualmente y con cuidado hasta completa disolución de los colores:

6.1.1 Add in each bag where the colors are dispensed, the required amount of purified water without overfilling bags and shake manually carefully until complete dissolution of the colors:

MATERIA PRIMA/RAW MATERIAL	CODIGO CODE No.	g/Lote g/Lot
PURIFIED WATER	653000130	
FD & C RED No. 40 (a)	100002318	

(a) NOTA: Pese 4 Kg de Agua Purificada, Codigo: 653000130, para preparar el color en el paso 6.1.1, previamente separada de la preparación de gelatina.

(a) NOTE: Weigh 4 Kg of Purified Water, Code: 653000130 for use in step 6.1.1, Preparation of the Gelatin Color Solution, previously separated from the preparation of gelatin.

Reportar el punto de agua purificada usado/ Report the purified water point used: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

6.1.2 Adicionar lentamente las soluciones de colorantes obtenidas en el paso 6.1.1 a un tanque de fabricación de 10 litros de capacidad, evitando al máximo cualquier salpicadura de las soluciones. Remover el remanente de las soluciones colorantes realizando tres lavados continuos utilizando 100 mL de Agua purificada previamente separada de la gelatina y adicionar estos enjuagues al tanque de 10 litros de capacidad.

6.1.2 Slowly add the colorants solutions obtained in step 6.1.1 to manufacture tank of 10 liter, avoiding any splash of the solutions. Removing the remainder of the colorants solutions making continuous three washes using 100 mL of purified water previously separated from the gelatin and adding these rinses to the tank of 10 liter.

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

6.1.3 Iniciar agitación con ayuda del agitador Mecánico a 450 ± 150 r.p.m y mezclar por espacio de 10 minutos. Finalizado este tiempo, suspender agitación y cerrar el tanque herméticamente.

6.1.3 Start stirring using a mechanical agitator 450 ± 150 r.p.m and mix for 10 minutes. After this time, stop stirring and close the tank tightly.

Agitador Mecánico utilizado/Mechanical agitator used: _____

Velocidad Inicial de Agitación/Initial speed of stirring: _____

Velocidad Final de Agitación/final speed of stirring: _____

Tiempo de mezcla/Mixing time: _____


HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

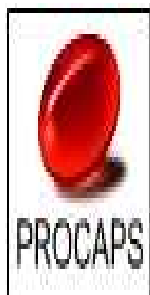

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

6.1.4 Adicionar la mezcla obtenida en el paso 6.1.3 al Melter de gelatina, una vez cumplido el tiempo de la mezcla del paso 5.5.

6.1.4 Add the color solution obtained in step 6.1.3 to Gelatin tank-melter once completed the step 5.5.

REALIZADO POR/PERFORMED BY: VERIFICADO POR/VERIFIED BY: FECHA/DATE:

7. ESPECIFICACIONES DE CALIDAD:

7. QUALITY SPECIFICATIONS:

7.1 DETERMINACIÓN DE AIRE:

7.1 AIR DETERMINATION:

En un beaker de 250 mL tome una muestra de igual cantidad de gelatina y realice las siguiente prueba:

Observe cuidadosamente la gelatina en el beaker y fíjese si presenta aire en su interior, el cual se aprecia como pequeñas burbujas:
de AIRE (Marque con una X el cuadro correspondiente)

In a 250 mL beaker, take a sample of an equal amount of gelatine, and perform the following test:

Carefully observe the gelatine in the beaker and look for the presence of air inside it which will show as small bubbles:
of AIR (Write an X in the corresponding box)

POSITIVO/POSITIVE:

NEGATIVO/NEGATIVE:

Si no observa presencia de aire en la base de gelatina, continúe con el paso 7.2.

If no air is observed in the gelatin base, continue with step 7.2.

HORA INICIAL/START TIME: HORA FINAL/END TIME: TIEMPO/TIME:

REALIZADO POR/PERFORMED BY: VERIFICADO POR/VERIFIED BY: FECHA/DATE:

7.1.1 Mezcle por 15 minutos bajo las condiciones especificadas abajo:

7.1.1 Mix for 15 minutes maintaining the conditions specified below:

Velocidad de mezclado: 50 r.p.m

Mixing Speed: 50 r.p.m

Temperatura T (°C): 65 ± 5 °C

Temperature (T (°C): 65 ± 5 °C

Vacío: Entre -30 y -20 pulgadas Hg

Vacuum: between -30 and -20 inches Hg

Presión inicial de vacío/Initial Pressure Vacuum:

Presión final de vacío/End Pressure Vacuum:

Temperatura Inicial/Start Temperature: Temperatura Final/End Temperature:

Velocidad Inicial de Agitación/Initial Agitation Speed:

Velocidad Final de Agitación/End Agitation Speed:

Repita nuevamente el paso 7.1 y determine la presencia de aire en la gelatina

Repeat again the step 7.1 and determine the presence of air in the gelatin.

POSITIVO/POSITIVE:

NEGATIVO/NEGATIVE:

HORA INICIAL/START TIME: HORA FINAL/END TIME: TIEMPO/TIME:

REALIZADO POR/PERFORMED BY: VERIFICADO POR/VERIFIED BY: FECHA/DATE:

Si no observa presencia de aire en la base de gelatina, continúe con el paso 7.2.

If no air is observed in the gelatin base, continue with step 7.2.

7.2 DETERMINACIÓN DE VISCOSIDAD:


7.2 DETERMINATION OF THE VISCOSITY:

En un beaker de 250 mL tome una muestra de igual cantidad de gelatina y realice las siguiente prueba:

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

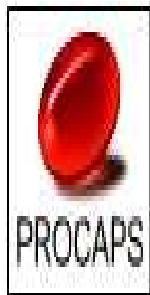

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

In a 250 mL beaker, take a sample of an equal amount of gelatine, and perform the following test:

Determine la viscosidad de la gelatina realizando la medición siguiendo los procedimientos y las condiciones descritas a continuación:

Determine the viscosity of the gelatine by measuring and following the procedures and conditions described below:

* Operación del Viscosímetro Código: INST-0053

* Operation of the Viscometer Code No. INST-0053

CONDICIONES:

CONDITIONS:

RECIPIENTE Beaker de 250 mL

CONTAINER 250 mL beaker

SPINDLE Eje No. 4

SPINDLE Shaft No.4

VELOCIDAD DE ROTACIÓN 10 r.p.m

ROTATIONAL VELOCITY 10 r.p.m

TEMPERATURA 65 ± 5°C

TEMPERATURE 65 ± 5°C

ESPECIFICACIÓN: La viscosidad debe ser 11000 ± 2000 cps

SPECIFICATION: The Viscosity must be of 11000 ± 2000 cps

Viscosidad Encontrada/Found Viscosity: _____ cps

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

Si el valor de viscosidad obtenido es menor a la especificada someta el tanque a un vacío entre -20 y -30 pulgadas Hg a una velocidad de mezclado: 50 r.p.m y agitación de 15 minutos de lo contrario continúe con el paso 8.0.

If the obtained value of viscosity is less than the specified, set the tank to operate at a vacuum between -20 and -30 inches Hg, a mixing speed (MS): 50 r.p.m. Mix for 15 minutes. Otherwise, continue with the step 8.0.

VISCOSIDAD OBTENIDA / VISCOSITY OBTAINED: _____

VISCOSIDAD FINAL / FINAL VISCOSITY: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

Si la viscosidad excede el límite superior especificado, adicionar 5 (cinco) kg de agua purificada por cada 1000 cps (centipoises) de viscosidad obtenida por encima de la especificación y agitar de 15 minutos a una temperatura de 65 ± 5°C.

If the viscosity exceeds the upper limit specified, add 5 (five) kg of purified water per 1000 cps (centipoise) viscosity obtained above above specification and stir 15 minutes at a temperature of 65 ± 5°C.

Viscosidad Final/Final Viscosity: _____ Viscosidad requerida/Viscosity required _____ Diferencia/Difference: _____

Kg Agua requerida/Water required = (viscosidad obtenida/viscosity obtained - 11000 cps) x 5 Kg/1000 cps

Kg Agua requerida/Water required = (_____ - 11000 cps) * 5 Kg/1000 cps = _____ kg Agua/Water

Kg Agua adicionada/Water added: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

8. DETERMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL COLOR DE LA GELATINA:

8. DETERMINATION AND APPROVAL OF THE GELATINE COLOUR:


Retirar en un beaker de 250 mL una muestra de gelatina y tomar con una placa una muestra para comparar el color obtenido con una placa estándar para la aprobación del color.

In a 250 mL beaker, take a sample of the gelatine and with a microscope slide to compare the colour with the one obtained with an standard for the approval of the colour.

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

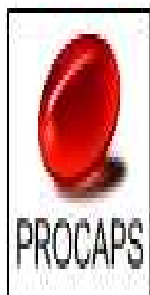

Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: g

COLOR ROJO 287
COLOUR RED 287

CUMPLE / MEET: SI / YES: _____ NO / NO: _____

NOTA: Si el color no cumple informar a Aseguramiento de la Calidad para realizar ajuste de color.

NOTE: If the color does not meet, inform to Quality Assurance for perform adjust of colour.

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

9. TRASEGADO DE GELATINA A TANQUES DE ALMACENAMIENTO:

9. TRANSFER OF THE GELATINE TO THE STORAGE TANKS:

Transferir la gelatina dentro de un tanque de almacenamiento con controlador de temperatura. Coloque en la válvula de salida del tanque un filtro (bolsa) de Nylon de 100 µm.

Transfer the Gelatin to a storage tank with temperature controller. Place a 100 µm Nylon filter (bag) on the outlet valve of the tank.

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

10. ALMACENAMIENTO DE LA GELATINA:

10. STORAGE OF THE GELATINE:

Lleve el tanque que contiene la gelatina al área de almacenamiento de tanques de gelatina y manténgala en reposo por no menos de 2 horas a una temperatura entre 50.0 y 68.0 °C, con el fin de eliminar el aire atrapado en la masa de gelatina.

Take the tank containing the gelatin to the storage area for gelatin tanks, and allow the gelatin to stand for not less than 2 hours at a temperature between 50.0 and 68.0 °C to eliminate the air trapped in the gelatin mass.

Temperatura Real/Real Temperature: _____

HORA INICIAL/START TIME: _____ HORA FINAL/END TIME: _____ TIEMPO/TIME: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

Deseche la gelatina coloreada después de 24 horas de haberse iniciado su almacenamiento.

Discard the colored-finished gelatin after 24 hours of initiating its storage.

NO USE LA GELATINA TERMINADA HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE AC.

DO NOT USE THE FINISHED GELATIN UNTIL QA APPROVAL IS OBTAINED.

APROBACIÓN DE AC / QA APPROVAL:

FIRMA / SIGNATURE: _____ HORA /TIME: _____ FECHA/ DATE: _____

OBSERVACIONES/OBSERVATION: _____

COPIA VERDADERA

 CHECK LIST LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE TANQUE REACTOR DE GELATINA (MELTER) CHECK LIST CLEANING AND SANITIZATION OF GELATIN REACTOR TANK (MELTER)							
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC					
CÓDIGO CODE		400004768 / N.A		LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT							
CÓDIGO CODE				LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION		Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch	
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME				REALIZADO POR PERFORMED BY		REVISADO POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC	
1.LIMPIEZA DEL EQUIPO (Desmontar las piezas del equipo según las actividades descritas en el instructivo INST-0066 -Limpieza y sanitización de tanques rectores de gelatina (MELTER) 1.CLEANING OF THE EQUIPMENT (Disassemble the pieces of the equipment, according to the activities described in the instructions INST-NST-0066 -Cleaning and sanitizing of gelatin rectors (MELTER)							
1.1.Seleccionar la maquina a limpiar (Marque con "✓") TREA 15 ☐ TREA 6 ☐ TREA 30 ☐ TREA 61 ☐ TREA 13 ☐ 1.1.Select the machine to be cleaned (Mark with "✓")							
2.SOLUCIONES Y AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 2. CLEANING AND DISINFECTION SOLUTIONS AND AGENTS							
2.1.Seleccionar la solución detergente para la limpieza (Marque con "✓") PROBIO ☐ LIQUINOX ☐ 2.1Select the detergent solution for cleaning (Mark with "✓")							
SOLUCIÓN USADA USED SOLUTION	MARQUE CON "✓" LA CONCENTRACION USADA MARK WITH "✓" THE CONCENTRATION USED	FECHA DE FABRICACIÓN MANUFACTURING DATE	FECHA DE VENCIMIENTO EXPIRATION DATE	REVISADO POR FECHA (SUP/AC) REVIEWED BY DATE (SUP/AC)			
2.2 Solución Detergente 2.2 Detergent Solution	1% ☐						
2.3.Solución de alcohol 2.3.Alcohol solution	70% ☐						
3.LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN (Tiempos de acción para agentes de limpieza y desinfección) 3. CLEANING AND SANITIZATION (Action times for cleaning and disinfection agents)				TIEMPO DE CONTACTO CONTACT TIME	HORA INICIAL START TIME	HORA FINAL END TIME	TIEMPO TOTAL TOTAL TIME
3.1.Humedecer un paño con solución detergente al 1 % refriegue cada una de las siguientes partes: Tapa (manhole), Tapa reactor, empaque manhole, raspadores, estructura interna agitadores, paredes intrenas tanque,paredes externas del tanque,carcasa motor, orificio de descarga y válvula de descarga . 3.1. Moisten a cloth with a 1% detergent solution and scrub each of the following parts: Cover (manhole), Reactor cover, manhole gasket, scrapers, agitator internal structure, internal tank walls, external tank walls, motor casing, orifice. discharge and discharge valve.				10-15 minutos (minutes)			
3.2.Humedecer un paño con alcohol al 70% y aplicar sobre las partes y superficie del equipo 3.2.Moisten a cloth with 70% alcohol and apply to the parts and surface of the equipment				10-15 minutos (minutes)			

 CHECK LIST LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE TANQUE REACTOR DE GELATINA (MELTER) CHECK LIST CLEANING AND SANITIZATION OF GELATIN REACTOR TANK (MELTER)									
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC							
CÓDIGO CODE		400004768 / N.A		LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT									
CÓDIGO CODE				LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION			Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch		
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME				REALIZADO POR PERFORMED BY				REVISADO POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC	
4.LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN (Enjuagues en los procesos de limpieza y desinfección) CLEANING AND SANITIZATION (Rinses in the cleaning and disinfection processes)									
4.1. Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes de la maquina refregadas con solución detergente (Marque con "✓") 4.1.Type of water used in the rinses of the parts of the machine scrubbed with detergent solution (Mark with "✓")						Agua potable Drinking water		☐	
4.2. Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes de la maquina sanitizadas (Marque con "✓") 4.2.Type of water used to rinse the sanitized parts of the machine (Mark with "✓")						Agua purificada Purified water		☐	
REALIZADO POR/FECHA /HORA (OPERADOR) REALIZED BY /DATE/ HOUR (OPERATOR)						REVISADO POR /FECHA/HORA (SUP/AC) REVIEWED BY / DATE/ HOUR (SUP/AC)			
5. LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA: La inspección final de la limpieza es realizada por el superintendente en turno, o el personal de calidad. Revisar la ausencia de residuos visibles del producto anterior, capsulas, la ausencia de restos de las soluciones de limpieza y olores extraños en las siguientes partes de la máquina. Marque con "✓" cumple o no cumple, si no aplica cierre el espacio con guion (-) 5.CLEANING INSPECTION CHECKLIST: The final cleaning inspection is performed by the superintendent, or quality person. Check the absence of visible residues of the previous product, capsules, the absence of remains of cleaning solutions and strange odors in the following parts of the machine. Mark with "✓" meet or does not meet, if it does not apply, close the space with a hyphen (-)									
Realiza limpieza con la máquina desensamblada (Marque con "✓") Clean with the machine disassembled (Mark with "✓") SI / YES ☐ NO / NOT ☐									
Utiliza aire comprimido y lampara para la verificación y limpieza de la máquina (Marque con "✓") Use compressed air and a lamp to verify and clean the machine (Mark with "✓") SI / YES ☐ NO / NOT ☐									
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	
Tapa (manhole) Cover (manhole)			Estructura interna agitadores internal structure stirrers			Paredes externas del tanque External walls of the tank			
Tapa reactor Reactor cover			Paredes internas del tanque Internal walls of the tank			Carcasa motor motor casing			

 CHECK LIST LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DE TANQUE REACTOR DE GELATINA (MELTER) CHECK LIST CLEANING AND SANITIZATION OF GELATIN REACTOR TANK (MELTER)										
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC								
CÓDIGO CODE		400004768 / N.A			LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT										
CÓDIGO CODE					LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐			MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION			Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch		
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME					REALIZADO POR PERFORMED BY				REVISADO POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC	
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET		
Empaque manhole manhole packing			Mangueras de descargue/ Discharge hoses			Orificio de descarga discharge hole				
Raspadores scrapers			Válvula del Melter/Melter valve			Tuberías de vacío/Vacuum pipes				
REALIZADO POR/FECHA/HORA (OPERADOR) REALIZED BY/DATE (OPERATOR)						REVISADO POR/ FECHA / HORA (SUP/AC) REVIEWED BY/ DATE (SUP/AC)				
NOTA: La finalización del proceso de limpieza se da con la revisión y aprobación por el superintendente, inspector o monitor de calidad. NOTE: Completion of the cleaning process is upon review and approval by the superintendent, inspector or quality monitor.										
CONVENCIONES AC : Personal de calidad / SUP : Superintendente CONVENTIONS AC : Quality Staff / SUP : Superintendent										

**DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE**

ÁREA /AREA				PROCESO /PROCESS	
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	

PRODUCTO ANTERIOR /PREVIOUS PRODUCT					
CODIGO /CODE		LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA /VERIFICATION OF THE AREA	SI /YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified			
1.2	Esta el area limpia y desinfectada / Is the area clean and disinfected			
1.3	Las rejillas, puertas, marcos de puertas, vidrios y ventanas, estan limpias/ The grates, doors, door frames, glass and windows are clean			
1.4	Las condiciones ambientales del area son las requeridas para el proceso/ The environmental conditions of the area are those required for the process			
1.5	Están los reservorios de tinta completamente limpios (Aplica proceso impresión de capsula blanda y encapsulado) / Are the ink reservoirs completely clean (Applies soft capsule printing and encapsulation process)			
1.6	Existe en el área o máquina blísteres vacios o materiales residuos del set up (Aplica proceso empaque Blister) / There are empty blisters or waste materials from the setup in the area or machine (Applies Blister packaging process)			
1.7	Asegúrese que las zonas de difícil acceso estén completamente limpias/ Make sure hard-to-reach areas are completely clean			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO /VERIFICATION OF THE EQUIPMENT	SI /YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified			
2.2	Esta el equipo limpio / Is the equipment clean			
2.3	Funciona el equipo correctamente / The equipment works properly			
2.4	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correctly installed, complete and in good condition.			
2.5	Los PLC, Panel View, sistema de visión, pantallas de configuración de los equipos, instrumentos y sistemas de controles en proceso, tiene información del proceso anterior / PLCs, Panel View, vision systems, equipment configuration screens, instruments and process control systems have information about the previous process.			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION /VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI /YES	NO	N.A
3.1	Existen documentos del producto anterior en el area / There are documents of the previous product in the area			
3.2	El proceso de limpieza y desinfección de area y equipo esta registrada en la bitacora / The cleaning and disinfection process of the area and equipment is recorded in the logbook.			
3.3	Las etiquetas de vacio limpio de los equipos estan completas y anexas al batch record / The clean vacuum labels of the equipment are complete and attached to the batch record.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / STAFF VERIFICATION	SI /YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal safeguard elements			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Proper and complete uniform			
4.3	Uniforme limpio sin pelusa, hilo, cabello y restos de etiqueta / Clean uniform free of lint, thread, hair and tag residue			
4.4	El uniforme contiene capsulas en los bolsillo, mangas,cuello o sitios que permitan el transporte de capsulas. / The uniform contains capsules in the pockets, sleeves, collar or places that allow the transport of capsules.			
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES /VERIFICATION OF MATERIALS AND TOOLS	SI /YES	NO	N.A
5.1	Existen materiales diferentes a los que se van a utilizar en el proceso / Exist differents materials to which are normally used in the process			



DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE

ÁREA /AREA			PROCESO /PROCESS		
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER		
5.2	Los utensilios y materiales requeridos se encuentran en el área / The tools and materials required are in the area				
5.3	Las materias primas dispensadas corresponden con la orden de producción / Dispensed raw materials correspond to the production order				
5.4	La cantidad de materias primas dispensadas corresponden con la establecida en la orden de producción / The quantity of raw materials dispensed correspond to the production order				
5.5	Los materiales corresponden con la orden de empaque / The materials correspond to the packaging order				
5.6	La cantidad de materiales corresponden con la establecida en la orden de empaque / The quantity of materials correspond to the packaging order				
5.7	El registro de la tinta a usar para la impresión de las capsulas corresponde con la orden de producción / The register of the ink to be used for the capsule printing process corresponds to the production order				

REALIZADO POR /FECHA/HORA/
DONE BY /DATE/TIME

REVISADO POR /FECHA/HORA/
REVIEWED BY/ DATE/TIME

Observaciones/
Comments:

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA / FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA			PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA / VERIFICATION OF AREA	SI/YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified.			
1.2	Se han recogido las materias primas, materiales y granel caidos al piso. / Raw materials, materials and bulk materials that fell to the floor have been collected..			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO / VERIFICATION OF EQUIPMENT	SI/YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified.			
2.2	Los materiales utilizados (MP, GR, ME) remanentes del proceso han sido retirados del equipo / The materials used (MP, GR, ME) remaining from the process have been removed from the			
2.3	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correct installed, complete and in good condition			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI/YES	NO	N.A
3.1	Al finalizar el despeje de linea, no quedan en el area documentos del producto inmediatamente trabajado / At the end of the line clearance, no documents are in the area of immediately worked product.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / VERIFICATION OF PERSONAL	SI/YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal protection.			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Appropriate and complete uniform.			
4.3	Uniforme limpio / Clean uniform.			

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA /
FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA		PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		
		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER		
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES / VERIFICATION OF TOOLS AND MATERIALS	SI/YES	NO	N.A
5.1	Los utensilios han sido retirados / The tools have been removed.			
5.2	Los empaques, bolsas, tanques, canastas, bandejas usados por los materiales del producto trabajado han sido retirados / The packaging (MP, GR, ME), bags, tanks, baskets, trays used for the materials of the worked product have been removed.			
5.3	La cantidad de materiales remanentes ha sido registrada para la conciliación de producto / The amount of remaining material has been registered for the reconciliation of product.			
5.4	Los materiales (MP, GR, ME) remanentes han sido identificados y devueltos / The remaining materials (MP, GR, ME) have been identified and returned.			
5.5	Se han registrado las cantidades producidas en los documentos establecidos para tal fin / The quantities produced have been in the documents established for that purpose.			
5.6	Los productos resultado del proceso han sido retirados o se encuentran debidamente sellados y protegidos / The result of the process products have been recalled or are properly sealed and protected.			

REALIZADO POR
/FECHA/HORA/DONE BY
/DATE/TIME

REVISADO POR
/FECHA/HORA/REVIEWED BY
/DATE/TIME

Observaciones:
Observations:

MP: Materia prima/MP: Raw material ME: Material de empaque/ ME: Packaging material GR: Granel/GR: Bulk

COPIA VERDADERA



IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS / IDENTIFICATION OF AREAS

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) /PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
---	--

ÁREA /AREA	
------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								
NOTA: SI DESPUES DE 24 HORAS EL AREA NO HA SIDO UTILIZADA, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA NOTE: IF 24 HOURS LATER THE AREA HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.								
OBSERVACIONES /COMMENTS								



IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO /EQUIPMENT IDENTIFICATION

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) / PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
--	--

EQUIPO /EQUIPMENT	
----------------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR /DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR /VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								

NOTA 1: SI DESPUES DE 24 HORAS EL EQUIPO NO HA SIDO UTILIZADO, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA
NOTE 1: IF 24 HOURS LATER THE EQUIPMENT HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.

NOTA 2: UNA VEZ UTILIZADO EL EQUIPO, SE DEBE PROCEDER CON SU LIMPIEZA. ESTE NO DEBE PERMANECER MAS DE 8.5 HORAS SUCIO.
NOTE 2: ONCE THE EQUIPMENT IS USED, IT SHOULD BE PROCEEDED WITH ITS CLEANING. THIS SHOULD NOT STAY OVER 8.5 HOURS DIRTY

OBSERVACIONES /COMMENTS	
----------------------------	--

COPIA VERDADERA

RÓTULO DE TANQUE-TANK LABEL			
Producto: / Product:		Código: / Code No.:	
VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		400004768 / N.A	
Lote: / Lot No.:			
Tipo Gelatina: / Gelatin type:		ROJO 287 Color: /	Aprobado por: / Approved by:
		RED 287 Colour:	
No. Batch: / Batch No.:		Fecha: / Date:	Tanque #: / Tank No.:
Peso Bruto: / Gross Weight:		Tara: / Tare:	Neto: / Net Weight:
		kg	kg
Realizado por: / Realized by:		Fecha: / Date:	
REPORTE DE CALENTAMIENTO SECCIÓN DE GELATINA - HEATING REPORT FROM THE GELATIN SECTION			
Descargue del Melter- / Downloading from the Melter		Fecha Máxima de Almacenamiento / Maximum Storage Time	
Fecha / Hora- Date / Time		Fecha / Hora Date/ Time	
Viscosidad- Viscosity cps cps			
Realizado por: / Realized by:		Realizado por: / Realized by:	
Verificado por: / Verified by:		Verificado por: / Verified by:	
Tiempo Máximo de Almacenamiento de la gelatina fabricada: / Maximum Storage Time of the Manufactured Gelatin: 24 horas después de descargada del Melter. 24 hours after being downloaded form the Melter.			
		Código del Viscosímetro: / Viscometer code	
		Fecha de Calibración: / Date of Calibration	
		Vigencia: / Validity	
ESPECIFICACIÓN DE VISCOSIDAD : Ver instructivo de fabricación de gelatina / SPECIFICATION FOR VISCOSITY: See gel mass preparation method.			
DESCARGUE Y ALMACENAMIENTO / DOWNLOAD AND STORAGE			
Viscosidad / Viscosity cps / cps	Temperatura / Temperature °C(°C)	Fecha / Hora Date / Time	Cantidad Quantity
Entregado por: / Delivered by:		verificado por Verified by:	kg / kg
Recibido por: / Received by:			
ENTRADA DE GELATINA A ENCAPSULADO- ENTRANCE OF GELATIN INTO THE ENCAPSULATION AREA.			
Viscosidad / Viscosity cps / cps	Fecha / Hora Date / Time	Temperatura (°C) / Temperature (°C)	Peso Real Encapsulado / Real Encapsulation weight
Realizado por: / Realized by:	Recibido por: / Received by:		kg / kg
OBSERVACIONES: / OBSERVATIONS:			



ACTA DE SANITIZACION/**SANITIZATION ACT**

FECHA/**DATE**: _____

NOMBRE PRODUCTO/**PRODUCT NAME**:
VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

LOTE/**BATCH**: _____

AREAY/O EQUIPO/**AREA AND/OR /EQUIPMENT**

LAVADO REALIZADO POR /**WASHING PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

SANITIZACION REALIZADA POR/**SANITATION PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

JEFE DE AREA/ **HEAD OF AREA**

F-INST-0064-3 V02

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400008647 / 400005097

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Producto:
Product: GELATINA TIPO B 150 BLOOM ROJO 287 | GELATIN TYPE B 150 BLOOM RED 287
Lote a Producir:
Lot to Produce 90909.1

Código Producto:
Product Code 400004768

Cantidad Base/
Base Amount 100

Nombre Producto:/
Product Name: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Versión:/
Version: 10


Vigencia:/
Effective Date:

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: g

ETIQUETAS / LABELS

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

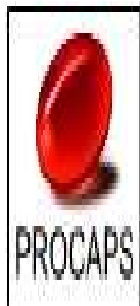

Código
Material:/
Material Code 400004768

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:/ 10

Vigencia:/

Effective Date:

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

ENCAPSULADO / ENCAPSULATION

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

INSTRUCCIONES GENERALES / GENERAL INSTRUCTIONS:

ÁREA DE ENCAPSULADO / ENCAPSULATION AREA

Lea las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y síguelas en estricto orden:

Before starting the process, read the instructions described herein, and follow them in the strictest order:

- Utilizar el uniforme correspondiente:

- Wear the corresponding adequate uniform:

Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes y protector auditivo.

White overall, bonnet, (hair cover), nose- mouth protector, disposable gloves, boots not slippery and hearing protection.

DURANTE TODO EL PROCESO DEBEN HABER DOS OPERADORES DE ENCAPSULADO.

THERE MUST BE AT LEAST TWO OPERATORS DURING THE ENTIRE ENCAPSULATION PROCESS.

REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión De Desviaciones Del Sistema De Calidad.

(Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management)

- Verificar el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área de encapsulado:

- Verify the clearance of the line (areas and equipments) and the environmental conditions in the Encapsulation Area:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.020 (Positivo) pulg de agua - Máximo: 0.150 (Positivo) Pulg de agua.

PRESSURE DIFFERENTIAL: : Minimum: 0.020 (Positive) Inches of water - Maximum: 0.150 (Positive) Inches of water.

- TEMPERATURA / TEMPERATURE: 23.0°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 21.0°C Máximo: 25.0°C.

Alarm Limits: Minimum: 21.0°C Maximum: 25.0°C.

Límites de Acción: Mínimo: 19.0°C Máximo: 27.0°C.

Action Limits: Minimum: 19.0°C Maximum: 27.0°C.

- HUMEDAD RELATIVA / RELATIVE HUMIDITY: 20 %

Límites de Alarma: Máximo: 22%.

Alarm Limits: Maximum: 22%.

Límites de Acción: Máximo: 25%.

Action Limits: Maximum: 25%.

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:

(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)

Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.


(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

Inicio de proceso/Start Process:

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

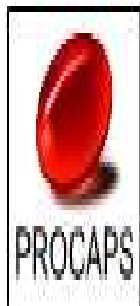

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/Final Process

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

- Seguir y ejecutar las actividades de encapsulado descritas en los siguientes procedimientos:
- Follow and perform the Encapsulation activities described in the following procedures:


- * Despeje de Linea. Código: INST-0109
- * Line Clearance. Code No. INST-0109
- * Identificación de Area y/o Equipo Código: INST-0073
- * Identification of Areas and/ or Equipments. Code No. INST-0073
- * Limpieza de Máquinas Encapsuladoras CBG. Código: INST-0113
- * Cleaning of the Encapsulation Machines SGC. Code No. INST-0113
- * Operación de Máquina Encapsuladora en las Plantas Productivas. Código: INST-0052
- * Operation of encapsulating machine in production plants. Code No. INST-0052
- * Parametros de Control en proceso de Encapsulado de Cápsula Blanda de Gelatina. Código: INST-0043
- * Parameters of Encapsulating Process Control of Soft Gelatin Capsule. Code INST-0043
- * Operación y Limpieza de las Bombas Peristálticas para el Trasiego de Gelatina Código INST-0307
- * Operation and Cleaning of peristaltic pumps for transferring Gelatin Code INST-0307
- * Limpieza y Sanitización de Areas de Manufactura. Código: INST-0064
- * Cleaning and Sanitation of the Manufacture Areas. Code No. INST-0064

LIMPIEZA DE MAQUINA ENCAPSULADORA, No. _____.		
CLEANING OF ENCAPSULATION MACHINE, No		
Nota: Si según lo indicado en las bitácoras de limpieza después de 24 horas el equipo y las piezas no ha sido utilizadas, se requiere una nueva limpieza. Note: If the equipment logbook indicates that the equipment and the pieces and it not has been used more than 24 hours ago, the equipment must be cleaned again.		
Partes Parts	Partes Parts	Partes Parts
Tuberías de gelatina Gelatin pipelines	Cepillos del chute assembly Chute assembly Brushes	Cuchara Encapsulation Machine Scoops
Cajas de gelatina Gelatin boxes	Alimentador del tren de presecado Tumble dryer feeder	Bandeja de descargue de cápsulas Tray for unloading capsules
Abrazadera Clamp	Bomba de Dosificación Dosage pump	Cuchara para embandejar cápsulas Scoop to place capsules on trays
Válvula de Tanque Tank Valve	Racores (20) Fittings (20)	Canasta de presecado No. 1 Tumble drum No.1
Bomba de Trasiego Ranking Pump	Plato inferior de inyección Injection – bottom plate	Canasta de presecado No. 2 Tumble drum No.2

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

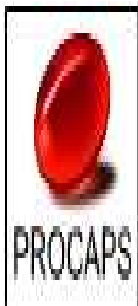

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Version:
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Tubos alimentadores Pipes- Encapsulation	Valvula Shut - off Shut – off valve	Canasta de presecado No. 3 Tumble drum No.3
Alimentador directo Direct feeder	Plato distribuidor del segmento Segment-distributor plate	Canasta de presecado No. 4 Tumble drum No.4
Plato superior de inyección Injection – Upper plate	Segmento Segment	Canasta de presecado No. 5 Tumble drum No.5
Banda transportadora Conveyor belt	Moldes derecho e izquierdo Right and left molds	Empaques de bomba de dosificación Dosing pump gaskets
Hora y Fecha de Inicio de Limpieza Start Time/Date of cleaning	Hora y Fecha del Final de la Limpieza End Time/Date of cleaning	Limpiado por Cleaned by
		Verificado por Verified by

1. APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC) PARA INICIAR ENCAPSULADO.

1. QA APPROVAL TO START ENCAPSULATION

Notifique al inspector de AC para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso.

Request verification of the following steps by the QA inspector before starting the process.

Descripción Equipo/ Equipment Description	Equipos Utilizados / Equipment Used	Fecha de Calibración / Calificación Date of calibration / Qualification	Próxima Fecha de Calibración / Calificación Next date of calibration / Qualification
Microscopio para medir el sellado de cápsula / Microscope for the measurement of capsule seal			
Balanza / Scale			
Medidor de Espesores/ Thickness Gauge			
Máquina encapsuladora/ Encapsulation machine			

1.1	Verifique que la balanza esté disponible y limpia. Verify that the scale are available and clean.		√
1.2	Verifique que el área esté limpia y que se cumplan las condiciones ambientales. Verify that the areas are clean and environmental conditions are met.		
1.3	Verifique que el personal tenga los elementos de protección requeridos. Verify that the operators are wearing the required personal protective equipment.		
1.4	Verifique que la máquina encapsuladora y cada una de las partes estén limpias y secas. Verify that the encapsulation machine and each one of the parts are clean and dry.		
1.5	Verifique que la balanza tenga fecha de calibración vigente. Verify that the scales are within calibration expiration dates.		
1.6	Registre la fecha y hora de finalización del desaire de la medicina. Ver paso 6.9 de la etapa de medicina (Finalización del proceso de desaire). Record the end date and time of the medicine deaeration. See step 6.9 of the medicine stage (End of the deaerating process).	Fecha/ Hora Date/ Time: _____	
1.7	Registre la fecha y hora en que el tanque de almacenamiento se conecta a la máquina encapsuladora. (Record the date and time when the storage tank is connected to the encapsulation machine)	Fecha/ Hora Date/ Time: _____	

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Version:
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

1.8	Calcule el tiempo (tiempo de espera) transcurrido entre la finalización del desaire de la medicina y la fecha y hora en que el tanque se conecta a la maquina encapsuladora. Tiempo máximo 192 horas. Calculate the time (waiting time) elapsed between the end of the medicine deaerator and the date and time the tank connects to the encapsulating machine. Maximum time 192 hours		
1.9	Verifique que la solución de la muestra en proceso ha sido aprobada por el laboratorio de control de calidad. Verify that the in-process sample solution has been approved by the quality control laboratory.		

APROBACIÓN FINAL DE AC / **QA FINAL APPROVAL:**

FIRMA / **SIGNATURE:** _____ FECHA-HORA / **DATE-TIME:** _____


APROBACION DE AC PARA INICIAR ENCAPSULADO QA APPROVAL TO START ENCAPSULATION			
Verifique las partes instaladas en la máquina encapsuladora Verify the parts Installed on the encapsulation machine			
Nombre de la parte Part Name	✓	Nombre de la parte Part Name	✓
Abrazaderas (Clamps)		Moldes derecho e izquierdo Right and left molds	
Válvula de Tanque Tank Valve		Cucharas (2) Encapsulator Machine Scoops (2)	
Bomba de Trasiego Transfer Pump		Banda transportadora Conveyor belt	
Tubos alimentadores Pipes- Encapsulation		Cepillos del chute assembly Chute assembly Brushes	
Alimentador directo Direct feeder		Alimentador del tren de presecado Tumble dryer feeder	
Plato superior de inyección Upper injection plate		Canasta de presecado No. 1 Tumble drum No.1	
Manguera de retorno del plato Plate return hose		Canasta de presecado No. 2 Tumble drum No.2	
Bomba de Dosificación Metering pump		Canasta de presecado No. 3 Tumble drum No.3	
Racores (20) Fittings (20)		Canasta de presecado No. 4 Tumble drum No.4	
Plato inferior de inyección Bottom injection plate		Canasta de presecado No. 5 Tumble drum No.5	
Valvula Shut - off Shut – off valve		Bandeja de descargue de cápsulas Tray for unloading capsules	
Plato distribuidor del segmento Segment-distributor plate		Cuchara para embandejar cápsulas Scoop to place capsules on trays	
Segmento Segment		Tuberías de inyección (10) Injection pipes (10)	
APROBACIÓN FINAL DE AC QA FINAL APPROVAL	FIRMA SIGNATURE	FECHA/HORA DATE/TIME	

CONTROL EN PROCESO:
IN-PROCESS CONTROL:

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

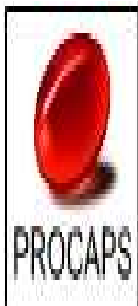

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión:/ 10

Vigencia:/

Effective Date:

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

2. ENCAPSULADO

2. ENCAPSULATION

2.1 Registrar la siguiente información.

2.1 Register the following information.

ITEMS / ITEMS	RESULTADO / RESULT
Base Bomba utilizada N° / Base used Pump N°	
Minibomba Dosificación de Medicina utilizada N° / Dosing minipump of Medicine used N°	
Tolva cerrada de encapsulado utilizada N° / Hopper closed encapsulation used N°	
Sensor de nivel en la tolva? Si / No / Level sensor in the hopper? Yes / No	
Máquina Encapsuladora N° / Encapsulation machine N°	
Molde utilizado (5.5 Oval A STD) / Mold used (5.5 Oval A STD)	
Type of mold (STD, X, XNW) / Mold used (STD, X, XNW)	
Número de Muestras del molde: 9 / Amount of samples mold: 9	
Cavidades totales del molde / Total mold cavities	
El molde fue sometido a Recouting Si / No / The Mold was Re-cutted Yes / No	
Segmento utilizado / Segment used	
Vehículo utilizado (Cuadre de peso con Medicina) / Used vehicle (carrier) (Cuadre Weight with Medicine)	

REALIZADO POR/PERFORMED BY: VERIFICADO POR/VERIFIED BY: FECHA/DATE:

OBSERVACIONES (Encapsular siguiendo estos parámetros. Si se cambia alguno de estos. (Tipo de molde: STD, X, XNW, el molde utilizado fue sometido a más de dos recouting, no se utilizó el Vehículo descrito, justificar el cambio)

OBSERVATIONS (Encapsulate following these parameters, if any is changed, (Type of Mold, STD, X, XNW, the used mold was submit more than two recouting, not was use the vehicle described, justify the change).

2.2 Parámetros de Proceso

2.2 Process Parameters

2.2.1 Realizar medición de estos parámetros según la frecuencia establecida en el instructivo INST-0043 y reportarlos en el formato respectivo.

2.2.1 Perform measurement of these parameters according to the frequency stated in the instruction INST-0043 and report in the respective format.


2.2.2 Una vez ajustada las temperaturas de, segmento, cajas de gelatina y fan coil en el alistamiento de la máquina encapsuladora se debe verificar que estén cumpliendo las especificaciones antes de iniciar el proceso de encapsulado.

2.2.2 Once the temperatures of the segment, gelatin boxes and fan coil have been adjusted in the set up of the encapsulation

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

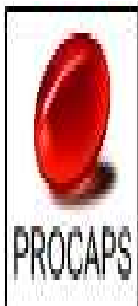

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

It must be verified that they meet the specifications before starting the encapsulation process.

CONTROL EN PROCESO IN-PROCESS CONTROL			
Durante el proceso de encapsulado verifique los siguientes parámetros. Verify the following parameters during the encapsulation process.			
PARAMETROS PARAMETERS	ESPECIFICACION SPECIFICATION	FRECUENCIA DE CONTROL CONTROL FREQUENCY	REPORTAR EN REPORT IN
Temperatura del segmento Segment temperature	40 ± 5 °C	Cada 30±5 minutos Every 30±5 minutes	Formato de control de operación de encapsulado CBG Control of encapsulated operation SGC form
Temperatura del fan coil Fan coil temperature	15 ± 5 °C		
Temperatura de cajas de gelatina. Temperature of the gelatin boxes	Derecha Right 60 ± 5 °C		
	Izquierda Left 60 ± 5 °C		
Espesor de película de gelatina Gelatin ribbon thickness	0.030 ± 0.002 pulgadas / Inches	Cada 30±5 minutos Every 30±5 minutes	Formato de control de operación de encapsulado CBG Control of encapsulated operation SGC form
Espesor mínimo de sellado (SS: Sello superior) Minimum sealing thickness (SS: Upper Seal)	0.0112 pulgadas (inches)	Cada 120±5 minutos Every 120±5 minutes	Control microscópico sellado de cápsulas Microscopic sealing control for Capsule
Espesor mínimo de sellado (SI: Sello Inferior) / Minimum sealing Thickness (SI: Lower Seal)	0.0112 pulgadas (inches)		
Peso de llenado mínimo Minimum fill weight	269.5 mg/cápsula mg/capsule	Cada 30±5 minutos Every 30±5 minutes	Sistema Automático de Control de Dosificación Automatic Dosage Control System
Peso de llenado objetivo Target fill weight	275.0 mg/cápsula mg/capsule		
Peso de llenado máximo Maximum fill weight	280.5 mg/cápsula mg/capsule		

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____


OBSERVACIONES (Encapsular siguiendo estos parámetros. Si se cambia alguno de estos, justificar el cambio):
OBSERVATIONS (Encapsulate following these parameters, if any is changed, justify the change):

2.2.3 Realizar medición de estos parámetros según la frecuencia establecida en el instructivo INST -0043 y reportarlos en el formato respectivo.
2.2.3 Perform measurement of these parameters according to the frequency stated in the instruction INST-0043 and report in the

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

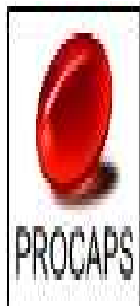

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Version:
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

respective format.

ITEMS / ITEMS	ESPECIFICACION / SPECIFICATION
Velocidad máquina encapsuladora / Velocity encapsulation machine	2.5 a 2.9 r.p.m
Tiempo de presecado por canastas / Time Pre-drying by baskets	20 minutos
Velocidad canastas del tren de presecado / Velocity baskets of Pre-drying train	40 - 45 r.p.m

REALIZADO POR/PERFORMED BY: VERIFICADO POR/VERIFIED BY: FECHA/DATE:

OBSERVACIONES (Encapsular siguiendo estos parámetros .Si se cambia alguno de estos, justificar el cambio):

OBSERVATIONS (Encapsulate following these parameters, if any is changed, justify the change):

2.4 Parámetros de Producto

2.4 Product Parameters

Registre los siguientes parámetros al inicio del proceso:

Record the following parameters to start the process:

ITEMS / ITEMS	ESPECIFICACION / SPECIFICATION	REPORTAR RESULTADOS RESULTS REPORT
Temperatura de la medicina / Temperature of the medicine	23 ± 3°C	
Temperatura tubería de Gelatina / Temperature of the pipeline for the gelatine	60 ± 5 °C	
Presión de Corte / Cutting Pressure	40 - 60 psi	
Temperatura del segmento Segment Temperature	40 ± 5°C	
Temperatura del Fan Coil Fan Coil Temperature	15 ± 5°C	
Temperatura de cajas de gelatinas Temperature of Gelatin Boxes	Derecha Right	60 ± 5°C
	Izquierda Left	60 ± 5°C
Lubricante / Lubricant	Triglycerides, Medium Chain (900 - 1200 mg/min/brazo lubricador)	

REALIZADO POR/PERFORMED BY: VERIFICADO POR/VERIFIED BY: FECHA/DATE:

OBSERVACIONES (Encapsular siguiendo estos parámetros .Si se cambia alguno de estos, justificar el cambio):

OBSERVATIONS (Encapsulate following these parameters, if any is changed, justify the change):


A MEDIDA QUE VAYA SALIENDO EL PRODUCTO DE LOS TRENES DE PRESECADO EMBANDEJAR LAS CÁPSULAS FORMANDO UN CARRO MÁXIMO DE 56 BANDEJAS, E IR METIENDO LOS CARROS AL ÁREA DE SECADO.

AS THE PRODUCT IS EXITING THE TUMBLE DRIERS PLACE THE CAPSULES ON TRAYS IN THE CART MAKING A CART WITH A MAXIMUM

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

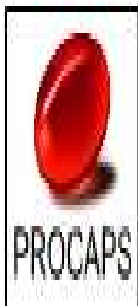

Código
Material:
Material Code 400004768

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

OF 56 TRAYS AND AT THE SAME TIME, ENTER THE CARTS INTO THE DRING AREA.

REPORTAR TÚNEL O ÁREA DE SECADO EN EL QUE VA ENTRAR EL PRODUCTO : _____

REPORT THE TUNNEL, OR THE DRYING AREA IN WHICH THE PRODUCT IS ENTERING

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

3. CONCILIACIÓN ETAPA DE ENCAPSULADO


3. SETTLE OF ECAPSULATION STAGE

FORMATO PARA LIQUIDAR ETAPA DE ENCAPSULADO / FORMAT FOR SETTLING ENCAPSULATING STAGE							
OP / OP		Lote / Lot		Código / Code		Producto / Product	
Kg medicina/lote / Kg medicine/lot = _____ Dosificación promedio/Average dosage = _____ = _____				Ver dato en página / see data on page _____ Ver dato en página / see data on page _____ Registre siguiente dato con un decimal / Record the following data with one decimal place			
Cápsulas obtenidas = gramos de medicina por batch / (dosificación promedio / 1000) Capsules obtained = grams medicine per batch / (dosage average / 1000)				Registre el dato sin decimales / Record the data without decimals			
Cápsulas obtenidas / Capsules obtained = _____ Cápsulas obtenidas / Capsules obtained = _____							
Caps/hora = r.p.m x cavidades del molde x 60min Caps/hour = r.p.m x mold cavities x 60min				Ver r.p.m en página / see r.p.m on page _____ Ver número de cavidades en página / See number of cavities on page _____ Registre el dato sin decimales / Record the data without decimals			
Caps/hora / Caps/hour = _____ Caps/hora / Caps/hour = _____							
Horas máquina reales (HMR) = cápsulas obtenidas / caps/ hora / Actual machine hours (HMR) = capsules obtained / caps/hour				Registre siguiente dato con un decimal / Record the following data with one decimal place			
HMR = _____ HMR = _____							
Kg-gel/hora = ancho película x r.p.m x espesor película gel trabajado x 33,33 Kg-gel/hour = blade width x r.p.m x gelatin thickness film x 33,33				ver ancho de cuchilla cajas de gelatina en página / see blade width gelatin boxes on page _____ ver espesor película de gelatina trabajado en página / see thickness gelatin film worked on page _____			
Kg-gel/hora / kg-gel-hour= _____ Kg-gel/hora / kg-gel-hour= _____				Registre siguiente dato con un decimal / Record the following data with one decimal place			
Kg Gel Lot = Kg-gel/hora x HMR / Kg Gel Lote = Kg-gel-hour x HMR Kg Gel Lot / Kg Gel lote = _____ Kg Gel Lot / Kg Gel lote = _____				Registre siguiente dato con un decimal / Record the following data with one decimal place			

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

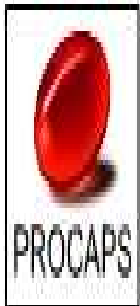

Código
Material:/
Material Code 400004768

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:/ 10

Vigencia:/

Effective Date:

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Eficiencia encapsulado = Ingesta de Gel / Kg Gel Lote X 100 /

Encapsulated efficiency = Intake de Gel / Kg Gel Lot X 100

Eficiencia encapsulado / Encapsulated efficiency = _____

Eficiencia encapsulado / Encapsulated efficiency = _____

Ver kg gelatina utilizada / See kg of gelatin used _____

Registre siguiente dato con un decimal /

Record the following data with one decimal place


REALIZADO POR/CARGO/PERFORMED BY/POSITION: _____ FECHA/DATE: _____

HORA/TIME: _____

VERIFICADO POR/CARGO/VERIFIED BY POSITION: _____ FECHA/DATE: _____

HORA/TIME: _____

COPIA VERDADERA

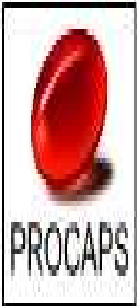

Código Material:
Material Code 400004768

Código Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL DE SECADO No. _____ (IDENTIFICATION OF DRYING TUNNEL No.)				
PROCESO (PROCESS)		ETAPA DE SECADO (DRYING STAGE)		
NOMBRE DEL PRODUCTO (PRODUCT NAME)				
CÓDIGO DEL PRODUCTO (PRODUCT CODE No.)			NÚMERO DE BATCH (BATCH No.)	
ESTADO DEL ÁREA (AREA STATUS)	LIMPIO (CLEANED)	SI/NO (YES/NO)	REALIZADO POR/FECHA (PERFORMED BY/DATE)	VERIFICADO POR /FECHA (VERIFIED BY/DATE)

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:/
Material Code 400004768

Código
Anterior:/
Previous Code N.A
Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Version:
Vigencia:/
Effective Date:

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL DE SECADO No. _____ (IDENTIFICATION OF DRYING TUNNEL No.)				
PROCESO (PROCESS)		ETAPA DE SECADO (DRYING STAGE)		
NOMBRE DEL PRODUCTO (PRODUCT NAME)				
CÓDIGO DEL PRODUCTO (PRODUCT CODE No.)			NÚMERO DE BATCH (BATCH No.)	
ESTADO DEL ÁREA (AREA STATUS)	LIMPIO (CLEANED)	SI/NO (YES/NO)	REALIZADO POR/FECHA (PERFORMED BY/DATE)	VERIFICADO POR /FECHA (VERIFIED BY/DATE)

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:/
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A
Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Version:
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000


Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL DE SECADO No. _____ (IDENTIFICATION OF DRYING TUNNEL No.)				
PROCESO (PROCESS)		ETAPA DE SECADO (DRYING STAGE)		
NOMBRE DEL PRODUCTO (PRODUCT NAME)				
CÓDIGO DEL PRODUCTO (PRODUCT CODE No.)			NÚMERO DE BATCH (BATCH No.)	
ESTADO DEL ÁREA (AREA STATUS)	LIMPIO (CLEANED)	SI/NO (YES/NO)	REALIZADO POR/FECHA (PERFORMED BY/DATE)	VERIFICADO POR /FECHA (VERIFIED BY/DATE)

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

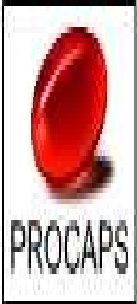

Código
Material:
Material Code 400004768

Código
Anterior:
Previous Code N.A
Dosificación:
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL DE SECADO No. _____ (IDENTIFICATION OF DRYING TUNNEL No.)				
PROCESO (PROCESS)		ETAPA DE SECADO (DRYING STAGE)		
NOMBRE DEL PRODUCTO (PRODUCT NAME)				
CÓDIGO DEL PRODUCTO (PRODUCT CODE No.)			NÚMERO DE BATCH (BATCH No.)	
ESTADO DEL ÁREA (AREA STATUS)	LIMPIO (CLEANED)	SI/NO (YES/NO)	REALIZADO POR/FECHA (PERFORMED BY/DATE)	VERIFICADO POR /FECHA (VERIFIED BY/DATE)

 CHECK LIST LIMPIEZA DE LA MÁQUINA ENCAPSULADORA CHECK LIST ENCAPSULATION MACHINE CLEANING					
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO CODE	400004768 / N.A	LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT					
CODIGO CODE		LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		MARQUE LA POSICIÓN DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION	
		Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch			
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME				REALIZADO POR PERFORMED BY	
				REVISADOR POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC	
LIMPIEZA DEL EQUIPO (Desmontar las piezas del equipo según las actividades descritas en el instructivo INST-0113 -Limpieza de máquinas encapsuladoras CBG) CLEANING OF THE EQUIPMENT (Disassemble the pieces of the equipment, according to the activities described in the instructions INST -0113 Encapsulation machine cleaning)					
Seleccionar el tipo de actividad a realizar (Marque con "✓") Select the type of activity to be performed (Check with "✓")					
		LIMPIEZA PARCIAL / PARTIAL CLEANING		☐	
				LIMPIEZA COMPLETA / FULL CLEANING	
				☐	
LIMPIEZA PARCIAL (Tiempo de acción para agentes de desinfección) SI APLICA. PARTIAL CLEANING (Time of action for disinfection agents) IF APPLICABLE					
			Tiempo de contacto Contact time	Hora inicial Start time	Hora final Final time
			10 - 15 minutos 10 - 15 minutes		
			10 - 15 minutos 10 - 15 minutes		
			10 - 15 minutos 10 - 15 minutes		
Realizado por Fecha / Hora Performed by Date / Time			Revisado por AC / SUP Fecha / Hora Reviewed by AC / SUP Date / Time		
1.LIMPIEZA DEL EQUIPO (Desmontar las piezas del equipo según las actividades descritas en el instructivo INST-0113 -Limpieza de máquinas encapsuladoras CBG) 1.CLEANING OF THE EQUIPMENT (Disassemble the pieces of the equipment, according to the activities described in the instructions INST -0113 Encapsulation machine cleaning)					
2.SOLUCIONES Y AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 2. CLEANING AND DISINFECTION SOLUTIONS AND AGENTS					
2.1.Seleccionar la solución detergente para la limpieza (Marque con "✓") PROBIO ☐ LIQUINOX ☐ SOLUCIÓN DETERGENTE AL 1% ☐ 2.1Select the detergent solution for cleaning (Mark with "✓")					
SOLUCIÓN USADA USED SOLUTION	MARQUE CON "✓" LA CONCENTRACION USADA MARK WITH "✓" THE CONCENTRATION USED	FECHA DE FABRICACIÓN MANUFACTURING DATE	FECHA DE VENCIMIENTO EXPIRATION DATE	REVISADO POR FECHA (SUP/AC) REVIEWED BY DATE (SUP/AC)	
2.2 Solución Detergente 2.2 Detergent Solution	1% ☐				
2.3.Solución de alcohol 2.3.Alcohol solution	70% ☐				

		CHECK LIST LIMPIEZA DE LA MÁQUINA ENCAPSULADORA CHECK LIST ENCAPSULATION MACHINE CLEANING			
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO CODE	400004768 / N.A	LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT					
CODIGO CODE		LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		MARQUE LA POSICIÓN DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION	
				Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch	
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME		REALIZADO POR PERFORMED BY		REVISADOR POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC	

3.LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN (Tiempos de acción para agentes de limpieza y desinfección) 3. CLEANING AND SANITIZATION (Action times for cleaning and disinfection agents)	TIEMPO DE CONTACTO CONTACT TIME	HORA INICIAL START TIME	HORA FINAL END TIME	TIEMPO TOTAL TOTAL TIME
3.1. Trasladar las partes desmontables de la máquina a utensilios y aplicar agua potable a presión para retirar los restos del producto anterior 3.1. Transfer the dismantlable parts of the machine to utensils and apply pressurized drinking water to remove the remains of the previous product.				
3.2. Humedecer tuberías y cajas de gelatina con solución detergente al 1 %,refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios 3.2. Moisten pipes and gelatin boxes with 1% detergent solution, scrub with emphasis on crevices and orifices.	10-15 minutos (minutes)			
3.3. Humedecer tuberías y cajas de gelatina con alcohol al 70% refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios 3.3. Moisten pipes and gelatin boxes with 70% alcohol rubbing with emphasis on crevices and orifices.	10-15 minutos (minutes)			
3.4. Humedecer tuberías de trasiego de medicina con solución detergente al 1 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios 3.4. Moisten medicine transfer piping with a 1% detergent solution, scrub, with emphasis on crevices and orifices.	10-15 minutos (minutes)			
3.5. Humedecer tuberías de trasiego de medicina con solución alcohol al 70 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios. 3.5. Moisten medicine transfer pipes with 70% alcohol solution, scrub with emphasis on crevices and orifices.	10-15 minutos (minutes)			
3.6. Humedecer moldes con solución detergente al 1 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios 3.6. Moisten molds with 1% detergent solution, scrub with emphasis on crevices and holes.	10-15 minutos (minutes)			
3.7. Humedecer moldes con solución alcohol al 70 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios. 3.7. Moisten molds with 70 % alcohol solution, rub emphasizing in crevices and orifices.	10-15 minutos (minutes)			
3.8. Humedecer conjunto segmento con solución detergente al 1 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios 3.8. Moisten the whole segment with 1% detergent solution, scrub with emphasis on crevices and orifices.	10-15 minutos (minutes)			
3.9. Humedecer conjunto segmento con solución alcohol al 70 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios. 3.9. Moisten the whole segment with 70% alcohol solution, scrub with emphasis on crevices and orifices.	10-15 minutos (minutes)			
3.10. Humedecer shutt assembly con solución detergente al 1 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios 3.10. Moisten shutt assembly with 1 % detergent solution, scrub with emphasis on crevices and holes.	10-15 minutos (minutes)			
3.11. Humedecer shutt assembly con solución alcohol al 70 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios 3.11. Moisten the assembly with 70 % alcohol solution, scrub with emphasis on crevices and orifices.	10-15 minutos (minutes)			
3.12. Humedecer banda transportadora con solución detergente al 1 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios 3.12. Moisten conveyor belt with 1% detergent solution, scrub with emphasis on crevices and holes.	10-15 minutos (minutes)			
3.13. Humedecer banda transportadora con solución alcohol al 70 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios 3.13. Moisten conveyor belt with 70 % alcohol solution, scrub with emphasis on crevices and holes.	10-15 minutos (minutes)			
3.14. Humedecer cada una de las canastas del tren de presecado con solución detergente al 1 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios 3.14. Moisten each of the baskets of the pre-drying train with a 1% detergent solution, scrub with emphasis on crevices and holes.	10-15 minutos (minutes)			

		CHECK LIST LIMPIEZA DE LA MÁQUINA ENCAPSULADORA CHECK LIST ENCAPSULATION MACHINE CLEANING					
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC					
CODIGO CODE		400004768 / N.A		LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT							
CODIGO CODE				LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		MARQUE LA POSICIÓN DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION		Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch	
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME				REALIZADO POR PERFORMED BY		REVISADOR POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC	
3.15. Humedecer cada una de las canastas del tren de presecado con solución alcohol al 70 %, refriegue haciendo énfasis en hendiduras y orificios. 3.15. Moisten each of the baskets of the pre-drying train with 70 % alcohol solution, scrub with emphasis on crevices and holes.				10-15 minutos (minutes)			
4. LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN (Enjuagues en los procesos de limpieza y desinfección) CLEANING AND SANITIZATION (Rinses in the cleaning and disinfection processes)							
4.1. Tipo de agua usada en en los enjuagues de las partes de la maquina refregadas con solución detergente (Marque con "✓") 4.1.Type of water used in the rinses of the parts of the machine scrubbed with detergent solution (Mark with "✓")				Agua potable Drinking water		☐	
4.2. Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes de la maquina sanitizadas (Marque con "✓") 4.2.Type of water used to rinse the sanitized parts of the machine (Mark with "✓")				Agua purificada Purified water		☐	
REALIZADO POR/FECHA /HORA (OPERADOR) REALIZED BY /DATE/ HOUR (OPERATOR)				REVISADO POR /FECHA/HORA (SUP/AC) REVIEWED BY / DATE/ HOUR (SUP/AC)			
5. LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA: La inspección final de la limpieza es realizada por el superintendente en turno, o el personal de calidad. Revisar la ausencia de residuos visibles del producto anterior, cápsulas, la ausencia de restos de las soluciones de limpieza y olores extraños en las siguientes partes de la máquina. Marque con "✓" cumple o no cumple, si no aplica cierre el espacio con guion (-) 5.CLEANING INSPECTION CHECKLIST: The final cleaning inspection is performed by the superintendent, or quality person. Check the absence of visible residues of the previous product, capsules, the absence of remains of cleaning solutions and strange odors in the following parts of the machine. Mark with "✓" meet or does not meet, if it does not apply, close the space with a hyphen (-)							
Realiza limpieza con la máquina desensamblada (Marque con "✓") Clean with the machine disassembled (Mark with "✓")							
Utiliza aire comprimido y lampara para la verificación y limpieza de la máquina (Marque con "✓") Use compressed air and a lamp to verify and clean the machine (Mark with "✓")							
		SI / YES ☐ NO / NOT ☐					
		SI / YES ☐ NO / NOT ☐					
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET
Tuberias gelatina Gelatin pipes			Canasta del tren de presecado Predrying train basket			Plato distribuidor Distributor plate	
Tubería medicina Medicine piping			Compartimientos tren de presecado Pre-drying compartments			Válvula shutt off Shut off valve	
Cajas de gelatina Boxes of gelatin			Ejes tren de presecado Predrying train axles			Chaza recolectora de capsulas Capsule collecting bucket	
Guías de película gelatina Gelatine film guides			Filtro tren de presecado Predrying train filter			Rodillos lubricadores Lubricating rollers	
Casting Casting			Acrílico tren de presecado Acrylic pre-drying train			Servoil Servoli	

COPIA VERDADERA

 CHECK LIST LIMPIEZA DE LA MÁQUINA ENCAPSULADORA CHECK LIST ENCAPSULATION MACHINE CLEANING									
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC							
CODIGO CODE		400004768 / N.A			LOTE BATCH		ORDEN ORDER		
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT									
CODIGO CODE					LOTE BATCH		ORDEN ORDER		
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	
Tapa casting Casting lid			Ejes porta molde Mold-holding axles			canasta recolectora de malla mesh collection basket			
Chutt assanbly Chutt assanbly			Moldes Molds			Cuerpo de la máquina Machine casing			
Bajantes de cápsulas Capsule lowerator			Manguera suministro de aire moldes Air supply hose molds			Julabo (Criotermoestato) Julabo (Criotermoestato)			
Segmento Segment .									
REALIZADO POR/FECHA (OPERADOR) REALIZED BY/DATE (OPERATOR)						REVISADO POR /FECHA/HORA (SUP/AC) REVIEWED BY / DATE/ HOUR (SUP/AC)			
NOTA: La finalización del proceso de limpieza se da con la revisión y aprobación por el superintendente, inspector o monitor de calidad. NOTE: Completion of the cleaning process is upon review and approval by the superintendent, inspector or quality monitor.									
CONVENCIONES AC : Personal de calidad / SUP : Superintendente CONVENTIONS AC : Quality Staff / SUP : Superintendent									



DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE

ÁREA /AREA				PROCESO /PROCESS	
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	

PRODUCTO ANTERIOR /PREVIOUS PRODUCT					
CODIGO /CODE		LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	
1.0	VERIFICACION DEL AREA /VERIFICATION OF THE AREA	SI /YES		NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified				
1.2	Esta el area limpia y desinfectada / Is the area clean and disinfected				
1.3	Las rejillas, puertas, marcos de puertas, vidrios y ventanas, estan limpias/ The grates, doors, door frames, glass and windows are clean				
1.4	Las condiciones ambientales del area son las requeridas para el proceso/ The environmental conditions of the area are those required for the process				
1.5	Están los reservorios de tinta completamente limpios (Aplica proceso impresión de capsula blanda y encapsulado) / Are the ink reservoirs completely clean (Applies soft capsule printing and encapsulation process)				
1.6	Existe en el área o máquina blísteres vacios o materiales residuos del set up (Aplica proceso empaque Blister) / There are empty blisters or waste materials from the setup in the area or machine (Applies Blister packaging process)				
1.7	Asegúrese que las zonas de difícil acceso estén completamente limpias/ Make sure hard-to-reach areas are completely clean				
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO /VERIFICATION OF THE EQUIPMENT	SI /YES		NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified				
2.2	Esta el equipo limpio / Is the equipment clean				
2.3	Funciona el equipo correctamente / The equipment works properly				
2.4	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correctly installed, complete and in good condition.				
2.5	Los PLC, Panel View, sistema de visión, pantallas de configuración de los equipos, instrumentos y sistemas de controles en proceso, tiene información del proceso anterior / PLCs, Panel View, vision systems, equipment configuration screens, instruments and process control systems have information about the previous process.				
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI /YES		NO	N.A
3.1	Existen documentos del producto anterior en el area / There are documents of the previous product in the area				
3.2	El proceso de limpieza y desinfección de area y equipo esta registrada en la bitacora / The cleaning and disinfection process of the area and equipment is recorded in the logbook.				
3.3	Las etiquetas de vacio limpio de los equipos estan completas y anexas al batch record / The clean vacuum labels of the equipment are complete and attached to the batch record.				
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / STAFF VERIFICATION	SI /YES		NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal safeguard elements				
4.2	Uniforme apropiado y completo / Proper and complete uniform				
4.3	Uniforme limpio sin pelusa, hilo, cabello y restos de etiqueta / Clean uniform free of lint, thread, hair and tag residue				
4.4	El uniforme contiene capsulas en los bolsillo, mangas,cuello o sitios que permitan el transporte de capsulas. / The uniform contains capsules in the pockets, sleeves, collar or places that allow the transport of capsules.				
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES /VERIFICATION OF MATERIALS AND TOOLS	SI /YES		NO	N.A
5.1	Existen materiales diferentes a los que se van a utilizar en el proceso / Exist differents materials to which are normally used in the process				



DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE

ÁREA /AREA				PROCESO /PROCESS			
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC						
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER				
5.2	Los utensilios y materiales requeridos se encuentran en el área / The tools and materials required are in the area						
5.3	Las materias primas dispensadas corresponden con la orden de producción / Dispensed raw materials correspond to the production order						
5.4	La cantidad de materias primas dispensadas corresponden con la establecida en la orden de producción / The quantity of raw materials dispensed correspond to the production order						
5.5	Los materiales corresponden con la orden de empaque / The materials correspond to the packaging order						
5.6	La cantidad de materiales corresponden con la establecida en la orden de empaque / The quantity of materials correspond to the packaging order						
5.7	El registro de la tinta a usar para la impresión de las capsulas corresponde con la orden de producción / The register of the ink to be used for the capsule printing process corresponds to the production order						

REALIZADO POR /FECHA/HORA/
DONE BY /DATE/TIME

REVISADO POR /FECHA/HORA/
REVIEWED BY/ DATE/TIME

Observaciones/
Comments:

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA / FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA			PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA / VERIFICATION OF AREA	SI/YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified.			
1.2	Se han recogido las materias primas, materiales y granel caidos al piso. / Raw materials, materials and bulk materials that fell to the floor have been collected..			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO / VERIFICATION OF EQUIPMENT	SI/YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified.			
2.2	Los materiales utilizados (MP, GR, ME) remanentes del proceso han sido retirados del equipo / The materials used (MP, GR, ME) remaining from the process have been removed from the			
2.3	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correct installed, complete and in good condition			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI/YES	NO	N.A
3.1	Al finalizar el despeje de linea, no quedan en el area documentos del producto inmediatamente trabajado / At the end of the line clearance, no documents are in the area of immediately worked product.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / VERIFICATION OF PERSONAL	SI/YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal protection.			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Appropriate and complete uniform.			
4.3	Uniforme limpio / Clean uniform.			

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA /
FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA		PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		
		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER		
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES / VERIFICATION OF TOOLS AND MATERIALS	SI/YES	NO	N.A
5.1	Los utensilios han sido retirados / The tools have been removed.			
5.2	Los empaques, bolsas, tanques, canastas, bandejas usados por los materiales del producto trabajado han sido retirados / The packaging (MP, GR, ME), bags, tanks, baskets, trays used for the materials of the worked product have been removed.			
5.3	La cantidad de materiales remanentes ha sido registrada para la conciliación de producto / The amount of remaining material has been registered for the reconciliation of product.			
5.4	Los materiales (MP, GR, ME) remanentes han sido identificados y devueltos / The remaining materials (MP, GR, ME) have been identified and returned.			
5.5	Se han registrado las cantidades producidas en los documentos establecidos para tal fin / The quantities produced have been in the documents established for that purpose.			
5.6	Los productos resultado del proceso han sido retirados o se encuentran debidamente sellados y protegidos / The result of the process products have been recalled or are properly sealed and protected.			

REALIZADO POR
/FECHA/HORA/DONE BY
/DATE/TIME

REVISADO POR
/FECHA/HORA/REVIEWED BY
/DATE/TIME

Observaciones:
Observations:

MP: Materia prima/MP: Raw material ME: Material de empaque/ ME: Packaging material GR: Granel/GR: Bulk

COPIA VERDADERA



IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS / IDENTIFICATION OF AREAS

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) /PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
---	--

ÁREA /AREA	
------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								
NOTA: SI DESPUES DE 24 HORAS EL AREA NO HA SIDO UTILIZADA, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA NOTE: IF 24 HOURS LATER THE AREA HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.								
OBSERVACIONES /COMMENTS								



IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO /EQUIPMENT IDENTIFICATION

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) / PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
--	--

EQUIPO /EQUIPMENT	
----------------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR /DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR /VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								

NOTA 1: SI DESPUES DE 24 HORAS EL EQUIPO NO HA SIDO UTILIZADO, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA
NOTE 1: IF 24 HOURS LATER THE EQUIPMENT HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.

NOTA 2: UNA VEZ UTILIZADO EL EQUIPO, SE DEBE PROCEDER CON SU LIMPIEZA. ESTE NO DEBE PERMANECER MAS DE 8.5 HORAS SUCIO.
NOTE 2: ONCE THE EQUIPMENT IS USED, IT SHOULD BE PROCEEDED WITH ITS CLEANING. THIS SHOULD NOT STAY OVER 8.5 HOURS DIRTY

OBSERVACIONES /COMMENTS	

COPIA VERDADERA



CONSUMO DE MEDICINA/
MEDICINE CONSUMPTION

Producto/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código No./
Code No.: 400004768 / N.A

Lote No./
Lot No.:

Orden No./
Order No.:

Tamaño de Partícula/
Particle Size:

Densidad/
Density:

Mínimas/
Minims:

Molde / Formato
Die roll / Form:

Máquina/
Machine:

SUBLOTE/ SUBLOT										
NOMBRE DEL OPERARIO/ OPERATOR'S NAME										
PESO TANQUE VACÍO/ WEIGHT OF EMPTY TANK										
PESO BRUTO/ GROSS WEIGHT										
Kg MONTADOS/ LOADED Kg										
Kg BAJADOS/ UNLOADED Kg										
Kg ENCAPSULADOS/ ENCAPSULATED Kg										
FECHA INICIACIÓN/ START DATE										
HORA INICIACIÓN/ START TIME										
FECHA FINALIZACIÓN/ END DATE										
HORA FINALIZACIÓN/ END TIME										
TIEMPO TOTAL/ TOTAL TIME										
TIEMPO PERDIDO/ WASTED TIME										
kg Medicina/Lote kg Medicine/Lot	H.M.R/ M.H.R.		kg Gelatina/Lote kg Gelatin/Lot							
							Jefe de Planta Head of the Plant			

Observaciones durante su proceso/
Observations during the Process:

	Capsulas Obtenidas Obtained Capsules	% Rendimiento % Yield



CONSUMO DE GELATINA/
GELATIN CONSUMPTION

Producto/ VITAMINA D3 50000 UI CBG |
Product: : VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código No/ 400004768 / N.A **Lote No./**
Code No.: **Lot No.:**


Orden No./
Order No.:

COLOR/COLOUR							
NOMBRE DEL OPERARIO/ OPERATOR'S NAME							
BATCH No/BATCH No							
Kg MONTADOS/ LOADED Kg							
Kg BAJADOS/ UNLOADED Kg							
Kg CONSUMIDOS/ CONSUMED Kg							
FECHA INICIACIÓN/ START DATE							
HORA INICIACIÓN/ START TIME							
FECHA FINALIZACIÓN/ END DATE							
HORA FINALIZACIÓN/ END TIME							
TIEMPO TOTAL/ TOTAL TIME							
TIEMPO PARADAS DE LA MÁQUINA/ MACHINE STANDING TIME							
TIEMPO PRODUCCIÓN/ PRODUCTION TIME							
Kg / HORA - Kg / HOUR							
CONSUMOS/ CONSUMPTIONS		EFICIENCIA EN ENCAPSULADO/ EFFICIENCY IN THE ENCAPSULATION:		VERIFICADO POR/ VERIFIED BY:			

Observaciones: Observations:

F-INST-0052-8 V00

COPIA VERDADERA

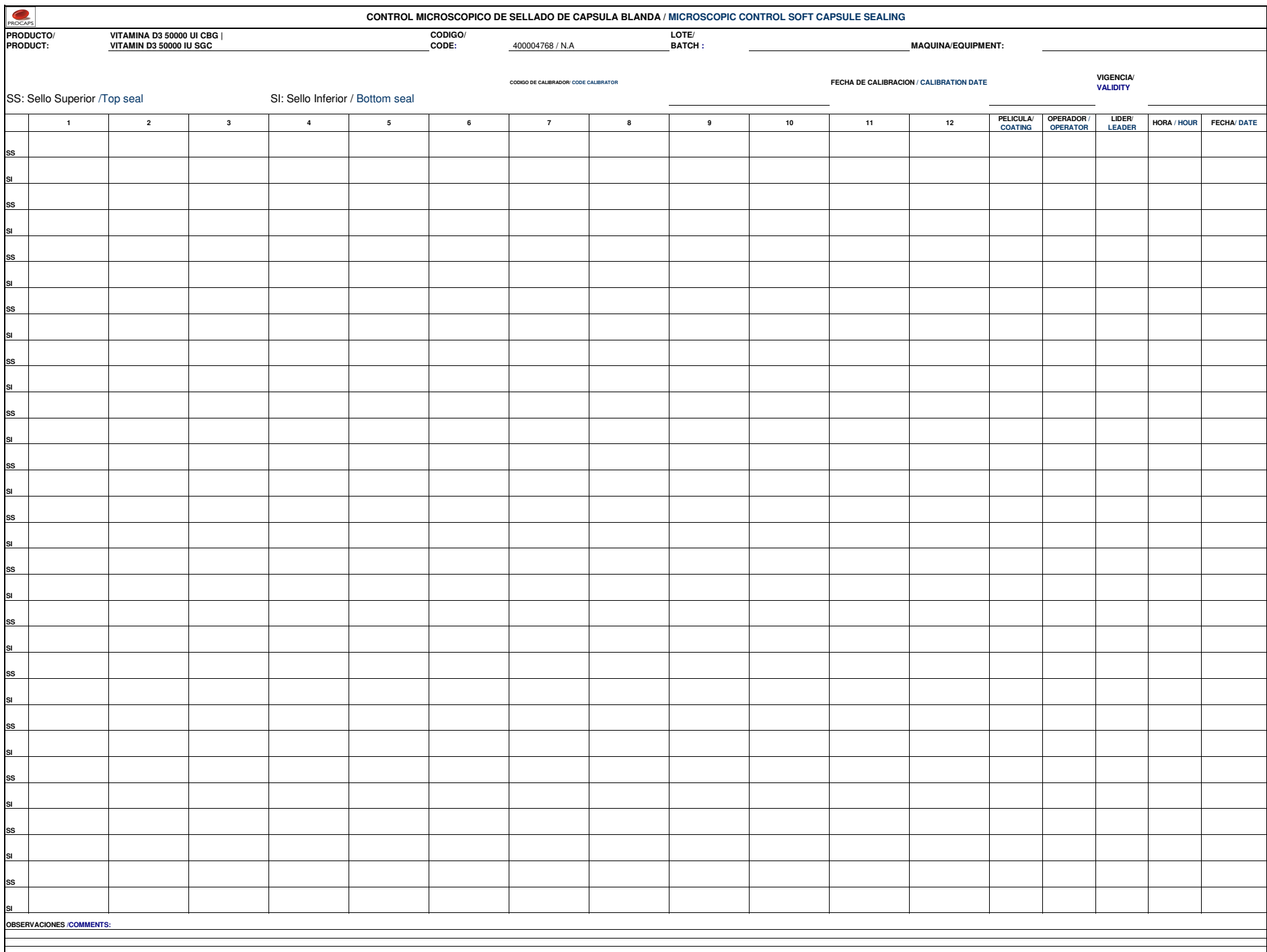

CONTROL DE PRESECADO DE CAPSULAS/CONTROL OF CAPSULE PRE-DRYING

PRODUCTO/PRODUCT: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

CODIGO/CODE: 400004768 / N.A

LOTE/BATCH:

ORDEN/ORDER:

[illegible]

1) **ESPECIFICACION/ SPECIFICATION:**

Registre la especificacion definida en el instructivo de encapsulado de cada producto.
Record the specification defined in the instructions for each product encapsulation.

COPIA VERDADERA

CONTROL DE OPERACIÓN DE ENCAPSULADO CBG /CONTROL OF ENCAPSULATION PROCESS SOFTGEL

PRODUCTO/
PRODUCT:

VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

CODIGO/CODE:

400004768 / N.A

LOTE/BATCH:

ORDEN DE
TRABAJO/JOB ORDER

MOLDE/
DIE ROLL:

5.5 OVAL A STD

VELOCIDAD/SPEED:
rpm

2.7

VEHICULO /
CARRIER:

MEDICINA

ESP DE PELICULA
/RIBBON THICKNESS

0.03

±0.002"

H.MAQUINA
/H.MACHINE:

MAQUINA/MACHINE

CODIGO DE
CALIBRADOR
/CALIBRATOR CODE

FECHA DE CALIBRACION
/CALIBRATION DATE:

VIGENCIA
/VALIDATI
ON

FECHA /DATE	HORA/TIME	ESPESOR DE PELICULA //RIBBON THICKNESS		TEMPERATURA CAJAS DE GELATINA /SPREADER BOXES TEMPERATURE		TEMP. SEGMENTO /WEDGE TEMPERATURE 40 ± 5°C	TEMP. COOLER /COOLER TEMPERATURE 15 ± 5°C	REALIZADO POR / DONE BY	VERIFICADO POR /VERIFIED BY
		IZQUIERDA /LEFT	DERECHA/RIGHT	IZQUIERDA /LEFT 60 ± 5°C	DERECHA/RIGHT 60 ± 5°C				
		F	F						
		M	M						
		I	I						
		F	F						
		M	M						
		I	I						
		F	F						
		M	M						
		I	I						
		F	F						
		M	M						
		I	I						
		F	F						
		M	M						
		I	I						
		F	F						
		M	M						
		I	I						
		F	F						
		M	M						
		I	I						

OBSERVACIONES/COMMENTS:



ACTA DE SANITIZACION/**SANITIZATION ACT**

FECHA/**DATE**: _____

NOMBRE PRODUCTO/**PRODUCT NAME**:
VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

LOTE/**BATCH**: _____

AREAY/O EQUIPO/**AREA AND/OR /EQUIPMENT**

LAVADO REALIZADO POR /**WASHING PERFORMED BY**:


REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

SANITIZACION REALIZADA POR/**SANITATION PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

JEFE DE AREA/ **HEAD OF AREA**

F-INST-0064-3 V02

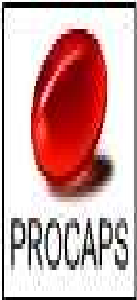


Código Material: Material Code	400004768	Producto:/ Product:	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		
Código Anterior:/ Previous Code	N.A				
Dosificación:/ Dosage:	275 mg	Cantidad a Producir:/ Quantity to Produce	100,000	Molde/Punzon:/ Mold/Punch	5.5 OVAL
Grupo de artículo:/ Article Group	Z103001				
		Cantidad Base:/ Amount Base	100,000		
Lote Standard:/ Standard Lot:	100000	Forma Farmacéutica:/ Pharmaceutical Form:	CBG/SGC	Vida útil:/ Useful Life Time:	180 Dias/Days
		Versión:/ Version:	10		
		Vigencia:/ Effective Date:		Und. Medida del producto:/ Product Unit Measure:	un

ETIQUETAS/LABELS

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

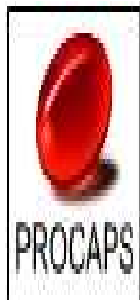

Código
Material:
Material Code 400004768

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

SECADO / DRYING

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Cápsula blanda de gelatina de color rojo, forma oval. Contiene líquido oleoso ligeramente amarillo, Cada cápsula lleva impreso en tinta blanca el logo "50".

Red, oval-shape, soft gelatine capsule. It contains a slightly yellow oily liquid. Each capsule has "50" printed in white ink.

INSTRUCCIONES GENERALES / GENERAL INSTRUCTIONS:

ÁREA DE SECADO / DRYING AREA

Lea las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y síguelas en estricto orden:

Before starting the process, read the instructions described herein, and follow them in the strictest order:

La persona debe utilizar el uniforme correspondiente: Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes.

The person must wear the corresponding adequate uniform: white overall, bonnet, (hair cover), nose- mouth protector, boots not slippery.

REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión De Desviaciones Del Sistema De Calidad.

(Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management)

- Verificar el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

- Verify the clearance of the line (areas and equipments) and the environmental conditions in the area:

- TEMPERATURA / TEMPERATURE: 23.0°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 21.0°C Máximo: 25.0°C.

Alarm Limits: Minimum: 21.0°C Maximum: 25.0°C.

Límites de Acción: Mínimo: 19.0°C Máximo: 27.0°C.

Action Limits: Minimum: 19.0°C Maximum: 27.0°C.

- HUMEDAD RELATIVA / RELATIVE HUMIDITY: 20 %

Límites de Alarma: Máximo: 22%.

Alarm Limits: Maximum: 22%.

Límites de Acción: Máximo: 25%.

Action Limits: Maximum: 25%.

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:

(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)

Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.


(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

Inicio de proceso/Start Process:

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

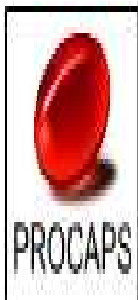

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/Final Process

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Seguir y ejecutar las actividades de secado de cápsulas descritas en los siguientes procedimientos:

Follow and perform the Capsule Drying activities described on the following procedures

- * Despeje de Linea. Código: INST-0109
- * **Line Clearance. Code No. INST-0109**
- * Identificación de Area y/o Equipo Código: INST-0073
- * **Identification of Areas and/ or Equipments. Code No. INST-0073**
- * Limpieza y Desinfección de Canastas Plasticas y Bandejas Planas. Código: INST-0055
- * **Cleaning and Disinfection of plastic crates and trays Planas. Code No. INST-0055**
- * Identificación de Productos en Proceso en Plantas Productivas. Código: INST-0189.
- * **Identification of In-Process Products in Production Plants. Code No. INST-0189**
- * Limpieza y Sanitización de Areas de Manufactura. Código: INST-0064
- * **Cleaning and Sanitation of the Manufacture Areas. Code No. INST-0064**
- * Manejo y Registro de Dureza en el Durometro Bareiss . Código: INST-0036
- * **Management and register of hardness in the Bareiss Durometer. Code No. INST-0036**
- * Uso, limpieza y desinfección de túneles de secado.Código INST-0691
- * **Use, cleaning and disinfection of drying tunnels.Code No. INST-0691**

1. APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC) PARA INICIAR ETAPA DE SECADO		
1. QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL TO START DRYING STAGE		
Notifique al inspector de AC para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso. Request verification by the QA inspector of the following steps before starting the process.		√
1.1	Verifique que las áreas estén limpias y que se cumplan las condiciones ambientales. Verify that the areas are clean and the environmental conditions are met.	
1.2	Verifique que los operarios tengan los elementos de protección personal requeridos. Verify that the operators are wearing the required personal protective equipment.	
1.3	Verifique que las canastas para el descargue de cápsulas estén limpias. Verify that the baskets for capsules unloading are clean.	
APROBACIÓN FINAL DE AC QA FINAL APPROVAL		FIRMA SIGNATURE
		FECHA/HORA DATE/TIME

CONTROL EN PROCESO/IN-PROCESS CONTROL :

2. DUREZA DE CAPSULAS PARA EL DESCARGUE / 2. HARDNESS OF CAPSULES FOR UNLOADING

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

Especificación de Dureza de cápsulas para el Descargue.
Specification Hardness of capsules for unloading.

Cuando el promedio de la Dureza de Cápsulas para el Descargue
en cada carro sea no menos de 7.0 N
When the average of the hardness of capsules for unloading for
each cart is Not less than 7.0 N

2.1 Mida y registre la dureza promedio de cada carro cargado con el producto que se encuentre en el área de secado. Para el primer muestreo, recoger las capsulas 36± 12 horas después del ingreso del carro en los tuneles de secado y, luego, repetir el muestreo cada 24 ± 12 horas hasta que el producto obtenga la dureza requerida en el MBR.

Siga el instructivo INST-0036, Manejo y Registro de Dureza en el Durómetro Bareiss.

Reporte la cantidad de cápsulas tomadas en cada muestreo.

(2.1 Measure and record the average hardness of each cart with the product in the drying area. For the first sampling, collect the capsules 36± 12 hours after the entry of the car into the drying tunnels and then, repeat the sampling every 24 ± 12 hours until that the product obtains the required hardness in the MBR.)

Follow instructions INST-0036, Handling and Hardness Registration on the Bareiss Hardness Tester.

Report the amount of capsules taken in every sampling)

- Registrar Dureza de cápsulas para el Descargue / Record the Hardness of capsules for unloading: _____

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

OBSERVACIONES OBSERVATIONS: _____

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A
Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Version:
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL DE SECADO No. _____ (IDENTIFICATION OF DRYING TUNNEL No.)				
PROCESO (PROCESS)		ETAPA DE SECADO (DRYING STAGE)		
NOMBRE DEL PRODUCTO (PRODUCT NAME)				
CÓDIGO DEL PRODUCTO (PRODUCT CODE No.)				NÚMERO DE BATCH (BATCH No.)
ESTADO DEL ÁREA (AREA STATUS)	LIMPIO (CLEANED)	SI/NO (YES/NO)	REALIZADO POR/FECHA (PERFORMED BY/DATE)	VERIFICADO POR /FECHA (VERIFIED BY/DATE)

COPIA VERDADERA



Código Material:
Material Code

400004768

Código Anterior:
Previous Code

N.A

Dosificación:
Dosage

275 mg

Grupo de artículo:
Article Group

Z103001

Lote Standard:
Standard Lot

100000

Producto:
Product

VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce

100,000

Cantidad Base:
Amount Base

100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form

CBG/SGC

Versión:
Version

10

Vigencia:
Effective Date

Molde/Punzon:
Mold/Punch

5.5 OVAL

Vida útil:
Useful Life Time

180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure

un

IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL DE SECADO No. _____ (IDENTIFICATION OF DRYING TUNNEL No.)				
PROCESO (PROCESS)		ETAPA DE SECADO (DRYING STAGE)		
NOMBRE DEL PRODUCTO (PRODUCT NAME)				
CÓDIGO DEL PRODUCTO (PRODUCT CODE No.)			NÚMERO DE BATCH (BATCH No.)	
ESTADO DEL ÁREA (AREA STATUS)	LIMPIO (CLEANED)	SI/NO (YES/NO)	REALIZADO POR/FECHA (PERFORMED BY/DATE)	VERIFICADO POR /FECHA (VERIFIED BY/DATE)

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Código
Anterior:
Previous Code N.A
Dosificación:
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote estándar:
Standard Lot: 100000

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL DE SECADO No. _____ (IDENTIFICATION OF DRYING TUNNEL No.)				
PROCESO (PROCESS)		ETAPA DE SECADO (DRYING STAGE)		
NOMBRE DEL PRODUCTO (PRODUCT NAME)				
CÓDIGO DEL PRODUCTO (PRODUCT CODE No.)			NÚMERO DE BATCH (BATCH No.)	
ESTADO DEL ÁREA (AREA STATUS)	LIMPIO (CLEANED)	SI/NO (YES/NO)	REALIZADO POR/FECHA (PERFORMED BY/DATE)	VERIFICADO POR /FECHA (VERIFIED BY/DATE)

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A
Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Versión:
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Lote Stándard:/
Standard Lot: 100000

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

IDENTIFICACIÓN DEL TÚNEL DE SECADO No. _____ (IDENTIFICATION OF DRYING TUNNEL No.)				
PROCESO (PROCESS)		ETAPA DE SECADO (DRYING STAGE)		
NOMBRE DEL PRODUCTO (PRODUCT NAME)				
CÓDIGO DEL PRODUCTO (PRODUCT CODE No.)				NÚMERO DE BATCH (BATCH No.)
ESTADO DEL ÁREA (AREA STATUS)	LIMPIO (CLEANED)	SI/NO (YES/NO)	REALIZADO POR/FECHA (PERFORMED BY/DATE)	VERIFICADO POR /FECHA (VERIFIED BY/DATE)

COPIA VERDADERA

REGISTRO DE DUREZA PARA CAPSULAS BLANDAS DE GELATINA
/RECORD OF HARDNESS FOR SOFT CAPSULES OF GELATIN

Codigo /Code: 400004768 / N.A Descripción /Description: VITAMINA D3 50000 UI CBG | VITAMIN D3 50000 IU SGC Lote /Batch: OT / PO:

REPORTE DE DUREZA DE CÁPSULAS / REPORT OF HARDNESS OF CAPSULES													
Carro No / Cart No.	CÁPSULAS / CAPSULES									Dureza Promedio /Hardness Average	Fecha - Date /Hora - Hour	Realizado Por / Realized By	Verificado Por / Verified by
	1	2	3	4	5	6	7	8	9				

OBSERVACIONES / COMMENTS:



Product/

**Código/
Code No.:** 400004768 / N.A

**Lote/
Lot No.:**

**Orden/
Order No.:**

CODIGO DUROMETRO/DUROMETER CODE

FECHA DE CALIBRACION/DATE OF CALIBRATION

* Seleccione la especificacion por el cual se realiza el proceso de descargue de capsulas

* Select the specification for which the process of unloading of capsules is made

(*) ESPECIFICACIONES/SPECIFICATIONS:

REPORTE DE SECADO/ DRYING REPORT

Observaciones/
Observations: _____

(*) Registre la especificación de dureza o % de humedad residual, definida en el instructivo de secado.
 (*) Record the hardness or % residual moisture specification, as defined in the drying instructions.

COPIA VERDADERA



ACTA DE SANITIZACION/**SANITIZATION ACT**

FECHA/**DATE**: _____

NOMBRE PRODUCTO/**PRODUCT NAME**:
VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

LOTE/**BATCH**: _____

AREAY/O EQUIPO/**AREA AND/OR /EQUIPMENT**

LAVADO REALIZADO POR /**WASHING PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:


SANITIZACION REALIZADA POR/**SANITATION PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

JEFE DE AREA/ **HEAD OF AREA**

F-INST-0064-3 V02

COPIA VERDADERA

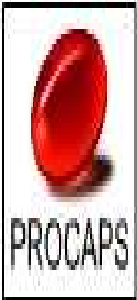


Código Material:/ Material Code	400004768	Producto:/ Product:	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		
Código Anterior:/ Previous Code	N.A				
Dosificación:/ Dosage:	275 mg	Cantidad a Producir:/ Quantity to Produce	100,000	Molde/Punzon:/ Mold/Punch	5.5 OVAL
Grupo de artículo:/ Article Group	Z103001				
		Cantidad Base:/ Amount Base	100,000		
Lote Stándard:/ Standard Lot:	100000	Forma Farmacéutica:/ Pharmaceutical Form:	CBG/SGC	Vida útil:/ Useful Life Time:	180 Dias/Days
		Versión:/ Version:	10		
		Vigencia:/ Effective Date:		Und. Medida del producto:/ Product Unit Measure:	un

ETIQUETAS/LABELS

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

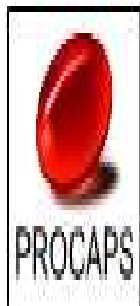

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión:/ 10

Vigencia:/

Effective Date:

Und. Medida del producto:/

Product Unit Measure: un

INSPECCION / INSPECTION

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Cápsula blanda de gelatina de color rojo, forma oval. Contiene líquido oleoso ligeramente amarillo, Cada cápsula lleva impreso en tinta blanca el logo "50".

Red, oval-shape, soft gelatine capsule. It contains a slightly yellow oily liquid. Each capsule has "50" printed in white ink.

INSTRUCCIONES GENERALES / GENERAL INSTRUCTIONS:

ÁREA DE INSPECCIÓN (INSPECTION AREA) (Área de Inspección No. (Inspection Area No.): _____)

Lea las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y sígales en estricto orden:

Before starting the process, read the instructions described herein, and follow them in the strictest order:

La persona debe utilizar el uniforme correspondiente: Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes.

The person must wear the corresponding adequate uniform: white overall, bonnet, (hair cover), nose- mouth protector, boots not slippery.

REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión De Desviaciones Del Sistema De Calidad.

(Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management)

- Verificar el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

- Verify the clearance of the line (areas and equipments) and the environmental conditions in the area:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.020 (Positivo) pulgadas de agua - Máximo: 0.150 (Positivo) pulgadas de agua.

PRESSURE DIFFERENTIAL: Minimum: 0.020 (Positive) Inches of water - Maximum: 0.150 (Positive) Inches of water.

- TEMPERATURA / TEMPERATURE: 23.0°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 21.0°C Máximo: 25.0°C.

Alarm Limits: Minimum: 21.0°C Maximum: 25.0°C.

Límites de Acción: Mínimo: 19.0°C Máximo: 27.0°C.

Action Limits: Minimum: 19.0°C Maximum: 27.0°C.

- HUMEDAD RELATIVA / RELATIVE HUMIDITY: 45 %

Límites de Alarma: Máximo: 50%.

Alarm Limits: Maximum: 50%.

Límites de Acción: Máximo: 55%.

Action Limits: Maximum: 55%.

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:

(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)

Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.

(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

Inicio de proceso/Start Process:

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/Final Process

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Seguir y ejecutar las actividades de inspección de cápsulas descritas en los siguientes procedimientos:

Follow and perform the Capsule Inspection activities described on the following procedures.

- * Despeje de Linea. Código: INST-0109
- * **Line Clearance. Code No. INST-0109**
- * Identificación de Área y/o Equipo Código: INST-0073
- * **Identification of Areas and/ or Equipments. Code No. INST-0073**
- * Secado, Descargue e Inspección de Cápsulas. Código: INST-0195
- * **Drying, Unloading and Inspection of Capsules. Code No. INST-0195**
- * Limpieza y Desinfección de Canastas Plásticas y Bandejas Planas. Código: INST-0055
- * **Cleaning and Disinfection of plastic crates and trays Planas. Code No. INST-0055**
- * Identificación de Productos en Proceso en Plantas Productivas. Código: INST-0189.
- * **Identification of In-Process Products in Production Plants. Code No. INST-0189**
- * Calificación del personal de inspección. Código: SOP-0500
- * **Qualification of the Personnel from Inspection. Code No. SOP-0500**
- * Limpieza y Sanitización de Areas de Manufactura. Código: INST-0064
- * **Cleaning and Sanitation of the Manufacture Areas. Code No. INST-0064**

1. APROBACION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC) PARA INICIAR EL PROCESO

1. QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL TO START STAGE

Notifique al inspector de AC para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso.

Request verification by the QA inspector of the following steps before starting the process.

		√
1.1	Verifique que las áreas estén limpias. Verify that the area is clean.	
1.2	Verifique que los operarios tengan el equipo de protección personal necesario. Verify that the operators are wearing the required personal protective equipment.	
1.3	Verifique que la máquina este limpia. Verify that the Machine is clean.	
1.4	Verifique que cada una de las canastas este identificada con el nombre del producto, código y el número de Lote según se indica en el Batch Record. Verify that each basket is identified by the product name, code No. and Lot No. as it appears in the Batch Record.	

APROBACIÓN FINAL DE AC QA FINAL APPROVAL	FIRMA SIGNATURE	FECHA/HORA DATE/TIME

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

REGISTRAR LOS DEFECTOS ENCONTRADOS EN ESTA ETAPA:
REGISTER THE DEFECTS FOUND IN THIS STAGE:

LISTADO DE DEFECTOS/ LISTING OF DEFECTS	Nº DE CÁPSULAS DEFECTUOSAS/ No OF DEFECTIVE CAPSULES
Goteos o escapes por el sello de la cápsula/ Drips or Leaks through the capsule seal	
Manchas en las caras de las cápsulas/ Stains on the sides of the capsules	
Manchas en el sello por migración de medicina/ Stains on the seal due to migration of medicine	
Sello defectuoso/ Defective seal	
Cápsulas deformes/ Misshapen capsules	
Cápsulas pegadas/ Stuck capsules	
Cápsulas grasosas/ Greasy capsules	
Cápsulas colapsadas por el sello/ Capsules collapsed by the seal	
Aire en la Medicina/ Air in the medicine	
Aire en la Gelatina/ Air in the gelatine	
Subdosificadas/ Underdosed	
Sobrellenadas/ Overfilled	
Lubricante en la cápsula/ Lubricant in the capsule	
Sello Sucio/ Dirty seal	
Otros (a)/ Others	
TOTAL CÁPSULAS DEFECTUOSAS/ TOTAL DEFECTIVE CAPSULES	

(a) Si existe algún otro defecto que no se encuentre en este listado especificar en la tabla
(a) If there is any other defect, not found in this listing, specify in the table

REALIZADO POR/PERFORMED BY: VERIFICADO POR/VERIFIED BY:

OBSERVACIONES/OBSERVATIONS:

COPIA VERDADERA

**DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE**

ÁREA /AREA			PROCESO /PROCESS	
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	

PRODUCTO ANTERIOR /PREVIOUS PRODUCT			
CODIGO /CODE		LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER

1.0	VERIFICACION DEL AREA /VERIFICATION OF THE AREA	SI /YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified			
1.2	Esta el area limpia y desinfectada / Is the area clean and disinfected			
1.3	Las rejillas, puertas, marcos de puertas, vidrios y ventanas, estan limpias/ The grates, doors, door frames, glass and windows are clean			
1.4	Las condiciones ambientales del area son las requeridas para el proceso/ The environmental conditions of the area are those required for the process			
1.5	Están los reservorios de tinta completamente limpios (Aplica proceso Impresión de capsula blanda y encapsulado) / Are the ink reservoirs completely clean (Applies soft capsule printing and encapsulation process)			
1.6	Existe en el área o máquina blísteres vacios o materiales residuos del set up (Aplica proceso empaque Blister) / There are empty blisters or waste materials from the setup in the area or machine (Applies Blister packaging process)			
1.7	Asegúrese que las zonas de difícil acceso estén completamente limpias/ Make sure hard-to-reach areas are completely clean			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO /VERIFICATION OF THE EQUIPMENT	SI /YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified			
2.2	Esta el equipo limpio / Is the equipment clean			
2.3	Funciona el equipo correctamente / The equipment works properly			
2.4	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correctly installed, complete and in good condition.			
2.5	Los PLC, Panel View, sistema de visión, pantallas de configuración de los equipos, instrumentos y sistemas de controles en proceso, tiene información del proceso anterior / PLCs, Panel View, vision systems, equipment configuration screens, instruments and process control systems have information about the previous process.			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI /YES	NO	N.A
3.1	Existen documentos del producto anterior en el area / There are documents of the previous product in the area			
3.2	El proceso de limpieza y desinfección de area y equipo esta registrada en la bitacora / The cleaning and disinfection process of the area and equipment is recorded in the logbook.			
3.3	Las etiquetas de vacio limpio de los equipos estan completas y anexas al batch record / The clean vacuum labels of the equipment are complete and attached to the batch record.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / STAFF VERIFICATION	SI /YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal safeguard elements			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Proper and complete uniform			
4.3	Uniforme limpio sin pelusa, hilo, cabello y restos de etiqueta / Clean uniform free of lint, thread, hair and tag residue			
4.4	El uniforme contiene capsulas en los bolsillo, mangas,cuello o sitios que permitan el transporte de capsulas. / The uniform contains capsules in the pockets, sleeves, collar or places that allow the transport of capsules.			
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES /VERIFICATION OF MATERIALS AND TOOLS	SI /YES	NO	N.A
5.1	Existen materiales diferentes a los que se van a utilizar en el proceso / Exist differents materials to which are normally used in the process			

COPIA VERDADERA



DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE

ÁREA /AREA			PROCESO /PROCESS		
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER		
5.2	Los utensilios y materiales requeridos se encuentran en el área / The tools and materials required are in the area				
5.3	Las materias primas dispensadas corresponden con la orden de producción / Dispensed raw materials correspond to the production order				
5.4	La cantidad de materias primas dispensadas corresponden con la establecida en la orden de producción / The quantity of raw materials dispensed correspond to the production order				
5.5	Los materiales corresponden con la orden de empaque / The materials correspond to the packaging order				
5.6	La cantidad de materiales corresponden con la establecida en la orden de empaque / The quantity of materials correspond to the packaging order				
5.7	El registro de la tinta a usar para la impresión de las capsulas corresponde con la orden de producción / The register of the ink to be used for the capsule printing process corresponds to the production order				

REALIZADO POR /FECHA/HORA/
DONE BY /DATE/TIME

REVISADO POR /FECHA/HORA/
REVIEWED BY/ DATE/TIME

Observaciones/
Comments:

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA / FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA			PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA / VERIFICATION OF AREA	SI/YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified.			
1.2	Se han recogido las materias primas, materiales y granel caidos al piso. / Raw materials, materials and bulk materials that fell to the floor have been collected..			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO / VERIFICATION OF EQUIPMENT	SI/YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified.			
2.2	Los materiales utilizados (MP, GR, ME) remanentes del proceso han sido retirados del equipo / The materials used (MP, GR, ME) remaining from the process have been removed from the			
2.3	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correct installed, complete and in good condition			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI/YES	NO	N.A
3.1	Al finalizar el despeje de linea, no quedan en el area documentos del producto inmediatamente trabajado / At the end of the line clearance, no documents are in the area of immediately worked product.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / VERIFICATION OF PERSONAL	SI/YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal protection.			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Appropriate and complete uniform.			
4.3	Uniforme limpio / Clean uniform.			

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA /
FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA		PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		
		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER		
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES / VERIFICATION OF TOOLS AND MATERIALS	SI/YES	NO	N.A
5.1	Los utensilios han sido retirados / The tools have been removed.			
5.2	Los empaques, bolsas, tanques, canastas, bandejas usados por los materiales del producto trabajado han sido retirados / The packaging (MP, GR, ME), bags, tanks, baskets, trays used for the materials of the worked product have been removed.			
5.3	La cantidad de materiales remanentes ha sido registrada para la conciliación de producto / The amount of remaining material has been registered for the reconciliation of product.			
5.4	Los materiales (MP, GR, ME) remanentes han sido identificados y devueltos / The remaining materials (MP, GR, ME) have been identified and returned.			
5.5	Se han registrado las cantidades producidas en los documentos establecidos para tal fin / The quantities produced have been in the documents established for that purpose.			
5.6	Los productos resultado del proceso han sido retirados o se encuentran debidamente sellados y protegidos / The result of the process products have been recalled or are properly sealed and protected.			

REALIZADO POR
/FECHA/HORA/DONE BY
/DATE/TIME

REVISADO POR
/FECHA/HORA/REVIEWED BY
/DATE/TIME

Observaciones:
Observations:

MP: Materia prima/MP: Raw material ME: Material de empaque/ ME: Packaging material GR: Granel/GR: Bulk

COPIA VERDADERA



IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS / IDENTIFICATION OF AREAS

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) /PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
---	--

ÁREA /AREA	
------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								
NOTA: SI DESPUES DE 24 HORAS EL AREA NO HA SIDO UTILIZADA, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA NOTE: IF 24 HOURS LATER THE AREA HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.								
OBSERVACIONES /COMMENTS								



Lote /Batch:

den /Order:

ACEPTADAS DE INSPECCIÓN /ACCEPTED BY INSPECTION: _____
OBSERVACIONES /COMMENTS: _____

CAPSULAS DEFECTUOSAS /DEFECTED CAPSULES:

F-INST-0195-4 V01



ACTA DE SANITIZACION/**SANITIZATION ACT**

FECHA/**DATE**: _____

NOMBRE PRODUCTO/**PRODUCT NAME**:
VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

LOTE/**BATCH**: _____

AREAY/O EQUIPO/**AREA AND/OR /EQUIPMENT**

LAVADO REALIZADO POR /**WASHING PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

SANITIZACION REALIZADA POR/**SANITATION PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

JEFE DE AREA/ **HEAD OF AREA**

F-INST-0064-3 V02

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA




Código Material: Material Code	400004768	Producto:/ Product:	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		
Código Anterior:/ Previous Code	N.A	Cantidad a Producir:/ Quantity to Produce	100,000	Molde/Punzon:/ Mold/Punch	5.5 OVAL
Dosificación:/ Dosage:	275 mg				
Grupo de artículo:/ Article Group	Z103001	Cantidad Base:/ Amount Base	100,000	Vida útil:/ Useful Life Time:	180 Dias/Days
Lote Standard:/ Standard Lot:	100000	Forma Farmacéutica:/ Pharmaceutical Form:	CBG/SGC	Und. Medida del producto:/ Product Unit Measure:	un
		Versión:/ Version:	10		
		Vigencia:/ Effective Date:			

ETIQUETAS/LABELS

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

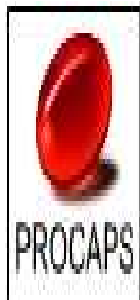

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

SELECTORA / SORTING MACHINE

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Cápsula blanda de gelatina de color rojo, forma oval. Contiene líquido oleoso ligeramente amarillo, Cada cápsula lleva impreso en tinta blanca el logo "50".

Red, oval-shape, soft gelatine capsule. It contains a slightly yellow oily liquid. Each capsule has "50" printed in white ink.

INSTRUCCIONES GENERALES / GENERAL INSTRUCTIONS:

ÁREA DE SELECCIÓN / SORTING AREA (Área de Selección A-237 / Sorting Area A-237)

Lea las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y síguelas en estricto orden:

Before starting the process, read the instructions described herein, and follow them in the strictest order:

La persona debe utilizar el uniforme correspondiente: Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes.

The person must wear the corresponding adequate uniform: white overall, bonnet, (hair cover), nose- mouth protector, boots not slippery.

REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión De Desviaciones Del Sistema De Calidad.

(Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management)

- Verificar el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

- Verify the clearance of the line (areas and equipments) and the environmental conditions in the area:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.020 (Positivo) pulgadas de agua - Máximo: 0.150 (Positivo) pulgadas de agua.

PRESSURE DIFFERENTIAL: Minimum: 0.020 (Positive) Inches of water - Maximum: 0.150 (Positive) Inches of water.

- TEMPERATURA / TEMPERATURE: 23.0°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 21.0°C Máximo: 25.0°C.

Alarm Limits: Minimum: 21.0°C Maximum: 25.0°C.

Límites de Acción: Mínimo: 19.0°C Máximo: 27.0°C.

Action Limits: Minimum: 19.0°C Maximum: 27.0°C.

- HUMEDAD RELATIVA / RELATIVE HUMIDITY: 45 %

Límites de Alarma: Máximo: 50%.

Alarm Limits: Maximum: 50%.

Límites de Acción: Máximo: 55%.

Action Limits: Maximum: 55%.

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:

(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)


Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.

(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

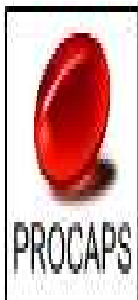

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

Inicio de proceso/Start Process:

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/Final Process

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Seguir y ejecutar las actividades de selección de cápsulas descritas en los siguientes procedimientos:

Follow and perform the Capsule selection activities described on the following procedures

- * Despeje de Línea. Código: INST-0109
- * Line Clearance. Code No. INST-0109
- * Identificación de Área y/o Equipo Código: INST-0073
- * Identification of Areas and/ or Equipments. Code No. INST-0073
- * Operación de la Máquina Selectora Modelo SS-10L. Código: INST-0191
- * Operation of selection machine model SS-10L. Code No. INST-0191
- * Limpieza de Máquinas Inspectoras, Pesadora y Selectora. Código: INST-0042
- * Inspection Cleaning machines, weighing and sorting. Code No. INST-0042
- * Identificación de Productos en Proceso en Plantas Productivas. Código: INST-0189.
- * Identification of In-Process Products in Production Plants. Code No. INST-0189
- * Calificación del personal de inspección. Código: SOP-0500
- * Qualification of the Personnel from Inspection. Code No. SOP-0500
- * Limpieza y Sanitización de Areas de Manufactura. Código: INST-0064
- * Cleaning and Sanitation of the Manufacture Areas. Code No. INST-0064

1. APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC) PARA INICIAR EL PROCESO DE SELECCIÓN

1. QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL TO START SELECTION STAGE

Notifique al inspector de AC para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso.

Request verification by the QA inspector of the following steps before starting the process.

		√
1.1	Verifique que las áreas estén limpias. Verify that the area is clean.	
1.2	Verifique que los operarios tengan el equipo de protección personal necesario. Verify that the operators are wearing the required personal protective equipment.	
1.3	Verifique que la máquina este limpia. Verify that the Machine is clean.	
1.4	Verifique que cada una de las canastas este identificada con el nombre del producto, código y el número de Lote según se indica en el Batch Record. Verify that each basket is identified by the product name, code No. and Lot No. as it appears in the Batch Record.	

APROBACIÓN FINAL DE AC
QA FINAL APPROVAL

FIRMA
SIGNATURE


FECHA/HORA
DATE/TIME

2. PROCESO DE SELECCIÓN

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

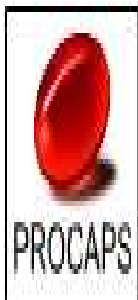

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

2. SELECTION STAGE

Siga los pasos descritos en el procedimiento, INST-0191 Operación de la Máquina Selectora Modelo SS-10L e inicie proceso de selección.
Follow according to procedure, INST-0191 Operation of selection machine Modelo SS-10L and start the selection process.

INSTRUCCIONES PARA SELECCIÓN DE CÁPSULAS (INSTRUCTIONS FOR SORTING OF CAPSULES)

2.1 Tome una muestra compuesta de 20 cápsulas, tomando cápsulas al azar de las canasta producidas y aceptadas en el proceso de Inspección.

2.1 Collect a representative sample of 20 capsules from all bins, taking capsules at random from the basket produced and accepted in the inspection process.

2.2 Verifique el ancho y largo de las 20 cápsulas y repórtelo en la tabla de abajo para determinar el ancho y largo promedio de una cápsula.

2.2 Verify and record the width and length of 20 capsules and determine average the both measurement.

Equipo utilizado/ Vernier o pie de rey N°/ Equipment/ Vernier or calliper N°: _____

Fecha de Próxima calibración/ Date of the next Calibration: _____

Especificación: Ancho: 8.5 mm máximo; Largo: 12.8 mm máximo Specification: Width: 8.5 mm Maximum; Length: 12.8 mm Maximum					
Muestra (Sample N°)	Ancho Width (mm)	Largo Length (mm)	Muestra (Sample N°)	Ancho Width (mm)	Largo Length (mm)
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
			Promedio (Average)		

Si el promedio de las mediciones está dentro de especificaciones continuar con el paso 2.3. Si el promedio no cumple repetir los pasos 2.1 y 2.2. Si al repetir tres veces la operación no cumple las especificaciones notifique el resultado al monitor (Aseguramiento de la Calidad).

If the average of the measurements meet the specifications continue to step 2.3. If average fails, retake the steps 2.1 and 2.2. If is repeated the measurement three times and it does not meet specifications, notify the result to the monitor (Quality Assurance).

REALIZADO POR (PERFORMED BY): _____ FECHA (DATE): _____

VERIFICADO POR (VERIFIED BY): _____ FECHA (DATE): _____

2.3. Ajuste del espacio 8.5 mm máximo el rodillo Clasificador : _____ mm

2.3 Sorter roller gap setting with Width: 8.5 mm Maximum.

REALIZADO POR (PERFORMED BY): _____ FECHA (DATE): _____

2.4 Tome una canasta con cápsulas aceptadas en el proceso de Inspección visual y proceda a depositarla en la tolva de la máquina selectora

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/
Version: 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

de cápsulas y realice la selección de cápsulas.

2.4 Take a basket with capsules accepted in the visual inspection process and proceed to place into the hopper of the sorting roller machine and performance the sorting of the capsules.

2.5 Tomar 20 cápsulas seleccionadas y realice variación de peso.

2.5 Collect 20 sorted capsules and performance weight variation.

Equipo utilizado/Balanza N°/ Equipment / Scale N°: _____

Fecha de Próxima calibración/ Date of the next Calibration: _____

FORMA DE VARIACIÓN DE PESO EN CÁPSULAS VITAMINA D3 50000 UI (FILL WEIGHT CONTROL FORM IN CAPSULES WITH VITAMIN D3 50000 IU)														
ESPECIFICACION (SPECIFICATION)			Máximo (Maximum)			280.5 mg/cápsula (mg/capsule)		Objetivo (Target)		275.0 mg/cápsula (mg/capsule)		Mínimo (Minimum)		269.5 mg/cápsula (mg/capsule)
Fecha (Date)	Hora (Time)	Pesos (Weights)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Realizado por (Performed by)	Verificado por (Verified by)
			Unidad de medida (Units): mg/cápsula (mg/capsule)											
		Peso bruto (C) (Gross weight)												
		Peso shell (D) (Shell weight)												
		Peso llenado (E) (E = C – D) (Net weight)												
		Peso bruto (C) (Gross weight)												
		Peso shell (D) (Shell weight)												
		Peso llenado (E) (E = C – D) (Net weight)												

REALIZADO POR (PERFORMED BY): _____ FECHA (DATE): _____

VERIFICADO POR (VERIFIED BY): _____ FECHA (DATE): _____

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

2.6 Si todas las cápsulas están dentro de especificaciones continuar con el paso 2.7, Si por lo menos una cápsula no cumple repetir los pasos 2.1 hasta 2.5. Reportar la nueva medición de ancho, largo y la variación de peso en la siguiente tabla.

2.6 If all the capsules meet specifications continue to step 2.7. If at least one capsule fails, retake the steps from (2.1 to 2.5). Record the new measurement of width, length and weight variation of the capsules in the following table.


Especificación: Ancho: 8.5 mm máximo; Largo: 12.8 mm máximo Specification: Width: 8.5 mm Maximum; Length: 12.8 mm Maximum					
Muestra (Sample N°)	Ancho Width (mm)	Largo Length (mm)	Muestra (Sample N°)	Ancho Width (mm)	Largo Length (mm)
1			11		
2			12		
3			13		
4			14		
5			15		
6			16		
7			17		
8			18		
9			19		
10			20		
Promedio (Average)					

FORMA DE VARIACION DE PESO EN CAPSULAS VITAMINA D3 50000 UI (FILL WEIGHT CONTROL FORM IN CAPSULES WITH VITAMIN D3 50000 IU)														
ESPECIFICACION (SPECIFICATION)			Máximo (Maximum)			280.5 mg/cápsula (mg/capsule)		Objetivo (Target)		275.0 mg/cápsula (mg/capsule)		Mínimo (Minimum)		269.5 mg/cápsula (mg/capsule)
Fecha (Date)	Hora (Time)	Pesos (Weights)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Realizado por (Performed by)	Verificado por (Verified by)
			Unidad de medida (Units): mg/cápsula (mg/capsule)											
		Peso bruto (C) (Gross weight)												
		Peso shell (D) (Shell weight)												
		Peso llenado (E) (E = C – D) (Net weight)												
		Peso bruto (C) (Gross weight)												
		Peso shell (D) (Shell weight)												

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

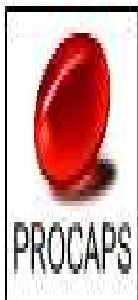

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

		Peso llenado (E) (E = C – D) (Net weight)												
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REALIZADO POR (PERFORMED BY): _____ FECHA (DATE): _____

VERIFICADO POR (VERIFIED BY): _____ FECHA (DATE): _____

2.7 Continuar con todas las canastas con cápsulas seleccionadas como aceptadas en el proceso de Inspección visual y proceda a seleccionarl

Reportar la selección.
2.7 Follow with all baskets with capsules selected as accepted in the visual inspection process and proceed to sorting.
Report the sorting.

REPORTE DE SELECCIÓN DE CÁPSULAS / CAPSULE SORTING REPORT

Carro No. Cart No.	Canasta No. Basket No.	Realizado por/Fecha Performed by/Date	Carro No. Cart No.	Canasta No. Basket No.	Realizado por/Fecha Performed by/Date	Carro No. Cart No.	Canasta No. Basket No.	Realizado por/Fecha Performed by/Date

2.8. CONCILIACIÓN ETAPA DE SELECCIÓN DE CÁPSULAS/CAPSULE SORTING STAGE CONCILIATION

Al final de la etapa de selección de cápsulas, registre la cantidad total de cápsulas defectuosas removidas del batch y cápsulas desechadas durante el proceso de selección.

At the end of the capsule sorting stage, record the total number of defective capsules removed from the batch and process the number of capsules waste during the sorting.

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A
Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Version:
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days


Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

CANTIDAD DE CÁPSULAS DEFECTUOSAS AMOUNT OF DEFECTIVE CAPSULES	C1=		Realizado por/Fecha/ Performed by/Date	Verificado por/Fecha/ Verified by/Date
		Cápsulas/ Capsules		
CANTIDAD DE CÁPSULAS DESECHADAS NUMBER OF CAPSULE WASTE DURING THE PROCESS	C2=	Cápsulas/ Capsules		
TOTAL TOTAL	C3= C1+ C2	Cápsulas/ Capsules		

Registre firma y fecha al final de cualquier observación:

Record signature and date at the end of any observation:

COPIA VERDADERA

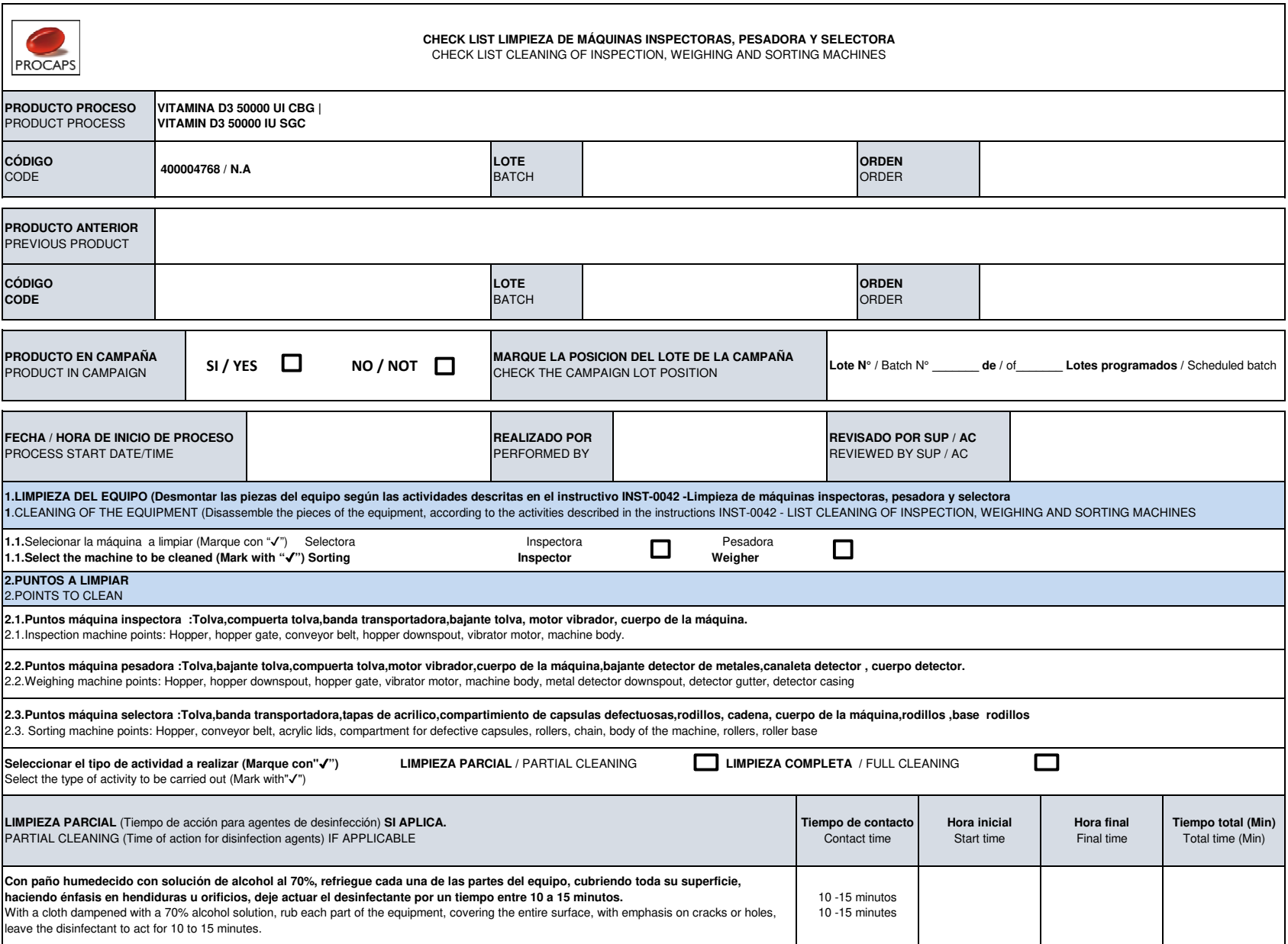

 CHECK LIST LIMPIEZA DE MÁQUINAS INSPECTORAS, PESADORA Y SELECTORA CHECK LIST CLEANING OF INSPECTION, WEIGHING AND SORTING MACHINES									
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC							
CÓDIGO CODE		400004768 / N.A		LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT									
CÓDIGO CODE				LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION			Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch		
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME				REALIZADO POR PERFORMED BY				REVISADO POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC	
Desacoplar la canasta y colector de cápsulas rechazadas y limpiar con un paño humedecido con alcohol al 70% y deje actuar el desinfectante por un tiempo entre 10 a 15 minutos. Uncouple the basket and the rejected capsule collector and clean with a cloth dampened with 70% alcohol and let the disinfectant act for a period of 10 to 15 minutes.						10 -15 minutos 10 -15 minutes			
Realizado por Fecha / Hora Performed by Date / Time						Revisado por AC / SUP Fecha / Hora Reviewed by AC / SUP Date / Time			
3.SOLUCIONES Y AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3. CLEANING AND DISINFECTION SOLUTIONS AND AGENTS									
3.1.Seleccionar la solución detergente para la limpieza (Marque con "✓") PROBIO ☐ LIQUINOX ☐ Solución Detergente 1% ☐ 3.1Select the detergent solution for cleaning (Mark with "✓")									
SOLUCIÓN USADA USED SOLUTION		MARQUE CON "✓" LA CONCENTRACION USADA MARK WITH "✓" THE CONCENTRATION USED		FECHA DE FABRICACIÓN MANUFACTURING DATE		FECHA DE VENCIMIENTO EXPIRATION DATE		REGISTRO (Bitacora / Folio) RECORD (Logbook/Folio)	
Solución Detergente Detergent Solution		1% ☐							
Solución de alcohol Alcohol solution		70% ☐							
3.2 LIMPIEZA COMPLETA (Tiempo de acción para agentes de limpieza y desinfección). SI APLICA. 3.2 FULL CLEANING Action time for cleaning and disinfecting agents). IF APPLICABLE						TIEMPO DE CONTACTO CONTACT TIME		TIEMPO TOTAL TOTAL TIME	
1. Humedecer un paño con solución detergente al 1 % refriégue cada una de las partes citadas en el ítem 2 Moisten a cloth with a 1% detergent solution and scrub each of the parts mentioned in item 2						10 -15 minutos (minutes)			
2. Humedecer un paño con alcohol al 70% y aplicar sobre las partes y superficie del equipo Moisten a cloth with 70% alcohol and apply to the parts and surface of the equipment						10 -15 minutos (minutes)			

 CHECK LIST LIMPIEZA DE MÁQUINAS INSPECTORAS, PESADORA Y SELECTORA CHECK LIST CLEANING OF INSPECTION, WEIGHING AND SORTING MACHINES								
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC						
CÓDIGO CODE	400004768 / N.A	LOTE BATCH		ORDEN ORDER				
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT								
CÓDIGO CODE		LOTE BATCH		ORDEN ORDER				
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐	NO / NOT ☐	MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION		Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch		
Realizado por Fecha / Hora Performed by Date / Time				Revisado por AC / SUP Fecha / Hora Reviewed by AC / SUP Date / Time				
3.3. LIMPIEZA Y SANITIZACION (Enjuagues en los procesos de limpieza y desinfección) CLEANING AND SANITIZATION (Rinsing in cleaning and disinfection processes)								
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME		REALIZADO POR PERFORMED BY		REVISADO POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC				
Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes refregadas con detergente. (Marque con una "✓") Type of water used in rinses of parts scrubbed with detergent (Mark with a "✓")				Agua potable Drinking water	☐			
Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes de la maquina sanitizadas (Marque con "✓") Type of water used to rinse the sanitized parts of the machine (Mark with "✓")				Agua purificada Purified water	☐			
REALIZADO POR/FECHA /HORA (OPERADOR) REALIZED BY /DATE/ HOUR (OPERATOR)				REVISADO POR /FECHA/HORA (SUP/AC) REVIEWED BY / DATE/ HOUR (SUP/AC)				
4. LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA: La inspección final de la limpieza es realizada por el superintendente en turno, o el personal de calidad. Revisar la ausencia de residuos visibles del producto anterior, capsulas, la ausencia de restos de las soluciones de limpieza y olores extraños en las siguientes partes de la máquina. Marque con "✓" cumple o no cumple, si no aplica cierre el espacio con guion (-) 4. CLEANING INSPECTION CHECKLIST: The final cleaning inspection is realized by the superintendent, or quality person. Check the absence of visible residues of the previous product, capsules, the absence of remains of cleaning solutions and strange odors in the following parts of the machine. Mark with "✓" meet or does not meet, if it does not apply, close the space with a hyphen (-)								
Realiza limpieza con la máquina desensamblada (Marque con "✓") Clean with the machine disassembled (Mark with "✓") SI / YES ☐ NO / NOT ☐ Utiliza aire comprimido y lampara para la verificación y limpieza de la máquina (Marque con "✓") Use compressed air and a lamp to verify and clean the machine (Mark with "✓") SI / YES ☐ NO / NOT ☐								
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET
Tolva Hopper			Cuerpo de la máquina Machine casing			Motor vibrador Vibrator motor		
Banda transportadora Conveyor belt			Rodillos Rollers			Bajante detector de metales Metal detector downspout		
Tapas de acrílico Acrylic lids			Base rodillos Roller base			Canaleta detector de metales Gutter metal detector		

 CHECK LIST LIMPIEZA DE MÁQUINAS INSPECTORAS, PESADORA Y SELECTORA CHECK LIST CLEANING OF INSPECTION, WEIGHING AND SORTING MACHINES										
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC								
CÓDIGO CODE		400004768 / N.A			LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT										
CÓDIGO CODE					LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET		
Compartimiento capsulas defectuosas Defective capsule compartment			Bajante tolva Downspout hopper			Acrilico detector de metales Acrylic metal detector				
Cadena Chain			Compuerta tolva Hopper gate			Otro Other				
REALIZADO POR/FECHA /HORA (OPERADOR) REALIZED BY /DATE/ HOUR (OPERATOR)						REVISADO POR /FECHA/HORA (SUP/AC) REVIEWED BY / DATE/ HOUR (SUP/AC)				
NOTA: La finalización del proceso de limpieza se da con la revisión y aprobación por el superintendente, inspector o monitor de calidad. NOTE: Completion of the cleaning process is upon review and approval by the superintendent, inspector or quality monitor.										
CONVENCIONES AC : Personal de calidad / SUP : Superintendente CONVENTIONS AC : Quality Staff / SUP : Superintendent										

**DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE**

ÁREA /AREA		PROCESO /PROCESS	
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER

PRODUCTO ANTERIOR /PREVIOUS PRODUCT				
CODIGO /CODE		LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER

1.0	VERIFICACION DEL AREA /VERIFICATION OF THE AREA	SI /YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified			
1.2	Esta el area limpia y desinfectada / Is the area clean and disinfected			
1.3	Las rejillas, puertas, marcos de puertas, vidrios y ventanas, estan limpias/ The grates, doors, door frames, glass and windows are clean			
1.4	Las condiciones ambientales del area son las requeridas para el proceso/ The environmental conditions of the area are those required for the process			
1.5	Están los reservorios de tinta completamente limpios (Aplica proceso impresión de capsula blanda y encapsulado) / Are the ink reservoirs completely clean (Applies soft capsule printing and encapsulation process)			
1.6	Existe en el área o máquina blísteres vacios o materiales residuos del set up (Aplica proceso empaque Blister) / There are empty blisters or waste materials from the setup in the area or machine (Applies Blister packaging process)			
1.7	Asegúrese que las zonas de difícil acceso estén completamente limpias/ Make sure hard-to-reach areas are completely clean			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO /VERIFICATION OF THE EQUIPMENT	SI /YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified			
2.2	Esta el equipo limpio / Is the equipment clean			
2.3	Funciona el equipo correctamente / The equipment works properly			
2.4	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correctly installed, complete and in good condition.			
2.5	Los PLC, Panel View, sistema de visión, pantallas de configuración de los equipos, instrumentos y sistemas de controles en proceso, tiene información del proceso anterior / PLCs, Panel View, vision systems, equipment configuration screens, instruments and process control systems have information about the previous process.			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION /VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI /YES	NO	N.A
3.1	Existen documentos del producto anterior en el area / There are documents of the previous product in the area			
3.2	El proceso de limpieza y desinfección de area y equipo esta registrada en la bitacora / The cleaning and disinfection process of the area and equipment is recorded in the logbook.			
3.3	Las etiquetas de vacio limpio de los equipos estan completas y anexas al batch record / The clean vacuum labels of the equipment are complete and attached to the batch record.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / STAFF VERIFICATION	SI /YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal safeguard elements			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Proper and complete uniform			
4.3	Uniforme limpio sin pelusa, hilo, cabello y restos de etiqueta / Clean uniform free of lint, thread, hair and tag residue			
4.4	El uniforme contiene capsulas en los bolsillo, mangas,cuello o sitios que permitan el transporte de capsulas. / The uniform contains capsules in the pockets, sleeves, collar or places that allow the transport of capsules.			
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES /VERIFICATION OF MATERIALS AND TOOLS	SI /YES	NO	N.A
5.1	Existen materiales diferentes a los que se van a utilizar en el proceso / Exist differents materials to which are normally used in the process			



DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE

ÁREA /AREA				PROCESO /PROCESS			
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC						
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER				
5.2	Los utensilios y materiales requeridos se encuentran en el área / The tools and materials required are in the area						
5.3	Las materias primas dispensadas corresponden con la orden de producción / Dispensed raw materials correspond to the production order						
5.4	La cantidad de materias primas dispensadas corresponden con la establecida en la orden de producción / The quantity of raw materials dispensed correspond to the production order						
5.5	Los materiales corresponden con la orden de empaque / The materials correspond to the packaging order						
5.6	La cantidad de materiales corresponden con la establecida en la orden de empaque / The quantity of materials correspond to the packaging order						
5.7	El registro de la tinta a usar para la impresión de las capsulas corresponde con la orden de producción / The register of the ink to be used for the capsule printing process corresponds to the production order						

REALIZADO POR /FECHA/HORA/
DONE BY /DATE/TIME

REVISADO POR /FECHA/HORA/
REVIEWED BY/ DATE/TIME

Observaciones/
Comments:

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA / FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA			PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA / VERIFICATION OF AREA	SI/YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified.			
1.2	Se han recogido las materias primas, materiales y granel caidos al piso. / Raw materials, materials and bulk materials that fell to the floor have been collected..			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO / VERIFICATION OF EQUIPMENT	SI/YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified.			
2.2	Los materiales utilizados (MP, GR, ME) remanentes del proceso han sido retirados del equipo / The materials used (MP, GR, ME) remaining from the process have been removed from the			
2.3	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correct installed, complete and in good condition			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI/YES	NO	N.A
3.1	Al finalizar el despeje de linea, no quedan en el area documentos del producto inmediatamente trabajado / At the end of the line clearance, no documents are in the area of immediately worked product.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / VERIFICATION OF PERSONAL	SI/YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal protection.			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Appropriate and complete uniform.			
4.3	Uniforme limpio / Clean uniform.			

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA /
FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA		PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		
		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER		
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES / VERIFICATION OF TOOLS AND MATERIALS	SI/YES	NO	N.A
5.1	Los utensilios han sido retirados / The tools have been removed.			
5.2	Los empaques, bolsas, tanques, canastas, bandejas usados por los materiales del producto trabajado han sido retirados / The packaging (MP, GR, ME), bags, tanks, baskets, trays used for the materials of the worked product have been removed.			
5.3	La cantidad de materiales remanentes ha sido registrada para la conciliación de producto / The amount of remaining material has been registered for the reconciliation of product.			
5.4	Los materiales (MP, GR, ME) remanentes han sido identificados y devueltos / The remaining materials (MP, GR, ME) have been identified and returned.			
5.5	Se han registrado las cantidades producidas en los documentos establecidos para tal fin / The quantities produced have been in the documents established for that purpose.			
5.6	Los productos resultado del proceso han sido retirados o se encuentran debidamente sellados y protegidos / The result of the process products have been recalled or are properly sealed and protected.			

REALIZADO POR
/FECHA/HORA/DONE BY
/DATE/TIME

REVISADO POR
/FECHA/HORA/REVIEWED BY
/DATE/TIME

Observaciones:
Observations:

MP: Materia prima/MP: Raw material ME: Material de empaque/ ME: Packaging material GR: Granel/GR: Bulk

COPIA VERDADERA



IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS / IDENTIFICATION OF AREAS

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) /PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
---	--

ÁREA /AREA	
------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								
NOTA: SI DESPUES DE 24 HORAS EL AREA NO HA SIDO UTILIZADA, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA NOTE: IF 24 HOURS LATER THE AREA HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.								
OBSERVACIONES /COMMENTS								



IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO /EQUIPMENT IDENTIFICATION

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) / PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
--	--

EQUIPO /EQUIPMENT	
----------------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR /DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR /VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								

NOTA 1: SI DESPUES DE 24 HORAS EL EQUIPO NO HA SIDO UTILIZADO, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA
NOTE 1: IF 24 HOURS LATER THE EQUIPMENT HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.

NOTA 2: UNA VEZ UTILIZADO EL EQUIPO, SE DEBE PROCEDER CON SU LIMPIEZA. ESTE NO DEBE PERMANECER MAS DE 8.5 HORAS SUCIO.
NOTE 2: ONCE THE EQUIPMENT IS USED, IT SHOULD BE PROCEEDED WITH ITS CLEANING. THIS SHOULD NOT STAY OVER 8.5 HOURS DIRTY

OBSERVACIONES /COMMENTS	
----------------------------	--

COPIA VERDADERA



Lista de Chequeo para Despeje y Alistamiento de Equipos

Checklist for Clearance and Readiness of Equipment

Producto en Proceso / Product in Process:		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
Código/Code:	400004768 / N.A	Lote/Batch:		OT	
Producto Anterior (Código / Descripción / Lote / OT) / Previous Product (Code / Description / Batch / PO)					
Equipo/ Equipment:					
		SI / YES	NO	N.A.	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS
1	Retirar el producto anterior / Remove the previous product				
2	Desarme de la maquina y retire de las piezas/ Disassemble the machine and remove the pieces:				
2.1.	Tolva principal / principal Hopper				
2.2.	Tolva fina / thin Hopper				
2.2.1	Compuerta Tolva fina / thin gate Hopper				
2.3.	Tolva gruesa / gross Hopper				
2.3.1.	Compuerta Tolva gruesa / gross gate Hopper				
2.4.	Cazamba / Bucket				
2.5.	Mesa/Banda transportadora / Table / Conveyor Belt				
2.6.	Computador / Computer				
2.7.	Maquina Selladora / Sealing Machine				
2.8.	Acrílicos / Acrylics				
2.9.	Rodillos / Rollers				
2.10.	Bajantes / Downspipes				
2.11.	Compuertas / Gates				
2.12.	Aleros / Eaves				
2.13.	Cadena / Chain				
2.14.	Tapones de la canasta interna / Plugs internal basket				
2.15.	Eslabones / Shackle				
2.16.	Panel view / Panel view				
3	Colocar aire comprimido en todas las piezas de la maquina / Place compressed air in all parts of the machine				
4	Limpie con alcohol al 70% y paño o wypall las superficies del equipo y piezas / Wipe with alcohol at 70% and clean baize or Wypall the surface and the parts of equipment				
5	Accionar el pedal para hacer vibrar la tolva / Press the pedal to vibrate the hopper.				
6	Verificación visual: verificar ausencia de capsulas, restos de bayeta y/o wypall / Visual verification: verify the absence of capsules, remains of cloth and / or Wypall				
6.1.	Tolva principal / Principal Hopper				
6.2.	Cuerpo de la maquina / parte inferior de la maquina / Machine body / bottom of the machine				
6.3.	Canastas vacias antes de salir del área / Empty baskets before leaving the area				
6.4.	Partes laterales entre los bajantes de la tolva y del vibrador de la maquina pesadora / Laterals parts between hopper's downpipes and and the vibrator of the weighing machine				
6.5.	Sellador / Sealant				
6.6.	Mesa / Table				
7	Emplee la lampara para iluminar las piezas de la máquina / Use the lamp to illuminate the parts of the machine				

COPIA VERDADERA



Lista de Chequeo para Despeje y Alistamiento de Equipos

Checklist for Clearance and Readiness of Equipment

Producto en Proceso / Product in Process:		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
Código/Code:	400004768 / N.A	Lote/Batch:		OT	
Producto Anterior (Código / Descripción / Lote / OT) / Previous Product (Code / Description / Batch / PO)					
Equipo/ Equipment:					
		SI / YES	NO	N.A.	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS
8	Verificación canastas vacías antes de salir del área / Checking empty baskets before leaving the area				
9	Verificación del área / paredes / rejillas / lamparas / Checking the area / walls / screens / lamps				
10	El teflón de la selladora esta en buen estado y bien adherido a la barra de sellado de la selladora. Ver SOP-0784 Manejo de las maquinas selladoras, las consideraciones para determinar cuando un teflon esta en buen estado / The teflon of the sealer is in good condition and well adhered to the sealing bar of the sealer. See point A of SOP-0784 Handling of sealing machines, considerations for determining when a teflon is in good condition				
11	La temperatura de la selladora debe estar seteada entre 0.8 y 0.9 pulsos según lo establecido en el SOP-0784 Manejo de las maquinas selladoras / The temperature of the sealer must be set between 0.8 and 0.9 pulses as set out in SOP-0784 Handling of sealing machines				

Realizado por / Performed by:		Fecha /Date:	
Verificado por / Verified by:		Fecha /Date:	

Nota: Si después de 24 Horas el equipo no ha sido utilizado, se debe realizar nueva limpieza.

Note: If after 24 hours the equipment has not been used, re-cleaning must be done.

COPIA VERDADERA



ACTA DE SANITIZACION/**SANITIZATION ACT**

FECHA/**DATE**: _____

NOMBRE PRODUCTO/**PRODUCT NAME**:
VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

LOTE/**BATCH**: _____

AREAY/O EQUIPO/**AREA AND/OR /EQUIPMENT**

LAVADO REALIZADO POR /**WASHING PERFORMED BY**:


REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

SANITIZACION REALIZADA POR/**SANITATION PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

JEFE DE AREA/ **HEAD OF AREA**

F-INST-0064-3 V02

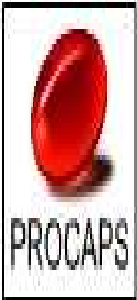


Código Material: Material Code	400004768	Producto:/ Product:	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		
Código Anterior:/ Previous Code	N.A				
Dosificación:/ Dosage:	275 mg	Cantidad a Producir:/ Quantity to Produce	100,000	Molde/Punzon:/ Mold/Punch	5.5 OVAL
Grupo de artículo:/ Article Group	Z103001				
		Cantidad Base:/ Amount Base	100,000		
Lote Standard:/ Standard Lot:	100000	Forma Farmacéutica:/ Pharmaceutical Form:	CBG/SGC	Vida útil:/ Useful Life Time:	180 Dias/Days
		Versión:/ Version:	10		
		Vigencia:/ Effective Date:		Und. Medida del producto:/ Product Unit Measure:	un

ETIQUETAS/LABELS

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

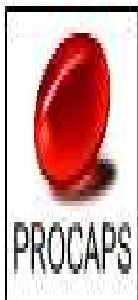

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

LAVADO / WASHING

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

1. DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Cápsula blanda de gelatina de color rojo, forma oval. Contiene líquido oleoso ligeramente amarillo, Cada cápsula lleva impreso en tinta blanca el logo "50".

Red, oval-shape, soft gelatine capsule. It contains a slightly yellow oily liquid. Each capsule has "50" printed in withe ink.

2. INSTRUCCIONES GENERALES / GENERAL INSTRUCTIONS:

3. ÁREA DE LAVADO DE CÁPSULAS Y EQUIPOS / CAPSULE WASHING AREA AND EQUIPMENTS

Leer las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y sígalas en estricto orden:

Before starting the process, read the instructions described herein and follow them in the strictest order:

- La persona debe utilizar el uniforme correspondiente: Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes y protector auditivo.

The person must wear the corresponding adequate uniform: white overall, bonnet (hair protection) nose- mouth protector, disposable gloves, boots not slippery and hearing protection.

REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión De Desviaciones Del Sistema De Calidad.

(Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management)

- Verificar el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

- Verify the clearance of the line (area and equipment) and the environmental conditions in the area:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.020 (Positivo) pulg de agua - Máximo: 0.150 (Positivo) Pulg de agua.

PRESSURE DIFFERENTIAL: Minimum: 0.020 (Positive) Inches of water - Maximum: 0.150 (Positive) Inches of water.

- TEMPERATURA / TEMPERATURE: 23°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 21°C Máximo: 25°C.

Alarm Limits: Minimum: 21°C Maximum: 25°C.

Límites de Acción: Mínimo: 19°C Máximo: 27°C.

Action Limits: Minimum: 19°C Maximum: 27°C.

- HUMEDAD RELATIVA / RELATIVE HUMIDITY: 45 %

Alarm Limits: Maximum: 50%.

Límites de Alarma: Máximo: 50%.

Límites de Acción: Máximo: 55%.

Action Limits: Maximum: 55%.

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:

(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)


Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.

(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

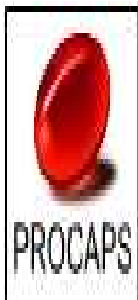

Código
Material:/
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Stándard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Inicio de proceso/Start Process:

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/Final Process

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Equipos / Equipments:

Descripción equipo (Equipment description)	Equipos utilizados (Equipment used)
Centrifugadora (Centrifuge)	
Canastilla metálica perforada (Perforated metallic basket)	
Canasta metálica (Metallic basket)	

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: FECHA/DATE:

Seguir y ejecutar las actividades de lavado de cápsulas descritas en los procedimientos:
Follow and perform the Capsule washing activities described on the procedures.

- * Despeje de Línea: INST-0109
- * Line clearance Code No. INST-0109
- * Identificación de Area y/o Equipo Código: INST-0073
- * Identification of Areas and/ or Equipments. Code No. INST-0073
- * Secado, Descargue e Inspección de Cápsulas. Código: INST-0195
- * Drying, Unloading and Inspection of Capsules. Code No. INST-0195
- * Identificación de Productos en Proceso en Plantas Productivas. Código: INST-0189.
- * Identification of In-Process Products in Production Plants. Code No. INST-0189
- * Lavado de Cápsulas y Limpieza de la Centrífuga Código: INST-0079
- * Capsules Washing and Cleaning Centrifuge. Code No. INST-0079
- * Limpieza y Desinfección de Canastas Plásticas y Bandejas Planas Código: INST-0055
- * Cleaning and Disinfection of plastic crates and trays Planas. Code No. INST-0055
- * Limpieza y Sanitización de Areas de Manufactura. Código: INST-0064
- * Cleaning and Sanitation of the Manufacture Areas. Code No. INST-0064

Identificación del producto anterior (Identification of the previous product)

PRODUCTO ANTERIOR (PREVIOUS PRODUCT)	
Nombre del producto anterior (Previous product name)	

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

Código del producto anterior (Previous product code)	Lote / OP (Lot / PO)	Verificado por (Verified by)	Fecha (Date)

Adjunte a la Orden de Producción la etiqueta de identificación de área, equipo, materia prima.

Attach the label for the identification of Area, equipment. Raw Material to the Production Order.

4. APROBACION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC) PARA INICIAR EL PROCESO DE LAVADO

4. QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL TO START WASHING STAGE

Notifique al inspector de AC para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso.

Request verification by the QA inspector of the following steps before starting the process.

4.1	Verifique que el área esté correctamente identificada, organizada sin ninguna identificación o sobrante del producto anterior. Verify that the area is correctly identified, organized, and that there are no labels or remains of the previous product.	√
4.2	Verifique que las paredes, la puerta, las rejillas y los pisos estén limpios. Verify that the walls, doors, vents, and floors are clean.	
4.3	Verifique que las áreas estén limpias. Verify that the area is clean.	
4.4	Verifique que los operarios tengan el equipo de protección personal necesario. Verify that the operators are wearing the required personal protective equipment.	
4.5	Verifique que la centrifuga este limpia. Verify that the centrifuge is clean.	
4.6	Verifique que cada una de las canastas esten identificadas con el nombre del producto, código y el número de Lote según se indica en el Batch Record. Verify that each basket is identified by the product name, code No. and Lot No. as it appears in the Batch Record.	
APROBACIÓN FINAL DE AC QA FINAL APPROVAL		
FIRMA SIGNATURE		
FECHA/HORA DATE/TIME		

5. PROCEDIMIENTO / PROCEDURE:

CONTROL EN PROCESO/IN-PROCESS CONTROL: Área de lavado de cápsulas / Capsule washing area (A-233)

Verificar el Registro de la materia prima usada en el proceso de lavado:

(Verify the register of the raw material used in the washing process:)

MATERIA PRIMA/ RAW MATERIAL	CODIGO CODE No.	g/caps- g/caps	g/Lote g/Lot	REGISTRO REGISTER
ETHANOL 96%	100003029	0.080	8,000.0	

REALIZADO POR (PERFORMED BY): VERIFICADO POR (VERIFIED BY): FECHA (DATE):

5.1 Llenar hasta la mitad de su capacidad la canasta metálica con Ethanol 96% y adicionar las cápsulas desde la canasta hacia la canastilla metálica perforada con ayuda de un cucharón plástico.

5.1 Fill to half full metallic basket with Ethanol 96% and add the capsules from basket to the perforated metallic basket using a plastic ladle.

5.2 Ingrese la canastilla metálica perforada, en la canasta metálica que contiene el Ethanol 96%, lave manualmente por aproximadamente 1 minuto removiendo de abajo hacia arriba las cápsulas para eliminar grasa, pelusas o sucio.


5.2 Deposit the perforated metallic basket in the metallic basket containing Ethanol 96%, wash manually for approximately 1 minute, stirring down to up the capsules to remove grease, lint or dirt.

5.3 Suspenda hacia arriba la canastilla metálica perforada y deje escurrir el exceso de Ethanol 96% por aproximadamente 20 segundos. Luego deposite las cápsulas en la centrifuga con ayuda del cucharón plástico.

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

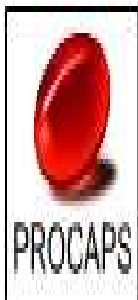

Código
Material:/
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión:/ 10

Vigencia:/

Effective Date:

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

5.3 Hold up the perforated metallic basket and drain the excess of Ethanol 96% for approximately 20 seconds. After depositing the capsules in the using the plastic ladle.

5.4 Coloque la subtapa en la centrifuga asegurando adecuadamente las tuercas, luego baje la tapa y programe el temporizador de la centrifugadora en 0.5 (aproximadamente 28 segundos) para iniciar el ciclo de lavado de las cápsulas.

5.4 Put the subtapa in the centrifuge properly securing nuts, then lower the lid and set the timer on the centrifuge at 0.5 (approximately 28 seconds) to start the wash cycle of the capsules.

5.5 Finalizado el ciclo de la centrifugadora, oprima el boton de detener hasta que la máquina se detenga totalmente.

5.5 Finalized the centrifuge cycle, press the stop button until the machine stops completely.

5.6 Abra la centrifugadora y remueva manualmente las cápsulas, para luego iniciar un ciclo de secado por aproximadamente 10 segundos con la centrifugadora abierta con el temporizador programado en 0.2.

5.6 Open the centrifuge and manually remove the capsules, then start a drying cycle for approximately 10 seconds with the centrifuge open with the timer programmed at 0.2.

5.7 Una vez finalizado el segundo ciclo de secado, remover manualmente las cápsulas para verificar que no existan residuos de solvente, en caso de existir residuos de Ethanol 96% en los guantes, repetir el paso 5.6 de lo contrario retire el producto de la centrifuga con ayuda del cucharón plástico y depositelas en la canasta plástica limpia y seca.

5.7 Once finalized the second drying cycle, manually remove the capsule to verify that there are no solvent residues, if any residue of Ethanol 96% in gloves, repeat step 5.6 of otherwise remove the product from the centrifuge with the aid of plastic ladle and place them in clean, dry plastic basket.

5.8 Repita estos pasos hasta completar el lavado del lote completo.

5.8 Repeat this process for washing the entire batch.

CONTROL EN PROCESO/IN-PROCESS CONTROL:

- SOLVENTE DE LAVADO/ SOLVENT FROM WASHING:..... Ethanol 96%

-REPORTAR SOLVENTE DE LAVADO USADO/REPORT THE USED SOLVENT FOR WASHING:.....

- CARGA DE LA CENTRIFUGA/LOAD OF THE CENTRIFUGE:..... Cápsulas/Capsules

5.9 Registro del tiempo de duración del proceso

5.9 Registry of the duration time of the process

Hora de inicio del proceso/Start Time of process Hora final del proces/End Time of proces:

Tiempo Total del proceso/ Total Time of process:

REALIZADO POR/PERFORMED BY: FECHA/DATE:

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: FECHA/DATE:

OBSERVACIONES/OBSERVATIONS:

COPIA VERDADERA

 CHECK LIST LIMPIEZA DE LA CENTRIFUGA CHECK LIST CLEANING THE CENTRIFUGAL					
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CÓDIGO CODE	400004768 / N.A	LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT					
CÓDIGO CODE		LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION	
				Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch	
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME			REALIZADO POR PERFORMED BY		REVISADO POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC
LIMPIEZA DEL EQUIPO (Desensamblar las piezas del equipo según las actividades descritas en el Instructivo INST-0079 - Lavado de cápsulas y Limpieza de la Centrifuga) CLEANING OF EQUIPMENT (Disassemble the equipment parts according to the activities described in Instruction INST-0079 - Capsule Washing and Centrifuge Cleaning).					
Seleccionar el tipo de actividad a realizar (Marque con "✓") Select the type of activity to be performed (Check with "✓")					
		LIMPIEZA PARCIAL / PARTIAL CLEANING ☐		LIMPIEZA COMPLETA / FULL CLEANING ☐	
LIMPIEZA PARCIAL (Tiempo de acción para agentes de desinfección) SI APLICA. PARTIAL CLEANING (Time of action for disinfection agents) IF APPLICABLE			Tiempo de contacto Contact time	Hora inicial Start time	Hora final Final time
					Tiempo total (Min) Total time (Min)
Con paño humedecido con solución de alcohol al 70%, refregue cada una de las partes del equipo, cubriendo toda su superficie, haciendo énfasis en hendiduras u orificios, deje actuar el desinfectante por un tiempo entre 10 a 15 minutos. With a cloth dampened with a 70% alcohol solution, rub each part of the equipment, covering the entire surface, with emphasis on cracks or holes, leave the disinfectant to act for 10 to 15 minutes.			10 - 15 minutos 10 - 15 minutes		
Desacoplar la canasta y colector de cápsulas rechazadas y limpiar con un paño humedecido con alcohol al 70% y deje actuar el desinfectante por un tiempo entre 10 a 15 minutos. Uncouple the basket and the rejected capsule collector and clean with a cloth dampened with 70% alcohol and let the disinfectant act for a period of 10 to 15 minutes.			10 - 15 minutos 10 - 15 minutes		
Realizado por Fecha / Hora Performed by Date / Time				Revisado por AC / SUP Fecha / Hora Reviewed by AC / SUP Date / Time	
1.LIMPIEZA COMPLETA (Desmontar las piezas del equipo según las actividades descritas en el instructivo INST-0079 -Limpieza de la centrifuga) SI APLICA 1.CLEANING OF THE EQUIPMENT (Disassemble the pieces of the equipment, according to the activities described in the instructions INST-0079 -Cleaning of the centrifugal) IF APPLICABLE					
2.SOLUCIONES Y AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 2. CLEANING AND DISINFECTION SOLUTIONS AND AGENTS					
2.1.Seleccionar la solución detergente para la limpieza (Marque con "✓") PROBIO ☐ LIQUINOX ☐ SOLUCION DETERGENTE AL 1% ☐ 2.1Select the detergent solution for cleaning (Mark with "✓")					
SOLUCIÓN USADA USED SOLUTION	MARQUE CON "✓" LA CONCENTRACION USADA MARK WITH "✓" THE CONCENTRATION USED	FECHA DE FABRICACIÓN MANUFACTURING DATE	FECHA DE VENCIMIENTO EXPIRATION DATE	REGISTRO (Bitacora / Folio) RECORD (Logbook/Folio)	REVISADO POR FECHA (SUP/AC) REVIEWED BY DATE (SUP/AC)
2.2 Solución Detergente 2.2 Detergent Solution	1% ☐				
2.3.Solución de alcohol 2.3.Alcohol solution	70% ☐				

COPIA VERDADERA

 CHECK LIST LIMPIEZA DE LA CENTRIFUGA CHECK LIST CLEANING THE CENTRIFUGAL									
PRODUCTO PROCESO PREVIOUS PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC							
CÓDIGO CODE		400004768 / N.A		LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT									
CÓDIGO CODE				LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		MARQUE LA POSICIÓN DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION		Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch			
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME				REALIZADO POR PERFORMED BY				REVISADOR POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC	
3. LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN (Tiempos de acción para agentes de limpieza y desinfección) 3. CLEANING AND SANITIZATION (Action times for cleaning and disinfection agents)						TIEMPO DE CONTACTO CONTACT TIME	HORA INICIAL START TIME	HORA FINAL END TIME	TIEMPO TOTAL TOTAL TIME
3.1. Humedecer un paño con solución detergente al 1 % refriegue cada una de las siguientes partes: Canasta(olla) , canastilla , tapa de la centrifuga y el cuerpo del equipo 3.1. Moisten a cloth with a 1% detergent solution and scrub each of the following parts: Basket (pot), basket, centrifuge lid and equipment casing						10-15 minutos (minutes)			
3.2. Humedecer un paño con alcohol al 70% y aplicar sobre las partes y superficie del equipo 3.2. Moisten a cloth with 70% alcohol and apply to the parts and surface of the equipment						10-15 minutos (minutes)			
4. LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN (Enjuagues en los procesos de limpieza y desinfección) CLEANING AND SANITIZATION (Rinses in the cleaning and disinfection processes)									
4.1. Tipo de agua usada en en los enjuagues de las partes de la máquina refregadas con solución detergente (Marque con "✓") 4.1.Type of water used in the rinses of the parts of the machine scrubbed with detergent solution (Mark with "✓")						Agua potable Drinking water	☐		
4.2. Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes de la máquina sanitizadas (Marque con "✓") 4.2.Type of water used to rinse the sanitized parts of the machine (Mark with "✓")						Agua purificada Purified water	☐		
REALIZADO POR/FECHA /HORA (OPERADOR) REALIZED BY /DATE/ HOUR (OPERATOR)						REVISADO POR /FECHA/HORA (SUP/AC) REVIEWED BY / DATE/ HOUR (SUP/AC)			
5. LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA: La inspección final de la limpieza es realizada por el superintendente en turno, o el personal de calidad. Revisar la ausencia de residuos visibles del producto anterior, cápsulas, la ausencia de restos de las soluciones de limpieza y olores extraños en las siguientes partes de la máquina. Marque con "✓" cumple o no cumple, si no aplica cierre el espacio con guion (-) 5.CLEANING INSPECTION CHECKLIST: The final cleaning inspection is performed by the superintendent, or quality person. Check the absence of visible residues of the previous product, capsules, the absence of remains of cleaning solutions and strange odors in the following parts of the machine. Mark with "✓" meet or does not meet, if it does not apply, close the space with a hyphen (-)									
Realiza limpieza con la máquina desensamblada (Marque con "✓") Clean with the machine disassembled (Mark with "✓") SI / YES ☐ NO / NOT ☐ Utiliza aire comprimido y lampara para la verificación y limpieza de la máquina (Marque con "✓") Use compressed air and a lamp to verify and clean the machine (Mark with "✓") SI / YES ☐ NO / NOT ☐									
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	
Canasta(Olla) Basket(Pot)			Canastilla Basket			Tapa olla Pot lid			
Carcasa de la maquina (Interno) Machine casing (Internal)			Cuerpo de la maquina (Externo) Machine casing (External)			Cubeta alcohol Alcohol bucket			
REALIZADO POR/FECHA/HORA (OPERADOR) REALIZED BY/DATE/TIME (OPERATOR)						REVISADO POR/ FECHA / HORA (SUP/AC) REVIEWED BY/ DATE / TIME (SUP/AC)			
NOTA: La finalización del proceso de limpieza se da con la revisión y aprobación por el superintendente, inspector o monitor de calidad. NOTE: Completion of the cleaning process is upon review and approval by the superintendent, inspector or quality monitor.									
CONVENCIONES AC : Personal de calidad / SUP : Superintendente CONVENTIONS AC : Quality Staff / SUP : Superintendent									



DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE

ÁREA /AREA				PROCESO /PROCESS	
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 1000 UI CBG VITAMIN D3 1000 IU SGC				
CODIGO /CODE	400004765 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	

PRODUCTO ANTERIOR /PREVIOUS PRODUCT				
CODIGO /CODE		LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER

1.0	VERIFICACION DEL AREA /VERIFICATION OF THE AREA	SI /YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified			
1.2	Esta el area limpia y desinfectada / Is the area clean and disinfected			
1.3	Las rejillas, puertas, marcos de puertas, vidrios y ventanas, estan limpias/ The grates, doors, door frames, glass and windows are clean			
1.4	Las condiciones ambientales del area son las requeridas para el proceso/ The environmental conditions of the area are those required for the process			
1.5	Están los reservorios de tinta completamente limpios (Aplica proceso impresión de capsula blanda y encapsulado) / Are the ink reservoirs completely clean (Applies soft capsule printing and encapsulation process)			
1.6	Existe en el área o máquina blísteres vacios o materiales residuos del set up (Aplica proceso empaque Blister) / There are empty blisters or waste materials from the setup in the area or machine (Applies Blister packaging process)			
1.7	Asegúrese que las zonas de difícil acceso estén completamente limpias/ Make sure hard-to-reach areas are completely clean			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO /VERIFICATION OF THE EQUIPMENT	SI /YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified			
2.2	Esta el equipo limpio / Is the equipment clean			
2.3	Funciona el equipo correctamente / The equipment works properly			
2.4	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correctly installed, complete and in good condition.			
2.5	Los PLC, Panel View, sistema de visión, pantallas de configuración de los equipos, instrumentos y sistemas de controles en proceso, tiene información del proceso anterior / PLCs, Panel View, vision systems, equipment configuration screens, instruments and process control systems have information about the previous process.			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION /VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI /YES	NO	N.A
3.1	Existen documentos del producto anterior en el area / There are documents of the previous product in the area			
3.2	El proceso de limpieza y desinfección de area y equipo esta registrada en la bitacora / The cleaning and disinfection process of the area and equipment is recorded in the logbook.			
3.3	Las etiquetas de vacio limpio de los equipos estan completas y anexas al batch record / The clean vacuum labels of the equipment are complete and attached to the batch record.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / STAFF VERIFICATION	SI /YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal safeguard elements			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Proper and complete uniform			
4.3	Uniforme limpio sin pelusa, hilo, cabello y restos de etiqueta / Clean uniform free of lint, thread, hair and tag residue			
4.4	El uniforme contiene capsulas en los bolsillo, mangas,cuello o sitios que permitan el transporte de capsulas. / The uniform contains capsules in the pockets, sleeves, collar or places that allow the transport of capsules.			
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES /VERIFICATION OF MATERIALS AND TOOLS	SI /YES	NO	N.A
5.1	Existen materiales diferentes a los que se van a utilizar en el proceso / Exist differents materials to which are normally used in the process			



DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE

ÁREA /AREA			PROCESO /PROCESS		
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 1000 UI CBG VITAMIN D3 1000 IU SGC				
CODIGO /CODE	400004765 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER		
5.2	Los utensilios y materiales requeridos se encuentran en el área / The tools and materials required are in the area				
5.3	Las materias primas dispensadas corresponden con la orden de producción / Dispensed raw materials correspond to the production order				
5.4	La cantidad de materias primas dispensadas corresponden con la establecida en la orden de producción / The quantity of raw materials dispensed correspond to the production order				
5.5	Los materiales corresponden con la orden de empaque / The materials correspond to the packaging order				
5.6	La cantidad de materiales corresponden con la establecida en la orden de empaque / The quantity of materials correspond to the packaging order				
5.7	El registro de la tinta a usar para la impresión de las capsulas corresponde con la orden de producción / The register of the ink to be used for the capsule printing process corresponds to the production order				

REALIZADO POR /FECHA/HORA/
DONE BY /DATE/TIME

REVISADO POR /FECHA/HORA/
REVIEWED BY/ DATE/TIME

Observaciones/
Comments:

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA / FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA			PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 1000 UI CBG VITAMIN D3 1000 IU SGC				
CODIGO / CODE	400004765 / N.A	LOTE / BATCH		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA / VERIFICATION OF AREA	SI/YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified.			
1.2	Se han recogido las materias primas, materiales y granel caidos al piso. / Raw materials, materials and bulk materials that fell to the floor have been collected..			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO / VERIFICATION OF EQUIPMENT	SI/YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified.			
2.2	Los materiales utilizados (MP, GR, ME) remanentes del proceso han sido retirados del equipo / The materials used (MP, GR, ME) remaining from the process have been removed from the			
2.3	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correct installed, complete and in good condition			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI/YES	NO	N.A
3.1	Al finalizar el despeje de linea, no quedan en el area documentos del producto inmediatamente trabajado / At the end of the line clearance, no documents are in the area of immediately worked product.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / VERIFICATION OF PERSONAL	SI/YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal protection.			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Appropriate and complete uniform.			
4.3	Uniforme limpio / Clean uniform.			

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA /
FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA		PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 1000 UI CBG VITAMIN D3 1000 IU SGC			
CODIGO / CODE	400004765 / N.A	LOTE / BATCH		
		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER		
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES / VERIFICATION OF TOOLS AND MATERIALS	SI/YES	NO	N.A
5.1	Los utensilios han sido retirados / The tools have been removed.			
5.2	Los empaques, bolsas, tanques, canastas, bandejas usados por los materiales del producto trabajado han sido retirados / The packaging (MP, GR, ME), bags, tanks, baskets, trays used for the materials of the worked product have been removed.			
5.3	La cantidad de materiales remanentes ha sido registrada para la conciliación de producto / The amount of remaining material has been registered for the reconciliation of product.			
5.4	Los materiales (MP, GR, ME) remanentes han sido identificados y devueltos / The remaining materials (MP, GR, ME) have been identified and returned.			
5.5	Se han registrado las cantidades producidas en los documentos establecidos para tal fin / The quantities produced have been in the documents established for that purpose.			
5.6	Los productos resultado del proceso han sido retirados o se encuentran debidamente sellados y protegidos / The result of the process products have been recalled or are properly sealed and protected.			

REALIZADO POR
/FECHA/HORA/DONE BY
/DATE/TIME

REVISADO POR
/FECHA/HORA/REVIEWED BY
/DATE/TIME

Observaciones:
Observations:

MP: Materia prima/MP: Raw material ME: Material de empaque/ ME: Packaging material GR: Granel/GR: Bulk

COPIA VERDADERA



IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS / IDENTIFICATION OF AREAS

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) /PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
---	--

ÁREA /AREA	
------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								
NOTA: SI DESPUES DE 24 HORAS EL AREA NO HA SIDO UTILIZADA, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA NOTE: IF 24 HOURS LATER THE AREA HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.								
OBSERVACIONES /COMMENTS								



IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO /EQUIPMENT IDENTIFICATION

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) / PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
--	--

EQUIPO /EQUIPMENT	
----------------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR /DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR /VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								

NOTA 1: SI DESPUES DE 24 HORAS EL EQUIPO NO HA SIDO UTILIZADO, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA
NOTE 1: IF 24 HOURS LATER THE EQUIPMENT HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.

NOTA 2: UNA VEZ UTILIZADO EL EQUIPO, SE DEBE PROCEDER CON SU LIMPIEZA. ESTE NO DEBE PERMANECER MAS DE 8.5 HORAS SUCIO.
NOTE 2: ONCE THE EQUIPMENT IS USED, IT SHOULD BE PROCEEDED WITH ITS CLEANING. THIS SHOULD NOT STAY OVER 8.5 HOURS DIRTY

OBSERVACIONES /COMMENTS	

COPIA VERDADERA



Lista de Chequeo para Despeje y Alistamiento de Equipos

Checklist for Clearance and Readiness of Equipment

Producto en Proceso / Product in Process:		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
Código/Code:	400004768 / N.A	Lote/Batch:		OT	
Producto Anterior (Código / Descripción / Lote / OT) / Previous Product (Code / Description / Batch / PO)					
Equipo/ Equipment:					
		SI / YES	NO	N.A.	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS
1	Retirar el producto anterior / Remove the previous product				
2	Desarme de la maquina y retire de las piezas/ Disassemble the machine and remove the pieces:				
2.1.	Tolva principal / principal Hopper				
2.2.	Tolva fina / thin Hopper				
2.2.1	Compuerta Tolva fina / thin gate Hopper				
2.3.	Tolva gruesa / gross Hopper				
2.3.1.	Compuerta Tolva gruesa / gross gate Hopper				
2.4.	Cazamba / Bucket				
2.5.	Mesa/Banda transportadora / Table / Conveyor Belt				
2.6.	Computador / Computer				
2.7.	Maquina Selladora / Sealing Machine				
2.8.	Acrílicos / Acrylics				
2.9.	Rodillos / Rollers				
2.10.	Bajantes / Downspipes				
2.11.	Compuertas / Gates				
2.12.	Aleros / Eaves				
2.13.	Cadena / Chain				
2.14.	Tapones de la canasta interna / Plugs internal basket				
2.15.	Eslabones / Shackle				
2.16.	Panel view / Panel view				
3	Colocar aire comprimido en todas las piezas de la maquina / Place compressed air in all parts of the machine				
4	Limpie con alcohol al 70% y paño o wypall las superficies del equipo y piezas / Wipe with alcohol at 70% and clean baize or Wypall the surface and the parts of equipment				
5	Accionar el pedal para hacer vibrar la tolva / Press the pedal to vibrate the hopper.				
6	Verificación visual: verificar ausencia de capsulas, restos de bayeta y/o wypall / Visual verification: verify the absence of capsules, remains of cloth and / or Wypall				
6.1.	Tolva principal / Principal Hopper				
6.2.	Cuerpo de la maquina / parte inferior de la maquina / Machine body / bottom of the machine				
6.3.	Canastas vacias antes de salir del área / Empty baskets before leaving the area				
6.4.	Partes laterales entre los bajantes de la tolva y del vibrador de la maquina pesadora / Laterals parts between hopper's downpipes and and the vibrator of the weighing machine				
6.5.	Sellador / Sealant				
6.6.	Mesa / Table				
7	Emplee la lampara para iluminar las piezas de la máquina / Use the lamp to illuminate the parts of the machine				

COPIA VERDADERA



Lista de Chequeo para Despeje y Alistamiento de Equipos

Checklist for Clearance and Readiness of Equipment

Producto en Proceso / Product in Process:		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
Código/Code:	400004768 / N.A	Lote/Batch:		OT	
Producto Anterior (Código / Descripción / Lote / OT) / Previous Product (Code / Description / Batch / PO)					
Equipo/ Equipment:					
		SI / YES	NO	N.A.	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS
8	Verificación canastas vacías antes de salir del área / Checking empty baskets before leaving the area				
9	Verificación del área / paredes / rejillas / lamparas / Checking the area / walls / screens / lamps				
10	El teflón de la selladora esta en buen estado y bien adherido a la barra de sellado de la selladora. Ver SOP-0784 Manejo de las maquinas selladoras, las consideraciones para determinar cuando un teflon esta en buen estado / The teflon of the sealer is in good condition and well adhered to the sealing bar of the sealer. See point A of SOP-0784 Handling of sealing machines, considerations for determining when a teflon is in good condition				
11	La temperatura de la selladora debe estar seteada entre 0.8 y 0.9 pulsos según lo establecido en el SOP-0784 Manejo de las maquinas selladoras / The temperature of the sealer must be set between 0.8 and 0.9 pulses as set out in SOP-0784 Handling of sealing machines				

Realizado por / Performed by:		Fecha /Date:	
Verificado por / Verified by:		Fecha /Date:	

Nota: Si después de 24 Horas el equipo no ha sido utilizado, se debe realizar nueva limpieza.

Note: If after 24 hours the equipment has not been used, re-cleaning must be done.

COPIA VERDADERA



ACTA DE SANITIZACION/**SANITIZATION ACT**

FECHA/**DATE**: _____

NOMBRE PRODUCTO/**PRODUCT NAME**:
VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

LOTE/**BATCH**: _____

AREAY/O EQUIPO/**AREA AND/OR /EQUIPMENT**

LAVADO REALIZADO POR /**WASHING PERFORMED BY**:


REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

SANITIZACION REALIZADA POR/**SANITATION PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

JEFE DE AREA/ **HEAD OF AREA**

F-INST-0064-3 V02

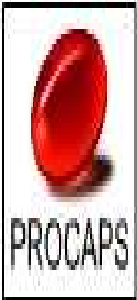


Código Material: Material Code	400004768	Producto:/ Product:	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		
Código Anterior:/ Previous Code	N.A				
Dosificación:/ Dosage:	275 mg	Cantidad a Producir:/ Quantity to Produce	100,000	Molde/Punzon:/ Mold/Punch	5.5 OVAL
Grupo de artículo:/ Article Group	Z103001				
		Cantidad Base:/ Amount Base	100,000		
Lote Standard:/ Standard Lot:	100000	Forma Farmacéutica:/ Pharmaceutical Form:	CBG/SGC	Vida útil:/ Useful Life Time:	180 Dias/Days
		Versión:/ Version:	10		
		Vigencia:/ Effective Date:		Und. Medida del producto:/ Product Unit Measure:	un

ETIQUETAS/LABELS

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

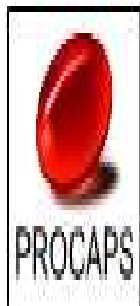

Código
Material:
Material Code 400004768

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

IMPRESIÓN DE CÁPSULAS / CAPSULE PRINTING

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

1. DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Cápsula blanda de gelatina de color rojo, forma oval. Contiene líquido oleoso ligeramente amarillo, Cada cápsula lleva impreso en tinta blanca el logo "50".

Red, oval-shape, soft gelatine capsule. It contains a slightly yellow oily liquid. Each capsule has "50" printed in white ink.

2. INSTRUCCIONES GENERALES / GENERAL INSTRUCTIONS:

3. ÁREA DE IMPRESIÓN Y EQUIPOS / PRINTING AREA AND EQUIPMENTS

Leer las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y síguelas en estricto orden:

Read the instructions described below, before starting the process, and follow them in the strictest order:

- La persona debe utilizar el uniforme correspondiente: Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes y protector auditivo.

- The person must wear the corresponding adequate uniform: white overall, bonnet (hair cover) nose- mouth protector, disposable gloves, boots not slippery and hearing protection.

REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión De Desviaciones Del Sistema De Calidad.

(Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management)

Verificar el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área.

Verify the clearance of the line (area and equipment) and the environmental conditions in the area.

- TEMPERATURA: 23°C.

- TEMPERATURE: 23°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 21°C Máximo: 25°C.

Alarm Limits: Minimum: 21°C Maximum: 25°C.

Límites de Acción: Mínimo: 19°C Máximo: 27°C.

Action Limits: Minimum: 19°C Maximum: 27°C.

- HUMEDAD RELATIVA: 45 %

- RELATIVE HUMIDITY: 45 %

Límites de Alarma: Máximo: 50%.

Alarm Limits: Maximum: 50%.

Límites de Acción: Máximo: 55%.

Action Limits: Maximum: 55%.

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:

(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)

Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.

(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

Inicio de proceso/Start Process:

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/Final Process

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Equipos:
Equipments:

Descripción Equipo/ Equipment Description	Equipos Utilizados / Equipment Used
Impresora Delta / Delta Printing	
Rodillo de impresión / Printing roller	

VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

-Seguir y ejecutar las actividades de impresión de cápsulas descritas en los procedimientos:

.-Follow and perform the Capsule Printing activities described in the procedures:

- * Limpieza y sanitización de áreas de manufactura: INST-0064
- * **Cleaning and sanitization of the manufacturing area. Code No. INST-0064**
- * Identificación de Área y/o Equipo Código: INST-0073
- * **Identification of Areas and/ or Equipments. Code No. INST-0073**
- * Limpieza de la Impresora de cápsulas DELTA. Código: INST-0096
- * **Cleaning of the machine printing DELTA. Code No. INST-0096**
- * Operación con Máquina Impresora Delta. Código: INST-0049
- * **Operation with Delta Printing Machine. Code No. INST-0049**
- * Limpieza y Desinfección de Canastas Plásticas y Bandejas Planas. Código: INST-0055
- * **Cleaning and Disinfection of plastic crates and trays Planas. Code No. INST-0055**
- * Identificación de Productos en Proceso en Plantas Productivas. Código: INST-0189.
- * **Identification of In-Process Products in Production Plants. Code No. INST-0189**

Identificación del producto anterior (Identification of the previous product)

PRODUCTO ANTERIOR (PREVIOUS PRODUCT)	
Nombre del producto anterior (Previous product name)	

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Version:
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Código del producto anterior (Previous product code)	Lote / OP (Lot / PO)	Verificado por (Verified by)	Fecha (Date)

Adjunte a la Orden de Producción la etiqueta de identificación de área, equipo, materia prima y proceso.

Attach the label for the identification of Area, equipment, Raw Material, and Process to the Production Order.

4. APROBACION DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC) PARA INICIAR IMPRESION DE CAPSULAS.

4. QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL TO START CAPSULE PRINTING STAGE

Notifique al inspector de AC para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso.

Request verification by the QA inspector of the following steps before starting the process.

4.1	Verifique que las áreas estén limpias y se cumplan las condiciones ambientales. The areas are clean and environmental conditions are met.	√
4.2	Verifique que los operarios tengan los equipos de protección personal requeridos. The operators are wearing the required personal protection equipment.	
4.3	Verifique que la máquina impresora de cápsulas este limpia. The capsule printing machine is clean.	
4.4	Verifique que la máquina impresora haya sido liberada por Aseguramiento de Calidad por verificación de limpieza. Verify that the Printing Machine has been released by Quality Assurance for cleaning verification.	
4.5	Verifique que el rodillo de impresión montado en la máquina impresora tenga la leyenda "50" para un molde 5.5 Oval. The printing roller is mounted on the printing machine and shows the lettering "50" for a mold 5.5 Oval.	
4.6	Verifique que la tinta de impresión sea Tinta Opacode Blanca S-1-7085, código No _____ Verify the printing ink to be Opacode White Ink S-1-7085 Code No.	

APROBACIÓN FINAL DE AC QA FINAL APPROVAL	FIRMA SIGNATURE	FECHA/HORA DATE/TIME

5. PROCEDIMIENTO / PROCEDURE:

CONTROL EN PROCESO/IN-PROCESS CONTROL:

- Verificar el Registro de la materia prima antes de usar según la orden de fabricación
- Verify the register of the raw material before usage, as the Manufacture Order.

MATERIA PRIMA/ RAW MATERIAL	CODIGO CODE No.	g/caps- g/caps	g/Lote g/Lot	REGISTRO REGISTER
TINTA OPACODE BLANCA S-1-7085 / OPACODE WHITE INK S-1-7085	100002363	0.001	100.0	

REALIZADO POR: _____ VERIFICADO POR: _____ FECHA: _____

- MÁQUINA IMPRESORA DE CAPSULAS A UTILIZAR/CAPSULE PRINTING MACHINE TO USE:..... DELTA

- MÁQUINA IMPRESORA DE CAPSULAS/CAPSULE PRINTING MACHINE:.....

- COLOR DE LA TINTA/COLOUR OF THE INK:..... BLANCA/WHITE

- REPORTAR COLOR DE LA TINTA USADA/ REPORT THE COLOUR OF THE USED INK: _____

- LOGO IMPRESO/PRINTED LOGOTYPE:..... 50


VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____ FECHA/DATE: _____

5.1 El proceso de impresión debe ejecutarse siguiendo las actividades descritas en el INST-0049.

5.1 The printing process must be run according to the activities described in the INST-0049.

COPIA VERDADERA

Usuario:
User: MUTRIA

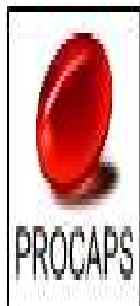

Producto: / VITAMINA D3 50000 UI CBG |
Product: VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000

Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión: / 10
Version:
Vigencia: /
Effective Date:

Und. Medida del producto: /
Product Unit Measure: UN

5.2 Printing process must be started with Opcode White Ink S-1-7085 Code: 100002363

5.3 Every 30±5 minutes, during the printing process, wipe the rubber rollers of the printing machine, using a soaked cloth with ethanol and keep ink deposit closed during the whole printing process. Report the results in the Format of Print Control.

5.4 During all process, every 30±5 minutes should be verified that the printing logo on the capsule be complete, clear and legible. The capsule should not show ink stains.

[illegible]

OBSERVACIONES\OBSERVATIONS: _____



LISTA DE CHEQUEO MÁQUINA IMPRESORA
CHECK LIST CLEANING THE CAPSULE PRINTING

PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO CODE	400004768 / N.A	LOTE BATCH		ORDEN ORDER

PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT				
CODIGO CODE		LOTE BATCH		ORDEN ORDER

PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN	SI / YES ☐	NO / NOT ☐	MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION	Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch
--	-----------------------------------	-----------------------------------	--	---

LIMPIEZA DEL EQUIPO (Desensamblar las piezas del equipo según las actividades descritas en el Instructivo INST-0096 -Limpieza de la impresora de cápsulas Delta) CLEANING OF EQUIPMENT (Disassemble the equipment parts according to the activities described in Instruction INST-0096 -Cleaning of the Delta capsule printer)	
Seleccionar el tipo de actividad a realizar (Marque con "✓") Select the type of activity to be performed (Check with "✓")	LIMPIEZA PARCIAL / PARTIALCLEANING ☐ LIMPIEZA COMPLETA / FULL CLEANING ☐

LIMPIEZA PARCIAL (Tiempo de acción para agentes de desinfección) SI APLICA PARTIAL CLEANING (Time of action for disinfection agents) IF APPLICABLE	Tiempo de contacto Contact time	Hora inicial Start time	Hora final Final time	Tiempo total (Min) Total time (Min)
Con paño humedecido con solución de alcohol al 70%, refriegue cada una de las partes del equipo, cubriendo toda su superficie, haciendo énfasis en hendiduras u orificios, deje actuar el desinfectante por un tiempo entre 10 a 15 minutos. With a cloth dampened with a 70% alcohol solution, rub each part of the equipment, covering the entire surface, with emphasis on cracks or holes, leave the disinfectant to act for 10 to 15 minutes.	10 -15 minutos 10 -15 minutes			
Desacoplar la canasta y colector de cápsulas rechazadas y limpiar con un paño humedecido con alcohol al 70% y deje actuar el desinfectante por un tiempo entre 10 a 15 minutos. Uncouple the basket and the rejected capsule collector and clean with a cloth dampened with 70% alcohol and let the disinfectant act for a period of 10 to 15 minutes.	10 -15 minutos 10 -15 minutes			
Realizado por Fecha / Hora Performed by Date / Time	Revisado por AC / SUP Fecha / Hora Reviewed by AC / SUP Date / Time			

1.LIMPIEZA COMPLETA DEL EQUIPO (Desmontar las piezas del equipo según las actividades descritas en el instructivo INST-0096 -Limpieza de la impresora de cápsulas Delta) SI APLICA 1.CLEANING OF THE EQUIPMENT (Disassemble the pieces of the equipment, according to the activities described in the instructions INST-0096 -Cleaning of the Delta capsule printer) IF APPLICABLE				
1.1.Seleccionar la máquina a limpiar (Marque con "✓") 1.1.Select the machine to be cleaned (Mark with "✓")	Delta 1 ☐	Delta 2 ☐	Delta 3 ☐	Delta 4 ☐ Marken ☐

2.SOLUCIONES Y AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 2. CLEANING AND DISINFECTION SOLUTIONS AND AGENTS				
--	--	--	--	--

2.1.Seleccionar la solución detergente para la limpieza (Marque con "✓") PROBIO ☐ LIQUINOX ☐ SOLUCION DETERGENTE AL 1% ☐				
---	--	--	--	--

SOLUCIÓN USADA USED SOLUTION	MARQUE CON "✓" LA CONCENTRACION USADA MARK WITH "✓" THE CONCENTRATION USED	FECHA DE FABRICACIÓN MANUFACTURING DATE	FECHA DE VENCIMIENTO EXPIRATION DATE	REVISADO POR FECHA (SUP/AC) REVIEWED BY DATE (SUP/AC)
2.2 Solución Detergente 2.2 Detergent Solution	Al 1% ☐			
2.3.Solución de alcohol 2.3.Alcohol solution	Al 70% ☐			

COPIA VERDADERA

LISTA DE CHEQUEO MÁQUINA IMPRESORA
CHECK LIST CLEANING THE CAPSULE PRINTING



PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO CODE		400004768 / N.A	LOTE BATCH		ORDEN ORDER
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT					
CODIGO CODE			LOTE BATCH		ORDEN ORDER
PRODUCTO EN CAMPANA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐	NO / NOT ☐	MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPANA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION	
				Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch	
3.LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN (Tiempos de acción para agentes de limpieza y desinfección) 3. CLEANING AND SANITIZATION (Action times for cleaning and disinfection agents)			TIEMPO DE CONTACTO CONTACT TIME	HORA INICIAL START TIME	HORA FINAL END TIME
3.1.Humedecer un paño con solución detergente al 1 % refriegue cada una de las siguientes partes: Tolva , rodillos de caucho , rodillo de diseño,portacuchilla,cubeta tinta,carcasa de la piñoneria,eslabones, escobilla,disco alimentador y protector) 3.1.Moisten a cloth with a 1% detergent solution and scrub each of the following parts: Hopper, rubber rollers, design roller, blade holder, ink bucket, sprocket casing, links, brush, feeder disc and protector)			10-15 minutos (minutes)		
3.2.Humedecer un paño con alcohol al 70% y aplicar sobre las partes y superficie del equipo 3.2.Moisten a cloth with 70% alcohol and apply to the parts and surface of the equipment			10-15 minutos (minutes)		
4. LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN (Enjuagues en los procesos de limpieza y desinfección) CLEANING AND SANITIZATION (Rinses in the cleaning and disinfection processes)					
4.1. Tipo de agua usada en en los enjuagues de las partes de la máquina refregadas con solución detergente (Marque con "✓") 4.1.Type of water used in the rinses of the parts of the machine scrubbed with detergent solution (Mark with "✓")			Agua potable potable water	☐	
4.2. Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes de la máquina sanitizadas (Marque con "✓") 4.2.type of water used to rinse the sanitized parts of the machine (Mark with "✓")			Agua purificada Purified water	☐	
REALIZADO POR/FECHA HORA (OPERADOR) REALIZED BY /DATE HOUR (OPERATOR)			REVISADO POR FECHA HORA (SUP/AC) REVISED BY / DATE HOUR (SUP/AC)		
5. LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA: La inspección final de la limpieza es realizada por el superintendente en turno, o el personal de calidad. Revisar la ausencia de residuos visibles del producto anterior, cápsulas, la ausencia de restos de las soluciones de limpieza y olores extraños en las siguientes partes de la máquina. Marque con "✓" cumple o no cumple, si no aplica cierre el espacio con guion (-) 5.CLEANING INSPECTION CHECKLIST: The final cleaning inspection is performed by the superintendent, or quality person. Check the absence of visible residues of the previous product, capsules, the absence of remains of cleaning solutions and strange odors in the following parts of the machine. Mark with "✓" meet or does not meet, if it does not apply, close the space with a hyphen (-)					
Realiza limpieza con la máquina desensamblada (Marque con "✓") Clean with the machine disassembled (Mark with "✓")					
SI / YES ☐ NO / NOT ☐					
Utiliza aire comprimido y lampara para la verificación y limpieza de la máquina (Marque con "✓") Use compressed air and a lamp to verify and clean the machine (Mark with "✓")					
SI / YES ☐ NO / NOT ☐					
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET
Tolva Hopper			Carcasa piñoneria Sprocket casing		Eslabones Links
Rodillo de diseño Design roller			Cuerpo de la maquina Casing machine		Cadena Chain
Rodillo de caucho Rubber roller			Escobillas Brushes		Estrella Star
Porta tinta Ink holder			Bajante Downspout		Suministro de aire comprimido Compressed air supply
Porta cuchilla Blade Holder			Disco alimentador Feeder disc		Otro Other
REALIZADO POR FECHA / TIME (OPERADOR) REALIZED BY/DATE / TIME (OPERATOR)			REVISADO POR FECHA / HORA (SUP/AC) REVIZED BY DATE / TIME (SUP/AC)		
NOTA: La finalización del proceso de limpieza se da con la revisión y aprobación por el superintendente, inspector o monitor de calidad. NOTE: Completion of the cleaning process is upon review and approval by the superintendent, inspector or quality monitor.					
CONVENCIONES : AC : Personal de calidad / SUP : Superintendente CONVENTIONS AC : Quality Staff / SUP : Superintendent					

COPIA VERDADERA

**DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE**

ÁREA /AREA				PROCESO /PROCESS	
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	

PRODUCTO ANTERIOR /PREVIOUS PRODUCT					
CODIGO /CODE		LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA /VERIFICATION OF THE AREA	SI /YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified			
1.2	Esta el area limpia y desinfectada / Is the area clean and disinfected			
1.3	Las rejillas, puertas, marcos de puertas, vidrios y ventanas, estan limpias/ The grates, doors, door frames, glass and windows are clean			
1.4	Las condiciones ambientales del area son las requeridas para el proceso/ The environmental conditions of the area are those required for the process			
1.5	Están los reservorios de tinta completamente limpios (Aplica proceso impresión de capsula blanda y encapsulado) / Are the ink reservoirs completely clean (Applies soft capsule printing and encapsulation process)			
1.6	Existe en el área o máquina blísteres vacios o materiales residuos del set up (Aplica proceso empaque Blister) / There are empty blisters or waste materials from the setup in the area or machine (Applies Blister packaging process)			
1.7	Asegúrese que las zonas de difícil acceso estén completamente limpias/ Make sure hard-to-reach areas are completely clean			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO /VERIFICATION OF THE EQUIPMENT	SI /YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified			
2.2	Esta el equipo limpio / Is the equipment clean			
2.3	Funciona el equipo correctamente / The equipment works properly			
2.4	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correctly installed, complete and in good condition.			
2.5	Los PLC, Panel View, sistema de visión, pantallas de configuración de los equipos, instrumentos y sistemas de controles en proceso, tiene información del proceso anterior / PLCs, Panel View, vision systems, equipment configuration screens, instruments and process control systems have information about the previous process.			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION /VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI /YES	NO	N.A
3.1	Existen documentos del producto anterior en el area / There are documents of the previous product in the area			
3.2	El proceso de limpieza y desinfección de area y equipo esta registrada en la bitacora / The cleaning and disinfection process of the area and equipment is recorded in the logbook.			
3.3	Las etiquetas de vacio limpio de los equipos estan completas y anexas al batch record / The clean vacuum labels of the equipment are complete and attached to the batch record.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / STAFF VERIFICATION	SI /YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal safeguard elements			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Proper and complete uniform			
4.3	Uniforme limpio sin pelusa, hilo, cabello y restos de etiqueta / Clean uniform free of lint, thread, hair and tag residue			
4.4	El uniforme contiene capsulas en los bolsillo, mangas,cuello o sitios que permitan el transporte de capsulas. / The uniform contains capsules in the pockets, sleeves, collar or places that allow the transport of capsules.			
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES /VERIFICATION OF MATERIALS AND TOOLS	SI /YES	NO	N.A
5.1	Existen materiales diferentes a los que se van a utilizar en el proceso / Exist differents materials to which are normally used in the process			



DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE

ÁREA /AREA			PROCESO /PROCESS		
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER		
5.2	Los utensilios y materiales requeridos se encuentran en el área / The tools and materials required are in the area				
5.3	Las materias primas dispensadas corresponden con la orden de producción / Dispensed raw materials correspond to the production order				
5.4	La cantidad de materias primas dispensadas corresponden con la establecida en la orden de producción / The quantity of raw materials dispensed correspond to the production order				
5.5	Los materiales corresponden con la orden de empaque / The materials correspond to the packaging order				
5.6	La cantidad de materiales corresponden con la establecida en la orden de empaque / The quantity of materials correspond to the packaging order				
5.7	El registro de la tinta a usar para la impresión de las capsulas corresponde con la orden de producción / The register of the ink to be used for the capsule printing process corresponds to the production order				

REALIZADO POR /FECHA/HORA/
DONE BY /DATE/TIME

REVISADO POR /FECHA/HORA/
REVIEWED BY/ DATE/TIME

Observaciones/
Comments:

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA / FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA			PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA / VERIFICATION OF AREA	SI/YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified.			
1.2	Se han recogido las materias primas, materiales y granel caidos al piso. / Raw materials, materials and bulk materials that fell to the floor have been collected..			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO / VERIFICATION OF EQUIPMENT	SI/YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified.			
2.2	Los materiales utilizados (MP, GR, ME) remanentes del proceso han sido retirados del equipo / The materials used (MP, GR, ME) remaining from the process have been removed from the			
2.3	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correct installed, complete and in good condition			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI/YES	NO	N.A
3.1	Al finalizar el despeje de linea, no quedan en el area documentos del producto inmediatamente trabajado / At the end of the line clearance, no documents are in the area of immediately worked product.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / VERIFICATION OF PERSONAL	SI/YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal protection.			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Appropriate and complete uniform.			
4.3	Uniforme limpio / Clean uniform.			

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA /
FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA		PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		
		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER		
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES / VERIFICATION OF TOOLS AND MATERIALS	SI/YES	NO	N.A
5.1	Los utensilios han sido retirados / The tools have been removed.			
5.2	Los empaques, bolsas, tanques, canastas, bandejas usados por los materiales del producto trabajado han sido retirados / The packaging (MP, GR, ME), bags, tanks, baskets, trays used for the materials of the worked product have been removed.			
5.3	La cantidad de materiales remanentes ha sido registrada para la conciliación de producto / The amount of remaining material has been registered for the reconciliation of product.			
5.4	Los materiales (MP, GR, ME) remanentes han sido identificados y devueltos / The remaining materials (MP, GR, ME) have been identified and returned.			
5.5	Se han registrado las cantidades producidas en los documentos establecidos para tal fin / The quantities produced have been in the documents established for that purpose.			
5.6	Los productos resultado del proceso han sido retirados o se encuentran debidamente sellados y protegidos / The result of the process products have been recalled or are properly sealed and protected.			

REALIZADO POR
/FECHA/HORA/DONE BY
/DATE/TIME

REVISADO POR
/FECHA/HORA/REVIEWED BY
/DATE/TIME

Observaciones:
Observations:

MP: Materia prima/MP: Raw material ME: Material de empaque/ ME: Packaging material GR: Granel/GR: Bulk

COPIA VERDADERA



IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS / IDENTIFICATION OF AREAS

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) /PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
---	--

ÁREA /AREA	
------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								
NOTA: SI DESPUES DE 24 HORAS EL AREA NO HA SIDO UTILIZADA, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA NOTE: IF 24 HOURS LATER THE AREA HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.								
OBSERVACIONES /COMMENTS								



IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO /EQUIPMENT IDENTIFICATION

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) / PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
--	--

EQUIPO /EQUIPMENT	
----------------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR /DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR /VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								

NOTA 1: SI DESPUES DE 24 HORAS EL EQUIPO NO HA SIDO UTILIZADO, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA
NOTE 1: IF 24 HOURS LATER THE EQUIPMENT HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.

NOTA 2: UNA VEZ UTILIZADO EL EQUIPO, SE DEBE PROCEDER CON SU LIMPIEZA. ESTE NO DEBE PERMANECER MAS DE 8.5 HORAS SUCIO.
NOTE 2: ONCE THE EQUIPMENT IS USED, IT SHOULD BE PROCEEDED WITH ITS CLEANING. THIS SHOULD NOT STAY OVER 8.5 HOURS DIRTY

OBSERVACIONES /COMMENTS	
----------------------------	--

COPIA VERDADERA



Lista de Chequeo para Despeje y Alistamiento de Equipos

Checklist for Clearance and Readiness of Equipment

Producto en Proceso / Product in Process:		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
Código/Code:	400004768 / N.A	Lote/Batch:		OT	
Producto Anterior (Código / Descripción / Lote / OT) / Previous Product (Code / Description / Batch / PO)					
Equipo/ Equipment:					
		SI / YES	NO	N.A.	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS
1	Retirar el producto anterior / Remove the previous product				
2	Desarme de la maquina y retire de las piezas/ Disassemble the machine and remove the pieces:				
2.1.	Tolva principal / principal Hopper				
2.2.	Tolva fina / thin Hopper				
2.2.1	Compuerta Tolva fina / thin gate Hopper				
2.3.	Tolva gruesa / gross Hopper				
2.3.1.	Compuerta Tolva gruesa / gross gate Hopper				
2.4.	Cazamba / Bucket				
2.5.	Mesa/Banda transportadora / Table / Conveyor Belt				
2.6.	Computador / Computer				
2.7.	Maquina Selladora / Sealing Machine				
2.8.	Acrílicos / Acrylics				
2.9.	Rodillos / Rollers				
2.10.	Bajantes / Downspipes				
2.11.	Compuertas / Gates				
2.12.	Aleros / Eaves				
2.13.	Cadena / Chain				
2.14.	Tapones de la canasta interna / Plugs internal basket				
2.15.	Eslabones / Shackle				
2.16.	Panel view / Panel view				
3	Colocar aire comprimido en todas las piezas de la maquina / Place compressed air in all parts of the machine				
4	Limpie con alcohol al 70% y paño o wypall las superficies del equipo y piezas / Wipe with alcohol at 70% and clean baize or Wypall the surface and the parts of equipment				
5	Accionar el pedal para hacer vibrar la tolva / Press the pedal to vibrate the hopper.				
6	Verificación visual: verificar ausencia de capsulas, restos de bayeta y/o wypall / Visual verification: verify the absence of capsules, remains of cloth and / or Wypall				
6.1.	Tolva principal / Principal Hopper				
6.2.	Cuerpo de la maquina / parte inferior de la maquina / Machine body / bottom of the machine				
6.3.	Canastas vacias antes de salir del área / Empty baskets before leaving the area				
6.4.	Partes laterales entre los bajantes de la tolva y del vibrador de la maquina pesadora / Laterals parts between hopper's downpipes and and the vibrator of the weighing machine				
6.5.	Sellador / Sealant				
6.6.	Mesa / Table				
7	Emplee la lampara para iluminar las piezas de la máquina / Use the lamp to illuminate the parts of the machine				

COPIA VERDADERA



Lista de Chequeo para Despeje y Alistamiento de Equipos

Checklist for Clearance and Readiness of Equipment

Producto en Proceso / Product in Process:		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
Código/Code:	400004768 / N.A	Lote/Batch:		OT	
Producto Anterior (Código / Descripción / Lote / OT) / Previous Product (Code / Description / Batch / PO)					
Equipo/ Equipment:					
		SI / YES	NO	N.A.	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS
8	Verificación canastas vacías antes de salir del área / Checking empty baskets before leaving the area				
9	Verificación del área / paredes / rejillas / lamparas / Checking the area / walls / screens / lamps				
10	El teflón de la selladora esta en buen estado y bien adherido a la barra de sellado de la selladora. Ver SOP-0784 Manejo de las maquinas selladoras, las consideraciones para determinar cuando un teflon esta en buen estado / The teflon of the sealer is in good condition and well adhered to the sealing bar of the sealer. See point A of SOP-0784 Handling of sealing machines, considerations for determining when a teflon is in good condition				
11	La temperatura de la selladora debe estar seteada entre 0.8 y 0.9 pulsos según lo establecido en el SOP-0784 Manejo de las maquinas selladoras / The temperature of the sealer must be set between 0.8 and 0.9 pulses as set out in SOP-0784 Handling of sealing machines				

Realizado por / Performed by:		Fecha /Date:	
Verificado por / Verified by:		Fecha /Date:	

Nota: Si después de 24 Horas el equipo no ha sido utilizado, se debe realizar nueva limpieza.

Note: If after 24 hours the equipment has not been used, re-cleaning must be done.

COPIA VERDADERA



REPORTE DIARIO DE IMPRESIÓN DE CÁPSULAS / DAILY REPORT OF THE PRINTING OF CAPSULE

Producto /Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG | VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código/ Code: 400004768 / N.A Lote/ Batch : Orden/ Process Order:

CONTROL IMPRESIÓN /IN PROCESS PRINTING CONTROL

FECHA /DATE								
HORA / TIME								
APROB.AREA-EQUIPO / APPROVAL FOR AREA /EQUIPMENT								
IMPRESIÓN CÁPSULAS / CAPSULE PRINTING								
IMPRESO POR / PRINTED BY								
VERIFICADO POR / VERIFIED BY								
HORA / TIME								
INSPECTOR DE CALIDAD / QUALITY INSPECTOR								

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS:



ACTA DE SANITIZACION/**SANITIZATION ACT**

FECHA/**DATE**:

NOMBRE PRODUCTO/**PRODUCT NAME**:

VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

LOTE/**BATCH**:

AREAY/O EQUIPO/**AREA AND/OR /EQUIPMENT**

LAVADO REALIZADO POR /**WASHING PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

SANITIZACION REALIZADA POR/**SANITATION PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

JEFE DE AREA/ **HEAD OF AREA**

F-INST-0064-3 V02

COPIA VERDADERA




Código Material:/ Material Code	400004768	Producto:/ Product:	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		
Código Anterior:/ Previous Code	N.A				
Dosificación:/ Dosage:	275 mg	Cantidad a Producir:/ Quantity to Produce	100,000	Molde/Punzon:/ Mold/Punch	5.5 OVAL
Grupo de artículo:/ Article Group	Z103001				
		Cantidad Base:/ Amount Base	100,000		
Lote Standard:/ Standard Lot:	100000	Forma Farmacéutica:/ Pharmaceutical Form:	CBG/SGC	Vida útil:/ Useful Life Time:	180 Dias/Days
		Versión:/ Version:	10		
		Vigencia:/ Effective Date:		Und. Medida del producto:/ Product Unit Measure:	un

ETIQUETAS/LABELS

**ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS**

Usuario:
User: MUTRIA

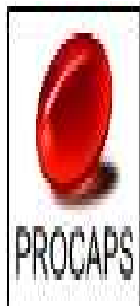

Código Material:
Material Code 400004768

Producto: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
Product: VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Versión: 10

Vigencia:

Effective Date:

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

INSPECCIÓN / INSPECTION

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Cápsula blanda de gelatina de color rojo, forma oval. Contiene líquido oleoso ligeramente amarillo, Cada cápsula lleva impreso en tinta blanca el logo "50".

Red, oval-shape, soft gelatine capsule. It contains a slightly yellow oily liquid. Each capsule has "50" printed in white ink.

INSTRUCCIONES GENERALES / GENERAL INSTRUCTIONS:

ÁREA DE INSPECCIÓN (INSPECTION AREA) (Área de Inspección No. (Inspection Area No.): _____)

Lea las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y síguelas en estricto orden:

Before starting the process, read the instructions described herein, and follow them in the strictest order:

La persona debe utilizar el uniforme correspondiente: Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes.

The person must wear the corresponding adequate uniform: white overall, bonnet, (hair cover), nose- mouth protector, boots not slippery.

REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión De Desviaciones Del Sistema De Calidad.

(Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management)

- Verificar el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

- Verify the clearance of the line (areas and equipments) and the environmental conditions in the area:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.020 (Positivo) pulgadas de agua - Máximo: 0.150 (Positivo) pulgadas de agua.

PRESSURE DIFFERENTIAL: Minimum: 0.020 (Positive) Inches of water - Maximum: 0.150 (Positive) Inches of water.

- TEMPERATURA / **TEMPERATURE:** 23.0°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 21.0°C Máximo: 25.0°C.

Alarm Limits: Minimum: 21.0°C Maximum: 25.0°C.

Límites de Acción: Mínimo: 19.0°C Máximo: 27.0°C.

Action Limits: Minimum: 19.0°C Maximum: 27.0°C.

- HUMEDAD RELATIVA / **RELATIVE HUMIDITY:** 45 %

Límites de Alarma: Máximo: 50%.

Alarm Limits: Maximum: 50%.

Límites de Acción: Máximo: 55%.

Action Limits: Maximum: 55%.

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:

(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)


Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.

(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

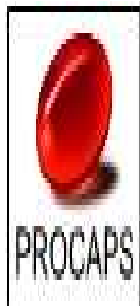

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

Inicio de proceso/Start Process:

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/Final Process

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Seguir y ejecutar las actividades de inspección de cápsulas descritas en los siguientes procedimientos:
Follow and perform the Capsule Inspection activities described on the following procedures.

- * Despeje de Línea. Código: INST-0109
- * Line Clearance. Code No. INST-0109
- * Identificación de Área y/o Equipo Código: INST-0073
- * Identification of Areas and/ or Equipments. Code No. INST-0073
- * Secado, Descargue e Inspección de Cápsulas. Código: INST-0195
- * Drying, Unloading and Inspection of Capsules. Code No. INST-0195
- * Limpieza y Desinfección de Canastas Plásticas y Bandejas Planas. Código: INST-0055
- * Cleaning and Disinfection of plastic crates and trays Planas. Code No. INST-0055
- * Identificación de Productos en Proceso en Plantas Productivas. Código: INST-0189.
- * Identification of In-Process Products in Production Plants. Code No. INST-0189
- * Calificación del personal de inspección. Código: SOP-0500
- * Qualification of the Personnel from Inspection. Code No. SOP-0500
- * Limpieza y Sanitización de Áreas de Manufactura. Código: INST-0064
- * Cleaning and Sanitation of the Manufacture Areas. Code No. INST-0064

REGISTRAR LOS DEFECTOS ENCONTRADOS EN ESTA ETAPA:
REGISTER THE DEFECTS FOUND IN THIS STAGE:

LISTADO DE DEFECTOS/ LISTING OF DEFECTS	Nº DE CÁPSULAS DEFECTUOSAS/ No OF DEFECTIVE CAPSULES
Goteos o escapes por el sello de la cápsula/ Drips or Leaks through the capsule seal	
Manchas en las caras de las cápsulas/ Stains on the sides of the capsules	
Manchas en el sello por migración de medicina/ Stains on the seal due to migration of medicine	
Sello defectuoso/ Defective seal	

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

Cápsulas deformes/ Misshapen capsules	
Cápsulas pegadas/ Stuck capsules	
Cápsulas grasosas/ Greasy capsules	
Cápsulas colapsadas por el sello/ Capsules collapsed by the seal	
Aire en la Medicina/ Air in the medicine	
Aire en la Gelatina/ Air in the gelatine	
Subdosificadas/ Underdosed	
Sobrellenadas/ Overfilled	
Lubricante en la cápsula/ Lubricant in the capsule	
Sello Sucio/ Dirty seal	
Cápsulas sin imprimir / Missing print	
Impresión ilegible / Illegible Print	
Impresión no completa / Broken Print	
Cápsulas manchadas de tinta / Ink spots	
Cápsulas con múltiple impresión / transferencia de impresión/ Multiple print / Print Transfers	
Impresión Tenue / Unclear Print	
Otros (a)/ Others	
TOTAL CÁPSULAS DEFECTUOSAS/ TOTAL DEFECTIVE CAPSULES	

(a) Si existe algún otro defecto que no se encuentre en este listado especificar en la tabla

(a) If there is any other defect, not found in this listing, specify in the table

REALIZADO POR/PERFORMED BY: _____ VERIFICADO POR/VERIFIED BY: _____

OBSERVACIONES/OBSERVATIONS: _____

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A

Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Stándard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Version:
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un


Muestras a tomar por Aseguramiento de la Calidad
Samples to be taken for Quality Assurance

Las muestras deben ser recolectadas en doble BOLSA 15X6.5X6.5X47cm NEGRA CALIBRE 4, código: 200014474.

(Samples must be collected in double BAG 15X6.5X6.5X47cm BLACK CALIBER 4, code: 200014474)

HORA/TIME	FECHA/ DATE	ANÁLISIS/ ANALYSIS	ETAPA/ STAGE	CANTIDADES/ QUANTITIES	FORMA DE MUESTREO/ SAMPLING METHOD	REALIZADO POR/ MPERFORMED BY
		Fisicoquímico/ Physicochemical	Inspección de Aseguramiento de Calidad/ Quality Assurance Inspection	400 Cápsulas/ Capsules	Deben tomarse de los mismos contenedores (inicio, medio y final del lote) de los cuales se tomaron las muestras para la inspección por atributos del producto a granel/ Must be taken from the same containers (beginning, middle and end of the batch) of which were taken samples for inspection by attributes to the bulk material	

COPIA VERDADERA

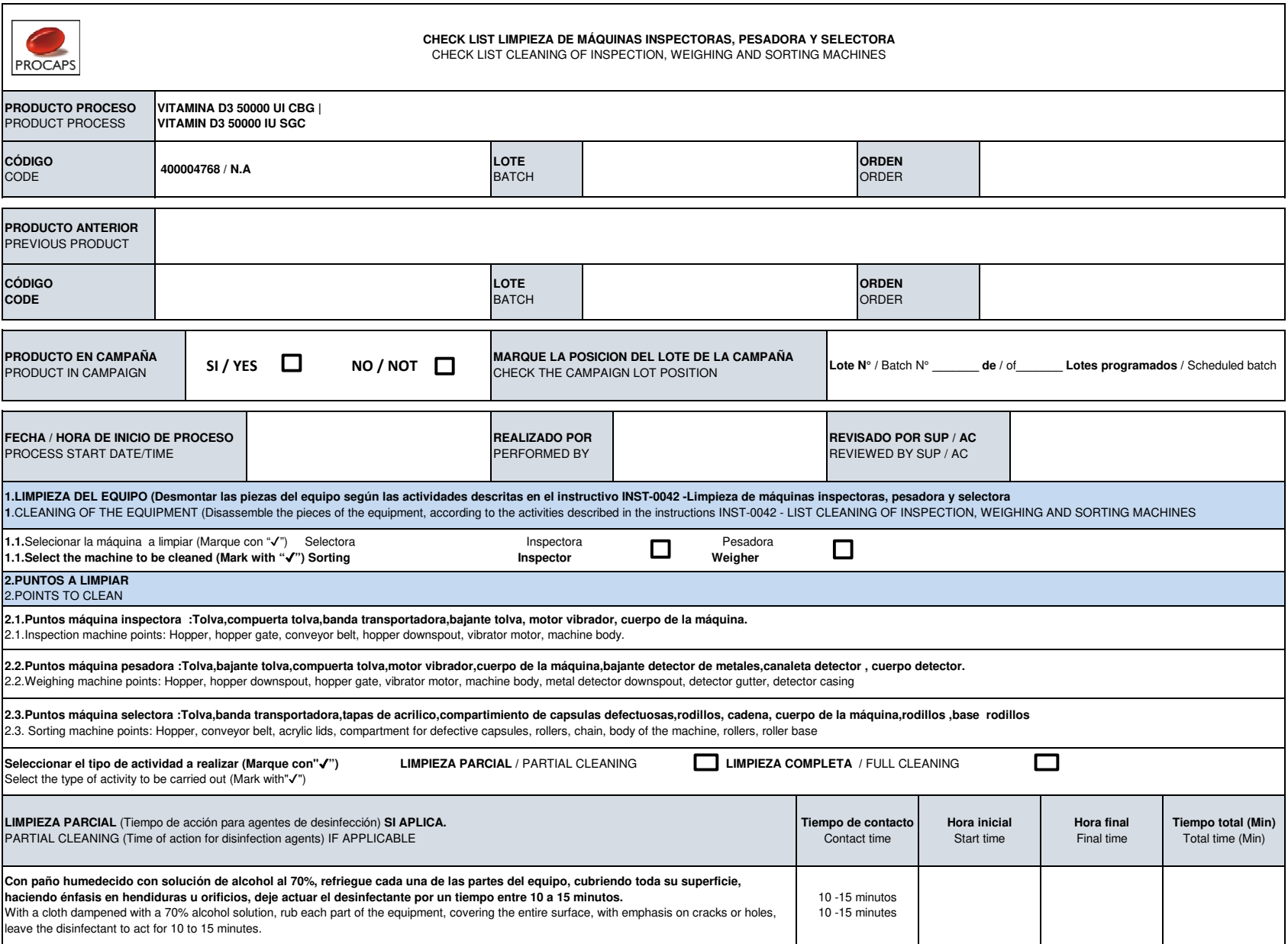

 CHECK LIST LIMPIEZA DE MÁQUINAS INSPECTORAS, PESADORA Y SELECTORA CHECK LIST CLEANING OF INSPECTION, WEIGHING AND SORTING MACHINES									
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC							
CÓDIGO CODE		400004768 / N.A		LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT									
CÓDIGO CODE				LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION			Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch		
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME				REALIZADO POR PERFORMED BY				REVISADO POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC	
Desacoplar la canasta y colector de cápsulas rechazadas y limpiar con un paño humedecido con alcohol al 70% y deje actuar el desinfectante por un tiempo entre 10 a 15 minutos. Uncouple the basket and the rejected capsule collector and clean with a cloth dampened with 70% alcohol and let the disinfectant act for a period of 10 to 15 minutes.						10 -15 minutos 10 -15 minutes			
Realizado por Fecha / Hora Performed by Date / Time						Revisado por AC / SUP Fecha / Hora Reviewed by AC / SUP Date / Time			
3.SOLUCIONES Y AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3. CLEANING AND DISINFECTION SOLUTIONS AND AGENTS									
3.1.Seleccionar la solución detergente para la limpieza (Marque con "✓") PROBIO ☐ LIQUINOX ☐ Solución Detergente 1% ☐ 3.1Select the detergent solution for cleaning (Mark with "✓")									
SOLUCIÓN USADA USED SOLUTION		MARQUE CON "✓" LA CONCENTRACION USADA MARK WITH "✓" THE CONCENTRATION USED		FECHA DE FABRICACIÓN MANUFACTURING DATE		FECHA DE VENCIMIENTO EXPIRATION DATE		REGISTRO (Bitacora / Folio) RECORD (Logbook/Folio)	
Solución Detergente Detergent Solution		1% ☐							
Solución de alcohol Alcohol solution		70% ☐							
3.2 LIMPIEZA COMPLETA (Tiempo de acción para agentes de limpieza y desinfección). SI APLICA. 3.2 FULL CLEANING Action time for cleaning and disinfecting agents). IF APPLICABLE						TIEMPO DE CONTACTO CONTACT TIME		HORA INICIAL START TIME	
								HORA FINAL END TIME	
								TIEMPO TOTAL TOTALTIME	
1.		Humedecer un paño con solución detergente al 1 % refriégue cada una de las partes citadas en el ítem 2 Moisten a cloth with a 1% detergent solution and scrub each of the parts mentioned in item 2				10 -15 minutos (minutes)			
2.		Humedecer un paño con alcohol al 70% y aplicar sobre las partes y superficie del equipo Moisten a cloth with 70% alcohol and apply to the parts and surface of the equipment				10 -15 minutos (minutes)			

 CHECK LIST LIMPIEZA DE MÁQUINAS INSPECTORAS, PESADORA Y SELECTORA CHECK LIST CLEANING OF INSPECTION, WEIGHING AND SORTING MACHINES							
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC					
CÓDIGO CODE		400004768 / N.A		LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT							
CÓDIGO CODE				LOTE BATCH		ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION		Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch	
Realizado por Fecha / Hora Performed by Date / Time						Revisado por AC / SUP Fecha / Hora Reviewed by AC / SUP Date / Time	
3.3. LIMPIEZA Y SANITIZACION (Enjuagues en los procesos de limpieza y desinfección) CLEANING AND SANITIZATION (Rinsing in cleaning and disinfection processes)							
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME				REALIZADO POR PERFORMED BY		REVISADO POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC	
Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes refregadas con detergente. (Marque con una "✓") Type of water used in rinses of parts scrubbed with detergent (Mark with a "✓")						Agua potable Drinking water	
						☐	
Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes de la maquina sanitizadas (Marque con "✓") Type of water used to rinse the sanitized parts of the machine (Mark with "✓")						Agua purificada Purified water	
						☐	
REALIZADO POR/FECHA/HORA (OPERADOR) REALIZED BY /DATE/ HOUR (OPERATOR)				REVISADO POR /FECHA/HORA (SUP/AC) REVIEWED BY / DATE/ HOUR (SUP/AC)			
4. LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA: La inspección final de la limpieza es realizada por el superintendente en turno, o el personal de calidad. Revisar la ausencia de residuos visibles del producto anterior, capsulas, la ausencia de restos de las soluciones de limpieza y olores extraños en las siguientes partes de la máquina. Marque con "✓" cumple o no cumple, si no aplica cierre el espacio con guion (-) 4. CLEANING INSPECTION CHECKLIST: The final cleaning inspection is realized by the superintendent, or quality person. Check the absence of visible residues of the previous product, capsules, the absence of remains of cleaning solutions and strange odors in the following parts of the machine. Mark with "✓" meet or does not meet, if it does not apply, close the space with a hyphen (-)							
Realiza limpieza con la máquina desensamblada (Marque con "✓") Clean with the machine disassembled (Mark with "✓")							
SI / YES ☐ NO / NOT ☐							
Utiliza aire comprimido y lampara para la verificación y limpieza de la máquina (Marque con "✓") Use compressed air and a lamp to verify and clean the machine (Mark with "✓")							
SI / YES ☐ NO / NOT ☐							
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET
Tolva Hopper			Cuerpo de la máquina Machine casing			Motor vibrador Vibrator motor	
Banda transportadora Conveyor belt			Rodillos Rollers			Bajante detector de metales Metal detector downspout	
Tapas de acrílico Acrylic lids			Base rodillos Roller base			Canaleta detector de metales Gutter metal detector	

 CHECK LIST LIMPIEZA DE MÁQUINAS INSPECTORAS, PESADORA Y SELECTORA CHECK LIST CLEANING OF INSPECTION, WEIGHING AND SORTING MACHINES									
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC							
CÓDIGO CODE		400004768 / N.A		LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT									
CÓDIGO CODE				LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	
Compartimiento capsulas defectuosas Defective capsule compartment			Bajante tolva Downspout hopper			Acrilico detector de metales Acrylic metal detector			
Cadena Chain			Compuerta tolva Hopper gate			Otro Other			
REALIZADO POR/FECHA /HORA (OPERADOR) REALIZED BY /DATE/ HOUR (OPERATOR)						REVISADO POR /FECHA/HORA (SUP/AC) REVIEWED BY / DATE/ HOUR (SUP/AC)			
NOTA: La finalización del proceso de limpieza se da con la revisión y aprobación por el superintendente, inspector o monitor de calidad. NOTE: Completion of the cleaning process is upon review and approval by the superintendent, inspector or quality monitor.									
CONVENCIONES AC : Personal de calidad / SUP : Superintendente CONVENTIONS AC : Quality Staff / SUP : Superintendent									

**DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE**

ÁREA /AREA				PROCESO /PROCESS	
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	

PRODUCTO ANTERIOR /PREVIOUS PRODUCT					
CODIGO /CODE		LOTE /BATCH		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA /VERIFICATION OF THE AREA	SI /YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified			
1.2	Esta el area limpia y desinfectada / Is the area clean and disinfected			
1.3	Las rejillas, puertas, marcos de puertas, vidrios y ventanas, estan limpias/ The grates, doors, door frames, glass and windows are clean			
1.4	Las condiciones ambientales del area son las requeridas para el proceso/ The environmental conditions of the area are those required for the process			
1.5	Están los reservorios de tinta completamente limpios (Aplica proceso impresión de capsula blanda y encapsulado) / Are the ink reservoirs completely clean (Applies soft capsule printing and encapsulation process)			
1.6	Existe en el área o máquina blísteres vacios o materiales residuos del set up (Aplica proceso empaque Blister) / There are empty blisters or waste materials from the setup in the area or machine (Applies Blister packaging process)			
1.7	Asegúrese que las zonas de difícil acceso estén completamente limpias/ Make sure hard-to-reach areas are completely clean			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO /VERIFICATION OF THE EQUIPMENT	SI /YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified			
2.2	Esta el equipo limpio / Is the equipment clean			
2.3	Funciona el equipo correctamente / The equipment works properly			
2.4	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correctly installed, complete and in good condition.			
2.5	Los PLC, Panel View, sistema de visión, pantallas de configuración de los equipos, instrumentos y sistemas de controles en proceso, tiene información del proceso anterior / PLCs, Panel View, vision systems, equipment configuration screens, instruments and process control systems have information about the previous process.			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION /VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI /YES	NO	N.A
3.1	Existen documentos del producto anterior en el area / There are documents of the previous product in the area			
3.2	El proceso de limpieza y desinfección de area y equipo esta registrada en la bitacora / The cleaning and disinfection process of the area and equipment is recorded in the logbook.			
3.3	Las etiquetas de vacio limpio de los equipos estan completas y anexas al batch record / The clean vacuum labels of the equipment are complete and attached to the batch record.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / STAFF VERIFICATION	SI /YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal safeguard elements			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Proper and complete uniform			
4.3	Uniforme limpio sin pelusa, hilo, cabello y restos de etiqueta / Clean uniform free of lint, thread, hair and tag residue			
4.4	El uniforme contiene capsulas en los bolsillo, mangas,cuello o sitios que permitan el transporte de capsulas. / The uniform contains capsules in the pockets, sleeves, collar or places that allow the transport of capsules.			
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES /VERIFICATION OF MATERIALS AND TOOLS	SI /YES	NO	N.A
5.1	Existen materiales diferentes a los que se van a utilizar en el proceso / Exist differents materials to which are normally used in the process			



DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE

ÁREA /AREA				PROCESO /PROCESS			
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC						
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER				
5.2	Los utensilios y materiales requeridos se encuentran en el área / The tools and materials required are in the area						
5.3	Las materias primas dispensadas corresponden con la orden de producción / Dispensed raw materials correspond to the production order						
5.4	La cantidad de materias primas dispensadas corresponden con la establecida en la orden de producción / The quantity of raw materials dispensed correspond to the production order						
5.5	Los materiales corresponden con la orden de empaque / The materials correspond to the packaging order						
5.6	La cantidad de materiales corresponden con la establecida en la orden de empaque / The quantity of materials correspond to the packaging order						
5.7	El registro de la tinta a usar para la impresión de las capsulas corresponde con la orden de producción / The register of the ink to be used for the capsule printing process corresponds to the production order						

REALIZADO POR /FECHA/HORA/
DONE BY /DATE/TIME

REVISADO POR /FECHA/HORA/
REVIEWED BY/ DATE/TIME

Observaciones/
Comments:

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA / FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA			PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA / VERIFICATION OF AREA	SI/YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified.			
1.2	Se han recogido las materias primas, materiales y granel caidos al piso. / Raw materials, materials and bulk materials that fell to the floor have been collected..			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO / VERIFICATION OF EQUIPMENT	SI/YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified.			
2.2	Los materiales utilizados (MP, GR, ME) remanentes del proceso han sido retirados del equipo / The materials used (MP, GR, ME) remaining from the process have been removed from the			
2.3	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correct installed, complete and in good condition			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI/YES	NO	N.A
3.1	Al finalizar el despeje de linea, no quedan en el area documentos del producto inmediatamente trabajado / At the end of the line clearance, no documents are in the area of immediately worked product.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / VERIFICATION OF PERSONAL	SI/YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal protection.			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Appropriate and complete uniform.			
4.3	Uniforme limpio / Clean uniform.			

COPIA VERDADERA

F-INST-0109-2 V03



DESPEJE FINAL DE LINEA /
FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA		PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		
		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER		
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES / VERIFICATION OF TOOLS AND MATERIALS	SI/YES	NO	N.A
5.1	Los utensilios han sido retirados / The tools have been removed.			
5.2	Los empaques, bolsas, tanques, canastas, bandejas usados por los materiales del producto trabajado han sido retirados / The packaging (MP, GR, ME), bags, tanks, baskets, trays used for the materials of the worked product have been removed.			
5.3	La cantidad de materiales remanentes ha sido registrada para la conciliación de producto / The amount of remaining material has been registered for the reconciliation of product.			
5.4	Los materiales (MP, GR, ME) remanentes han sido identificados y devueltos / The remaining materials (MP, GR, ME) have been identified and returned.			
5.5	Se han registrado las cantidades producidas en los documentos establecidos para tal fin / The quantities produced have been in the documents established for that purpose.			
5.6	Los productos resultado del proceso han sido retirados o se encuentran debidamente sellados y protegidos / The result of the process products have been recalled or are properly sealed and protected.			

REALIZADO POR
/FECHA/HORA/DONE BY
/DATE/TIME

REVISADO POR
/FECHA/HORA/REVIEWED BY
/DATE/TIME

Observaciones:
Observations:

MP: Materia prima/MP: Raw material ME: Material de empaque/ ME: Packaging material GR: Granel/GR: Bulk

COPIA VERDADERA



IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS / IDENTIFICATION OF AREAS

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) /PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
---	--

ÁREA /AREA	
------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								
NOTA: SI DESPUES DE 24 HORAS EL AREA NO HA SIDO UTILIZADA, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA NOTE: IF 24 HOURS LATER THE AREA HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.								
OBSERVACIONES /COMMENTS								



IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO /EQUIPMENT IDENTIFICATION

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) / PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
--	--

EQUIPO /EQUIPMENT	
----------------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR /DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR /VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								

NOTA 1: SI DESPUES DE 24 HORAS EL EQUIPO NO HA SIDO UTILIZADO, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA
NOTE 1: IF 24 HOURS LATER THE EQUIPMENT HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.

NOTA 2: UNA VEZ UTILIZADO EL EQUIPO, SE DEBE PROCEDER CON SU LIMPIEZA. ESTE NO DEBE PERMANECER MAS DE 8.5 HORAS SUCIO.
NOTE 2: ONCE THE EQUIPMENT IS USED, IT SHOULD BE PROCEEDED WITH ITS CLEANING. THIS SHOULD NOT STAY OVER 8.5 HOURS DIRTY

OBSERVACIONES /COMMENTS	

COPIA VERDADERA



Lista de Chequeo para Despeje y Alistamiento de Equipos

Checklist for Clearance and Readiness of Equipment

Producto en Proceso / Product in Process:		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
Código/Code:	400004768 / N.A	Lote/Batch:		OT	
Producto Anterior (Código / Descripción / Lote / OT) / Previous Product (Code / Description / Batch / PO)					
Equipo/ Equipment:					
		SI / YES	NO	N.A.	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS
1	Retirar el producto anterior / Remove the previous product				
2	Desarme de la maquina y retire de las piezas/ Disassemble the machine and remove the pieces:				
2.1.	Tolva principal / principal Hopper				
2.2.	Tolva fina / thin Hopper				
2.2.1	Compuerta Tolva fina / thin gate Hopper				
2.3.	Tolva gruesa / gross Hopper				
2.3.1.	Compuerta Tolva gruesa / gross gate Hopper				
2.4.	Cazamba / Bucket				
2.5.	Mesa/Banda transportadora / Table / Conveyor Belt				
2.6.	Computador / Computer				
2.7.	Maquina Selladora / Sealing Machine				
2.8.	Acrílicos / Acrylics				
2.9.	Rodillos / Rollers				
2.10.	Bajantes / Downspipes				
2.11.	Compuertas / Gates				
2.12.	Aleros / Eaves				
2.13.	Cadena / Chain				
2.14.	Tapones de la canasta interna / Plugs internal basket				
2.15.	Eslabones / Shackle				
2.16.	Panel view / Panel view				
3	Colocar aire comprimido en todas las piezas de la maquina / Place compressed air in all parts of the machine				
4	Limpie con alcohol al 70% y paño o wypall las superficies del equipo y piezas / Wipe with alcohol at 70% and clean baize or Wypall the surface and the parts of equipment				
5	Accionar el pedal para hacer vibrar la tolva / Press the pedal to vibrate the hopper.				
6	Verificación visual: verificar ausencia de capsulas, restos de bayeta y/o wypall / Visual verification: verify the absence of capsules, remains of cloth and / or Wypall				
6.1.	Tolva principal / Principal Hopper				
6.2.	Cuerpo de la maquina / parte inferior de la maquina / Machine body / bottom of the machine				
6.3.	Canastas vacias antes de salir del área / Empty baskets before leaving the area				
6.4.	Partes laterales entre los bajantes de la tolva y del vibrador de la maquina pesadora / Laterals parts between hopper's downpipes and and the vibrator of the weighing machine				
6.5.	Sellador / Sealant				
6.6.	Mesa / Table				
7	Emplee la lampara para iluminar las piezas de la máquina / Use the lamp to illuminate the parts of the machine				

COPIA VERDADERA



Lista de Chequeo para Despeje y Alistamiento de Equipos

Checklist for Clearance and Readiness of Equipment

Producto en Proceso / Product in Process:		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
Código/Code:	400004768 / N.A	Lote/Batch:		OT	
Producto Anterior (Código / Descripción / Lote / OT) / Previous Product (Code /Description /Batch / PO)					
Equipo/ Equipment:					
		SI / YES	NO	N.A.	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS
8	Verificación canastas vacías antes de salir del área / Checking empty baskets before leaving the area				
9	Verificación del área / paredes / rejillas / lamparas / Checking the area / walls / screens / lamps				
10	El teflón de la selladora esta en buen estado y bien adherido a la barra de sellado de la selladora. Ver SOP-0784 Manejo de las maquinas selladoras, las consideraciones para determinar cuando un teflon esta en buen estado / The teflon of the sealer is in good condition and well adhered to the sealing bar of the sealer. See point A of SOP-0784 Handling of sealing machines, considerations for determining when a teflon is in good condition				
11	La temperatura de la selladora debe estar seteada entre 0.8 y 0.9 pulsos según lo establecido en el SOP-0784 Manejo de las maquinas selladoras / The temperature of the sealer must be set between 0.8 and 0.9 pulses as set out in SOP-0784 Handling of sealing machines				

Realizado por / Performed by:		Fecha /Date:	
Verificado por / Verified by:		Fecha /Date:	

Nota: Si después de 24 Horas el equipo no ha sido utilizado, se debe realizar nueva limpieza.

Note: If after 24 hours the equipment has not been used, re-cleaning must be done.

COPIA VERDADERA



ACTA DE SANITIZACION/**SANITIZATION ACT**

FECHA/**DATE**: _____

NOMBRE PRODUCTO/**PRODUCT NAME**:
VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

LOTE/**BATCH**: _____

AREAY/O EQUIPO/**AREA AND/OR /EQUIPMENT**

LAVADO REALIZADO POR /**WASHING PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

SANITIZACION REALIZADA POR/**SANITATION PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

JEFE DE AREA/ **HEAD OF AREA**

F-INST-0064-3 V02

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
Product: VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A
Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days


Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

ETIQUETAS/LABELS

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

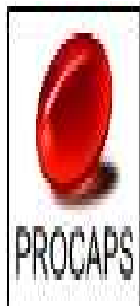

Código
Material:
Material Code 400004768

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000

Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC

Versión:
Version: 10

Vigencia:
Effective Date:

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

PESAJE/WEIGHING

NO USE EL ÁREA Y NO INICIE EL PROCESO HASTA OBTENER LA APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD (AC)
DO NOT USE THE AREA AND DO NOT START THE PROCESS UNTIL QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL IS OBTAINED

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION:

Cápsula blanda de gelatina de color rojo, forma oval. Contiene líquido oleoso ligeramente amarillo, Cada cápsula lleva impreso en tinta blanca el logo "50".

Red, oval-shape, soft gelatine capsule. It contains a slightly yellow oily liquid. Each capsule has "50" printed in white ink.

INSTRUCCIONES GENERALES / GENERAL INSTRUCTIONS:

ÁREA DE PESAJE DE CÁPSULAS / CAPSULE WEIGHING AREA

Lea las instrucciones aquí descritas antes de iniciar el proceso y síguelas en estricto orden:

Before starting the process, carefully read the instructions described herein, and follow them in the strictest order:

La persona deberá utilizar el correspondiente uniforme:

The person must wear the corresponding adequate uniform:

Overol de color blanco, gorro, tapa bocas, guantes desechables, botas antideslizantes y protector auditivo.

White overall, bonnet, (hair cover) nose- mouth protector, disposable gloves, boots not slippery and hearing protection.

REPORTE DE DESVIACIONES / DEVIATION REPORTS

Si se produce alguna desviación durante el proceso de manufactura, proceda según lo indicado en el procedimiento SOP-0007, Gestión De Desviaciones Del Sistema De Calidad.

(Any deviation that occurs during the manufacturing process is handled according to procedure SOP-0007, Quality System Deviation Management)

- Verificar el despeje de línea (área y equipo) y las condiciones ambientales del área:

Verify the clearance of the line (area and equipment) and the environmental conditions in the area:

DIFERENCIAL DE PRESIÓN: Mínimo: 0.020 (Positivo) pulgadas de agua - Máximo: 0.150 (Positivo) Pulgadas de agua.

PRESSURE DIFFERENTIAL: Minimum: 0.020 (Positive) Inches of water - Maximum: 0.150 (Positive) Inches of water.

- TEMPERATURA / TEMPERATURE: 23.0°C.

Límites de Alarma: Mínimo: 21.0°C Máximo: 25.0°C.

Alarm Limits: Minimum: 21.0°C Maximum: 25.0°C.

Límites de Acción: Mínimo: 19.0°C Máximo: 27.0°C.

Action Limits: Minimum: 19.0°C Maximum: 27.0°C.

- HUMEDAD RELATIVA / RELATIVE HUMIDITY: 45 %

Límites de Alarma: Máximo: 50%.

Alarm Limits: Maximum: 50%.

Límites de Acción: Máximo: 55%.

Action Limits: Maximum: 55%.

Antes de iniciar el proceso, el operario debe registrar la temperatura, humedad, fecha y hora en la siguiente tabla:

(Before starting the process, the operator must record the temperature, humidity, date and time in the following table:)

Cada etiqueta de identificación de equipos limpios debe ser pegada en la etapa correspondiente del MBR.


(Each clean equipment identification label must be adhered to the corresponding stage of the MBR)

Inicio de proceso/Start Process:

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

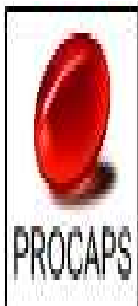

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

Final de proceso/Final Process

Hora/Time	Temperatura (°C)/ Temperature (°C)	Humedad Relativa (%)/ Relative Humidity	Diferencial de Presión/ Pressure Differential	Cumple Si/No/ Meets yes or not	Realizado por/ Performed by	Verificado Por/ Verified by	Fecha/Date

- Seguir y ejecutar las actividades de pesaje de cápsulas descritas en los procedimientos:
Follow and perform the Capsule Weighing activities described in the following procedures:

- * Despeje de Linea. Código: INST-0109
- * Line Clearance. Code No. INST-0109
- * Identificación de Area y/o Equipo Código: INST-0073
- * Identification of Areas and/ or Equipments. Code No. INST-0073
- * Limpieza de Máquinas Inspectoras, Pesadora y Selector. Código: INST-0042
- * Inspection Cleaning machines, weighing and sorting. Code No. INST-0042
- * Limpieza y Desinfección de Canastas Plásticas y Bandejas Planas. Código: INST-0055
- * Cleaning and Disinfection of plastic crates and trays Planas. Code No. INST-0055
- * Pesaje y Embalaje de Cápsulas. Código: INST-0133
- * Weighing and Packaging Capsules. Code No. INST-0133
- * Identificación de Productos en Proceso en Plantas Productivas. Código: INST-0189.
- * Identification of In-Process Products in Production Plants. Code No. INST-0189
- * Limpieza y Sanitización de Areas de Manufactura. Código: INST-0064
- * Cleaning and Sanitation of the Manufacture Areas. Code No. INST-0064
- * Operación y Limpieza del Detector de Metales. Código: INST-0604
- * Operation and Cleaning of metals checker. Code No. INST-0604

1. APROBACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD (AC) PARA INICIAR PESAJE.

1. QUALITY ASSURANCE (QA) APPROVAL TO START CAPSULE WEIGHING STAGE

Notifique al inspector de AC para que verifique los siguientes pasos antes de iniciar el proceso.


Request verification by the QA inspector of the following steps before starting the process.

		√
1.1	Verifique que las áreas estén limpias y que se cumplan las condiciones ambientales. Verify that the area is clean and environmental conditions have been met.	
1.2	Verifique que los operarios tengan el equipo de protección personal necesario. Verify that the operators are wearing the required personal protective equipment.	
1.3	Verifique que la tolva para empacar las cápsulas dentro de las bolsas de polietileno oscuro este limpia. Verify that the hopper used for weighing and packing capsules into the dark polyethylene bags is clean.	
1.4	Verifique que cada una de las canastas esté identificada con el nombre del producto, código y el número de lote según se indica en el Batch Record. Verifique que las BOLSAS 15X6.5X6.5X47cm NEGRAS CALIBRE 4, código 200014474, (Verify that each basket is identified by the product name, code No. and lot No. as it appears in the Batch Record. Verify that the BAGS 15X6.5X6.5X47cm BLACK CALIBER 4, code No. 200014474, are available)	
1.5	Verificar que aseguramiento de la calidad haya aprobado el granel para el pesaje de las cápsulas. Verify that the bulk has been approved by quality assurance to the weighing of capsules.	

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA

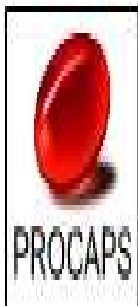

Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:
Previous Code N.A

Dosificación:
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:
Article Group Z103001

Lote Standard:
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:
Version: 10
Vigencia:
Effective Date:

Vida útil:
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:
Product Unit Measure: un

1.6	Verificar que el detector de metales este limpio. Verify that the metals checker is clean.	
APROBACIÓN FINAL DE AC QA FINAL APPROVAL	FIRMA SIGNATURE	FECHA/HORA DATE/TIME

2. EMPAQUE / 2. PACKING:

Reportar el nombre y la Identificación del Equipo (Detector de Metales)/ Record the name and Equipment ID (Metal Checker)

Nombre/ Name: Identificación/ ID:

Active el detector de metales y desafíe su funcionamiento acorde al INST-0604 al inicio y final del proceso.

Turn on the metals checker and to challenge its operation according to the INST-0604 at the start and final process.

Inicio del Proceso/Start of Process:

Realizado Por/Performed By: Hora/ Fecha/Time /Date:

Final del Proceso/Final of Process:

Realizado Por/Performed By: Hora/ Fecha/Time /Date:

Empacado a granel de la siguiente forma / Packed in bulk in the following way:

El producto a granel será empacado en doble BOLSA 15X6.5X6.5X47cm NEGRA CALIBRE 4, código: 200014474. Solo las BOLSAS 15X6.5X6.5 X47cm NEGRAS CALIBRE 4 estarán en contacto con el producto. La BOLSA 15X6.5X6.5X47cm NEGRA CALIBRE 4 es necesaria para proteger el producto de la luz.

(The bulk product will be packed in a double BAG 15X6.5X6.5X47cm BLACK CALIBER 4, code: 200014474. Only the BAGS 15X6.5X6.5 X47cm BLACK CALIBER 4 will be in contact with the product. The BAG 15X6.5X6.5X47cm BLACK CALIBER 4 is necessary to protect the product from light)

El producto se exporta como PT (Producto Terminado) por lo que se debe utilizar doble BOLSA 15X6.5X6.5X47cm NEGRA CALIBRE 4, código: 200014474. Una vez pesadas seis (6) bolsas con la cantidad de cápsulas que se indica abajo, se deben empacar en una CAJA 2-C NACIONAL, código: 618000025. Cada bolsa y caja deben ser identificadas con una ETI TRANSFER BLANCO 10 cm x 12cm, código: 200000477.

(The product is exported as Finished Product so you must use double BAG 15X6.5X6.5X47cm BLACK CALIBER 4, code: 200014474. Once six (6) bags are weighed with the amount of capsules indicated below, they must be pack in a NATIONAL BOX 2-C, code: 618000025. Each bag and box must be identified with a 10 cm x 12 cm WHITE LABEL FOR TRANSFERS, code: 200000477)

MOLDE/MOLD: 5.5 OVAL A STD

ITEMS	ESPECIFICACION SPECIFICATIONS	REPORTAR RESULTADOS REPORT THE RESULTS
Nº de Muestras Calibración Nº of samples for Calibration	1000	
Peso de 1000 cápsulas / Weight of 1000 capsules	Reportar resultado en g (Record results in g)	
Cápsula por bolsa / Capsules per bag	5000	
Bolsas por caja corrugada / Bags per corrugated box	6	
Cápsulas por caja / Capsules per box	30000	
Peso bruto / Gross Weight	Reportar resultado en kg (Record results in Kg)	

VIDA UTIL/SHELF LIFE: 180 días/ days

COPIA VERDADERA

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A
Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Vigencia:/
Effective Date:


Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

OBSERVACIONES (Empacar siguiendo estos parámetros, si se cambia alguno de estos: Número de muestra tomadas para la calibración, cápsula por bolsa, cápsula por caja, justificar el cambio)

OBSERVATIONS: (Pack by these factors, changing one of these: number of samples taken for calibration capsule bag, capsule per case, to justify the change)

COPIA VERDADERA

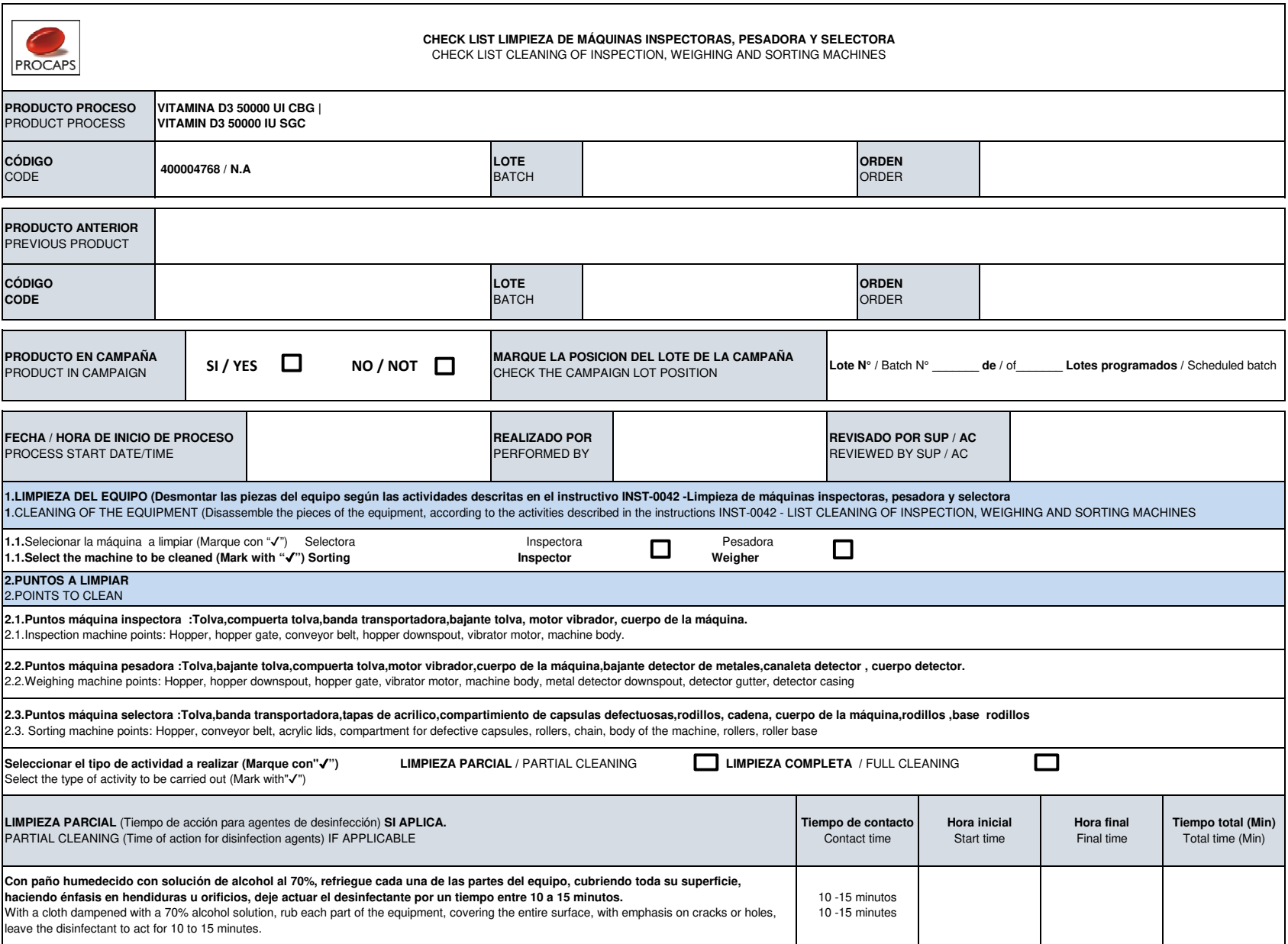

 CHECK LIST LIMPIEZA DE MÁQUINAS INSPECTORAS, PESADORA Y SELECTORA CHECK LIST CLEANING OF INSPECTION, WEIGHING AND SORTING MACHINES									
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC							
CÓDIGO CODE		400004768 / N.A		LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT									
CÓDIGO CODE				LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐ NO / NOT ☐		MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION			Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch		
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME				REALIZADO POR PERFORMED BY				REVISADO POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC	
Desacoplar la canasta y colector de cápsulas rechazadas y limpiar con un paño humedecido con alcohol al 70% y deje actuar el desinfectante por un tiempo entre 10 a 15 minutos. Uncouple the basket and the rejected capsule collector and clean with a cloth dampened with 70% alcohol and let the disinfectant act for a period of 10 to 15 minutes.						10 -15 minutos 10 -15 minutes			
Realizado por Fecha / Hora Performed by Date / Time						Revisado por AC / SUP Fecha / Hora Reviewed by AC / SUP Date / Time			
3.SOLUCIONES Y AGENTES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 3. CLEANING AND DISINFECTION SOLUTIONS AND AGENTS									
3.1.Seleccionar la solución detergente para la limpieza (Marque con "✓") PROBIO ☐ LIQUINOX ☐ Solución Detergente 1% ☐ 3.1Select the detergent solution for cleaning (Mark with "✓")									
SOLUCIÓN USADA USED SOLUTION		MARQUE CON "✓" LA CONCENTRACION USADA MARK WITH "✓" THE CONCENTRATION USED		FECHA DE FABRICACIÓN MANUFACTURING DATE		FECHA DE VENCIMIENTO EXPIRATION DATE		REGISTRO (Bitacora / Folio) RECORD (Logbook/Folio)	
Solución Detergente Detergent Solution		1% ☐							
Solución de alcohol Alcohol solution		70% ☐							
3.2 LIMPIEZA COMPLETA (Tiempo de acción para agentes de limpieza y desinfección). SI APLICA. 3.2 FULL CLEANING Action time for cleaning and disinfecting agents). IF APPLICABLE						TIEMPO DE CONTACTO CONTACT TIME		HORA INICIAL START TIME	
								HORA FINAL END TIME	
								TIEMPO TOTAL TOTALTIME	
1.		Humedecer un paño con solución detergente al 1 % refriégue cada una de las partes citadas en el ítem 2 Moisten a cloth with a 1% detergent solution and scrub each of the parts mentioned in item 2				10 -15 minutos (minutes)			
2.		Humedecer un paño con alcohol al 70% y aplicar sobre las partes y superficie del equipo Moisten a cloth with 70% alcohol and apply to the parts and surface of the equipment				10 -15 minutos (minutes)			

 CHECK LIST LIMPIEZA DE MÁQUINAS INSPECTORAS, PESADORA Y SELECTORA CHECK LIST CLEANING OF INSPECTION, WEIGHING AND SORTING MACHINES							
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC					
CÓDIGO CODE	400004768 / N.A	LOTE BATCH		ORDEN ORDER			
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT							
CÓDIGO CODE		LOTE BATCH		ORDEN ORDER			
PRODUCTO EN CAMPAÑA PRODUCT IN CAMPAIGN		SI / YES ☐	NO / NOT ☐	MARQUE LA POSICION DEL LOTE DE LA CAMPAÑA CHECK THE CAMPAIGN LOT POSITION		Lote N° / Batch N° _____ de / of _____ Lotes programados / Scheduled batch	
Realizado por Fecha / Hora Performed by Date / Time				Revisado por AC / SUP Fecha / Hora Reviewed by AC / SUP Date / Time			
3.3. LIMPIEZA Y SANITIZACION (Enjuagues en los procesos de limpieza y desinfección) CLEANING AND SANITIZATION (Rinsing in cleaning and disinfection processes)							
FECHA / HORA DE INICIO DE PROCESO PROCESS START DATE/TIME		REALIZADO POR PERFORMED BY		REVISADO POR SUP / AC REVIEWED BY SUP / AC			
Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes refregadas con detergente. (Marque con una "✓") Type of water used in rinses of parts scrubbed with detergent (Mark with a "✓")				Agua potable Drinking water	☐		
Tipo de agua usada en los enjuagues de las partes de la maquina sanitizadas (Marque con "✓") Type of water used to rinse the sanitized parts of the machine (Mark with "✓")				Agua purificada Purified water	☐		
REALIZADO POR/FECHA /HORA (OPERADOR) REALIZED BY /DATE/ HOUR (OPERATOR)				REVISADO POR /FECHA/HORA (SUP/AC) REVIEWED BY / DATE/ HOUR (SUP/AC)			
4. LISTA DE CHEQUEO INSPECCIÓN DE LA LIMPIEZA: La inspección final de la limpieza es realizada por el superintendente en turno, o el personal de calidad. Revisar la ausencia de residuos visibles del producto anterior, capsulas, la ausencia de restos de las soluciones de limpieza y olores extraños en las siguientes partes de la máquina. Marque con "✓" cumple o no cumple, si no aplica cierre el espacio con guion (-) 4. CLEANING INSPECTION CHECKLIST: The final cleaning inspection is realized by the superintendent, or quality person. Check the absence of visible residues of the previous product, capsules, the absence of remains of cleaning solutions and strange odors in the following parts of the machine. Mark with "✓" meet or does not meet, if it does not apply, close the space with a hyphen (-)							
Realiza limpieza con la máquina desensamblada (Marque con "✓") Clean with the machine disassembled (Mark with "✓") SI / YES ☐ NO / NOT ☐ Utiliza aire comprimido y lampara para la verificación y limpieza de la máquina (Marque con "✓") Use compressed air and a lamp to verify and clean the machine (Mark with "✓") SI / YES ☐ NO / NOT ☐							
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET
Tolva Hopper			Cuerpo de la máquina Machine casing			Motor vibrador Vibrator motor	
Banda transportadora Conveyor belt			Rodillos Rollers			Bajante detector de metales Metal detector downspout	
Tapas de acrílico Acrylic lids			Base rodillos Roller base			Canaleta detector de metales Gutter metal detector	

 CHECK LIST LIMPIEZA DE MÁQUINAS INSPECTORAS, PESADORA Y SELECTORA CHECK LIST CLEANING OF INSPECTION, WEIGHING AND SORTING MACHINES									
PRODUCTO PROCESO PRODUCT PROCESS		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC							
CÓDIGO CODE		400004768 / N.A		LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
PRODUCTO ANTERIOR PREVIOUS PRODUCT									
CÓDIGO CODE				LOTE BATCH				ORDEN ORDER	
EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	EQUIPO EQUIPMENT	CUMPLE MEET	NO CUMPLE DOES NOT MEET	
Compartimiento capsulas defectuosas Defective capsule compartment			Bajante tolva Downspout hopper			Acrilico detector de metales Acrylic metal detector			
Cadena Chain			Compuerta tolva Hopper gate			Otro Other			
REALIZADO POR/FECHA /HORA (OPERADOR) REALIZED BY /DATE/ HOUR (OPERATOR)						REVISADO POR /FECHA/HORA (SUP/AC) REVIEWED BY / DATE/ HOUR (SUP/AC)			
NOTA: La finalización del proceso de limpieza se da con la revisión y aprobación por el superintendente, inspector o monitor de calidad. NOTE: Completion of the cleaning process is upon review and approval by the superintendent, inspector or quality monitor.									
CONVENCIONES AC : Personal de calidad / SUP : Superintendente CONVENTIONS AC : Quality Staff / SUP : Superintendent									

**DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE**

ÁREA /AREA		PROCESO /PROCESS	
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC		
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER

PRODUCTO ANTERIOR /PREVIOUS PRODUCT		ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER	
CODIGO /CODE		LOTE /BATCH	

1.0	VERIFICACION DEL AREA /VERIFICATION OF THE AREA	SI /YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified			
1.2	Esta el area limpia y desinfectada / Is the area clean and disinfected			
1.3	Las rejillas, puertas, marcos de puertas, vidrios y ventanas, estan limpias/ The grates, doors, door frames, glass and windows are clean			
1.4	Las condiciones ambientales del area son las requeridas para el proceso/ The environmental conditions of the area are those required for the process			
1.5	Están los reservorios de tinta completamente limpios (Aplica proceso impresión de capsula blanda y encapsulado) / Are the ink reservoirs completely clean (Applies soft capsule printing and encapsulation process)			
1.6	Existe en el área o máquina blísteres vacios o materiales residuos del set up (Aplica proceso empaque Blister) / There are empty blisters or waste materials from the setup in the area or machine (Applies Blister packaging process)			
1.7	Asegúrese que las zonas de difícil acceso estén completamente limpias/ Make sure hard-to-reach areas are completely clean			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO /VERIFICATION OF THE EQUIPMENT	SI /YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified			
2.2	Esta el equipo limpio / Is the equipment clean			
2.3	Funciona el equipo correctamente / The equipment works properly			
2.4	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correctly installed, complete and in good condition.			
2.5	Los PLC, Panel View, sistema de visión, pantallas de configuración de los equipos, instrumentos y sistemas de controles en proceso, tiene información del proceso anterior / PLCs, Panel View, vision systems, equipment configuration screens, instruments and process control systems have information about the previous process.			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI /YES	NO	N.A
3.1	Existen documentos del producto anterior en el area / There are documents of the previous product in the area			
3.2	El proceso de limpieza y desinfección de area y equipo esta registrada en la bitacora / The cleaning and disinfection process of the area and equipment is recorded in the logbook.			
3.3	Las etiquetas de vacio limpio de los equipos estan completas y anexas al batch record / The clean vacuum labels of the equipment are complete and attached to the batch record.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / STAFF VERIFICATION	SI /YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal safeguard elements			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Proper and complete uniform			
4.3	Uniforme limpio sin pelusa, hilo, cabello y restos de etiqueta / Clean uniform free of lint, thread, hair and tag residue			
4.4	El uniforme contiene capsulas en los bolsillo, mangas,cuello o sitios que permitan el transporte de capsulas. / The uniform contains capsules in the pockets, sleeves, collar or places that allow the transport of capsules.			
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES /VERIFICATION OF MATERIALS AND TOOLS	SI /YES	NO	N.A
5.1	Existen materiales diferentes a los que se van a utilizar en el proceso / Exist differents materials to which are normally used in the process			



DESPEJE INICIAL DE LINEA /INITIAL LINE CLEARANCE

ÁREA /AREA				PROCESO /PROCESS			
PRODUCTO /PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC						
CODIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH	ORDEN DE TRABAJO /JOB ORDER				
5.2	Los utensilios y materiales requeridos se encuentran en el área / The tools and materials required are in the area						
5.3	Las materias primas dispensadas corresponden con la orden de producción / Dispensed raw materials correspond to the production order						
5.4	La cantidad de materias primas dispensadas corresponden con la establecida en la orden de producción / The quantity of raw materials dispensed correspond to the production order						
5.5	Los materiales corresponden con la orden de empaque / The materials correspond to the packaging order						
5.6	La cantidad de materiales corresponden con la establecida en la orden de empaque / The quantity of materials correspond to the packaging order						
5.7	El registro de la tinta a usar para la impresión de las capsulas corresponde con la orden de producción / The register of the ink to be used for the capsule printing process corresponds to the production order						

REALIZADO POR /FECHA/HORA/
DONE BY /DATE/TIME

REVISADO POR /FECHA/HORA/
REVIEWED BY/ DATE/TIME

Observaciones/
Comments:

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA / FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA			PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC				
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER	

1.0	VERIFICACION DEL AREA / VERIFICATION OF AREA	SI/YES	NO	N.A
1.1	Esta el area identificada correctamente / Is the area correctly identified.			
1.2	Se han recogido las materias primas, materiales y granel caidos al piso. / Raw materials, materials and bulk materials that fell to the floor have been collected..			
2.0	VERIFICACION DE EQUIPO / VERIFICATION OF EQUIPMENT	SI/YES	NO	N.A
2.1	Esta el equipo identificado correctamente / Is the equipment correctly identified.			
2.2	Los materiales utilizados (MP, GR, ME) remanentes del proceso han sido retirados del equipo / The materials used (MP, GR, ME) remaining from the process have been removed from the			
2.3	Las piezas desmontables estan correctamente instaladas, estan completas y en buen estado / The removable parts are correct installed, complete and in good condition			
3.0	VERIFICACION DE DOCUMENTACION / VERIFICATION OF DOCUMENTATION	SI/YES	NO	N.A
3.1	Al finalizar el despeje de linea, no quedan en el area documentos del producto inmediatamente trabajado / At the end of the line clearance, no documents are in the area of immediately worked product.			
4.0	VERIFICACION DEL PERSONAL / VERIFICATION OF PERSONAL	SI/YES	NO	N.A
4.1	Utiliza elementos de protección personal / Use personal protection.			
4.2	Uniforme apropiado y completo / Appropriate and complete uniform.			
4.3	Uniforme limpio / Clean uniform.			

COPIA VERDADERA



DESPEJE FINAL DE LINEA /
FINAL LINE CLEARANCE

ÁREA / AREA		PROCESO / PROCESS		
PRODUCTO / PRODUCT	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
CODIGO / CODE	400004768 / N.A	LOTE / BATCH		
		ORDEN DE TRABAJO / WORK ORDER		
5.0	VERIFICACION DE UTENSILIOS Y MATERIALES / VERIFICATION OF TOOLS AND MATERIALS	SI/YES	NO	N.A
5.1	Los utensilios han sido retirados / The tools have been removed.			
5.2	Los empaques, bolsas, tanques, canastas, bandejas usados por los materiales del producto trabajado han sido retirados / The packaging (MP, GR, ME), bags, tanks, baskets, trays used for the materials of the worked product have been removed.			
5.3	La cantidad de materiales remanentes ha sido registrada para la conciliación de producto / The amount of remaining material has been registered for the reconciliation of product.			
5.4	Los materiales (MP, GR, ME) remanentes han sido identificados y devueltos / The remaining materials (MP, GR, ME) have been identified and returned.			
5.5	Se han registrado las cantidades producidas en los documentos establecidos para tal fin / The quantities produced have been in the documents established for that purpose.			
5.6	Los productos resultado del proceso han sido retirados o se encuentran debidamente sellados y protegidos / The result of the process products have been recalled or are properly sealed and protected.			

REALIZADO POR
/FECHA/HORA/DONE BY
/DATE/TIME

REVISADO POR
/FECHA/HORA/REVIEWED BY
/DATE/TIME

Observaciones:
Observations:

MP: Materia prima/MP: Raw material ME: Material de empaque/ ME: Packaging material GR: Granel/GR: Bulk

COPIA VERDADERA



IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS / IDENTIFICATION OF AREAS

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) /PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
---	--

ÁREA /AREA	
------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								
NOTA: SI DESPUES DE 24 HORAS EL AREA NO HA SIDO UTILIZADA, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA NOTE: IF 24 HOURS LATER THE AREA HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.								
OBSERVACIONES /COMMENTS								



IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO /EQUIPMENT IDENTIFICATION

PRODUCTO EN PROCESO /PRODUCT IN PROCESS	VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC
--	---

CÓDIGO /CODE	400004768 / N.A	LOTE /BATCH		ORDEN /ORDER	
--------------	-----------------	-------------	--	--------------	--

PRODUCTO ANTERIOR (CÓDIGO - DESCRIPCION - LOTE) / PREVIOUS PRODUCT (CODE - DESCRIPTION - BATCH)	
--	--

EQUIPO /EQUIPMENT	
----------------------	--

DISPOSICIÓN /DISPOSITION	INICIO /INITIATION		REALIZADO POR /DONE BY	VERIFICADO POR/VERIFIED BY	FINALIZACIÓN /FINISHING		REALIZADO POR/DONE BY	VERIFICADO POR /VERIFIED BY
	FECHA /DATE	HORA /HOUR			FECHA /DATE	HORA /HOUR		
LIMPIEZA /CLEANING								
NUEVA LIMPIEZA /NEW CLEANING								
USO /USE								
SUCIO /DIRTY								

NOTA 1: SI DESPUES DE 24 HORAS EL EQUIPO NO HA SIDO UTILIZADO, SE DEBE REALIZAR NUEVA LIMPIEZA
NOTE 1: IF 24 HOURS LATER THE EQUIPMENT HAS NOT BEEN USED, A NEW CLEANING MUST BE PERFORMED.

NOTA 2: UNA VEZ UTILIZADO EL EQUIPO, SE DEBE PROCEDER CON SU LIMPIEZA. ESTE NO DEBE PERMANECER MAS DE 8.5 HORAS SUCIO.
NOTE 2: ONCE THE EQUIPMENT IS USED, IT SHOULD BE PROCEEDED WITH ITS CLEANING. THIS SHOULD NOT STAY OVER 8.5 HOURS DIRTY

OBSERVACIONES /COMMENTS	
----------------------------	--

COPIA VERDADERA



VITAMINA D3 50000 UI CBG

VITAMIN D3 50000 IU SGC

400004768 / N.A

Lot:

Order:

Lot:

Order:

Vigencia

/Date of Calibration:

Validity:

[illegible]**FECHA**

/Date:

LOTE

/LOT:



ENTREGA DE PRODUCTO EN CUARENTENA A BODEGA
/PRODUCT DELIVERY IN QUARANTINE A WAREHOUSE

Producto / Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código / CODE: 400004768 / N.A Lote / Batch: Orden /Order:

Caja Interna / Internal Box: Caja Externa / External Box: Total Etiquetas / Total Label: Desde # / From #: Hasta # / UP To:

FECHA / DATE	TURNO / Turn	ENTREGADO POR / DELIVERED BY	REVISADO POR /CHECK BY	CANTIDAD /QUANTITY

LIBERADO POR /RELEASED BY:

VERIFICADO COORDINADOR DE ACABADO /VERIFIED BY THOROUGH
COORDINATOR: FECHA /DATE:
OBSEVACIONES /COMMENTS:

COPIA VERDADERA



Lista de Chequeo para Despeje y Alistamiento de Equipos

Checklist for Clearance and Readiness of Equipment

Producto en Proceso / Product in Process:		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
Código/Code:	400004768 / N.A	Lote/Batch:		OT	
Producto Anterior (Código / Descripción / Lote / OT) / Previous Product (Code / Description / Batch / PO)					
Equipo/ Equipment:					
		SI / YES	NO	N.A.	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS
1	Retirar el producto anterior / Remove the previous product				
2	Desarme de la maquina y retire de las piezas/ Disassemble the machine and remove the pieces:				
2.1.	Tolva principal / principal Hopper				
2.2.	Tolva fina / thin Hopper				
2.2.1	Compuerta Tolva fina / thin gate Hopper				
2.3.	Tolva gruesa / gross Hopper				
2.3.1.	Compuerta Tolva gruesa / gross gate Hopper				
2.4.	Cazamba / Bucket				
2.5.	Mesa/Banda transportadora / Table / Conveyor Belt				
2.6.	Computador / Computer				
2.7.	Maquina Selladora / Sealing Machine				
2.8.	Acrílicos / Acrylics				
2.9.	Rodillos / Rollers				
2.10.	Bajantes / Downspipes				
2.11.	Compuertas / Gates				
2.12.	Aleros / Eaves				
2.13.	Cadena / Chain				
2.14.	Tapones de la canasta interna / Plugs internal basket				
2.15.	Eslabones / Shackle				
2.16.	Panel view / Panel view				
3	Colocar aire comprimido en todas las piezas de la maquina / Place compressed air in all parts of the machine				
4	Limpie con alcohol al 70% y paño o wypall las superficies del equipo y piezas / Wipe with alcohol at 70% and clean baize or Wypall the surface and the parts of equipment				
5	Accionar el pedal para hacer vibrar la tolva / Press the pedal to vibrate the hopper.				
6	Verificación visual: verificar ausencia de capsulas, restos de bayeta y/o wypall / Visual verification: verify the absence of capsules, remains of cloth and / or Wypall				
6.1.	Tolva principal / Principal Hopper				
6.2.	Cuerpo de la maquina / parte inferior de la maquina / Machine body / bottom of the machine				
6.3.	Canastas vacias antes de salir del área / Empty baskets before leaving the area				
6.4.	Partes laterales entre los bajantes de la tolva y del vibrador de la maquina pesadora / Laterals parts between hopper's downpipes and and the vibrator of the weighing machine				
6.5.	Sellador / Sealant				
6.6.	Mesa / Table				
7	Emplee la lampara para iluminar las piezas de la máquina / Use the lamp to illuminate the parts of the machine				

COPIA VERDADERA



Lista de Chequeo para Despeje y Alistamiento de Equipos

Checklist for Clearance and Readiness of Equipment

Producto en Proceso / Product in Process:		VITAMINA D3 50000 UI CBG VITAMIN D3 50000 IU SGC			
Código/Code:	400004768 / N.A	Lote/Batch:		OT	
Producto Anterior (Código / Descripción / Lote / OT) / Previous Product (Code / Description / Batch / PO)					
Equipo/ Equipment:					
		SI / YES	NO	N.A.	OBSERVACIONES/OBSERVATIONS
8	Verificación canastas vacías antes de salir del área / Checking empty baskets before leaving the area				
9	Verificación del área / paredes / rejillas / lamparas / Checking the area / walls / screens / lamps				
10	El teflón de la selladora esta en buen estado y bien adherido a la barra de sellado de la selladora. Ver SOP-0784 Manejo de las maquinas selladoras, las consideraciones para determinar cuando un teflon esta en buen estado / The teflon of the sealer is in good condition and well adhered to the sealing bar of the sealer. See point A of SOP-0784 Handling of sealing machines, considerations for determining when a teflon is in good condition				
11	La temperatura de la selladora debe estar seteada entre 0.8 y 0.9 pulsos según lo establecido en el SOP-0784 Manejo de las maquinas selladoras / The temperature of the sealer must be set between 0.8 and 0.9 pulses as set out in SOP-0784 Handling of sealing machines				

Realizado por / Performed by:		Fecha /Date:	
Verificado por / Verified by:		Fecha /Date:	

Nota: Si después de 24 Horas el equipo no ha sido utilizado, se debe realizar nueva limpieza.

Note: If after 24 hours the equipment has not been used, re-cleaning must be done.

COPIA VERDADERA



CONCILIACIÓN DEL PRODUCTO VITAMINA D3 CONSILIENT
(PRODUCT CONCILIATION VITAMIN CONSILIENT)

Producto (Product): VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código (Code): 400004768 / N.A

Lote (Lot N°): Orden (Order):

Cápsulas programadas teóricas: (Theoretical Programmed Capules)

MEDICINA (MEDICINE)

Kg DE MEDICINA TEÓRICO (Kg THEORIC MEDICINE)

Kg DE MEDICINA HOLDING TIME / OTROS (Kg OF MEDICINE HOLDING TIME / OTHERS):

Kg DE MEDICINA OBTENIDOS (Kg MEDICINE OBTAINED)

% RENDIMIENTO DE MEDICINA (% MEDICINE YIELD)

Kg DE MEDICINA MERMA (Expresado en cápsulas)

(Kg MEDICINE WASTE (ULLAGE) (Expressed in Capsules))

CONCILIACIÓN DE MEDICINA
(MEDICIN RECONCILIATION)

RENDIMIENTO 90-100%
(YIELD)

:
:
:
:
:
:

GELATINA (GELATIN)

Kg DE GELATINA TEÓRICO TOTAL (Kg TOTAL OF THEORIC GELATIN)

Kg DE GELATINA OBTENIDOS TOTAL (Kg TOTAL OF GELATIN OBTAINED)

% RENDIMIENTO DE GELATINA (% GELATIN YIELD)

CONCILIACIÓN DE GELATINA
(GELATIN RECONCILIATION)

RENDIMIENTO MINIMO 90%
(MINIMUM YIELD)

:
:
:

ENCAPSULADO (ENCAPSULATION)

CAPSULAS OBTENIDAS EN ENCAPSULADO (CAPSULES OBTAINED)

CAPSULAS TEORICAS PROGRAMADAS (THEORICAL PROGRAMMED CAPSULES)

% RENDIMIENTO ENCAPSULADO (% ENCAPSULATION YIELD)

KG DE MEDICINA MERMA (Expresado en cápsulas)

(Kg MEDICINE WASTE (ULLAGE) (Expressed in Capsules))

CONCILIACIÓN DE ENCAPSULADO
(ENCAPSULATION CONCILIATION)

RENDIMIENTO MINIMO 90-100%
(MINIMUM YIELD)

:
:
:
:



CONCILIACIÓN DEL PRODUCTO VITAMINA D3 CONSILIENT
(PRODUCT CONCILIATION VITAMIN CONSILIENT)

Producto (Product): VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código (Code): 400004768 / N.A

Lote (Lot N°): Orden (Order):

Cápsulas programadas teóricas:
(Theoretical Programmed Capules)

GRANEL (BULK)

CONCILIACION FINAL DE GRANEL
(FINAL CONCILIATION OF BULK)

RENDIMIENTO MINIMO 90-100%
(MINIMUM YIELD)

RENDIMIENTO EFECTIVO (EFFECTIVE YIELD)

CÁPSULAS ACEPTADAS PESADAS (ACCEPTED WEIGHT CAPSULES) :
CÁPSULAS MUESTRA DE RETENCIÓN (RETENTION CAPSULES SAMPLES) :
CÁPSULAS MUESTRA DE ANALISIS (SAMPLE CAPSULES TO ANALISYS) :
CAPSULAS TOMADAS PARA AQL (CAPSULES TAKEN FOR AQL) :
CAPSULAS OTRAS (OTHER CAPSULES) :
CAPSULAS TEORICAS PROGRAMADAS (THEORICAL PROGRAMMED CAPSULES) :
% RENDIMIENTO EFECTIVO (% EFFECTIVE YIELD) :

RENDIMIENTO TOTAL (TOTAL YIELD)

CÁPSULAS OBTENIDAS CONFORMES (CAPSULES OBTAINED IN COMPLIANCE) :
CAPSULAS DEFECTUOSAS RETIRADAS EN INSPECCION :
(IN INSPECTION DEFECTIVE CAPSULES) :
MERMA DE FABRICACION (Expresado en cápsulas) :
(Kg MEDICINE WASTE (ULLAGE) (Expressed in Capsules)) (MEDICINE PROCESS) :
MERMA DE ENCAPSULADO (Expresado en cápsulas) :
(Kg MEDICINE WASTE (ULLAGE) (Expressed in Capsules)) (ENCAPSULATION) :
CAPSULAS TEÓRICAS PROGRAMADAS (THEORICAL PROGRAMMED CAPSULES) :
% RENDIMIENTO TOTAL (% TOTAL YIELD) :

OBSERVACIONES (OBSERVATIONS):

SUPERINTENDENTE (SUPERINTENDENT)

JEFE DE PLANTA (PLANT MANAGER)



ACTA DE DESTRUCCION DE CAPSULAS

CAPSULES DESTRUCTION ACT

PRODUCTO VITAMINA D3 50000 UI CBG |
/PRODUCT: VITAMIN D3 50000 IU SGC

CÓDIGO
/CODE: 400004768 / N.A

LOTE
/BATCH:

FECHA DE DESTRUCCION
/DESTRUCTION DATE:

MOTIVO/CAUSE / DEFECTO/DEFECT	# CAPS DEFECT /N CAPS DEFECT	# CAPS DEFECT /N CAPS DEFECT	# CAPS DEFECT /N CAPS DEFECT	# CAPS DEFECT /N CAPS DEFECT	# CAPS DEFECT /N CAPS DEFECT	# CAPS DEFECT /N CAPS DEFECT	# CAPS DEFECT /N CAPS DEFECT	# CAPS DEFECT /N CAPS DEFECT	TOTAL
Leakers por el sello de la cápsula /Leakers by the seal of the capsule.									
Manchas en las caras de las capsulas /Stains on the faces of the caps.									
Manchas en el sello por migración de medicina /Stains on the seal by migration of medicine.									
Sello Defectuoso /Defective seal.									
Cápsulas Deformes /Deformed capsules.									
Cápsulas Pegadas /Attached capsules.									
Cápsulas Vacías /Empty capsules.									
Cápsulas Colapsadas por el Sello /Collapsed capsules on the seal.									
Cápsulas con Aire en la Medicina /Capsules with air in the medicine.									
Cápsulas con Aire en la Gelatina /Capsules with air in the gelatine.									
Cápsulas Sub-dosificadas (Delgadas/Pequeñas) /Sub-dosed capsules (Thin / Small).									
Cápsulas Sobre-llenadas (Gruesas/Grandes) /Over-filled capsules (Thick / Large).									
Cápsulas con Problemas de Impresión /Capsules Printing Problems.									
Cápsulas Opacas, sin Brillo /Opaque capsules without brightness.									
Cápsulas con Contenido Separado /Separate Content capsules.									
Capsulas segregadas en el cuadro de maquina /Segregated capsules in the machine room									
Otros (s) /Other (s).									
Otros (s) /Other (s).									
Otros (s) /Other (s).									
TOTAL CÁPSULAS DEFECTUOSAS /TOTAL DEFECTIVE CAPSULES									
PESO CÁPSULAS DEFECTUOSAS / Weight Capsules Defective									
DESTRUIDO POR /DESTROYED BY:									
VERIFICADO POR: (SUP o MONITOR CALIDAD) /VERIFIED BY: (SUP or MONITOR QUALITY)									
FECHA/DATE:									

OBSERVACIONES
/COMMENTS

COPIA VERDADERA



ACTA DE SANITIZACION/**SANITIZATION ACT**

FECHA/**DATE**: _____

NOMBRE PRODUCTO/**PRODUCT NAME**:
VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

LOTE/**BATCH**: _____

AREAY/O EQUIPO/**AREA AND/OR /EQUIPMENT**

LAVADO REALIZADO POR /**WASHING PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

SANITIZACION REALIZADA POR/**SANITATION PERFORMED BY**:

REVISADO POR/ **REVIEWED BY**:

JEFE DE AREA/ **HEAD OF AREA**

F-INST-0064-3 V02

ESPECIFICACIONES E INSTRUCCIONES DE PROCESO /
SPECIFICATIONS AND INSTRUCTIONS OF PROCESS

Usuario:
User: MUTRIA



Código
Material:/
Material Code 400004768

Producto:/
Product: VITAMINA D3 50000 UI CBG |
VITAMIN D3 50000 IU SGC

Código
Anterior:/
Previous Code N.A
Dosificación:/
Dosage: 275 mg

Cantidad a Producir:/
Quantity to Produce 100,000

Molde/Punzon:/
Mold/Punch 5.5 OVAL

Grupo de artículo:/
Article Group Z103001

Lote Standard:/
Standard Lot: 100000

Cantidad Base:/
Amount Base 100,000
Forma Farmacéutica:/
Pharmaceutical Form: CBG/SGC
Versión:/ 10
Vigencia:/
Effective Date:

Vida útil:/
Useful Life Time: 180 Dias/Days

Und. Medida del producto:/
Product Unit Measure: un

ETIQUETAS/LABELS

COPIA VERDADERA